

User manual

MANUEL D'UTILISATION
GEBRUIKSAANWIJZING
GEBRAUCHSANWEISUNG
MANUALE DI ISTRUZIONI
MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K OBSLUZE

Quadri-Light



Contents

Preface	4
1. Your product	5
2. Before use	6
2.1. Intended use and indications	6
2.2. Safety instructions and applicable risks	7
2.3. Symbols on the rollator	8
2.4. Upon delivery	9
2.5. Shipping and storage	9
3. Assembly/Disassembly and adjustments	10
3.1. Assembly	10
3.2. Disassembly	10
3.3. Mounting the storage bag	11
3.4. Mounting/Removing the backrest	12
3.5. Height adjustments	12
4. Using your rollator	14
4.1. Brake system	14
4.2. Folding/Unfolding	15
4.3. Negotiating kerbs	16
4.4. Sitting down, standing up and walking	16
5. Maintenance	17
5.1. Cleaning	17
5.2. Disinfection	17
5.3. Inspection / Service / Repairs	17
5.4. Reuse	18
5.5. Disposal at end of life	18
5.6. Warranty	18
6. Technical specifications	19

Preface

Congratulations! You are now owner of a Vermeiren rollator!

Thank you for your trust in the products of Vermeiren. To support you on the use of this rollator and its operating options, this manual is offered. Please read it carefully; it will help you to get familiar with the operation, capabilities and limitations of your rollator.

If you still have questions after reading this manual, do not hesitate to contact your specialist dealer. He/she will be glad to help you.

Important note

To ensure your safety, and to prolong the lifetime of your product, please take good care of it and have it checked and serviced on a regular basis.

This manual reflects the latest product developments. Vermeiren has the right to implement changes to this type of product without any obligation to adapt or replace similar products previously delivered.

Pictures of the product are used to clarify the instructions. Details of the depicted product may deviate from your product.

Information available

On our website <http://www.vermeiren.com/> you will always find the most recent version of the following information. Please consult this website regularly for possible updates.

Visually impaired people can download the electronic version of this manual and have it read out by means of a text-to-speech software application.

	User manual For user and specialist dealer
	Service manual for rollators For specialist dealer



1. Your product



1. Handgrips
2. Brake lever
3. Backrest
4. Seat
5. Storage bag
6. Front wheels
7. Rear wheels
8. Brake cable
9. Tipping aid
10. Reflectors
11. Walking stick holder
12. Identification plate

2. Before use

2.1. Intended use and indications

- This product is a medical device.
- Indications and contraindications: The rollator is meant as support of the leg function during walking. Do not use the rollator if you have other physical limitations that may cause unsafe use of your rollator, like a weak arm, balance disorders, impaired vision, limb loss, ...
- The rollator is designed and produced solely to be used as walking aid for one person with a maximum weight of 130 kg.
- The rollator will compensate the lack of adequate support by the legs by leaning on, or moving with, the rollator with usage of the upper limbs or chest. The rollator will provide better stability, support and safety during walking.
- The rollator can be used indoors and outdoors.
- It is not intended for transport of goods and/or more people than the user. It is also not intended to be used as a transport aid while sitting down.
- It should only be used on surfaces where all four wheels are touching the ground. Do not use the rollator on rocky, bumpy or sandy terrain, or places with a steep inclination. The rollator may become unstable. Look for flat, stable areas, and bevelled kerbs to walk with your rollator.
- The warranty on this product is based on normal use and maintenance as described in this manual. Damage to your product caused by improper use or lack of maintenance will cause the warranty to lapse.
- Please check all technical details and limits of your rollator in §6..

2.2. Safety instructions and applicable risks

CAUTION

Risk of injuries

- Please read and follow the instructions in this manual. Otherwise you may get injured, or your product may get damaged.

Keep the following general warnings in mind during use:

- Check that no stones or other objects block the wheels of the rollator.
- Make sure that both brake levers are in parking mode before you use the rollator as aid to stand up. When you are standing comfortable and stable, you can unlock the parking brakes.
- While walking, keep both hands on the handgrips.
- Be aware that some parts of your rollator may get very hot or cold due to ambient temperature, solar radiation, heating devices, etc. Be careful when touching.
- Before every use, check that the height adjustments are firmly secured, see **§3.5.**
- Do not hold the handgrips with wet hands. If you do so, you can lose your grip and lose your balance.
- Do not proceed with your rollator into traffic. Always stay on the pavement.
- Take note of the instructions for care and service. The manufacturer is not liable for damage caused by improper servicing / care.

Any serious incident [MDR (EU) 2017/745 **§2 (65)**] that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Be aware that your rollator may interfere with some types of anti-theft systems, depending on the settings used. This may cause the shop's alarm to go off.

2.3. Symbols on the rollator

i Identification plate is located on the left rear leg at the inner side of the base frame

	Maximum weight of the user in kg
	Type designation
	Catalogue number
	Serial number
	Medical device
	Manufacturer
	Date of manufacture
	Declaration of conformity
	Attention: important information
	It is advised to read the manual

2.4. Upon delivery

Unpack your product and verify if the delivery is complete. The following items should be included:

- Base frame with seat, 4 wheels
- Handgrips with brakes
- Storage bag
- Walking stick holder
- Backrest
- Manual

Verify your product for transport damage. If you find any damages after delivery, contact the transporter.

2.5. Shipping and storage

The shipping and storage of the rollator should happen according to the technical specifications in §6.. Make sure that the rollator is stored dry.

Provide sufficient covering or packaging to protect the rollator from rust and foreign bodies (e.g. salt water, sea air, sand, dust).

Make sure no objects are stored on or against the rollator to prevent damage.

3. Assembly/Disassembly and adjustments

CAUTION

Risk of injuries

- Keep fingers, buckles, jewellery and clothes away from the folding mechanism.

3.1. Assembly

1. Loosen the velcro straps.
2. Place the rollator on its side.
3. Move the rear wheel downwards until the holes lie over each other.
4. Mount the star button **(2)**. Make sure it is well fastened.
5. Move the front wheel downwards until the holes lie over each other.
6. Mount the star button **(5)**. Make sure it is well fastened.
7. Repeat for the other side.
8. Mount the backrest, see **§3.4.**
9. Unfold the rollator, see **§4.2.**

3.2. Disassembly

1. Fold the rollator, see **§4.2.**
2. Remove the star button **(5)**.
3. Fold the front wheel upwards.
4. Remove the star button **(2)**.
5. Fold the rear frame / wheel upwards **(3)**.
6. Fasten the rear frame / wheel with the velcro straps to the frame of the handgrips.
7. Repeat for the other side.



3.3. Mounting the storage bag

CAUTION

Risk of falling or tipping over

- Do not overload the storage bag.

The maximum carrying weight of the storage bag can be found in §6..

The shopping bag (6) is meant to be mounted on the front side. Mount the shopping basket with the loops (7) to the tubes of the rollator seat frame (8).



3.4. Mounting/Removing the backrest

CAUTION

Risk of falling

- Before using the seat, make sure that the backrest belt (9) is well secured to the frame. Check that all screws, bolts and nuts of the belt (9) are well tightened.

Belt and holder can easily be mounted by pushing its base over the protruding part of the support on the frame, see illustration. Push it down until the bottom and tighten the screw (10).

To demount, loosen the screw and slide the base upwards again until it slides from the support.



3.5. Height adjustments

CAUTION

Risk of falling or tipping over

- Firmly fix the handgrips before using the rollator.
- Do not exceed the minimum or maximum adjustment as indicated on the handgrips. Your rollator will not be stable anymore.

CAUTION


Risk of damage

- Don't pull the handgrips too high to prevent damage to the brake cable.

The rollator can be altered in height by adjusting the handgrips:

1. Put your rollator in parking mode, see §4.1..
2. Press and hold the spring button (11).
3. Move the handgrip until the desired height (6 different positions: steps of 25 mm). Check that the brake cable cannot get stuck around the crutch holder.
4. Check that the spring pin (11) is clicked back and firmly fixated in a hole.
5. Pull the handgrip up and push it down to check if it is locked.
6. Adjust the other handgrip in the same manner. Make sure that both handgrips have the same height.

i When standing straight, the handgrips should be as high as your wrists. Leave your arms hanging loose.

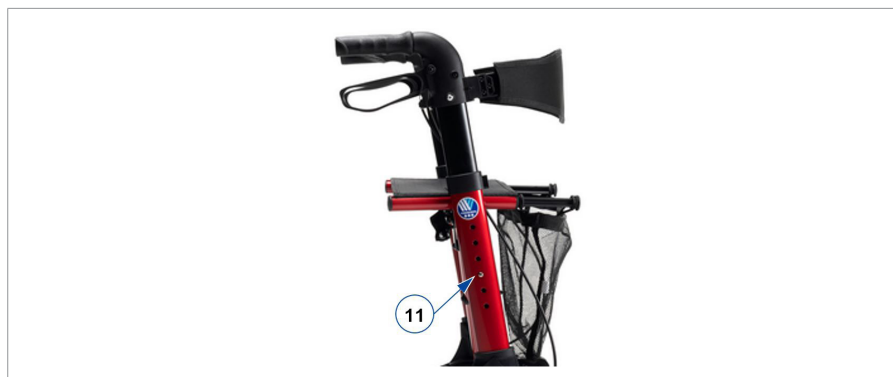

4. Using your rollator

4.1. Brake system

CAUTION

Risk of falling

- Check the working of the brakes to ensure your safety. The condition of the brakes is influenced by wear, oil and other contamination of the rear wheels and braking mechanism.

The rollator is equipped with brakes, operated by two brake levers **(15)**. The brake levers operate in two modes: running brakes and parking brakes.


CAUTION

Risk of damage

- Do not push the rollator too hard while using the running brakes. This may cause damage to the tyres or brakes.

To use the running brakes, pull both brake levers **(15)** simultaneously upwards [A] in a squeezing motion. To stop braking, release the brake levers.

To use the parking brakes, push both brake levers **(15)** downwards in locked position [B]. Always use both parking brakes simultaneously. To end the parking mode, pull both brake levers simultaneously upwards.

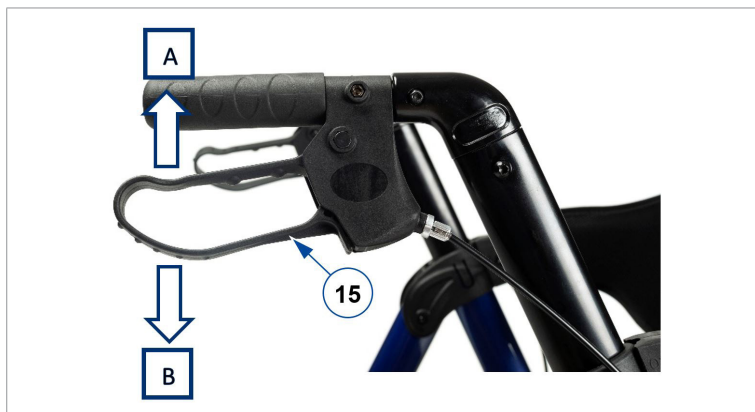

4.2. Folding/Unfolding

CAUTION

Risk of entrapment

- Keep fingers, buckles, jewellery and clothes away from the folding mechanism.

CAUTION

Risk of falling

- Check that the rollator is completely open and that the frame is locked.

4.2.1. Unfolding the rollator

1. If necessary after transport or storage, assemble the rollator, see §3..
2. Slightly push on the handgrips to unfold the rollator.
3. Push the sides of the seat down with both hands. Keep pushing on the frame tubes until the frame is locked; a click can be heard during locking.
4. Check if the frame is locked, by pushing the handgrips to each other.
5. Adjust the handgrips to the desired height, see §3.5..

4.2.2. Folding the rollator


1. Remove the walking stick and shopping bag.
2. Pull the seat upward by the strap.
3. Push the handgrips to each other to close the frame.
4. For transport and storage, disassemble the rollator further, see §3.2..

4.3. Negotiating kerbs

CAUTION

Risk of falling

- Take kerbs straight, with both front wheels aligned to the kerb. Keep the rollator nearby.

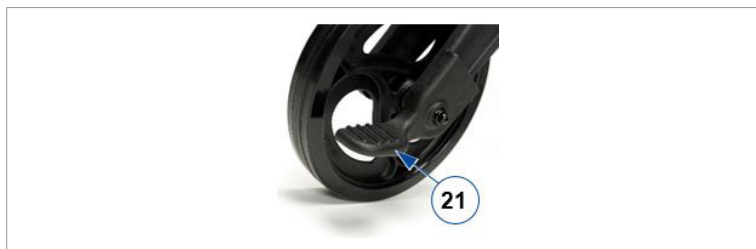

To make it easier to take small obstacles, such as kerbs, the rollator is equipped with a tipping aid on the two rear wheels.

1. Make sure you are standing stable while holding both handgrips.
2. Use one foot and push on tipping lever (21) to lift the front wheels.
3. Keep the rollator in that position with the handgrips and move slowly forward until the front wheels are on the kerb.
4. Now lift the handgrips and move forward to place the rear wheels on the kerb.
5. When the rollator is standing stable, you can take the kerb yourself.

4.4. Sitting down, standing up and walking

CAUTION

Risk of falling

- Make sure that both brake levers are in parking position before sitting down, see §4.1.. Keep the brake levers in this position until you start walking again. Keep your feet between the rear wheels.
 - Do not propel the rollator while seated.
1. Push both brake levers down to parking position.
 2. While leaning on the handgrips, turn around and sit down on the seat.
 3. To stand up again, lean on the handgrips and turn around.

4. Pull both brake levers up and use the running brakes.
5. Release the brake levers and step forward with the rollator close to your body.

5. Maintenance

- i** Regular care ensures that your rollator is preserved in a perfectly functional condition. For the maintenance manual, refer to the Vermeiren website: www.vermeiren.com.

5.1. Cleaning

Use a soft, damp cloth and lukewarm water with a mild household soap to clean the rollator. Avoid soaking. Do not use abrasive cleaning agents to clean.

5.2. Disinfection

CAUTION

Risk of damage

- Disinfections may only be undertaken by trained persons. Consult your specialist dealer.

Use a soft, damp cloth and lukewarm water with a mild household disinfectant to clean the rollator.

5.3. Inspection / Service / Repairs

The expected service life of your rollator is 5 years. The lifespan of the rollator is influenced by its use, storage, maintenance, service and cleaning.

Before you resume use of the rollator, it should be inspected on the following points:

- Completeness.
- Folding mechanism: functioning well.
- Bolts and nuts: tightly fastened.
- Brakes: functioning well.
- Wheels (stability, tracking, fixing screws).
- In case of regular contact with wires, hair or other residues, the wheels may get blocked. Check regularly that the wheels rotate freely and that they are in good condition.
- Frame (deformation, stability, connections).
- Handgrips (safe locking of height adjustment system, good support of handgrips).
- Seat, backrest and storage bag (wear or damage).

Your rollator is constructed of aluminium and plastic components. We recommend to have your product inspected at least once a year, but the service frequency depends on the frequency and intensity of use. Consult your specialist dealer to make an agreement on service frequency.

Repairs and replacements may only be undertaken by trained persons, and only genuine replacement parts of Vermeiren should be used.

Do not hesitate to use the services offered by your specialist dealer. He/she will be glad to assist you regarding any service and repairs.

5.4. Reuse

Before each reuse, have the rollator disinfected, inspected and serviced according to the instructions in §5.1. and §5.2. .

5.5. Disposal at end of life

At end of life, you need to dispose your rollator according to the local environmental legislation. The best way to do so, is to disassemble the rollator to facilitate the transport of recyclable parts.

5.6. Warranty

The warranty on this product is subject to the general terms and conditions of each country.

6. Technical specifications

The technical details below are only valid for this rollator, at standard settings and optimal ambient conditions. Take these details into account during use.

Brand	Vermeiren
Type	Rollator
Description	Quadri-Light
Description	Dimensions
Maximum user weight	130 kg
Maximum weight of storage bag load	5 kg
Overall length	700 mm
Folded length	700 mm For transport: 400 mm
Overall width	650 mm
Folded width	290 mm
Overall height	805 - 930 mm
Folded height	805 mm For transport: 670 mm
Handgrip height	805 - 930 mm
Recommended body height	1550 - 1850 mm
Distance between handgrips	460 mm
Seat height	610 mm
Seat width	450 mm
Seat depth	200 mm
Total mass - without basket	7,25 kg 7,2 kg
Wheel diameter Front Rear	8" 7"
Brakes	Running & parking brakes
Turning width	1310 mm
Storage and use temperature	+5°C - +41°C
Storage and use humidity	30% - 70%
We reserve the right to introduce technical changes. Measurement tolerance +- 15 mm / 1,5 kg / 1,5°	

Table des matières

Préface	21
1. Votre produit	22
2. Avant l'utilisation	23
2.1. Usage prévu et indications	23
2.2. Consignes de sécurité et risques applicables	24
2.3. Symboles sur le déambulateur	25
2.4. Lors de la livraison	26
2.5. Transport et entreposage	26
3. Montage/Démontage et réglages	27
3.1. Montage	27
3.2. Démontage	27
3.3. Montage du sac de rangement	28
3.4. Installation/Retrait du dossier	29
3.5. Réglages de hauteur	29
4. Utiliser votre déambulateur	31
4.1. Système de freinage	31
4.2. Pliage/Dépliage	32
4.3. Franchir des bordures	33
4.4. S'asseoir, se lever et marcher	33
5. Entretien	34
5.1. Nettoyage	34
5.2. Désinfection	34
5.3. Inspection / Entretien / Réparation	34
5.4. Réutilisation	35
5.5. Évacuation	36
5.6. Garantie	36
6. Spécifications techniques	36

Préface

Félicitations ! Vous êtes à présent l'heureux propriétaire d'un déambulateur Vermeiren !

Merci de la confiance que vous accordez aux produits de Vermeiren. Ce manuel est destiné à vous aider dans l'utilisation de ce déambulateur et de ses options de fonctionnement. Veuillez le lire attentivement. Vous pourrez ainsi vous familiariser avec le fonctionnement, les capacités et les limites de votre déambulateur.

Si vous avez encore des questions après la lecture de ce manuel, n'hésitez pas à prendre contact avec votre revendeur spécialisé. Il vous aidera volontiers.

Remarque importante

Pour assurer votre sécurité et prolonger la durée de vie de votre produit, prenez-en grand soin et faites-le contrôler ou entretenir régulièrement.

Ce manuel est le reflet des derniers développements du produit. Vermeiren a le droit d'apporter des modifications à ce type de produit sans être tenu d'adapter ou de remplacer des produits similaires fournis précédemment.

Des images du produit sont utilisées pour clarifier les instructions. Les détails du produit illustré peuvent diverger de votre produit.

Informations disponibles

Sur notre site Internet <http://www.vermeiren.com/>, vous trouverez toujours la version la plus récente des informations suivantes. Veuillez consulter régulièrement ce site Internet pour d'éventuelles mises à jour.

Les personnes malvoyantes peuvent télécharger la version électronique de ce manuel et la lire au moyen d'une application de texte-parole.



Manuel d'utilisation
Pour l'utilisateur et le revendeur spécialisé



Manuel entretien des déambulateurs
Pour le revendeur spécialisé



Déclaration de conformité CE

1. Votre produit



1. Poignées de poussée
2. Levier de frein
3. Dossier
4. Siège
5. Sac de rangement
6. Roues avant
7. Roues arrière
8. Câble de frein
9. Levier basculeur
10. Réflecteurs

11. Porte-canne
12. Plaque d'identification

2. Avant l'utilisation

2.1. Usage prévu et indications

- Ce produit est un dispositif médical.
- Indications et contre-indications : Le déambulateur est conçu pour soutenir la fonction de la jambe pendant la marche. N'utilisez pas votre déambulateur si vous souffrez d'autres défaillances physiques pouvant rendre l'utilisation du déambulateur dangereuse, comme une faiblesse du bras, des troubles de l'équilibre, déficience visuelle, perte de membres, etc.
- Le déambulateur est exclusivement conçu et produit pour servir d'aide à la marche, pour une seule personne d'un poids maximal de 130 kg.
- En prenant appui avec ses membres supérieurs ou son buste sur le déambulateur ou en le déplaçant, ce dernier compense la capacité de charge ou la force réduite des membres inférieurs. En outre, il assure une stabilité, un soutien et une sécurité accrus lors de la marche.
- Le déambulateur peut être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- Il n'est pas conçu pour transporter des marchandises et/ou plus de personnes que l'utilisateur. Il n'est pas non plus conçu pour être utilisé comme aide au transport en position assise.
- Il ne peut être utilisé que sur une surface plane avec les quatre roues touchant le sol. N'utilisez pas le déambulateur sur un terrain rocailleux, accidenté ou sablonneux, ou sur des sols en forte pente. Cela peut nuire à la stabilité du déambulateur. Pendant la marche, déplacez-vous toujours sur des surfaces planes et stables ou sur les bords biseautés du trottoir.
- La garantie sur ce produit est basée sur une utilisation et un entretien normaux, tels que décrits dans le présent manuel. Les dommages à votre produit dus à un usage inapproprié ou à un manque d'entretien auront pour effet d'annuler la garantie.
- Consultez également les détails techniques et les limites de votre déambulateur au §6..

2.2. Consignes de sécurité et risques applicables

ATTENTION

Risque de blessures

- Veuillez lire et suivre les instructions stipulées dans le présent manuel d'utilisation. Autrement, vous pourriez vous blesser ou votre produit pourrait être endommagé.

Tenez compte des avertissements généraux suivants pendant l'emploi:

- Faites bien attention à ce qu'aucune pierre ni aucun autre objet ne bloque les roues du déambulateur.
- Assurez-vous que les deux freins de stationnement soient bien enclenchés avant d'utiliser votre déambulateur pour vous aider à vous lever. Une fois que vous êtes dans une position stable et confortable, vous pouvez relâcher les freins de stationnement.
- Maintenez les deux mains sur les poignées lorsque vous avancez.
- N'oubliez pas que certaines parties de votre déambulateur peuvent devenir très chaudes ou très froides en fonction de la température ambiante, des rayons du soleil, des dispositifs de chauffage, etc. Faites donc attention lorsque vous les touchez.
- Avant chaque utilisation, vérifiez si le réglage de la hauteur est bien fixé, voir le **§3.5.**
- Ne tenez pas les poignées avec des mains mouillées. Si vous le faites, vous risquez de perdre votre équilibre.
- Ne vous mêlez pas à la circulation sur la chaussée avec votre déambulateur. Restez toujours sur le trottoir.
- Veuillez suivre les instructions pour le nettoyage et les contrôles. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une mauvaise inspection ou d'un mauvais entretien.

Tout incident grave [RDM (UE) 2017/745 §2 (65)] survenu en relation avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur ou le patient est établi.

Sachez que votre déambulateur peut interférer avec certains types de systèmes antivol, selon les paramètres utilisés. Cela peut provoquer le déclenchement de l'alarme du magasin.

2.3. Symboles sur le déambulateur

- i** La plaque d'identification se situe sur le pied arrière gauche, sur la partie intérieure du châssis.

	Poids maximum de l'utilisateur en kg
	Indication du type
	Numéro de catalogue
	Numéro de série
	Dispositif médical
	Fabricant
	Date de fabrication
	Déclaration de conformité
	Attention : informations importantes
	Il est conseillé de lire le manuel

2.4. Lors de la livraison

Déballer votre produit et vérifiez si la livraison est complète. Les pièces suivantes sont incluses dans la livraison:

- Châssis de base avec siège, 4 roues
- Poignées avec freins
- Sac de rangement
- Porte-canne
- Dossier
- Manuel

Inspectez soigneusement l'expédition afin de vous assurer que le transport n'a occasionné aucun dommage. S'il s'avère que votre produit présente un défaut, prenez contact avec le transporteur.

2.5. Transport et entreposage

L'expédition et le stockage du déambulateur doivent être réalisés conformément aux caractéristiques techniques §6.. Assurez-vous que le déambulateur est entreposé correctement.

Protégez le déambulateur contre la rouille et la pénétration de substances étrangères (p. ex. eau salée, air marin, sel, poussière) au moyen d'une protection ou d'un emballage adéquat.

Lors de l'entreposage, assurez-vous qu'aucun autre objet n'est appuyé sur ou contre le déambulateur afin d'éviter tout dommage.

3. Montage/Démontage et réglages

ATTENTION

Risque de blessures

- Gardez les doigts, les boucles, les bijoux et les vêtements à l'écart du mécanisme de pliage.

3.1. Montage

1. Desserrez les bandes Velcro.
2. Placez le déambulateur sur le côté.
3. Descendez la roue arrière jusqu'à ce que les orifices soient alignés.
4. Placez le bouton étoile **(2)**. Assurez-vous qu'il est bien fixé.
5. Descendez la roue avant jusqu'à ce que les orifices soient alignés.
6. Placez le bouton étoile **(5)**. Assurez-vous qu'il est bien fixé.
7. Répétez l'opération pour l'autre côté.
8. Montez le dossier, voir §3.4..
9. Dépliez le déambulateur, voir §4.2..

3.2. Démontage

1. Pliez le déambulateur, voir §4.2..
2. Retirez le bouton étoile **(5)**.
3. Repliez la roue avant vers le haut.
4. Retirez le bouton étoile **(2)**.
5. Repliez le cadre / la roue arrière vers le haut **(3)**.
6. Arrimez le cadre / la roue arrière avec les bandes Velcro sur le cadre des poignées.
7. Répétez l'opération pour l'autre côté.



3.3. Montage du sac de rangement

⚠ ATTENTION

Risque de chute ou de basculement

- Ne remplissez pas trop le sac de rangement.

La capacité de charge maximale du sac de rangement est mentionnée dans le tableau du §6..

Le sac de rangement (6) doit être monté par l'avant. Montez le panier avec les boucles (7) sur les tubes du cadre d'assise du déambulateur (8).



3.4. Installation/Retrait du dossier

⚠ ATTENTION

Risque de chute

- Avant d'utiliser le siège, assurez-vous que la ceinture de soutien dorsal (9) est solidement fixée. Vérifiez que toutes les vis, tous les boulons et tous les écrous de la ceinture (9) soient bien vissés.

La ceinture et le support peuvent être facilement installés en faisant coulisser la base de l'extrémité du soutien dorsal sur le cadre, voir l'illustration. Enfoncez la base jusqu'au fond et serrez la vis (10).

Pour la démonter, desserrez la vis et faites à nouveau coulisser la base jusqu'à ce que l'extrémité du soutien dorsal se déboîte.



3.5. Réglages de hauteur

⚠ ATTENTION

Risque de chute ou de basculement

- Fixez fermement les poignées avant d'utiliser le déambulateur.
- Ne dépassez pas le réglage maximum ou minimum comme indiqué sur les poignées. Votre déambulateur pourrait perdre sa stabilité.

⚠ ATTENTION

Risque de dommages

- Ne tirez pas les poignées trop haut pour éviter d'endommager le câble de frein.

La hauteur du déambulateur peut être modifiée en réglant les poignées :

1. Mettez votre rollator en mode parking, voir §4.1..
2. Appuyez sur le bouton à ressort (11) et maintenez-le enfoncé.
3. Déplacez la poignée à la hauteur souhaitée (6 positions différentes : écarts de 25 mm). Vérifiez que le câble du frein ne peut pas pendre autour du support pour béquilles.
4. Vérifiez que la goupille (11) soit fermement cliquée sur l'arrière dans son logement.
5. Tirez la poignée vers le haut et poussez-la vers le bas pour vérifier qu'elle soit bien verrouillée.
6. Réglez l'autre poignée de la même manière. Assurez-vous que les deux poignées aient la même hauteur.

i Quand vous êtes debout, les poignées doivent arriver à hauteur de vos poignets. Laissez donc pendre vos bras.



4. Utiliser votre déambulateur

4.1. Système de freinage

ATTENTION

Risque de chute

- Pour garantir votre sécurité, vous devez contrôler le fonctionnement des freins. L'état du système de freinage est influencé par l'usure et la présence d'huile ainsi que de toute autre matière polluante sur les roues arrière et le mécanisme de freinage.

Le déambulateur est équipé de freins, actionnés par deux leviers de frein (15). Les leviers de frein peuvent être utilisés de deux manières : freins standard et freins de stationnement.


ATTENTION

Risque de dommages

- N'appuyez pas trop fort sur le déambulateur lorsque vous utilisez les freins standard. Cela pourrait endommager les pneus ou les freins.

Pour utiliser les freins standard, tirez les deux leviers de frein (15) en même temps vers le haut [A] en appliquant une pression. Pour interrompre le freinage, relâchez les leviers de frein.

Pour utiliser le frein de stationnement, poussez les deux leviers de frein (15) à l'écart de la poignée jusqu'à atteindre la position verrouillée [B]. Utilisez toujours les deux freins de stationnement simultanément. Pour sortir de l'état de stationnement, tirez les deux leviers de frein en même temps vers le haut.

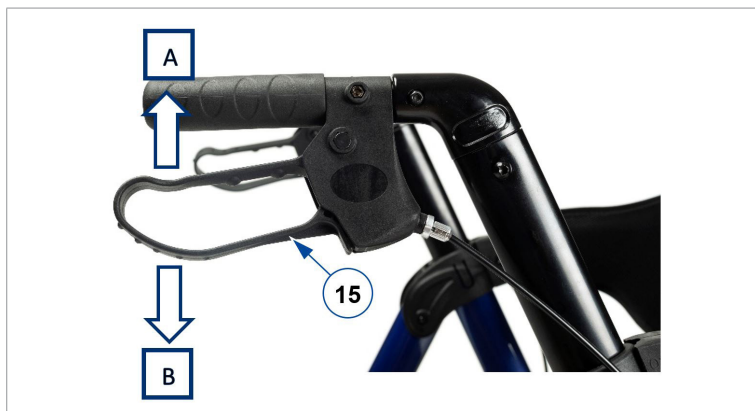

4.2. Pliage/Dépliage

⚠ ATTENTION

Risque de coincement

- Gardez les doigts, les boucles, les bijoux et les vêtements à l'écart du mécanisme de pliage.

⚠ ATTENTION

Risque de chute

- Vérifiez que le déambulateur soit entièrement ouvert et que le châssis soit bien bloqué.

4.2.1. Déplier le déambulateur

1. Si nécessaire après le transport ou le stockage, assemblez le déambulateur, voir §3..
2. Appuyez légèrement sur les poignées pour déplier le déambulateur.
3. Poussez sur les côtés du siège avec vos deux mains. Poussez également sur les tubes du cadre jusqu'à ce que ce dernier soit bloqué ; un clic se fera clairement entendre.
4. Assurez-vous que le cadre est parfaitement bloqué en poussant les poignées l'une vers l'autre.
5. Réglez la hauteur des poignées comme indiqué dans §3.5..

4.2.2. Plier le déambulateur


1. Retirez la canne et le sac de rangement.
2. Soulevez le siège par la sangle.
3. Poussez les poignées l'une vers l'autre pour fermer le châssis.
4. Pour le transport et le stockage, démontez le déambulateur, voir §3.2..

4.3. Franchir des bordures

ATTENTION

Risque de chute

- Montez sur la bordure en restant bien droit, avec les deux roues alignées par rapport à la bordure. Gardez le déambulateur proche de vous.

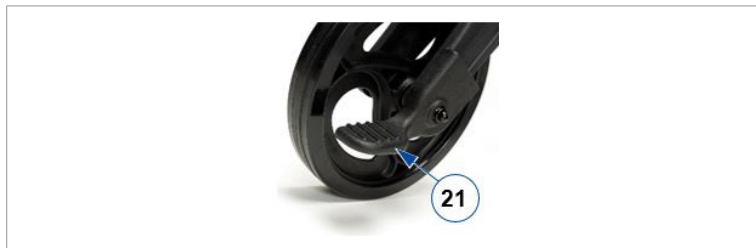

Pour faciliter le franchissement de petits obstacles, tels que les bordures de trottoir, le déambulateur est équipé d'un levier basculeur sur les deux roues arrière.

1. Assurez-vous d'être dans une position bien stable lorsque vous tenez les deux poignées.
2. Avec votre pied, appuyez sur le levier basculeur **(21)** pour soulever les roues avant.
3. Maintenez le déambulateur dans cette position au moyen des poignées, et déplacez-le ensuite lentement jusqu'à ce que les roues avant se trouvent sur la bordure.
4. À présent, soulevez les poignées et avancez pour placer les roues arrière sur la bordure.
5. Une fois que le déambulateur est bien stable, vous pouvez monter vous-même sur la bordure.

4.4. S'asseoir, se lever et marcher

ATTENTION

Risque de chute

- Assurez-vous que les deux leviers de frein se trouvent en position de stationnement avant de vous asseoir, voir §4.1.. Maintenez les leviers de frein dans cette position jusqu'à ce que vous recommenciez à vous déplacer. Gardez vos pieds entre les roues arrière.
- Ne pas déplacer le déambulateur en position assise.

1. Abaissez les deux leviers de frein en position de stationnement.
2. En vous appuyant sur les poignées, retournez-vous et asseyez-vous sur le siège.
3. Pour vous redresser, appuyez-vous sur les poignées et retournez-vous.
4. Remontez les deux leviers de frein et utilisez les freins de stationnement.
5. Relâchez les leviers de frein et avancez en gardant le déambulateur proche de votre corps.

5. Entretien

- i** Un entretien régulier vous permet de conserver votre déambulateur dans un parfait état de fonctionnement. Pour le manuel d'entretien, consultez le site Web de Vermeiren : www.vermeiren.com.

5.1. Nettoyage

Nettoyez le déambulateur à l'aide d'un chiffon doux et humide, de l'eau tiède et du savon doux pour la maison. Évitez que les pièces ne soient trempées. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs.

5.2. Désinfection

⚠ ATTENTION

Risque de dommages

- La désinfection ne peut être réalisée que par des personnes qualifiées. Renseignez-vous auprès de votre revendeur spécialisé à cet égard.

Nettoyez le déambulateur à l'aide d'un chiffon doux et humide, de l'eau tiède et d'un désinfectant doux pour la maison.

5.3. Inspection / Entretien / Réparation

La durée de vie prévue de votre déambulateur est de 5 ans. La durée de vie est influencée par son utilisation, son entreposage, son entretien, son service et son nettoyage.

Avant que vous ne commenciez à utiliser votre déambulateur, vous devez contrôler les points suivants :

- Présence de toutes les pièces.
- Mécanisme de pliage : fonctionne bien.
- Boulons et écrous : solidement attachés.
- Freins : fonctionnent bien.
- Roues (stabilité, empreinte, vis de fixation).
- Si vos roues entrent régulièrement en contact avec des fils, des cheveux ou d'autres fibres, elles risquent de se bloquer. Vérifiez donc régulièrement si vos roues sont capables de tourner librement et si elles se trouvent dans un bon état.
- Châssis (déformations, stabilité, connexions).
- Poignées (verrouillage sécurisé du réglage de la hauteur, bon soutien des poignées).
- Siège, dossier et sac de rangement (usure ou dommages).

Votre déambulateur est fabriqué en aluminium et en plastique. Nous vous recommandons de faire inspecter votre produit au moins une fois par an, mais la fréquence d'entretien dépend de la fréquence et de l'intensité de l'utilisation. Renseignez-vous auprès de votre commerçant spécialisé pour parvenir à un accord concernant la fréquence d'entretien.

Les réparations et les remplacements ne peuvent être réalisés que par des personnes formées, et seules des pièces de rechange d'origine de Vermeiren peuvent être utilisées.

N'hésitez pas à recourir au service qui vous est proposé par votre commerçant spécialisé. Ce dernier ne manquera pas de vous venir en aide pour tout ce qui a trait au service et aux réparations.

5.4. Réutilisation

Avant chaque réutilisation, faites désinfecter, inspecter et entretenir le déambulateur conformément aux instructions de §5.1. et §5.2..

5.5. Évacuation

À la fin de sa durée de vie, votre déambulateur doit être mis au rebut conformément à la législation environnementale locale. Il est recommandé de démonter le déambulateur afin de faciliter le transport des matériaux recyclables.

5.6. Garantie

La garantie de ce produit est soumise aux conditions générales de chaque pays.

6. Spécifications techniques

Les détails techniques ci-dessous concernent uniquement ce déambulateur, avec des réglages standard et dans des conditions ambiantes optimales. Veuillez tenir compte de ces détails pendant l'utilisation.

Marque	Vermeiren
Type	Déambulateur
Description	Quadri-Light
	Dimensions
Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
Capacité de charge maximale du sac de rangement	5 kg
Longueur hors tout	700 mm
Longueur plié	700 mm Pour transport : 400 mm
Largeur hors tout	650 mm
Largeur pliée	290 mm
Hauteur générale	805 - 930 mm
Hauteur plié	805 mm Pour transport : 670 mm
Hauteur des poignées	805 - 930 mm
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques. Tolérance de mesures +/- 15 mm / 1,5 kg / 1,5°.	

Marque	Vermeiren
	Déambulateur
Type	Quadri-Light
Description	Dimensions
Hauteur du corps recommandée	1550 - 1850 mm
Distance entre les poignées	460 mm
Hauteur de siège	610 mm
Largeur du siège	450 mm
Profondeur du siège	200 mm
Masse totale - sans panier	7,25 kg 7,2 kg
Diamètre des roues Avant Arrière	8" 7"
Freins	Freins standard et freins de stationnement
Rayon de braquage	1310 mm
Température de stockage et d'utilisation	+5°C - +41°C
Humidité de stockage et d'utilisation	30% - 70%
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques. Tolérance de mesures +- 15 mm / 1,5 kg / 1,5°.	

Inhoudsopgave

Voorwoord	39
1. Uw product	40
2. Voor gebruik	41
2.1. Beoogd gebruik en indicaties	41
2.2. Veiligheidsinstructies en relevante risico's	42
2.3. Symbolen op de rollator	43
2.4. Bij levering	44
2.5. Transport en opslag	44
3. Montage/Demontage en aanpassingen	45
3.1. Montage	45
3.2. Demontage	45
3.3. De opbergzak monteren	46
3.4. De rugsteun plaatsen/verwijderen	47
3.5. Hoogte aanpassingen	47
4. Uw rollator gebruiken	48
4.1. Remsysteem	48
4.2. Opvouwen/Ontvouwen	49
4.3. Stoepranden nemen	50
4.4. Gaan zitten, opstaan, wandelen	51
5. Onderhoud	51
5.1. Schoonmaak	51
5.2. Ontsmetting	52
5.3. Inspectie / Onderhoud / Reparatie	52
5.4. Hergebruik	53
5.5. Beëindiging van gebruik	53
5.6. Garantie	53
6. Technische specificaties	54

Voorwoord

Proficiat! U bent nu eigenaar van een Vermeiren rollator!

Bedankt voor uw vertrouwen in de producten van Vermeiren. Om u te ondersteunen bij het gebruik van deze rollator en zijn bedieningsmogelijkheden, bieden we u deze handleiding aan. Lees deze informatie zorgvuldig door: het zal u helpen om vertrouwd te raken met de bediening, mogelijkheden en beperkingen van uw rollator.

Indien u na het lezen van deze handleiding nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw vakhandelaar. Hij/Zij zal u met plezier verder helpen.

Belangrijke opmerking

Om uw veiligheid te garanderen, en om de levensduur van uw product te verlengen, raden we u aan om er goed zorg voor te dragen en om regelmatig nazicht en onderhoud te laten uitvoeren.

Deze handleiding houdt rekening met de recentste productontwikkelingen. De Firma Vermeiren behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan dit type product door te voeren zonder verplicht te zijn om voordien geleverde producten aan te passen of te vervangen.

De productafbeeldingen in deze handleiding dienen om de instructies te verduidelijken. De productdetails in de afbeeldingen kunnen afwijken ten opzichte van uw product.

Beschikbare informatie

Op onze website <http://www.vermeiren.com/> kunt u altijd terecht voor de meest recente versie van onderstaande informatie. Raadpleeg deze website a.u.b. regelmatig voor eventuele bijgewerkte versies.

Mensen met een visuele beperking kunnen de elektronische versie van deze handleiding downloaden en laten voorlezen door een tekst-naar-spraak programma.



Gebruiksaanwijzing
Voor gebruiker en vakhandelaar



Servicehandleiding voor rollators
Voor de vakhandelaar



EC-conformiteitsverklaring

1. Uw product



1. Handgrepen
2. Remhendel
3. Rug
4. Zit
5. Opbergtas
6. Voorwielen
7. Achterwielen
8. Remkabel
9. Tiphulp
10. Reflectoren
11. wandelstok
12. Identificatieplaat

2. Voor gebruik

2.1. Beoogd gebruik en indicaties

- Dit product is een medisch hulpmiddel.
- Indicaties en contra-indicaties: De rollator is bedoeld ter ondersteuning van de beenfunctie tijdens het lopen. Gebruik uw rollator niet indien u andere fysieke beperkingen heeft waardoor het gebruik van de rollator onveilig wordt, zoals een zwakke arm, evenwichtsstoornis, verminderd zicht, verlies van ledematen, ...
- De rollator is uitsluitend ontworpen en geproduceerd om als loophulp, voor één persoon met een maximaal gewicht van 130 kg, te dienen.
- Door met de bovenste ledematen of de romp op de rollator te steunen of deze te verschuiven, compenseert de rollator de verminderde belastbaarheid of de kracht van de onderste ledematen. Bovendien zorgt deze voor een betere steun en veiligheid bij het gaan.
- De rollator kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.
- Hij is niet bedoeld voor het vervoer van goederen en/of meer personen dan de gebruiker. Hij is eveneens niet bedoeld om zittend gebruikt te worden als transportmiddel.
- Hij mag alleen worden gebruikt op een vlakke ondergrond waarbij alle vier de wielen de grond raken. Gebruik de rollator niet op rotsachtig, hobbelig of zanderig terrein of op plaatsen met een steile helling. Dan kan de rollator instabiel worden. Ga tijdens het lopen altijd via vlakke, stabiele ondergronden en afgeschuinde stoepranden.
- De garantie op dit product is gebaseerd op normaal gebruik en onderhoud zoals beschreven in deze handleiding. De garantie vervalt bij schade die werd veroorzaakt door verkeerd gebruik of gebrek aan onderhoud.
- Raadpleeg ook de technische details en begrenzings van uw rollator in §6..

2.2. Veiligheidsinstructies en relevante risico's

VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel

- Lees de instructies in deze handleiding en volg ze nauwkeurig op. Zo niet, kan dit leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging aan uw product.

Houd rekening met de volgende algemene waarschuwingen tijdens het gebruik:

- Let erop dat er geen stenen of ander objecten de rollator wielen blokkeren.
- Zorg ervoor dat beide parkeerremmen aan staan, voordat u de rollator gebruikt als hulp om recht te staan. Zodra u comfortabel en stabiel staat, kunt u de parkeerremmen vrijzetten.
- Hou beide handen op de handgrepen tijdens het stappen.
- Houd er rekening mee dat sommige onderdelen van uw rollator zeer warm of koud kunnen worden door omgevingstemperatuur, de zon of verwarmingstoestellen. Wees daarom voorzichtig bij het aanraken.
- Verifieer voor elk gebruik of de hoogte-verstellingen goed vast staan, zie **§3.5.**
- Houd de handgrepen niet met natte handen vast. Als u dit wel doet, kunt u uw evenwicht verliezen.
- Begeef u met uw rollator niet op de rijweg. Blijf op het voetpad.
- Volg de instructies voor reiniging en controles. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door foutief onderhoud.

Ieder ernstig incident [MDR (EU) 2017/745 §2 (65)] dat zich heeft voorgedaan met trekking tot het product dient gerapporteerd te worden aan de producent en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt gevestigd is.

Houd er rekening mee dat uw rollator, afhankelijk van de gebruikte instelling, bij sommige diefstalsystemen interferentie kan geven. Hierdoor kan het winkelalarm in werking gesteld worden.

2.3. Symbolen op de rollator

- i** De identificatieplaat bevindt zich onder de linker handgreep, aan de binnenkant van het basisframe

	Maximum gewicht van de gebruiker in kg
	Type aanduiding
	Catalogusnummer
	Serienummer
	Medisch hulpmiddel
	Producent
	Fabricagedatum
	EC-conformiteitsverklaring
	Let op: belangrijke informatie
	Het is aangeraden om de handleiding te lezen

2.4. Bij levering

Pak uw product uit en verifieer of de levering compleet is. Volgende onderdelen zijn bij de levering ingesloten:

- Basisframe met zitting, 4 wielen
- Handgrepen met remmen
- Opbergtas
- wandelstok
- Rug
- Gebruiksaanwijzing

Controleer de zending zorgvuldig op transportschade. Wanneer blijkt dat uw product een defect vertoont, neem dan contact op met de transporteur.

2.5. Transport en opslag

Transport en opslag van de rollator moet gebeuren volgens de technische specificaties in §6.. Bewaar de rollator droog.

Bescherm de rollator tegen roest en het binnendringen van vreemde stoffen (bijv. zout water, zeelucht, zand, stof) middels een degelijke afscherming of verpakking).

Zorg er bij het opbergen voor dat er geen andere voorwerpen op of tegen de rollator liggen waardoor de rollator beschadigd kan worden.

3. Montage/Demontage en aanpassingen

VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel

- Houd vingers, gespen, sieraden en kleding uit de buurt van het vouwsysteem.

3.1. Montage

1. Maak de klittenbandriemen los.
2. Plaats de rollator op zijn kant.
3. Beweeg het achterwiel naar beneden totdat de boringen over elkaar liggen.
4. Monteer de sterknop (2). Zorg ervoor dat het goed vastzit.
5. Beweeg het voorwiel naar beneden totdat de boringen over elkaar liggen.
6. Monteer de sterknop (5). Zorg ervoor dat het goed vastzit.
7. Herhaal voor de andere kant.
8. Plaats de rugsteun, zie §3.4..
9. Vouw de rollator open, zie §4.2..

3.2. Demontage

1. Vouw de rollator op, zie §4.2..
2. Verwijder de sterknop (5).
3. Vouw het voorwiel naar boven.
4. Verwijder de sterknop (2).
5. Vouw het achterframe / wiel naar boven (3).
6. Bevestig het achterframe / wiel met de klittenbandriemen aan het frame van de handgrepen.
7. Herhaal voor de andere kant.



3.3. De opbergzak monteren

⚠ VOORZICHTIG

Risico op vallen, kantelen

- Laad uw opbergzak niet te zwaar.

Het maximale laadvermogen van de opbergzak is opgenomen in §6..

De boodschappentas (6) is bedoeld om aan de voorkant te bevestigen. Bevestig het boodschappenmandje met de lussen (7) aan de buizen van het zijframe (8).



3.4. De rugsteun plaatsen/verwijderen

⚠ VOORZICHTIG

Kans op vallen

- Zorg ervoor dat de rugsteun (9) goed vastzit voordat u de zit gebruikt. Controleer of alle schroeven, bouten en moeren van de riem (9) goed zijn vastgedraaid.

Riem en houder kunnen eenvoudig worden gemonteerd door de basis over het uitstekende deel van de steun op het frame te schuiven, zie afbeelding. Duw de basis tot helemaal beneden en draai de schroef (10) vast.

Om te demonteren, draai de schroef los en schuif de basis weer omhoog totdat deze van de steun schuift.



3.5. Hoogte aanpassingen

⚠ VOORZICHTIG

Risico op vallen, kantelen

- Bevestig de handgrepen stevig voordat u de rollator gebruikt.
- Overschrijd de minimale of maximale afstelling zoals aangegeven op de handgrepen niet. Uw rollator zal niet meer stabiel zijn.

⚠ VOORZICHTIG


Gevaar voor beschadiging

- Trek de handgrepen niet te hoog om te voorkomen dat de remkabels beschadigd raken.

De rollator kan in hoogte worden veranderd door de handgrepen aan te passen:

1. Zet uw rollator in parkeermodus, zie §4.1..
2. Houd de veerknop (11) ingedrukt.
3. Verplaats de handgreep tot de gewenste hoogte (6 verschillende posities: stappen van 25 mm). Controleer of de remkabel niet vast kan komen te zitten rond de krukhouter.
4. Controleer of de veerknop (11) terug is geklikt en stevig in een gat is bevestigd.
5. Trek de handgreep omhoog en duw naar beneden om te controleren of het vergrendeld is.
6. Stel de andere handgreep op dezelfde manier af. Zorg ervoor dat beide handgrepen dezelfde hoogte hebben.

i Als je rechtop staat, moeten de handgrepen zo hoog zijn als je polsen. Laat je armen los hangen.

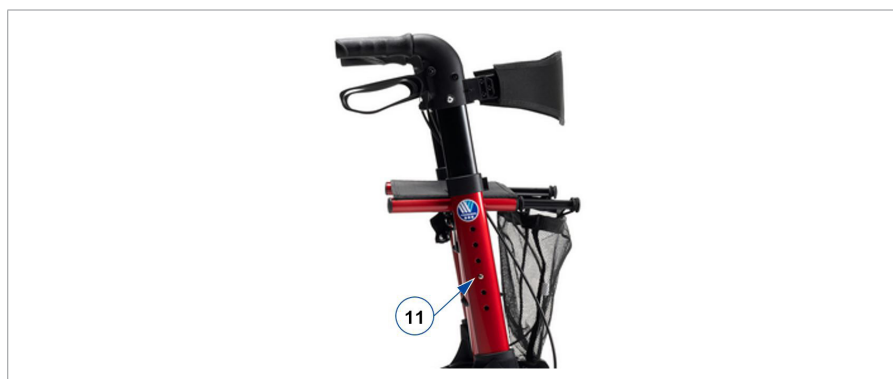

4. Uw rollator gebruiken

4.1. Remsysteem

⚠ VOORZICHTIG

Kans op vallen

- Om uw veiligheid te garanderen dient u de werking van de remmen te controleren. De staat van het remsysteem wordt beïnvloed door slijtage, de aanwezigheid van olie en andere vervuilende stoffen op de achterwielen en het remmechanisme.

De rollator is voorzien van remmen, die door twee remhendels (15) bediend kunnen worden. De remhendels kunnen op twee manieren gebruikt worden: als standaard rem of als parkeerrem.


⚠ VOORZICHTIG

Gevaar voor beschadiging

- Duw de rollator niet te hard wanneer u de standaard rem gebruikt. Dit kan de remmen en wielen beschadigen.

Om de standaard rem te gebruiken trekt u beide remhendels (15) gelijktijdig omhoog [A], in een knijpbeweging. Om het remmen te stoppen laat u de remhendels los.

Om de parkeerrem te gebruiken, drukt u beide remhendels (15) naar beneden tot in vergrendelstand [B]. Gebruik altijd de beide parkeerremmen gelijktijdig. Om de parkeerstand te verlaten, trek beide remhendels tegelijk omhoog.

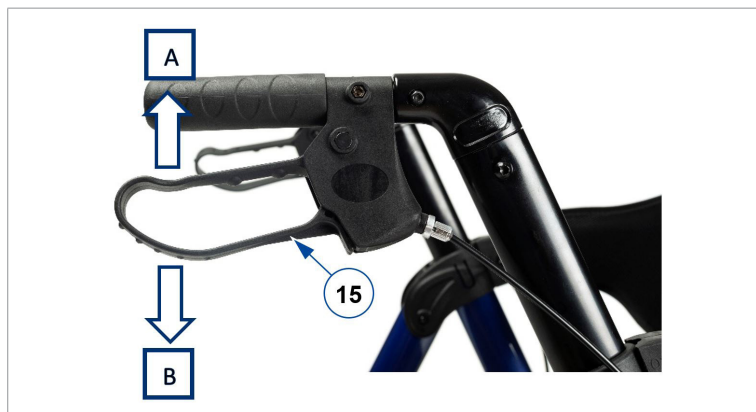

4.2. Opvouwen/Ontvouwen

⚠ VOORZICHTIG

Risico voor knellen

- Houd vingers, gespen, sieraden en kleding uit de buurt van het vouwsysteem.

⚠ VOORZICHTIG

Kans op vallen

- Verifieer dat de rollator volledig open staat en het frame geblokkeerd is.

4.2.1. De rollator uitvouwen

1. Monteer de rollator indien nodig na transport of opslag, zie §3..
2. Druk lichtjes op de handgrepen om de rollator te ontvouwen.
3. Duw met beide handen de zijkanten van de zit neer. Duw zolang op de buizen van het frame tot het frame geblokkeerd zit; een duidelijke klik is hierbij hoorbaar.
4. Controleer of het frame vergrendeld is door de handgrepen naar elkaar toe te duwen.
5. Stel de handgrepen in op de gewenste hoogte, zie §3.5..

4.2.2. De rollator opvouwen


1. Verwijder de wandelstok en boodschappentas.
2. Trek de zit omhoog aan de riem.
3. Duw de handgrepen naar elkaar toe om het frame te sluiten.
4. Demonteer de rollator verder voor transport en opslag, zie §3.2..

4.3. Stoepranden nemen

VOORZICHTIG

Kans op vallen

- Neem stoepranden recht, met beide voorwielen gericht op de stoeprand. Houd de rollator dicht bij u.

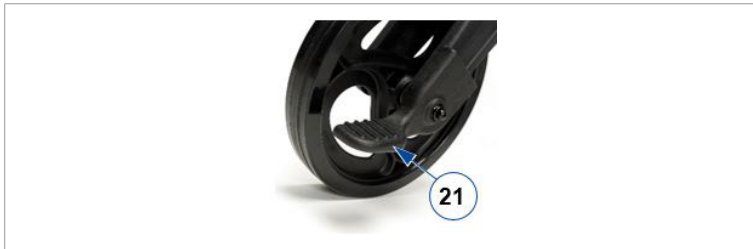

Om het nemen van kleine obstakels, zoals stoepranden, te vergemakkelijken, is uw rollator voorzien van een tiphulp op de twee achterwielen.

1. Zorg ervoor dat u stabiel staat met beide handen op de handgrepen.
2. Gebruik één voet en duw op de tiphulp (**21**) om de voorwielen van de grond te tillen.
3. Houd de rollator met de handgrepen in deze positie en beweeg traag naar voor tot de voorwielen op de stoeprand staan.

4. Til nu de handgrepen op en beweeg naar voor om de achterwielen op de stoeprand te zetten.
5. Als de rollator stabiel staat, kan u zelf de stoeprand opstappen.

4.4. Gaan zitten, opstaan, wandelen

VOORZICHTIG

Kans op vallen

- Let erop dat beide remhendels in parkeerstand staan voordat u gaat zitten, zie §4.1.. Laat de remhendels in deze stand staan totdat u gaat wandelen. Houd uw voeten tussen de achterwielen.
 - Beweeg de rollator niet al zittend voort.
1. Duw beide remhendels omlaag in parkeerstand.
 2. Terwijl u op de handgrepen steunt, draait u zich om en gaat u op de zit neerzitten.
 3. Om opnieuw op te staan, leun op de handgrepen en draai u om.
 4. Trek beide remhendels omhoog en gebruik de standaard remmen.
 5. Laat de remhendels los en stap voorwaarts met de rollator dicht bij uw lichaam.

5. Onderhoud

-  Regelmatig onderhoud zorgt ervoor dat uw rollator in een perfect werkende staat blijft. Voor de onderhoudshandleiding kan u de website van Vermeiren raadplegen: www.vermeiren.com.

5.1. Schoonmaak

Gebruik een zachte, vochtige doek en lauwwarm water met een milde huishoudelijke zeep om de rollator schoon te maken. Vermijd dat onderdelen doorweekt raken. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.

5.2. Ontsmetting

VOORZICHTIG

Gevaar voor beschadiging

- Ontsmetting mag enkel worden uitgevoerd door getraind personeel. Neem contact op met uw vakhandelaar.

Gebruik een zachte, vochtige doek en lauwwarm water met een mild huishoudelijk desinfectiemiddel om de rollator schoon te maken.

5.3. Inspectie / Onderhoud / Reparatie

De verwachte levensduur van uw rollator is 5 jaar. De levensduur wordt beïnvloed door zijn gebruik, opslag, onderhoud, service en reiniging.

Voordat u met uw rollator op pad gaat, moet deze nagekeken worden op volgende punten:

- Volledigheid.
- Vouwmechanisme: goed werkend.
- Bouten en moeren: zitten goed vast.
- Remmen: goed werkend.
- Wielen (stabiliteit, spoor, bevestigingsschroeven).
- Indien uw wielen regelmatig in contact komen met draden, haren of andere vezels, kunnen deze geblokkeerd raken. Kijk daarom regelmatig uw wielen na of ze vrij kunnen roteren en of ze in een goede staat verkeren.
- Frame (vervormingen, stabiliteit, verbindingen).
- Handgrepen (veilige blokkering van de hoogteverstelling, goede steun van de handgrepen).
- Zit, rugsteun en opbergzak (slijtage of beschadigingen).

Uw rollator is opgebouwd uit aluminium en plastic onderdelen. We raden aan om uw product minstens één keer per jaar te laten inspecteren, maar de onderhoudsfrequentie hangt af van de frequentie en intensiteit van gebruik. Raadpleeg uw vakhandelaar om tot een overeenstemming betreffende de onderhoudsfrequentie te komen.

Reparaties en vervangingen mogen enkel door opgeleide personen worden uitgevoerd en enkel met originele vervangonderdelen van Vermeiren.

Aarzel niet om de service die door uw vakhandelaar aangeboden wordt, te gebruiken. Hij/zij zal u graag helpen met betrekking tot service en reparaties.

5.4. Hergebruik

Voor ieder hergebruik moet de rollator gedesinfecteerd, geïnspecteerd en onderhouden worden volgens de instructies in §5.1. en §5.2..

5.5. Beëindiging van gebruik

Op het einde van de levensduur moet u de rollator vernietigen volgens de lokale milieuwetgeving. U kunt best de rollator demonteren om transport van recyclebare materialen te vergemakkelijken.

5.6. Garantie

De garantie op dit product is onderhevig aan de algemene voorwaarden van ieder land.

6. Technische specificaties

Onderstaande technische gegevens zijn enkel geldig voor deze rollator, bij standaardinstellingen en optimale omgevingsfactoren. Houd bij gebruik rekening met deze details.

Merk	Vermeiren
	Rollator
Type	Quadri-Light
Beschrijving	Afmetingen
Max. gebruikersgewicht	130 kg
Maximaal vulgewicht van opbergzak	5 kg
Totale lengte	700 mm
Lengte dichtgevouwen	700 mm Voor transport: 400 mm
Totale breedte	650 mm
Breedte dichtgevouwen	290 mm
Totale hoogte	805 - 930 mm
Hoogte dichtgevouwen	805 mm Voor transport: 670 mm
Handgreephoogte	805 - 930 mm
Aanbevolen lichaamsgrootte	1550 - 1850 mm
Afstand tussen de handgrepen	460 mm
Zithoogte	610 mm
Zitbreedte	450 mm
Zitdiepte	200 mm
Totaal gewicht - zonder mandje	7,25 kg 7,2 kg
Wieldiameter Voor Achter	8" 7"
Remmen	Standaard remmen & parkeerremmen
Draaicirkel	1310 mm
Opslag en gebruikstemperatuur	+5°C - +41°C
Opslag en gebruiksluchtvochtigheid	30% - 70%
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen te introduceren. Meettolerantie +/- 15 mm / 1,5 kg / 1,5°	

Vorwort	56
1. Ihr Produkt	57
2. Vor der Benutzung	58
2.1. Bestimmungsgemäße Verwendung und Indikationen	58
2.2. Sicherheitshinweise und mögliche Risiken	59
2.3. Symbole an dem Rollator	60
2.4. Bei Lieferung	61
2.5. Transport und Aufbewahrung	61
3. Montage/Demontage und Anpassungen	62
3.1. Montage	62
3.2. Auseinanderbauen	62
3.3. Befestigen der Aufbewahrungstasche	63
3.4. Montieren/Abbauen der Rückenlehne	64
3.5. Höhenverstellung	64
4. Benutzen des Rollators	66
4.1. Bremssystem	66
4.2. Falten / Entfalten	67
4.3. Bewältigen von Bordsteinkanten	68
4.4. Setzen, Aufstehen und Gehen	69
5. Wartung	69
5.1. Reinigung	69
5.2. Desinfektion	70
5.3. Inspektion / Wartung / Reparatur	70
5.4. Wiederbenutzung	71
5.5. Entsorgung	71
5.6. Garantie	71
6. Technische Daten	72

Vorwort

Herzlichen Glückwunsch! Sie sind nun Besitzer eines Vermeiren-Rollator!

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in Produkte von Vermeiren. Dieses Handbuch soll Ihnen bei der Benutzung dieses Rollators und seiner Bedienmöglichkeiten helfen. Lesen Sie es daher bitte aufmerksam durch, um sich mit der Bedienung, den Fähigkeiten und Beschränkungen Ihres Rollator vertraut zu machen.

Sollten Sie nach der Lektüre dieses Handbuchs noch Fragen haben, können Sie sich jederzeit an Ihren Fachhändler wenden. Er wird Ihnen gerne in dieser Angelegenheit weiterhelfen.

Wichtiger Hinweis

Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten und die Nutzungsdauer Ihres Produkts zu verlängern, sollten Sie es gut behandeln und regelmäßig überprüfen und/oder warten lassen.

Dieses Handbuch enthält die neuesten Produktentwicklungen. Vermeiren behält sich das Recht vor, Veränderungen an dieser Art von Produkt vorzunehmen, ohne eine Verpflichtung einzugehen, ähnliche bereits ausgelieferte Produkte anzupassen oder auszutauschen.

Die Produktabbildungen dienen zur Verdeutlichung der Anweisungen. Das gezeigte Produkt kann in Details von Ihrem Produkt abweichen.

Verfügbare Informationen

Auf unserer Webseite <http://www.vermeiren.com/> finden Sie stets die aktuellste Version der folgenden Informationen. Informieren Sie sich bitte regelmäßig auf dieser Website nach eventuell verfügbaren Aktualisierungen.

Sehbehinderte Menschen können sich die elektronische Version dieses Handbuchs herunterladen und mit Hilfe einer Sprachsyntheselösung („Text-to-Speech-Software“) vorlesen lassen.



Bedienungsanleitung
Für Benutzer und Fachhändler



Wartungshandbuch für Rollatoren
Für Fachhändler

DE



EG-Konformitätserklärung

1. Ihr Produkt



1. Handgriffe
2. Bremshebel
3. Rücken
4. Sitz
5. Aufbewahrungstasche
6. Vorderräder
7. Hinterräder
8. Bremskabel
9. Kipphilfe
10. Reflektoren
11. Halterung für Gehstock
12. Typenschild

2. Vor der Benutzung

2.1. Bestimmungsgemäße Verwendung und Indikationen

- Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt.
- Indikationen und Kontraindikationen: Der Rollator dient zur Unterstützung der Beinfunktion beim Gehen. Benutzen Sie Ihren Rollator nicht, wenn Sie andere körperliche Einschränkungen haben, durch die die Nutzung des Rollators unsicher wird, zum Beispiel bei geschwächter/eingeschränkter Armfunktion, bei Gleichgewichtsstörungen, Sehbehinderung, Gliedmaßenverlust, usw.
- Der Rollator ist ausschließlich als Gehhilfe für eine Person mit einem maximalen Gewicht von 130kg vorgesehen.
- Indem Sie sich mit den oberen Extremitäten oder dem Rumpf auf den Rollator stützen oder diesen verschieben, gleicht der Rollator die verminderte Belastbarkeit oder Leistungsfähigkeit der unteren Extremitäten aus. Außerdem sorgt er für eine bessere Unterstützung und Sicherheit beim Gehen.
- Der Rollator kann sowohl in Räumen als auch im Freien verwendet werden.
- Der Rollator ist nicht für den Transport von Gegenständen und/oder von mehr Personen als dem Benutzer vorgesehen. Er ist auch nicht dazu bestimmt, im Sitzen als Transporthilfe verwendet zu werden.
- Er darf nur auf einem ebenen Untergrund verwendet werden, bei dem alle vier Räder Bodenkontakt haben. Nutzen Sie den Rollator nicht auf steinigem, holperigem oder sandigen Böden oder starkem Gefälle, da sonst Kippgefahr besteht. Führen Sie den Rollator beim Gehen immer über einen ebenen, stabilen Untergrund und abgesenkte Bordsteinkanten.
- Die Garantie für dieses Produkt beruht auf dessen normaler Benutzung und Wartung wie in diesem Handbuch beschrieben. Schäden an Ihrem Produkt, die auf unsachgemäße Benutzung oder mangelnde Wartung zurückzuführen sind, führen zum Erlöschen der Garantie.
- Sehen Sie sich auch die technischen Daten und die Grenzen Ihres Rollators in Abschnitt 6. an.

2.2. Sicherheitshinweise und mögliche Risiken

VORSICHT

Verletzungsgefahr

- Bitte lesen und befolgen Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung, da andernfalls Verletzungsgefahr besteht oder Ihr Produkt beschädigt werden kann.

Beachten Sie bei der Benutzung die folgenden allgemeinen Warnhinweise:

- Achten Sie darauf, dass sich keine Steine oder andere Gegenstände in den Laufflächen der Räder befinden und dadurch die Räder des Rollators blockieren.
- Achten Sie darauf, dass beide Feststellbremsen erst immer in die Parkposition gestellt werden, bevor Sie den Rollator als Hilfsmittel zum Aufstehen benutzen. Lösen Sie die Feststellbremsen erst, wenn Sie sicher stehen.
- Halten Sie beide Hände an den Handgriffen, wenn Sie vorwärts gehen.
- Beachten Sie, dass bestimmte Teile Ihres Rollators infolge der Umgebungstemperatur, Sonneneinstrahlung, Heizkörpern usw. sehr warm oder sehr kalt werden können. Daher ist beim Berühren Vorsicht geboten.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Höhenverstellungen fest gesichert sind, siehe Abschnitt **3.5.**.
- Fassen Sie die Handgriffe nicht mit nassen Händen an. Sie könnten abrutschen und den Halt verlieren.
- Begeben Sie sich mit Ihrem Rollator nicht in den fließenden Verkehr. Bleiben Sie auf dem Fußweg.
- Beachten Sie die Pflege- und Wartungshinweise. Bei Schäden aufgrund von mangelnder Wartung/Pflege haftet der Hersteller nicht.

Jeder schwerwiegende Zwischenfall [MDR (EU) 2017/745 §2 (**65**)], der im Zusammenhang mit dem Gerät aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.

Denken Sie bitte daran, dass Ihr Rollator je nach den verwendeten Einstellungen einige Diebstahlsicherungen stören kann. Dadurch kann der Alarm ausgelöst werden.

2.3. Symbole an dem Rollator

- i** Das Typenschild befindet sich auf dem linken hintere Stütze an der Innenseite des Grundrahmens.

	Maximalgewicht des Benutzers (in kg)
	Typbezeichnung
	Katalognummer
	Seriennummer
	Medizinprodukt
	Hersteller
	Produktionsdatum
	Konformitätserklärung
	Achtung: wichtige Informationen
	Bitte Bedienungsanleitung beachten

2.4. Bei Lieferung

Packen Sie Ihr Produkt aus und kontrollieren Sie, ob die Lieferung vollständig ist. Folgende Teile müssen enthalten sein:

- Grundrahmen mit Sitz, 4 Räder
- Handgriffe mit Bremsen
- Aufbewahrungstasche
- Halterung für Gehstock
- Rücken
- Handbuch

Prüfen Sie Ihr Produkt auf Transportschäden. Sollten Sie nach der Auslieferung Schäden feststellen, kontaktieren Sie bitte den Spediteur.

2.5. Transport und Aufbewahrung

Versand und Aufbewahrung des Rollators sollten gemäß den technischen Spezifikationen in §6. erfolgen. Achten Sie darauf, dass der Rollator an einem trockenen Ort aufbewahrt wird.

Schützen Sie den Rollator mit einer geeigneten Abdeckung oder Verpackung gegen Rost und das Eindringen von Fremdkörpern (z. B. Salzwasser, Seeluft, Sand und Staub).

Achten Sie beim Aufbewahren des Rollators darauf, dass keine anderen Gegenstände auf dem Rollator abgelegt oder daran gelehnt werden, weil der Rollator hierdurch beschädigt werden kann.

3. Montage/Demontage und Anpassungen

VORSICHT

Verletzungsgefahr

- Halten Sie Finger, Schnallen, Schmuck und Kleidung vom Klappmechanismus fern.

3.1. Montage

1. Lösen Sie die Klettverschlüsse.
2. Legen Sie den Rollator auf die Seite.
3. Führen Sie das Hinterrad nach unten, bis die Löcher ordnungsgemäß übereinander liegen.
4. Montieren Sie den Sternknopf **(2)**. Stellen Sie sicher, dass er gut befestigt ist.
5. Führen Sie das Vorderrad nach unten, bis die Löcher ordnungsgemäß übereinander liegen.
6. Montieren Sie den Sternknopf **(5)**. Stellen Sie sicher, dass er gut befestigt ist.
7. Wiederholen Sie dies für die andere Seite.
8. Montieren Sie die Rückenlehne, wie in **§3.4.** beschrieben.
9. Klappen Sie den Rollator aus, siehe Abschnitt **4.2.**.

3.2. Auseinanderbauen

1. Klappen Sie den Rollator zusammen, siehe Abschnitt **4.2.**.
2. Entfernen Sie den Sternknopf **(5)**.
3. Klappen Sie das Vorderrad nach oben.
4. Entfernen Sie den Sternknopf **(2)**.
5. Klappen Sie den hinteren Rahmen/das Hinterrad nach oben **(3)**.
6. Befestigen Sie den hinteren Rahmen/ das Hinterrad mit Klettverschlüssen am Rahmen der Handgriffe.
7. Wiederholen Sie dies für die andere Seite.



3.3. Befestigen der Aufbewahrungstasche

⚠ VORSICHT

Sturz- oder Kipprisiko

- Beladen Sie die Aufbewahrungstasche nicht zu schwer.

Die maximale Zuladung der Aufbewahrungstasche ist in Abschnitt 6. angegeben.

Der Einkaufskorb (6) ist nur zum Anbau an der Vorderseite unter dem Sitz gedacht. Montieren Sie den Einkaufskorb mit den beiden Korbbefestigungen (7) am Gestänge des Sitzrahmens des Rollators (8).



3.4. Montieren/Abbauen der Rückenlehne

⚠ VORSICHT

Sturzgefahr

- Bevor Sie den Sitz benutzen, stellen Sie sicher, dass der Rückengurt (9) korrekt befestigt ist. Überprüfen Sie, ob alle Schrauben, Bolzen und Muttern des Gurts (9) fest angezogen sind.

Gurt und Halterung können auf einfache Weise angebracht werden, indem die Basis über den hervorstehenden Teil der Stütze am Rahmen geschoben wird, siehe Abbildung. Drücken Sie die Basis herunter bis zum Boden und ziehen Sie die Schraube (10) fest.

Zum Entfernen des Rückengurts lösen Sie die Schraube und schieben Sie die Basis wieder nach oben von der Stütze herunter.



3.5. Höhenverstellung

⚠ VORSICHT

Sturz- oder Kipprisiko

- Prüfen Sie vor jeder Nutzung des Rollators, ob die Handgriffe sicher festgestellt sind.
- Überschreiten Sie nicht die max. und min. Höhe wie angegeben auf die Handgriffe, da Ihr Rollator sonst nicht mehr stabil und sicher genutzt werden kann.

⚠ VORSICHT


Beschädigungsgefahr

- Ziehen Sie die Handgriffe nicht zu hoch, damit das Bremskabel nicht beschädigt wird.

Die Höhe des Rollators kann durch Einstellen der Handgriffe angepasst werden:

1. Bringen Sie Ihren Rollator in die Parkposition, Abschnitt **4.1.**
2. Drücken Sie den Federknopf **(11)** und halten Sie ihn gedrückt.
3. Stellen Sie den Handgriff auf die gewünschte Höhe ein (6 verschiedene Positionen: Schritte von 25 mm). Prüfen Sie, dass sich das Bremskabel nicht um den Krückenhalter klemmen kann.
4. Prüfen Sie, dass der Federknopf **(11)** wieder sichtbar einrastet.
5. Ziehen Sie den Handgriff nach oben und schieben Sie ihn nach unten, um zu überprüfen, ob er korrekt arretiert ist.
6. Stellen Sie den anderen Handgriff auf die gleiche Weise ein. Stellen Sie sicher, dass sich beide Handgriffe auf der gleichen Höhe befinden.

i Wenn Sie aufrecht stehen, sollten sich die Handgriffe auf der Höhe Ihrer Handgelenke befinden. Lassen Sie Ihre Arme dabei locker hängen.

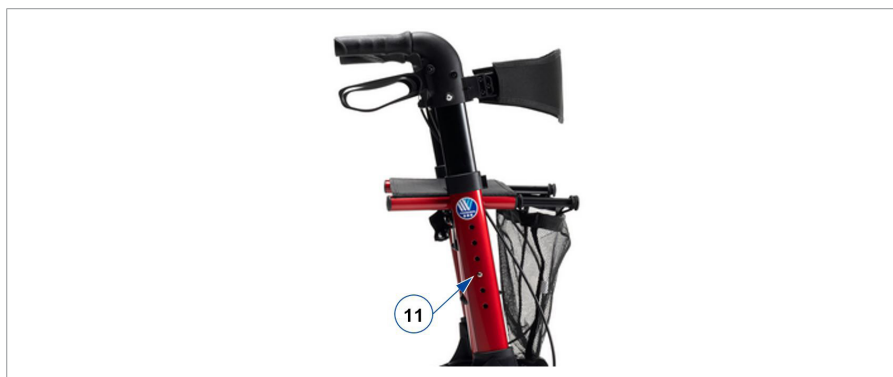

4. Benutzen des Rollators

4.1. Bremssystem

VORSICHT

Sturzgefahr

- Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, sollten Sie die Funktion der Bremsen vor jeder Nutzung kontrollieren. Der Zustand des Bremssystems kann durch Verschleiß, die Anwesenheit von Öl und anderen Verunreinigungen an den Hinterrädern und dem Bremsmechanismus beeinträchtigt werden.

Der Rollator ist mit Bremsen ausgestattet, die mit zwei Bremshebeln **(15)** betätigt werden. Die Bremshebel können auf zwei Arten genutzt werden: als normale Bremse (Betriebsbremse) und als Feststellbremse (Parkbremse).


VORSICHT

Beschädigungsgefahr

- Schieben Sie den Rollator nicht zu stark, wenn Sie die Betriebsbremse betätigen. Hierdurch könnten die Reifen oder Bremsen beschädigt werden.

Um die normale Bremse zu benutzen, ziehen Sie beide Bremshebel **(15)** gleichzeitig in einer zusammen-drückenden Bewegung nach oben [A]. Um den Bremsvorgang zu beenden, lassen Sie die Bremshebel los.

Um die Feststellbremse zu aktivieren, drücken Sie beide Bremshebel **(15)** nach unten in die Einraststellung [B]. Aktivieren Sie immer beide Feststellbremsen gleichzeitig. Zum Lösen der Feststellbremsen ziehen Sie beide Bremshebel gleichzeitig nach oben.

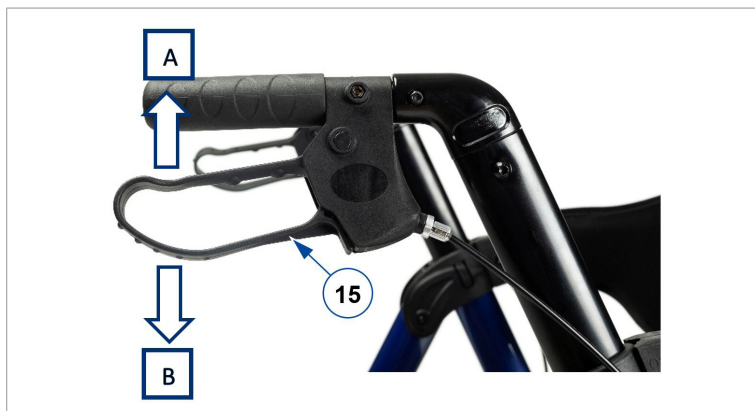

4.2. Falten / Entfalten

⚠ VORSICHT

Einklemmgefahr

- Halten Sie Finger, Schnallen, Schmuck und Kleidung vom Klappmechanismus fern.

⚠ VORSICHT

Sturzgefahr

- Überprüfen Sie, dass der Rollator vollständig aufgefaltet ist und der Rahmen arretiert ist.

4.2.1. Aufalten des Rollators

1. Montieren Sie ggf. nach dem Transport oder der Lagerung den Rollator, siehe Abschnitt 3..
2. Drücken Sie leicht auf die Handgriffe, um den Rollator zu entfalten.
3. Drücken Sie mit beiden Händen die Seitenränder der Sitzfläche nach unten. Drücken Sie solange auf die Rohre des Rahmens, bis der Rahmen arretiert ist; Sie hören ein deutliches Einrastgeräusch.
4. Überprüfen Sie, ob der Rahmen arretiert ist, indem Sie die Handgriffe aufeinander zu drücken.
5. Stellen Sie die Handgriffe auf die gewünschte Höhe ein, siehe Abschnitt 3.5..

4.2.2. Zusammenfallen des Rollators

1. Entfernen Sie den Gehstock und die Aufbewahrungstasche.
2. Ziehen Sie den Sitz an der Schlaufe nach oben.
3. Drücken Sie die Handgriffe aufeinander zu, um den Rahmen zusammenzufalten.
4. Nehmen Sie den Rollator für den Transport und die Lagerung weiter auseinander, siehe Abschnitt 3.2..

4.3. Bewältigen von Bordsteinkanten

⚠ VORSICHT

Sturzgefahr

- Nehmen Sie Bordsteinkanten direkt, mit beiden Vorderrädern ausgerichtet auf die Bordsteinkante. Halten Sie den Rollator nahe.



Um das Überwinden kleiner Hindernisse, wie z.B. Bordsteine, zu erleichtern, ist der Rollator mit einer Kipphilfe an den beiden Hinterrädern ausgestattet.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie stabil stehen und halten Sie beide Handgriffe.
2. Drücken Sie mit einem Fuß auf den Kipphebel (**21**), um die Vorderräder anzuheben.
3. Halten Sie den Rollator mit den Handgriffen in dieser Position und schieben Sie ihn langsam nach vorne, bis die Vorderräder auf dem Bordstein stehen.
4. Heben Sie jetzt die Handgriffe an und schieben Sie den Rollator weiter nach vorne, um die Hinterräder auf den Bordstein zu stellen.
5. Wenn der Rollator stabil steht, können Sie selbst die Bordsteinkante in Angriff nehmen.

4.4. Setzen, Aufstehen und Gehen

VORSICHT

Sturzgefahr

- Achten Sie darauf, dass beide Bremshebel in Parkposition sind, bevor Sie sich setzen; siehe Abschnitt 4.1.. Halten Sie die Bremshebel in dieser Position, bis Sie wieder zu gehen beginnen. Bleiben Sie mit Ihren Füßen zwischen den Hinterrädern.
 - Bewegen Sie den Rollator nicht im Sitzen.
1. Drücken Sie beide Bremshebel herunter in die Parkposition.
 2. Stützen Sie sich auf die Handgriffe, drehen Sie sich um und setzen Sie sich auf die Sitzfläche.
 3. Zum Aufstehen stützen Sie sich auf die Handgriffe und drehen Sie sich um.
 4. Ziehen Sie beide Bremshebel nach oben und benutzen Sie die Betriebsbremsen.
 5. Lassen Sie die Bremshebel los und machen Sie mit dem Rollator nahe vor Ihrem Körper einen Schritt vorwärts.

5. Wartung

-  Durch eine regelmäßige Pflege wird Ihr Rollator in einem einwandfreiem Zustand bleiben. Bezüglich des Wartungshandbuchs besuchen Sie die Vermeiren-Website unter: www.vermeiren.com.

5.1. Reinigung

Verwenden Sie zum Reinigen des Rollators ein weiches, feuchtes Tuch und lauwarmes Wasser mit einer milden Seifenlösung für den Haushalt. Vermeiden Sie eine Durchnässung der Teile. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

5.2. Desinfektion

VORSICHT

Beschädigungsgefahr

- Eine Desinfektion darf nur von dafür geschultem Personal durchgeführt werden. Wenden Sie sich hierfür an Ihren Fachhändler.

Verwenden Sie zum Reinigen des Rollators ein weiches, feuchtes Tuch und lauwarmes Wasser mit einem milden Desinfektionsmittel für den Haushalt.

5.3. Inspektion / Wartung / Reparatur

Die erwartete Nutzungsdauer Ihres Rollators beträgt 5 Jahre. Die Lebensdauer Ihres Rollators hängt von der Art der Nutzung, der Einlagerung, der Pflege, Wartung und Reinigung ab.

Bevor Sie Ihren Rollator nutzen, muss dieser auf die folgenden Punkte kontrolliert werden:

- Vollständigkeit.
- Faltmechanismus: Funktioniert gut.
- Schrauben und Muttern: fest angezogen.
- Bremsen: funktionieren gut.
- Räder (Stabilität, Spur, Befestigungsschrauben).
- Wenn die Räder regelmäßig mit Drähten, Haaren oder anderen Fasern in Kontakt kommen, können sie hierdurch blockiert werden. Kontrollieren Sie daher regelmäßig, ob sich die Räder leichtgängig drehen lassen und in gutem Zustand befinden.
- Rahmen (Verformung, Standsicherheit, Verschraubungen).
- Handgriff (sichere Arretierung der Höhenverstellung, sicherer Halt der Handgriffe).
- Sitzfläche, Rückenlehne und Aufbewahrungstasche (Verschleiß oder Beschädigung).

Ihr Rollator besteht aus Aluminium- und Kunststoffkomponenten. Wir empfehlen, Ihren Rollator mindestens einmal pro Jahr überprüfen zu lassen, aber die Wartungshäufigkeit hängt von der Häufigkeit und Intensität der Nutzung ab. Beraten Sie sich bezüglich der geeigneten Wartungshäufigkeit mit Ihrem Fachhändler.

Reparaturen und Erneuerungen dürfen nur von geschultem Personal und mit Original-Ersatzteilen von Vermeiren durchgeführt werden.

Fühlen Sie sich frei, den von Ihrem Fachhändler angebotenen Service zu nutzen. Er wird Ihnen gerne in Bezug auf Service und Reparaturen behilflich sein.

5.4. Wiederbenutzung

Lassen Sie den Rollator vor jeder Wiederverwendung gemäß den Anweisungen in **§5.1.** und **§5.2.** desinfizieren, inspizieren und warten.

5.5. Entsorgung

Am Ende seiner Lebensdauer muss der Rollator in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltgesetzen entsorgt werden. Am besten demontieren Sie den Rollator, um den Transport von wiederverwertbaren Materialien zu erleichtern.

5.6. Garantie

Die Garantie für dieses Produkt unterliegt den allgemeinen Bestimmungen jedes Landes.

6. Technische Daten

Die nachstehenden technischen Daten gelten für diesen Rollator nur bei Standardeinstellungen und optimalen Umgebungsbedingungen. Berücksichtigen Sie diese Daten bei der Benutzung.

Marke	Vermeiren
	Rollator
Typ	Quadri-Light
Beschreibung	Abmessungen
Maximales Gewicht des Benutzers	130 kg
Maximale Zuladung der Aufbewahrungstasche	5 kg
Gesamtlänge	700 mm
Länge zusammengefaltet	700 mm Für dem Transport: 400 mm
Gesamtbreite	650 mm
Breite zusammengeklappt	290 mm
Gesamthöhe	805 - 930 mm
Höhe im zusammengeklappten Zustand	805 mm Für dem Transport: 670 mm
Höhe der Handgriffe	805 - 930 mm
Empfohlene Körpergröße	1550 - 1850 mm
Abstand zwischen den Handgriffen	460 mm
Sitzhöhe	610 mm
Sitzbreite	450 mm
Sitztiefe	200 mm
Gesamtgewicht - ohne Korb	7,25 kg 7,2 kg
Durchmesser Räder Vorder Hinter	8" 7"
Bremsen	Betriebsbremse und Feststellbremse
Wendekreis	1310 mm
Temperaturbereich für Lagerung und Nutzung	+5°C - +41°C
Luftfeuchtigkeitsbereich für Lagerung und Nutzung	30% - 70%
Technische Änderungen vorbehalten. Messtoleranzen +/- 15 mm / 1,5 kg / 1,5°	

Sommario

Premessa	74
1. Il prodotto	75
2. Prima dell'uso	76
2.1. Uso previsto e indicazioni	76
2.2. Istruzioni di sicurezza e rischi applicabili	77
2.3. Simboli presenti sul deambulatore	78
2.4. Alla consegna	79
2.5. Spedizione e magazzinaggio	79
3. Montaggio/smontaggio e regolazioni	80
3.1. Montaggio	80
3.2. Smontaggio	80
3.3. Montaggio della borsa portaogetti	81
3.4. Montaggio/smontaggio dello schienale	82
3.5. Regolazioni dell'altezza	82
4. Uso del deambulatore	83
4.1. Sistema frenante	83
4.2. Chiusura / Apertura	85
4.3. Affrontare i cordoli	85
4.4. Sedersi, alzarsi in piedi e camminare	86
5. Manutenzione	87
5.1. Pulizia	87
5.2. Disinfezione	87
5.3. Ispezione / assistenza / riparazioni	87
5.4. Utilizzi successivi	88
5.5. Smaltimento	88
5.6. Garanzia	89
6. Specifiche tecniche	89

Premessa

Congratulazioni Ora possiede un deambulatore Vermeiren!

Grazie per la fiducia accordata ai prodotti Vermeiren. Questo manuale viene fornito come supporto per l'uso del deambulatore e delle sue opzioni operative. Leggerlo attentamente, in quanto aiuta a familiarizzarsi con il funzionamento, le prestazioni e le limitazioni del deambulatore.

Per eventuali ulteriori domande successive alla lettura di questo manuale, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato, che sarà lieto di fornire un supporto.

Nota importante

Per garantire la propria sicurezza e prolungare la durata del prodotto, trattarlo con cura e farlo controllare e/o sottoporlo a manutenzione con regolarità.

Questo manuale rispecchia gli sviluppi più recenti del prodotto. Vermeiren si riserva il diritto di introdurre modifiche di questo tipo di prodotto senza alcun obbligo di adattare o sostituire i prodotti analoghi consegnati in precedenza.

Le immagini del prodotto vengono utilizzate per chiarire le istruzioni. I dettagli del prodotto mostrato possono essere diversi da quelli del prodotto in uso.

Informazioni disponibili

Sul sito Web di Vermeiren, all'indirizzo <http://www.vermeiren.com/>, è sempre disponibile la versione più recente delle informazioni indicate di seguito. Visitare con regolarità tale sito per verificare l'esistenza di eventuali aggiornamenti.

Le persone ipovedenti possono scaricare la versione elettronica di questo manuale e farlo leggere da un software applicativo di sintesi vocale.



Manuale di istruzioni
Per l'utente e il rivenditore specializzato



Manuale di assistenza per le deambulatori
Per il rivenditore specializzato



Dichiarazione di conformità CE

1. Il prodotto



1. Impugnature
2. Leva del freno
3. Schienale
4. Sedile
5. Borsa portaoggetti
6. Ruote anteriori
7. Ruote posteriori
8. Cavo del freno
9. Leva di inclinazione
10. Riflettori
11. Supporto per bastone da passeggio
12. Targhetta di identificazione

2. Prima dell'uso

2.1. Uso previsto e indicazioni

- L'ausilio è un prodotto medicale.
- Indicazioni e controindicazioni: Il deambulatore è studiato per supportare il funzionamento delle gambe durante la deambulazione. Non utilizzarlo se si soffre di altre limitazioni fisiche, come debolezza delle braccia, disturbi dell'equilibrio e così via, vista compromessa, perdita degli arti, in grado di causare un uso non sicuro del deambulatore.
- Il deambulatore è progettato e realizzato esclusivamente per l'uso come ausilio per la deambulazione di una sola persona di peso non superiore a 130 kg.
- Il deambulatore compensa l'assenza di un sostegno adeguato da parte delle gambe dell'utente, che deve appoggiarsi o spostarsi con esso servendosi degli arti superiori o del busto. Il deambulatore offre un maggior livello di stabilità, supporto e sicurezza durante la deambulazione.
- È possibile utilizzare il deambulatore al coperto e all'aperto.
- Esso non è destinato al trasporto di merci e/o di persone in più oltre all'utente. Inoltre, non deve essere utilizzato come ausilio per il trasporto da seduti.
- Esso deve essere utilizzato soltanto su superfici sulle quali tutte le quattro ruote tocchino il suolo. Non utilizzare il deambulatore su terreni pietrosi, irregolari o sabbiosi, o in punti con una forte inclinazione. Il deambulatore può diventare instabile. Per camminare con il deambulatore, scegliere aree piane e stabili e cordoli smussati.
- La garanzia del prodotto presuppone un uso e una manutenzione normali del medesimo, come descritti in questo manuale. I danni al prodotto dovuti a uso improprio o manutenzione carente causano la decadenza della garanzia.
- Verificare tutti i dettagli tecnici e le limitazioni del deambulatore nel §6..

2.2. Istruzioni di sicurezza e rischi applicabili

ATTENZIONE

Rischio di lesioni

- Leggere e osservare le istruzioni contenute in questo manuale. In caso contrario, è possibile ferirsi o danneggiare il prodotto.

Durante l'uso, tenere presenti le seguenti avvertenze generali:

- Verificare che nessuna pietra o altro oggetto blocchi le ruote del deambulatore.
- Prima di utilizzare il deambulatore come ausilio per alzarsi in piedi, accertarsi che entrambe le leve dei freni si trovino in posizione di parcheggio. È opportuno sbloccare i freni di parcheggio soltanto una volta che si sia in piedi in modo confortevole e stabile.
- Durante la deambulazione, tenere entrambe le mani sulle impugnature.
- Non dimenticare che alcune parti del deambulatore possono diventare molto calde o fredde a causa della temperatura ambiente, della radiazione solare e di dispositivi di riscaldamento. Prestare attenzione quando si tocca la carrozzina.
- Prima di ogni utilizzo, verificare che le regolazioni dell'altezza siano saldamente bloccate; vedere il §3.5..
- Non afferrare le impugnature con le mani bagnate. In caso contrario si possono perdere la presa e l'equilibrio.
- Non utilizzare il deambulatore nel traffico. Rimanere sempre sul marciapiede.
- Prendere nota delle istruzioni per la cura e la manutenzione. Il produttore declina ogni responsabilità per danni dovuti a errori di manutenzione/cura.

Qualsiasi incidente grave [MDR (UE) 2017/745 §2 (65)] che si sia verificato in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utente e/o il paziente.

Prestare attenzione alla possibilità che il deambulatore può interferire con alcuni tipi di sistemi antifurto, a seconda delle impostazioni utilizzate. Ciò può fare scattare l'allarme dei negozi.

2.3. Simboli presenti sul deambulatore

- i** La targhetta di identificazione è situata sulla gamba posteriore sinistra, sul lato interno del telaio

	Peso massimo dell'utente, in kg
	Indicazione del modello
	Codice prodotto
	Numero di serie
	Dispositivo medico
	Produttore
	Data di produzione
	Dichiarazione di conformità
	Attenzione: informazioni importanti
	Si consiglia di leggere il manuale

2.4. Alla consegna

Disimballare il prodotto e verificare che sia completo. Devono essere presenti i seguenti articoli:

- Telaio base con sedile, 4 ruote
- Impugnature con freni
- Borsa portaoggetti
- Supporto per bastone da passeggio
- Schienale
- Manuale

Verificare che il prodotto non presenti danni dovuti al trasporto. Se si rilevano danni dopo la consegna, rivolgersi al trasportatore.

2.5. Spedizione e magazzinaggio

La spedizione e il magazzinaggio del deambulatore devono avvenire come indicato nelle specifiche tecniche riportate nel §6.. Avere cura di immagazzinare il deambulatore in un luogo asciutto.

Fornire una copertura o un imballaggio sufficienti a proteggere il deambulatore da ruggine e corpi estranei (ad esempio acqua salata, aria di mare, sabbia e polvere).

Per evitare danni, accertarsi che sul deambulatore, o contro il medesimo, non sia immagazzinato alcun oggetto.

3. Montaggio/smontaggio e regolazioni

ATTENZIONE

Rischio di lesioni

- Tenere dita, fibbie, gioielli e indumenti lontani dal meccanismo di piegatura.

3.1. Montaggio

1. Allentare le fasce in velcro.
2. Appoggiare il deambulatore su un fianco.
3. Muovere la ruota posteriore verso il basso finché i fori non sono posizionati uno sopra l'altro.
4. Montare la manopola a stella **(2)**. Assicurarsi che sia ben fissato.
5. Muovere la ruota anteriore verso il basso finché i fori non sono posizionati uno sopra l'altro.
6. Montare la manopola a stella **(5)**. Assicurarsi che sia ben fissato.
7. Ripetere l'operazione per l'altro lato.
8. Montare lo schienale; vedere il **§3.4.**
9. Aprire il deambulatore; vedere il **§4.2.**

3.2. Smontaggio

1. Piegare il deambulatore; vedere il **§4.2.**
2. Rimuovere la manopola a stella **(5)**.
3. Ripiegare la ruota anteriore verso l'alto.
4. Rimuovere la manopola a stella **(2)**.
5. Ripiegare il telaio / la ruota posteriore verso l'alto **(3)**.
6. Assicurare la ruota / il telaio posteriore al telaio delle impugnature con le strisce in velcro.
7. Ripetere l'operazione per l'altro lato.



3.3. Montaggio della borsa portaoggetti

⚠ ATTENZIONE

Rischio di caduta o di ribaltamento

- Non sovraccaricare la borsa portaoggetti.

Il peso massimo che la borsa è in grado di trasportare è riportato nel §6..

La borsa per gli acquisti **(6)** deve essere montata sul lato anteriore. Montare la borsa con i passanti **(7)** ai tubi del telaio del sedile del deambulatore **(8)**.



3.4. Montaggio/smontaggio dello schienale

⚠ ATTENZIONE

Rischio di caduta

- Prima di utilizzare il sedile, assicurarsi che la fascia dello schienale **(9)** sia ben fissata al telaio. Verificare che tutte le viti, i bulloni e i dadi della fascia **(9)** siano ben serrati.

È possibile montare facilmente la fascia e il supporto spingendone la base sulla parte sporgente del telaio; vedere la figura. Spingere verso il basso fino al fondo e stringere la vite **(10)**.

Per smontare i componenti, allentare la vite e farne scorrere nuovamente la base verso l'alto fino a quando si sfilava dal supporto.



3.5. Regolazioni dell'altezza

⚠ ATTENZIONE

Rischio di caduta o di ribaltamento

- Fissare saldamente le maniglie prima di utilizzare il rollator.
- Non superare la regolazione minima o massima indicata sulle impugnature. Il deambulatore non è più stabile.

⚠ ATTENZIONE


Rischio di danni

- Non tirare troppo in alto le impugnature, per evitare di danneggiare il cavo del freno.

È possibile variare l'altezza del deambulatore regolando le impugnature:

1. Portare il deambulatore nella modalità di parcheggio; vedere il §4.1..
2. Tenere premuto il pulsante a molla (11).
3. Regolare le maniglie di spinta all'altezza desiderata (6 posizioni diverse: intervalli di 25 mm). Verificare che il cavo del freno non si attorcigli attorno al porta stampella.
4. Verificare che il perno a molla (11) sia ben posizionato nel foro.
5. Tirare verso l'alto l'impugnatura e spingerla verso il basso per verificare che sia bloccata.
6. Regolare l'altra impugnatura allo stesso modo. Verificare che le impugnature si trovino entrambe alla stessa altezza.

i Quando sono diritte, le impugnature devono trovarsi all'altezza dei polsi. Lasciare pendere le braccia.

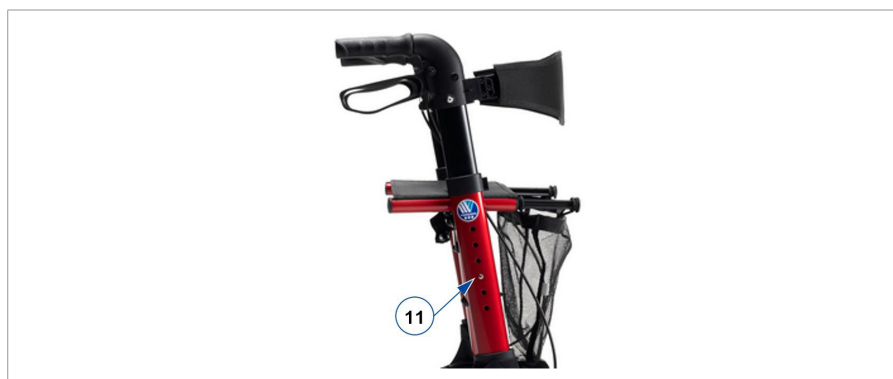

4. Uso del deambulatore

4.1. Sistema frenante

ATTENZIONE

Rischio di caduta

- Per garantire la propria sicurezza, verificare il funzionamento dei freni. Le condizioni del sistema frenante sono influenzate dalla presenza di usura, olio e altri contaminanti sulle ruote posteriori e sul meccanismo di frenata.

Il deambulatore è dotato di freni azionati da due apposite leve **(15)**. È possibile utilizzare le leve dei freni in due modalità di frenata, vale a dire esercizio e parcheggio.


⚠ ATTENZIONE

Rischio di danni

- Non spingere il deambulatore con una forza eccessiva mentre si utilizzano i freni nella modalità di esercizio. Ciò può danneggiare gli pneumatici o i freni.

Per utilizzare i freni nella modalità di esercizio, tirare simultaneamente entrambe le leve dei freni **(15)** verso l'alto [A] con un movimento di compressione. Per interrompere la frenatura, rilasciare le leve dei freni.

Per utilizzare i freni di parcheggio, spingere entrambe le leve dei freni **(15)** verso il basso nella posizione bloccata [B]. Utilizzare sempre simultaneamente entrambi i freni di parcheggio. Per uscire dalla modalità di parcheggio, tirare simultaneamente entrambe le leve dei freni verso l'alto.

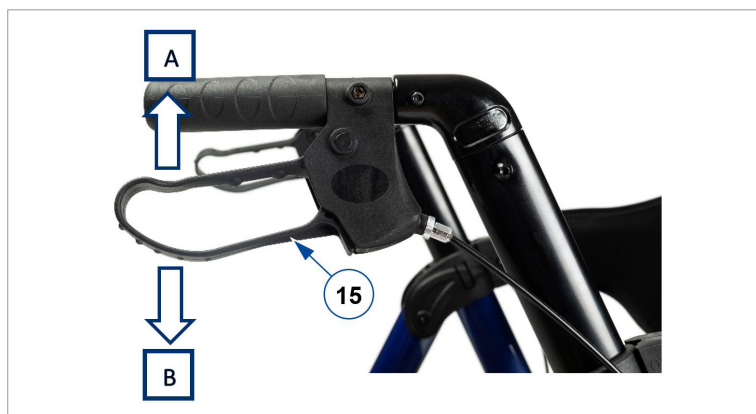

4.2. Chiusura / Apertura

ATTENZIONE

Rischio di intrappolamento

- Tenere dita, fibbie, gioielli e indumenti lontani dal meccanismo di piegatura.

ATTENZIONE

Rischio di caduta

- Verificare che il deambulatore sia completamente aperto e che il telaio sia bloccato.

4.2.1. Apertura del deambulatore

1. Se necessario dopo il trasporto o il magazzinaggio, montare il deambulatore; vedere il §3..
2. Spingere leggermente le impugnature per aprire il deambulatore.
3. Premere i lati del sedile verso il basso con entrambe le mani. Continuare a premere sui tubi del telaio fino a quando esso non si blocca, come indicato da un clic.
4. Verificare che il telaio sia bloccato spingendo le impugnature l'una verso l'altra.
5. Regolare l'altezza delle impugnature, vedere il §3.5..

4.2.2. Chiusura del deambulatore


1. Rimuovere il bastone da passeggio e la borsa per gli acquisti.
2. Tirare il sedile verso l'alto per la cinghia.
3. Spingere le impugnature l'una verso l'altra per chiudere il telaio.
4. Per il trasporto e lo stoccaggio, smontare ulteriormente il deambulatore; vedere il §3.2..

4.3. Affrontare i cordoli

ATTENZIONE

Rischio di caduta

- Affrontare i cordoli perpendicolarmente, con entrambe le ruote anteriori allineate con il cordolo. Tenere il deambulatore vicino a sé.

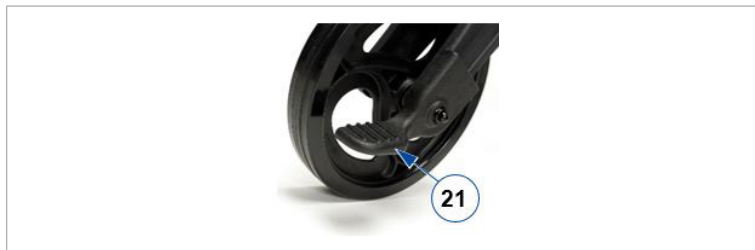

Per facilitare il superamento di piccoli ostacoli, come i cordoli, il deambulatore è dotato di una leva di inclinazione sulle due ruote posteriori.

1. Verificare di essere stabili in posizione eretta, afferrando allo stesso tempo entrambe le impugnature.
2. Premere con un piede la leva di inclinazione **(21)** per sollevare le ruote anteriori.
3. Mantenere il deambulatore in tale posizione servendosi delle impugnature, quindi e avanzare lentamente fino a quando le ruote anteriori si trovano sul cordolo.
4. A questo punto, sollevare le impugnature e avanzare fino a portare le ruote posteriori sul cordolo.
5. Quando il deambulatore raggiunge una posizione stabile, affrontare a propria volta il cordolo.

4.4. Sedersi, alzarsi in piedi e camminare

ATTENZIONE

Rischio di caduta

- Prima di sedersi sul deambulatore, accertarsi che entrambe le leve dei freni si trovino nella posizione di parcheggio; vedere il §4.1.. Mantenere le leve dei freni in tale posizione fino a quando non si riprende a camminare. Tenere i piedi fra le ruote posteriori.
 - Non spingere il deambulatore da seduti.
1. Spingere entrambe le leve dei freni verso il basso, fino alla posizione di parcheggio.
 2. Appoggiandosi alle impugnature, voltarsi e accomodarsi sul sedile.
 3. Per rialzarsi, appoggiarsi alle impugnature e voltarsi.
 4. Tirare entrambe le leve dei freni verso l'alto e utilizzare i freni nella modalità di esercizio.
 5. Rilasciare le leve dei freni e avanzare di un passo con il deambulatore vicino al corpo.

5. Manutenzione

- i** Una cura regolare garantisce che il deambulatore rimanga in perfette condizioni di funzionamento. Per il manuale di manutenzione, fare riferimento al sito Web di Vermeiren all'indirizzo www.vermeiren.com.

5.1. Pulizia

Per pulire il deambulatore, utilizzare un panno morbido inumidito con acqua tiepida e un detergente delicato per la casa. Non immergere il deambulatore. Non utilizzare detergenti abrasivi per la pulizia.

5.2. Disinfezione

ATTENZIONE

Rischio di danni

- La disinfezione deve essere eseguita esclusivamente da personale con un'opportuna formazione. Consultare il proprio rivenditore specializzato.

Per pulire il deambulatore, utilizzare un panno morbido inumidito con acqua tiepida e un disinfettante delicato per la casa.

5.3. Ispezione / assistenza / riparazioni

La durata media prevista del vostro deambulatore è di 5 anni. La durata del deambulatore è influenzata dalle modalità di uso, stoccaggio, manutenzione, assistenza e pulizia.

Prima di riprendere a utilizzare il deambulatore, occorre ispezionarlo in relazione ai seguenti punti:

- Completezza.
- Meccanismo di chiusura: funzionamento corretto.
- Bulloni e dadi: fissati saldamente.
- Freni: funzionamento corretto.
- Ruote (stabilità, direzione e viti di fissaggio).
- In caso di contatto regolare con fili, capelli o altri residui, è possibile che le ruote si blocchino. Verificare con regolarità che le ruote ruotino liberamente e siano in buone condizioni.
- Telaio (deformazione, stabilità e collegamenti).
- Impugnature (bloccaggio sicuro del sistema di regolazione dell'altezza e supporto adeguato delle impugnature).
- Sedile, schienale e borsa portaoggetti (usura o danni).

Il deambulatore è costruito con componenti in alluminio e plastica. Consigliamo di far ispezionare il rollator almeno una volta all'anno, ma la frequenza di assistenza dipende dalla frequenza e dall'intensità dell'uso. Consultare il proprio rivenditore autorizzato per accordarsi sulla frequenza di assistenza.

Riparazioni e sostituzioni devono essere eseguite esclusivamente da personale con un'opportuna formazione e utilizzando unicamente ricambi originali Vermeiren.

Non esitare a utilizzare i servizi offerti dal proprio concessionario autorizzato. Che sarà lieto di fornire un supporto per l'assistenza e le riparazioni.

5.4. Utilizzi successivi

Prima di ogni riutilizzo, disinfettare il deambulatore, verificarlo e fare la manutenzione come indicato in **§5.1.** e **§5.2.**

5.5. Smaltimento

A fine vita, occorre smaltire il deambulatore conformemente alla legislazione ambientale locale. Il modo migliore per farlo consiste nello smontare il deambulatore per agevolare il trasporto dei componenti riciclabili.

5.6. Garanzia

La garanzia di questo prodotto è soggetta ai termini e alle condizioni generali di ogni paese.

6. Specifiche tecniche

I dettagli tecnici riportati di seguito sono validi soltanto per il deambulatore oggetto del manuale, con le impostazioni standard e in condizioni ambiente ottimali. Durante l'uso, tenere conto di questi dati di dettaglio.

Marchio	Vermeiren
	Deambulatore
Tipo	Quadri-Light
Descrizione	Dimensioni
Peso massimo dell'utente	130 kg
Peso massimo del carico della borsa portaoggetti	5 kg
Lunghezza complessiva	700 mm
Lunghezza in configurazione ripiegata	700 mm Per trasporto: 400 mm
Larghezza complessiva	650 mm
Larghezza ripiegata	290 mm
Altezza complessiva	805 - 930 mm
Altezza ripiegata	805 mm Per trasporto: 670 mm
Altezza delle impugnature	805 - 930 mm
Altezza persona raccomandata	1550 - 1850 mm
Distanza fra le impugnature	460 mm
Altezza del sedile	610 mm
Larghezza del sedile	450 mm
Profondità del sedile	200 mm
Massa totale - senza cestino	7,25 kg 7,2 kg
La casa produttrice si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche. Tolleranza misurazioni +/- 15 mm / 1,5 kg / 1,5° .	

Marchio	Vermeiren
	Deambulatore
Tipo	Quadri-Light
Descrizione	Dimensioni
Diametro delle ruote	
Anteriori	8"
Posteriori	7"
Freni	Freni di esercizio e di parcheggio
Larghezza di svolta	1310 mm
Temperatura per utilizzo e conservazione	+5°C - +41°C
Umidità per utilizzo e conservazione	30% - 70%
La casa produttrice si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche. Tolleranza misurazioni +- 15 mm / 1,5 kg / 1,5° .	

Introducción	92
1. Su producto	93
2. Antes de su uso	94
2.1. Uso previsto y indicaciones	94
2.2. Instrucciones de seguridad y riesgos aplicables	95
2.3. Símbolos presentes en el andador	96
2.4. Entrega	97
2.5. Transporte y almacenamiento	97
3. Montaje/desmontaje y ajustes	98
3.1. Montaje	98
3.2. Desmontaje	98
3.3. Montaje de la bolsa de almacenamiento	99
3.4. Montar/Retirar el respaldo	100
3.5. Ajustes de altura	100
4. Uso del andador	102
4.1. Sistema de frenado	102
4.2. Plegado / Desplegado	103
4.3. Salvando bordillos	104
4.4. Sentarse, levantarse y caminar	105
5. Mantenimiento	105
5.1. Limpieza	105
5.2. Desinfección	106
5.3. Inspección / Mantenimiento / Reparación	106
5.4. Reutilizar	107
5.5. Desechar el producto	107
5.6. Garantía	107
6. Especificaciones técnicas	108

Introducción

¡Felicidades! Es usted el propietario de un andador Vermeiren!

Le agradecemos su confianza en los productos Vermeiren. Le ofrecemos este manual para ayudarle en la utilización de su andador y sus opciones de manejo. Léalo detenidamente. Le ayudará a familiarizarse con el manejo, las capacidades y limitaciones de su andador.

Si todavía tiene alguna duda después de leer este manual, contacte con su distribuidor especializado, estará encantado de ayudarle.

Nota importante

Para garantizar su seguridad y prolongar la vida útil de su producto, cuídalo bien y asegúrese de realizar revisiones y mantenimientos de manera regular.

Este manual refleja los desarrollos más recientes del producto. Vermeiren se reserva el derecho a implementar cambios en este tipo de producto sin que ello suponga obligación alguna de adaptar o cambiar productos similares previamente entregados.

Hay imágenes del producto para ayudar a explicar las instrucciones. Los detalles del producto mostrado pueden variar con su producto.

Información disponible

En nuestro sitio web <http://www.vermeiren.com/> siempre encontrará la versión más reciente de la siguiente información. Consulte este sitio web de manera regular para estar al tanto de posibles actualizaciones.

Las personas con discapacidad visual pueden descargarse la versión electrónica del manual y utilizar un software de síntesis de voz para poder oír su contenido.



Manual de instrucciones
Para el usuario y el distribuidor especializado



Manual de mantenimiento para andadores
Para el distribuidor especializado



Declaración CE de conformidad

1. Su producto



1. Empuñaduras
2. Palanca de freno
3. Respaldo
4. Asiento
5. Bolsa de almacenamiento
6. Ruedas delanteras
7. Ruedas traseras
8. Cable de los frenos
9. Palanca de inclinación
10. Reflectores
11. Sujetabastones
12. Placa de identificación

2. Antes de su uso

2.1. Uso previsto y indicaciones

- Este producto es un dispositivo médico.
- Indicaciones y contraindicaciones: El andador está pensado como apoyo para la función de las piernas al andar. No utilice el andador si tiene otras discapacidades físicas por las que su uso podría suponer un riesgo, como brazos débiles, trastornos del equilibrio, visión deficiente, pérdida de extremidades, etc.
- El andador está diseñado exclusivamente como un instrumento de ayuda para andar para una persona con un peso máximo de 130 kg.
- Al apoyar o mover las partes superiores del cuerpo o el tronco encima del andador, este compensa la capacidad o la fuerza reducidas de las partes inferiores del cuerpo. Además, el andador asegura un apoyo más óptimo y más seguridad.
- El andador puede usarse tanto en el interior como en el exterior.
- El andador no es apto para transportar cosas o a más de una persona que no sea el usuario. Tampoco está diseñado para ser utilizado como ayuda de transporte mientras se está sentado.
- Sólo debe usarse sobre una superficie plana en la que las cuatro ruedas estén en contacto con el suelo. No utilizar el andador sobre terreno rocoso, irregular o arenoso, o en lugares con pendientes empinadas, ya que el andador puede desestabilizarse. Circule siempre con su andador por suelos planos y estables y por bordillos biselados.
- La garantía de este producto se basa en el uso y mantenimiento normales descritos en este manual. La garantía se invalida si el producto sufre cualquier daño causado por un uso indebido o falta de mantenimiento.
- Consulte los detalles técnicos y las limitaciones del andador en §6..

2.2. Instrucciones de seguridad y riesgos aplicables

PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones

- Lea y siga las instrucciones contenidas en este manual. De no seguirlas, puede acabar lesionándose a sí mismo, o acabar rompiendo el producto.

Tener en cuenta las siguientes advertencias durante su utilización:

- Asegurarse de que no haya piedras u otros elementos que estén bloqueando las ruedas del andador.
- Asegurarse de que ambos frenos de estacionamiento estén echados antes de usar el andador para ponerse de pie. Una vez que el usuario se sienta cómodo y estable, pueden quitarse los frenos de estacionamiento.
- Mantener siempre ambas manos en las empuñaduras al andar con el andador.
- Téngase en cuenta que ciertas partes del andador pueden llegar a calentarse o enfriarse demasiado a causa de la temperatura ambiente, la luz del sol, equipos de calefacción, etc. Debe tener siempre cuidado al tocar el scooter.
- Comprobar que el ajuste de altura esté bien sujeto antes de cada uso, véase **§3.5.**
- No sujete las empuñaduras con las manos mojadas, ya que podría perder el equilibrio.
- No circular con el andador por la carretera, mantenerse siempre en la acera.
- Seguir las instrucciones de lavado y control. El fabricante no se hace responsable de daños ocasionados por un mal mantenimiento o una mala inspección.

Cualquier incidente grave [MDR (UE) 2017/745 §2 (65)] que se produzca en relación con el producto deberá comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que resida el usuario y/o paciente.

Tener en cuenta que su andador puede llegar a interferir con algunos sistemas antirrobo, dependiendo de la configuración que se use. Esto puede hacer que salte la alarma de las tiendas.

2.3. Símbolos presentes en el andador

 La placa de identificación está en la pata trasera izquierda en la parte interior del bastidor

	Peso máximo del usuario en kg
	Tipo de modelo
	Referencia
	Número de serie
	Dispositivo médico
	Fabricante
	Fecha de fabricación
	Declaración de conformidad
	Atención: información importante
	Se recomienda leer el manual

2.4. Entrega

Desembalar el producto y verificar que la entrega está completa. Las siguientes piezas vienen incluidas en la entrega:

- Bastidor base con asiento, 4 ruedas
- Empuñaduras con frenos
- Bolsa de almacenamiento
- Sujetabastones
- Respaldo
- Manual

Compruebe que el producto no haya sufrido daños durante el transporte. Si detectase algún defecto en el producto tras su entrega, contacte con el transportista.

2.5. Transporte y almacenamiento

El transporte y almacenamiento del andador debe llevarse a cabo según las especificaciones técnicas en §6.. Asegurarse de que el andador esté almacenado en un lugar seco.

Proteger el andador de la oxidación y materiales extraños (p. ej. agua salada, aire marino, arena, polvo) mediante una protección o un embalaje adecuado.

Asegurarse de que no haya otros objetos encima o apoyados en el andador durante el almacenamiento para prevenir daños.

3. Montaje/desmontaje y ajustes

PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones

- Mantener dedos, correas, joyas y vestimentas fuera del mecanismo de plegado.

3.1. Montaje

1. Aflojar las correas de Velcro.
2. Coloque el andador sobre su costado.
3. Baje la rueda trasera hasta que los orificios coincidan.
4. Monte el pomo de estrella **(2)**. Asegúrese de que está bien sujeto.
5. Baje la rueda delantera hasta que los orificios coincidan.
6. Monte el pomo de estrella **(5)**. Asegúrese de que está bien sujeto.
7. Repetir el proceso en el otro lado.
8. Montar el respaldo, véase **§3.4.**
9. Desplegar el andador, véase **§4.2.**

3.2. Desmontaje

1. Plegar el andador, véase **§4.2.**
2. Retire el pomo de estrella **(5)**.
3. Pliegue la rueda delantera hacia arriba.
4. Retire el pomo de estrella **(2)**.
5. Pliegue la rueda y el armazón traseros hacia arriba **(3)**.
6. Fijar el armazón y la rueda traseros con las correas de velcro al armazón de las empuñaduras.
7. Repetir el proceso en el otro lado.



3.3. Montaje de la bolsa de almacenamiento

⚠ PRECAUCIÓN

Riesgo de caída o volcado

- No llenar la bolsa de almacenamiento demasiado.

La capacidad de carga máxima de la bolsa de almacenamiento está descrita en §6..

La bolsa de compra (6) está diseñada para montarse en la parte delantera. Montar la cesta de la compra con las presillas (7) en los tubos del bastidor del asiento del andador (8).



3.4. Montar/Retirar el respaldo

⚠ PRECAUCIÓN

Riesgo de caída

- Antes de usar el asiento, asegúrese de que la cinta de respaldo (9) esté bien colocada. Comprobar que todos los tornillos, pernos y tuercas de la cinta (9) estén bien atornillados.

La cinta y el sujetabastones pueden montarse fácilmente colocando la base sobre la pieza sobresaliente del soporte que se encuentra en el bastidor, véase la figura. Apretar la base hasta el fondo y apriete el tornillo (10).

Para desmontarla, afloje el tornillo y tirar de la base hacia arriba para que se deslice del soporte.



3.5. Ajustes de altura

⚠ PRECAUCIÓN

Riesgo de caída o volcado

- Fije firmemente las empuñaduras antes de usar el andador.
- No sobrepase el ajuste máximo y mínimo indicado en los mangos de la empuñadura; de lo contrario, su andador dejará de ser estable.

⚠ PRECAUCIÓN

Riesgo de daños

- No levantar las empuñaduras demasiado alto para que no se dañe el cable de los frenos.

Se puede cambiar la altura del andador ajustando las empuñaduras:

1. Echar el andador en modo estacionamiento (véase §4.1.).
2. Mantener pulsado el botón de resorte (11).
3. Ajuste la empuñadura hasta la altura deseada (6 posiciones diferentes: escalones de 25 mm). Compruebe que el cable de los frenos no pueda atascarse alrededor del soporte de la muleta.
4. Compruebe que el pasador (11) queda firmemente fijado en el agujero con un clic.
5. Tirar de la empuñadura hacia arriba y empujarla hacia abajo para comprobar que está bloqueada.
6. Ajustar la otra empuñadura de la misma manera. Asegurarse de que ambas empuñaduras estén a la misma altura.

i Si se pone de pie y derecho, las empuñaduras deben estar a la altura de sus muñecas. Dejar sueltos los brazos.



4. Uso del andador

4.1. Sistema de frenado

PRECAUCIÓN

Riesgo de caída

- Para garantizar su seguridad, controle el funcionamiento de los frenos. El estado del sistema de frenado se puede ver afectado por desgaste y la presencia de aceite o suciedad en las ruedas traseras y en el mecanismo de frenado.

El andador lleva frenos que se pueden manejar con las dos palancas de freno **(15)**. Las palancas de freno pueden usarse de dos maneras: como freno normal o como freno de estacionamiento.


PRECAUCIÓN

Riesgo de daños

- No empujar el andador demasiado fuerte mientras se usan los frenos normales. Esto puede ocasionar daños a las ruedas o los frenos.

Para usar el freno normal, tirar hacia arriba de ambas palancas de freno **(15)** a la vez [A] apretándolas. Para dejar de frenar, soltar las palancas de freno.

Para usar el freno de estacionamiento, tirar hacia abajo de ambas palancas de freno **(15)** hasta que queden bloqueadas [B]. Usar siempre ambos frenos de estacionamiento a la vez. Para salir de la posición de estacionamiento, tirar hacia arriba de ambas palancas de freno a la vez.

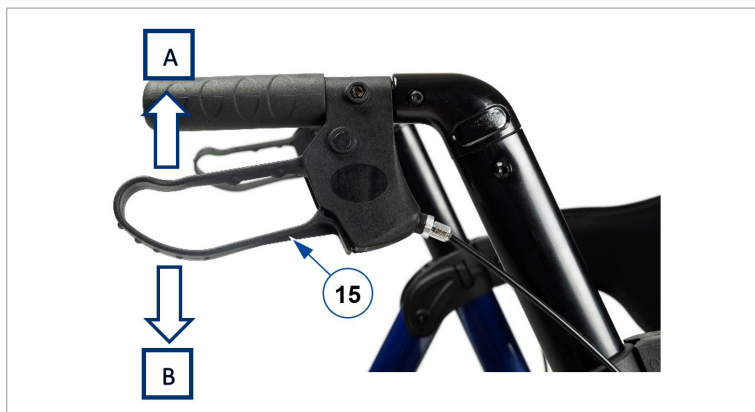

4.2. Plegado / Desplegado

⚠ PRECAUCIÓN

Riesgo de aprisionamiento

- Mantener dedos, correas, joyas y vestimentas fuera del mecanismo de plegado.

⚠ PRECAUCIÓN

Riesgo de caída

- Comprobar que el andador está completamente desplegado y que el bastidor esté bloqueado.

4.2.1. Despliegue del andador

1. Si fuera necesario después del transporte o almacenamiento, montar el andador, véase §3..
2. Empujar ligeramente las empuñaduras para desplegar el andador.
3. Empujar hacia abajo los costados del asiento con las dos manos. Seguir empujando los soportes del bastidor hasta que se bloquee. Si se hace correctamente, se oír un clic.
4. Comprobar que el bastidor esté bloqueado empujando las empuñaduras hacia adentro.
5. Ajuste los empuñaduras a la altura deseada, véase §3.5..

4.2.2. Plegado del andador


1. Retirar el bastón y la bolsa.
2. Tirar del asiento hacia arriba con la correa.
3. Empujar las empuñaduras hacia adentro para cerrar el bastidor.
4. Para el transporte y almacenamiento, desmontar más el andador, véase §3.2..

4.3. Salvando bordillos

PRECAUCIÓN

Riesgo de caída

- Salvar los bordillos de manera recta, con ambas ruedas alineadas con el bordillo. Mantener el andador cerca.

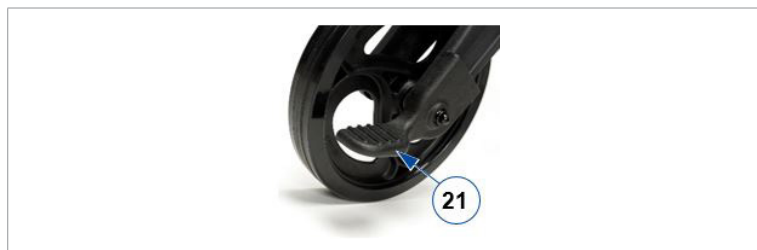

Para facilitar la toma de pequeños obstáculos, como los bordillos, el andador está equipado con una palanca de inclinación en las dos ruedas traseras.

1. Asegurarse de que se está posicionado de manera estable sujetando ambas empuñaduras.
2. Utilizar un pie para presionar la palanca de inclinación (21) para levantar las ruedas delanteras.
3. Mantener el andador en esa posición sujetando las empuñaduras y moverse lentamente hacia adelante hasta que las ruedas estén encima del bordillo.
4. Levantar las empuñaduras y moverse hacia delante para colocar las ruedas traseras encima del bordillo.
5. Cuando el andador esté en una posición estable, salvar el bordillo.

4.4. Sentarse, levantarse y caminar

PRECAUCIÓN

Riesgo de caída

- Asegurarse de que ambas palancas de freno están en la posición de estacionamiento antes de sentarse, véase §4.1.. Mantener las palancas de freno en esta posición hasta que vaya a volver a caminar. Mantener ambos pies entre las ruedas traseras.
 - No propulse el andador mientras.
1. Tirar ambas palancas de freno hacia abajo en la posición de estacionamiento.
 2. Apoyándose en las empuñaduras, darse la vuelta y sentarse en el asiento.
 3. Para volver a levantarse, apoyarse en las empuñaduras y darse la vuelta.
 4. Tirar de ambas palancas de freno hacia arriba y utilizar el freno normal.
 5. Soltar las palancas de frenos y caminar hacia delante con el andador cerca del cuerpo.

5. Mantenimiento

-  Un mantenimiento regular asegura que el andador permanezca en perfecto estado. Para consultar el manual de mantenimiento, visitar el sitio web de Vermeiren: www.vermeiren.com.

5.1. Limpieza

Utilizar un paño limpio y húmedo y agua templada con jabón doméstico suave para limpiar el andador. Evitar que las piezas se mojen demasiado. No utilice productos de limpieza abrasivos.

5.2. Desinfección

PRECAUCIÓN

Riesgo de daños

- La desinfección sólo puede llevarla a cabo personal debidamente cualificado. Consultar con su distribuidor especializado al respecto.

Utilizar un paño limpio y húmedo y agua templada con desinfectante doméstico suave para limpiar el andador.

5.3. Inspección / Mantenimiento / Reparación

La vida útil esperada del andador es de 5 años. La vida útil del andador se ve afectada por su uso, almacenamiento, mantenimiento y limpieza.

Antes de utilizar el andador, deben comprobarse los siguientes puntos:

- Integridad.
- Mecanismo de plegado: funciona bien.
- Tornillos y tuercas: Atornillados firmemente.
- Frenos: funcionan bien.
- Ruedas (estabilidad, rotación, tornillos de sujeción).
- Si las ruedas entran regularmente en contacto con hilos, pelos y otras fibras, podrían llegar a atascarse. Por tanto, comprobar regularmente que las ruedas pueden girar libremente y que están en buen estado.
- Bastidor (deformaciones, estabilidad, conexiones).
- Empuñadura (un bloqueo seguro del ajuste máximo de altura, buen soporte de las empuñaduras).
- Asiento, cinta de respaldo y bolsa (desgaste y daños).

Su andador está construido con componentes de aluminio y plástico. Recomendamos que inspeccionen su andador al menos una vez al año, pero la frecuencia de los mantenimientos depende de la frecuencia e intensidad de uso. Consulte con su distribuidor especializado para llegar a un acuerdo sobre la frecuencia de mantenimiento.

Cualquier reparación o cambios sólo pueden llevarse a cabo por personal debidamente cualificado y sólo pueden utilizarse piezas de recambio Vermeiren originales.

No dude en hacer uso de los servicios ofrecidos por su distribuidor especializado, estará encantado de ayudarle con el mantenimiento y las reparaciones.

5.4. Reutilizar

Antes de cada reutilización, desinfecte, inspeccione y repare el andador de acuerdo a las instrucciones en **§5.1.** y **§5.2.**

5.5. Desechar el producto

Al final de la vida útil, deberá desechar el andador siguiendo las leyes medioambientales de su localidad. Para transportar materiales reciclables del andador de manera más cómoda, se recomienda que se desmonte primero.

5.6. Garantía

La garantía de este producto está sujeta a las condiciones generales de cada país.

6. Especificaciones técnicas

Los datos técnicos expuestos a continuación son sólo válidos para este andador, con configuración estándar y en condiciones ambientales óptimas. Tener en cuenta estos datos durante la utilización de la silla para ducha.

Marca	Vermeiren
	Andador
Tipo	Quadri-Light
Descripción	Dimensiones
Peso máximo del usuario	130 kg
Peso de llenado máximo de la bolsa	5 kg
Longitud total	700 mm
Longitud plegado	700 mm Para el transporte: 400 mm
Anchura total	650 mm
Anchura plegada	290 mm
Altura total	805 - 930 mm
Altura plegada	805 mm Para el transporte: 670 mm
Altura de las empuñaduras	805 - 930 mm
Altura de usuario recomendada	1550 - 1850 mm
Distancia entre las empuñaduras	460 mm
Altura del asiento	610 mm
Anchura del asiento	450 mm
Profundidad del asiento	200 mm
Peso total - sin cesta	7,25 kg 7,2 kg
Diámetro de las ruedas Delantera Trasera	8" 7"
Frenos	Frenos normales y frenos de estacionamiento
Radio de giro	1310 mm
Temperatura de almacenamiento y de uso	+5°C - +41°C
Humedad de almacenamiento y de uso	30% - 70%
Nos reservamos el derecho a aplicar modificaciones técnicas. Tolerancia de la medida +- 15 mm/1,5 kg/1,5°	

Spis treści

Wstęp	110
1. Twój produkt	111
2. Przed użyciem	112
2.1. Przewidziane zastosowanie i wskazania	112
2.2. Instrukcja bezpieczeństwa i związane z nimi zagrożenia	113
2.3. Symbole na balkoniku	114
2.4. Przy dostawie	115
2.5. Wysyłka i przechowywanie	115
3. Montaż/demontaż i regulacje	116
3.1. Montaż	116
3.2. Demontaż	116
3.3. Montaż torby	117
3.4. Montaż/demontaż oparcia	118
3.5. Regulacja wysokości	118
4. Korzystanie z balkonika	120
4.1. Hamulec	120
4.2. Składanie / Rozkładanie	121
4.3. Wjeżdżanie na krawężniki	122
4.4. Siadanie, wstawanie i chodzenie	122
5. Konserwacja	123
5.1. Czyszczenie	123
5.2. Dezynfekcja	123
5.3. Kontrole / serwisowanie / naprawy	123
5.4. Ponowne użycie	124
5.5. Usuwanie odpadów	125
5.6. Gwarancja	125
6. Parametry techniczne	125

Wstęp

Gratulacje! Jesteś teraz właścicielem balkonika Vermeiren!

Dziękujemy za zaufanie firmie Vermeiren i jej produktom. Niniejsza instrukcja pomoże właścicielowi w eksploatacji balkonika i korzystaniu z jego opcji. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi. Pozwoli ona na zapoznanie się z działaniem, możliwościami i ograniczeniami balkonika.

W razie pytań, na które odpowiedzi nie ma w instrukcji, prosimy o kontakt z Państwem wyspecjalizowanym sprzedawcą. Sprzedawca chętnie służy pomocą.

Ważna uwaga

Aby zapewnić bezpieczeństwo i wydłużyć okres użytkowania produktu, prosimy o dbanie o niego oraz regularne dokonywanie przeglądów i serwisowanie.

Instrukcja obejmuje najnowsze rozwiązania zastosowane w produkcie. Firma Vermeiren ma prawo do wprowadzania zmian w produktach tego typu bez obowiązku adaptowania lub wymiany podobnych, poprzednio dostarczonych produktów.

Ilustracje produktu zamieszczone w instrukcji są wyłącznie poglądowe. Szczegóły prezentowanego produktu mogą się różnić od rzeczywistego produktu posiadanego przez użytkownika.

Dostępne informacje

W naszej witrynie internetowej <http://www.vermeiren.com/> zawsze znajduje się najnowsza wersja odpowiednich informacji. Prosimy regularnie odwiedzać witrynę, ponieważ możemy w niej zamieszczać zaktualizowane informacje.

Osoby z zaburzeniami wzroku mogą pobrać elektroniczną wersję niniejszej instrukcji i odsłuchać ją przy użyciu oprogramowania zamieniającego tekst na mowę.



Instrukcja obsługi
Dla użytkownika i wyspecjalizowanego sprzedawcy



Podręcznik serwisowy dla balkoników
Dla wyspecjalizowanego sprzedawcy

PL



Deklaracja zgodności WE

1. Twój produkt



1. Uchwyty
2. Dźwignia hamulca
3. Oparcie
4. Siedzisko
5. Torba
6. Przednie koła
7. Tylne koła
8. Linka hamulcowa
9. Dźwignia przechylania
10. Reflektory
11. Uchwyt na łaskę
12. Tabliczka znamionowa

2. Przed użyciem

2.1. Przewidziane zastosowanie i wskazania

- Ten produkt jest wyrobem medycznym.
- Wskazania i przeciwwskazania: Balkonik jest przeznaczony do wspomagania nóg podczas chodzenia. Nie używaj balkonika, jeśli masz inne ograniczenia fizyczne, które mogą sprawiać, że używanie balkonika nie będzie bezpieczne, np. słabe ramię, zaburzenia równowagi, upośledzenie wzroku, utrata części ciała ...
- Balkonik został zaprojektowany i jest produkowany wyłącznie w celu używania jako pomoc przy chodzeniu dla jednej osoby o maksymalnej wadze 130 kg.
- Balkonik kompensuje brak odpowiedniego wsparcia przez nogi, dzięki możliwości oparcia się na balkoniku lub poruszania wraz z nim, korzystając z siły rąk i klatki piersiowej. Balkonik zapewnia lepszą stabilność, wsparcie i bezpieczeństwo podczas chodzenia.
- Można go używać w pomieszczeniach i na zewnątrz.
- Nie jest przeznaczony do transportu towarów ani większej liczby osób niż użytkownik. Nie jest on również przeznaczony do użytku jako pomoc w transporcie w pozycji siedzącej.
- Należy korzystać z niego tylko na powierzchniach, na których wszystkie cztery koła dotykają podłoża. Nie należy używać balkonika w terenie skalistym, wyboistym lub piaszczystym, ani w miejscach o stromym nachyleniu. Mogłoby to spowodować brak stabilności balkonika. Spacer z balkonikiem należy odbywać na płaskich, stabilnych powierzchniach z fazowanymi krawężnikami.
- Gwarancja na produkt jest udzielona przy założeniu normalnego użytkowania i konserwacji, opisanych w niniejszej instrukcji. Uszkodzenie produktu spowodowane nieprawidłową eksploatacją lub brakiem konserwacji spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Należy zapoznać się z wszystkimi danymi technicznymi i ograniczeniami balkonika, które są podane w §6..

2.2. Instrukcja bezpieczeństwa i związane z nimi zagrożenia

UWAGA

Ryzyko obrażeń

- Należy przeczytać zalecenia podane w niniejszej instrukcji i postępować zgodnie z nimi. Niestosowanie się do tych zaleceń może spowodować uraz lub uszkodzenie produktu.

Podczas użytkowania należy pamiętać o ostrzeżeniach ogólnych:

- Sprawdź, czy kamienie lub inne przedmioty nie blokują kół balkonika.
- Przed użyciem balkonika jako pomocy przy wstawianiu sprawdź, czy obie dźwignie hamulców są w położeniu postojowym. Kiedy staniesz wygodnie i stabilnie, możesz odblokować hamulce postojowe.
- Podczas chodzenia trzymaj obiema dłońmi za rączki.
- Pamiętaj, że niektóre części balkonika mogą stać się bardzo gorące lub zimne ze względu na temperaturę otoczenia, promieniowanie słoneczne, urządzenia grzewcze itp. Dotykając ich, należy zachować ostrożność.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy regulatory wysokości są pewnie unieruchomione, patrz **§3.5.**
- Nie trzymaj rączek mokrymi rękami. To mogłoby spowodować utratę pewności chwytu i równowagi.
- Nie zjeżdżaj balkonikiem na jezdnię. Zawsze pozostawaj na chodniku.
- Przestrzegaj instrukcji konserwacji i serwisu. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane przez nieprawidłowe serwisowanie/konserwację.

Każdy poważny incydent [MDR (UE) 2017/745 **§2 (65)**], który miał miejsce w związku z urządzeniem, powinien zostać zgłoszony wytwórcy oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent ma siedzibę.

Korzystając z chodzika musisz być świadomym, że w zależności od użytych ustawień może on kolidować z niektórymi systemami antykradzieżowymi. Może to spowodować uruchomienie alarmu w sklepie.

2.3. Symbole na balkoniku

 Tabliczka znamionowa jest umieszczona na lewej tylnej nóżce po wewnętrznej stronie

	Maksymalna masa użytkownika w kg
	Oznaczenie typu
	Numer artykułu
	Numer seryjny
	Wyrób medyczny
	Producent
	Data produkcji
	Deklaracja zgodności
	Uwaga: ważna informacja
	Zaleca się przeczytanie instrukcji

2.4. Przy dostawie

Dostarczony produkt należy rozpakować i sprawdzić, czy zawiera wszystkie elementy. Powinny zostać dostarczone następujące elementy:

- Rama podstawy z siedziskiem, 4 koła
- Rączki z hamulcami
- Torba
- Uchwyt na łaskę
- Oparcie
- Instrukcja

Proszę sprawdzić wyrób pod kątem zniszczeń w transporcie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń po dostawie, należy się skontaktować z przewoźnikiem.

2.5. Wysyłka i przechowywanie

Transport i przechowywanie balkonika powinny się odbywać zgodnie z parametrami technicznymi w §6.. Upewnij się, że balkonik jest przechowywany w stanie suchym.

Należy zapewnić dostateczną osłonę lub opakowanie, aby chronić balkonik przed korozją i ciałami obcymi (np. morską wodą, morskim powietrzem, piaskiem, pyłem).

Należy zadbać o to, aby nad balkonikiem lub obok niego nie znajdowały się żadne przedmioty, które mogłyby go uszkodzić.

3. Montaż/demontaż i regulacje

UWAGA

Ryzyko obrażeń

- Nie zbliżać palców, klamer, biżuterii ani ubrań do mechanizmu składania.

3.1. Montaż

1. Poluzować paski na rzepy.
2. Ułożyć balkonik na boku.
3. Opuścić tylne koło tak, aby otwory pokryły się ze sobą.
4. Zamontować wkręt gwiazdkowy **(2)**. Upewnić się, że jest dobrze zamocowany.
5. Opuścić przednie koło tak, aby otwory pokryły się ze sobą.
6. Zamontować wkręt gwiazdkowy **(5)**. Upewnić się, że jest dobrze zamocowany.
7. Powtórzyć to samo dla drugiej strony.
8. Zamontuj oparcie, patrz **§3.4.**.
9. Rozłóż balkonik, patrz **§4.2.**.

3.2. Demontaż

1. Składanie balkonik, patrz **§4.2.**.
2. Wymontować wkręt gwiazdkowy **(5)**.
3. Podnieść przednie koła.
4. Wyjąć wkręt gwiazdkowy **(2)**.
5. Złożyć ramę tylną/tylne koła, podnosząc ją/je **(3)**.
6. Przymocować ramę tylną/koło tylne rzepami do ramy uchwyty.
7. Powtórzyć to samo dla drugiej strony.



3.3. Montaż torby

UWAGA

Ryzyko upadku lub przewrócenia

- Nie przeładuj torby.

Maksymalne obciążenie torby jest podane w §6..

Torba na zakupy (6) montuje się na przedniej części ramy. Do montażu koszyka służą dwa łączniki (7), które zakłada się na rurki siedziska rolatora (8).



3.4. Montaż/demontaż oparcia

UWAGA

Ryzyko upadku

- Przed użyciem siedziska upewnij się, że pas oparcia (9) jest dobrze przymocowany do ramy. Sprawdź, czy wszystkie śruby, wkręty i nakrętki pasa (9) są dobrze dokręcone.

Pas i uchwyt można łatwo założyć, nasuwając jego zaczep na wystającą część wspornika na ramie, patrz przykład na rysunku. Wciskaj go w dół i dokręć śrubę (10).

Aby zdjąć pas, należy poluzować śrubę i przesunąć jego zaczep do góry, aż wysunie się ze wspornika.



3.5. Regulacja wysokości

UWAGA

Ryzyko upadku lub przewrócenia

- Dobrze umocuj ręczki przed użyciem balkonika.
- Nie przekraczać minimalnej lub maksymalnej regulacji wskazanej na uchwytach. Twój balkonik nie będzie już stabilny.

UWAGA


Ryzyko uszkodzenia

- Nie podciągaj rączek zbyt wysoko, aby nie uszkodzić linki hamulcowej.

Można zmienić wysokość balkonika, odpowiednio ustawiając ręczki:

1. Ustaw balkonik w trybie parkingowym, patrz §4.1..
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ze sprężyną (11).
3. Przesuń uchwyt do pożądanej przez ciebie wysokości. (6 różnych pozycji: miarka co 25 mm). Sprawdź, czy linka hamulca nie zawija się wokół uchwytu na kule.
4. Sprawdź czy sprężynka zabezpieczająca (11) kliknęła i znalazła się w prawidłowym otworze.
5. Pociągnij uchwyt do góry i naciśnij go w dół, aby sprawdzić, czy jest zablokowany.
6. W taki sam sposób ustaw drugą ręczkę. Sprawdź, czy ręczki są na tej samej wysokości.

i Kiedy stoisz prosto, uchwyty powinny być na tej samej wysokości co nadgarstki. Opuść luźno ramiona.

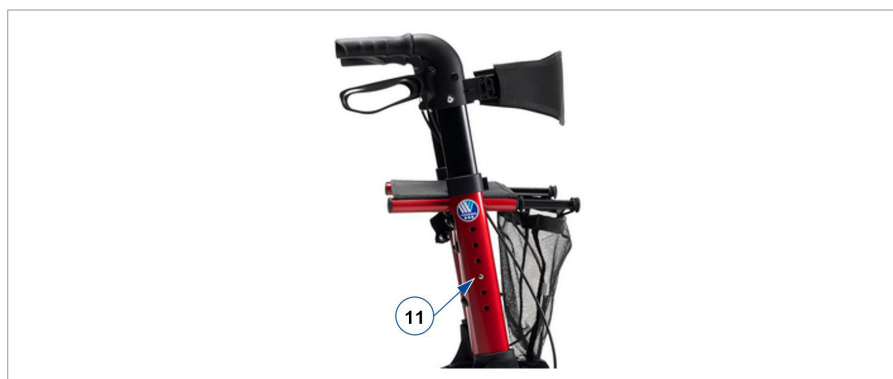

4. Korzystanie z balkonika

4.1. Hamulec

UWAGA

Ryzyko upadku

- Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, sprawdź działanie hamulców. Na stan układu hamulcowego wpływa jego zużycie, a także obecność oleju i innych zanieczyszczeń na tylnych kołach i w mechanizmie hamulcowym.

Balkonik jest wyposażony w hamulce sterowane za pomocą dwóch dźwigni hamulców (15). Dźwignie hamulców mogą być użyte do dwóch rodzajów hamowania – obsługi hamulców jezdnych i hamulców postojowych.


UWAGA

Ryzyko uszkodzenia

- Nie pchaj balkonika zbyt mocno, gdy są wciśnięte hamulce jezdne. To może powodować uszkodzenie opon lub hamulców.

Aby użyć hamulców jezdnych, pociągnij obie dźwignie hamulców (15) jednocześnie do góry [A] ruchem ściskającym. Aby przerwać hamowanie, zwolnij dźwignie hamulców.

Aby użyć hamulców postojowych, naciśnij obie dźwignie hamulców (15) w dół, do położenia zablokowanego [B]. Zawsze używaj obu hamulców postojowych na raz. Aby wyłączyć tryb postojowy, pociągnij obie dźwignie hamulców jednocześnie do góry.

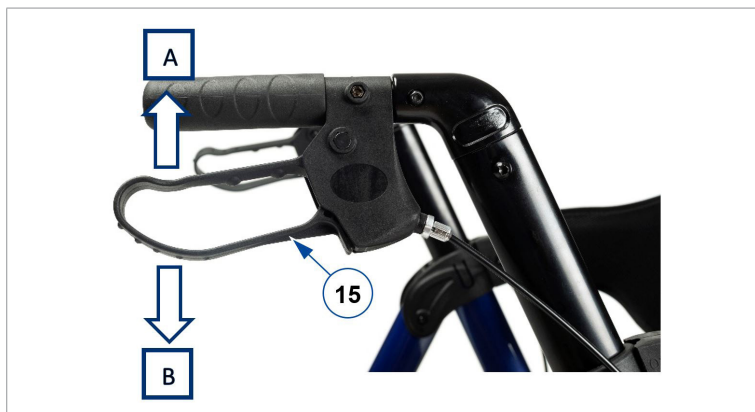

4.2. Składanie / Rozkładanie

⚠ UWAGA

Ryzyko przycięcia

- Nie zbliżać palców, klamer, biżuterii ani ubrań do mechanizmu składania.

⚠ UWAGA

Ryzyko upadku

- Sprawdź, czy balkonik jest w pełni otwarty i czy rama jest zablokowana.

4.2.1. Rozkładanie balkonika

- W razie potrzeby po transporcie lub przechowywaniu zmontuj balkonik, patrz §3..
- Lekko naciśnij uchwyty, aby rozłożyć chodzik.
- Obiema rękami naciśnij boki siedziska. Naciskaj na rurki ramy, aż rama zostanie zablokowana; podczas blokowania słychać kliknięcie.
- Sprawdź, czy rama jest zablokowana, naciskając uchwyty w kierunku jeden do drugiego.
- Ustaw ręczki na żądanej wysokości (patrz §3.5.).

4.2.2. Składanie balkonika


- Wymij laskę i torbę na zakupy.
- Pociągnij siedzisko w górę pasek.
- Naciśnij uchwyty w kierunku jeden do drugiego, aby zamknąć ramę.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat transportu i przechowywania, zdemontuj balkonik, patrz §3.2..

4.3. Wjeżdżanie na krawężniki

UWAGA

Ryzyko upadku

- Wjeżdżaj na krawężniki prosto, z oboma kołami przednimi wyrównanymi wobec krawężnika. Utrzymuj balkonik w pobliżu.

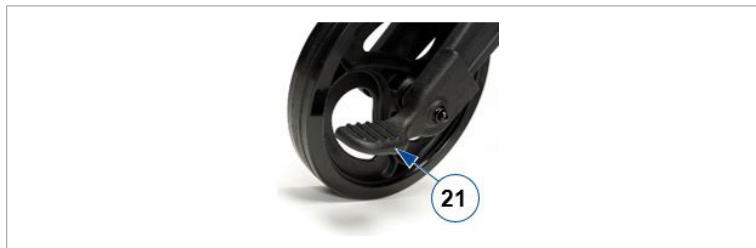

Aby uprościć pokonywanie małych przeszkód, takich jak krawężniki, rolator wyposażony jest w elementy pomocne w przechylaniu na dwóch tylnych kołach.

1. Upewnij się, że stoisz stabilnie i trzymasz obie ręczki.
2. Aby podnieść przednie koła, naciśnij stopą dźwignię przechylania **(21)**.
3. Trzymaj balkonik w tym położeniu za pomocą rączek i przesuwaj powoli do przodu, aż przednie koła znajdą się na krawężniku.
4. Teraz podnieś ręczki i pójdz do przodu, aby ustawić tylne koła na krawężniku.
5. Gdy balkonik już stoi pewnie, możesz wejść na krawężnik.

4.4. Siadanie, wstawanie i chodzenie

UWAGA

Ryzyko upadku

- Zanim usiądziesz, sprawdź, czy obie dźwignie hamulców znajdują się w położeniu parkowania, patrz **§4.1.** Dźwignie hamulców muszą pozostawać w tym położeniu, aż znowu zaczniesz chodzić. Ustaw stopy między dwoma kołami tylnymi.
- Nie należy napędzać chodzika w pozycji siedzącej.

1. Wciśnij obie dźwignie hamulców do położenia parkowania.
2. Opierając się na rączkach, obróć się i usiądź na siedzisku.
3. Aby znowu wstać, oprzyj się na rączkach i obróć.
4. Podciągnij obie dźwignie hamulców do góry i użyj hamulców jezdnych.
5. Zwolnij dźwignie hamulców i zrób krok naprzód, z balkonikiem blisko ciała.

5. Konserwacja

i Regularna konserwacja zapewnia utrzymanie pełnej sprawności balonika. Instrukcję konserwacji można znaleźć w witrynie Vermeiren: www.vermeiren.com.

5.1. Czyszczenie

Do mycia balkonika używaj miękkiej, wilgotnej ściereczki i letniej wody z dodatkiem łagodnego, domowego mydła. Nie dopuszczaj do długotrwałego namaczania. Do czyszczenia nie używaj ściernych środków czyszczących.

5.2. Dezynfekcja

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia

- Dezynfekcja może być przeprowadzana tylko przez przeszkolone osoby. Skonsultować się ze specjalistycznym dystrybutorem.

Do mycia łóżka używać miękkiej, wilgotnej ściereczki i letniej wody z delikatnym mydłem.

5.3. Kontrole / serwisowanie / naprawy

Oczekiwany okres użytkowania balkonika wynosi 5 lat. Trwałość balkonika jest zależna od jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, serwisowania i czyszczenia.

Przed ponownym użyciem balkonika, należy sprawdzić następujące punkty:

- Kompletność.
- Mechanizm składania: czy działa prawidłowo.
- Śruby i nakrętki: mocno dokręcone.
- Hamulce: prawidłowe działanie.
- Koła (stabilność, skręcanie w żądanym kierunku, śruby ustalające).
- W przypadku powtarzającego się kontaktu z drutami, włosami lub innymi pozostałościami, koła mogą zostać zablokowane. Należy regularnie sprawdzać, czy koła obracają się swobodnie i czy są w dobrym stanie;
- Rama (odkształcenia, stabilność, połączenia);
- Uchwyty (bezpieczne blokowanie systemu regulacji wysokości, solidne wsparcie uchwytów).
- Siedzisko, oparcie i torba (sprawdzić pod kątem zużycia lub uszkodzenia).

Rolator skonstruowany jest z aluminiowych i plastikowych elementów. Zalecamy, aby kontrolować produkt co najmniej raz na rok. Częstotliwość serwisowania zależy jednak od częstości i intensywności eksploatacji. Należy się skonsultować z wyspecjalizowanym sprzedawcą w celu uzgodnienia częstotliwości serwisu.

Naprawa i wymiana części mogą być wykonywane tylko przez osoby przeszkolone. Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych Vermeiren.

Warto korzystać z usług oferowanych przez wyspecjalizowanego sprzedawcę. On/ona chętnie udzieli pomocy w zakresie serwisu i napraw.

5.4. Ponowne użycie

Przed każdym ponownym użyciem rolkę należy zdezynfekować, skontrolować i poddać konserwacji zgodnie z instrukcjami w §5.1. i §5.2..

5.5. Usuwanie odpadów

Po zakończeniu użytkowania należy poddać balkonik utylizacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Najlepszym sposobem, aby to zrobić jest demontaż balkonika, w celu ułatwienia transportu części nadających się do przetworzenia.

5.6. Gwarancja

Gwarancja na produkt podlega ogólnym warunkom każdego kraju.

6. Parametry techniczne

Parametry techniczne zamieszczone poniżej dotyczą tylko tego balkonika, przy standardowych ustawieniach i optymalnych warunkach otoczenia. Podczas użytkowania należy uwzględnić te dane.

Marka	Vermeiren
	Balkonik
Typ	Quadri-Light
Opis	Wymiary
Maksymalna waga użytkownik	130 kg
Maksymalna waga ładunku w torbie	5 kg
Długość całkowita	700 mm
Długość po złożeniu	700 mm W transporcie: 400 mm
Łączna szerokość	650 mm
Szerokość po złożeniu	290 mm
Łączna wysokość	805 - 930 mm
Wysokość po złożeniu	805 mm W transporcie: 670 mm
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych. Tolerancja pomiarów +/- 15 mm / 1,5 kg / 1,5°	

Marka	Vermeiren
	Balkonik
Typ	Quadri-Light
Opis	Wymiary
Wysokość rączek	805 - 930 mm
Zalecana wysokość ciała	1550 - 1850 mm
Odległość między uchwytami	460 mm
Wysokość siedziska	610 mm
Szerokość siedziska	450 mm
Głębokość siedziska	200 mm
Ciężar całkowity - bez koszyka	7,25 kg 7,2 kg
Średnica koła Przód Tył	8" 7"
Hamulce	Hamulce jezdne i postojowe
Promień skrętu	1310 mm
Temperatura przechowywania i użytkowania	+5°C - +41°C
Wilgotność powietrza do przechowywania i użytkowania	30% - 70%
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych. Tolerancja pomiarów +/- 15 mm / 1,5 kg / 1,5°	

Předmluva	128
1. Tento výrobek	129
2. Před použitím	130
2.1. Určené použití a indikace	130
2.2. Bezpečnostní pokyny a příslušná rizika	131
2.3. Symboly na chodítku	132
2.4. Při dodávce	133
2.5. Přeprava a skladování	133
3. Montáž/demontáž a nastavení	134
3.1. Montáž	134
3.2. Rozložení	134
3.3. Montáž úložné tašky	135
3.4. Montáž/demontáž opěrky zad	136
3.5. Nastavení výšek	136
4. Použití chodítka	137
4.1. Brzdový systém	137
4.2. Složení a rozložení	138
4.3. Přejíždění obrubníků	139
4.4. Posazení, zvednutí se a chození	140
5. Údržba	140
5.1. Čištění	140
5.2. Dezinfekce	141
5.3. Kontrola / servis / opravy	141
5.4. Znovupoužití výrobku	142
5.5. Likvidace	142
5.6. Záruka	142
6. Technické údaje	143

Předmluva

Blahopřejeme! Nyní jste vlastníkem chodítka Vermeiren!

Děkujeme za vaši důvěru ve výrobky společnosti Vermeiren. Tento návod slouží k tomu, aby vám pomáhal s použitím tohoto chodítka a jeho provozních možností. Řádně si jej přečtěte; pomůže vám seznámit se s provozem, schopnostmi a omezeními tohoto chodítka.

Máte-li po přečtení tohoto návodu nějaké dotazy, obraťte se bez obav na svého odborného prodejce. Rád vám pomůže.

Důležitá poznámka

Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a prodloužena životnost tohoto výrobku, věnujte mu řádnou péči a nechávejte jej pravidelně kontrolovat a opravovat.

Tento návod obsahuje nejnovější verzi produktu. Společnost Vermeiren má právo provádět změny tohoto typu výrobku, aniž by byla povinná upravit nebo nahradit podobné výrobky, které již byly dodány.

Obrázky výrobku slouží pouze k upřesnění pokynů. Detaily výrobku na obrázcích se mohou od daného výrobku lišit.

Dostupné informace

Nejnovější verzi následujících informací vždy naleznete na našich webových stránkách <http://www.vermeiren.com/>. Tyto webové stránky pravidelně navštěvujte pro případné aktualizace.

Osoby se zrakovým postižením si mohou stáhnout elektronickou verzi tohoto návodu, kterou jim může přečíst softwarová aplikace text-to-speech.



Návod k obsluze
Pro uživatele a odborného prodejce



Servisní příručka pro chodítka
Pro odborného prodejce

CS



Prohlášení o shodě (ES)

1. Tento výrobek



1. Madla
2. Brzdová páka
3. Zádová opěrka
4. Sedadlo
5. Úložná taška
6. Přední kola
7. Zadní kola
8. Brzdový kabel
9. Zvedací páka
10. Reflektory
11. Držák hůlky
12. Identifikační štítek

2. Před použitím

2.1. Určené použití a indikace

- Tento výrobek je zdravotnický zařízení.
- Indikace a kontraindikace: Chodítko je určeno jako podpora funkce nohou při chůzi. Nepoužívejte chodítko, máte-li jiná fyzická omezení, jež mohou způsobit jeho nebezpečné použití, jako jsou slabé ruce, poruchy rovnováhy, zhoršené vidění, ztráta končetin apod.
- Chodítko je navrženo a vyrobeno výhradně k použití jako pomůcka při chůzi pro jednu osobu o maximální váze 130 kg.
- Chodítko kompenzuje absenci přiměřené podpory nohou tím, že se osoba opírá o chodítko či pohybuje s ním pomocí horních končetin nebo hrudníku. Chodítko poskytuje lepší stabilitu, podporu a bezpečnost při chůzi.
- Chodítko lze používat doma i venku.
- Není určeno pro přepravu zboží nebo více lidí než jednoho uživatele. Není také určen k použití jako přepravní pomůcka vsedě.
- Smí se používat pouze na povrchu, kde se všechna čtyři kola dotýkají země. Chodítko nepoužívejte na skalnatém, nerovném či písčitém povrchu nebo na strmých místech. Chodítko může být nestabilní. Pro chůzi s chodítkem hledejte rovné stabilní plochy a zkosené obrubníky.
- Záruka na tento výrobek je založena na běžném použití a údržbě, jak je to popsáno v tomto návodu. V případě poškození výrobku způsobeného nesprávným použitím či absencí údržby tato záruka zanikne.
- Ověřte si všechny technické detaily a omezení chodítka v odst 6..

2.2. Bezpečnostní pokyny a příslušná rizika

POZOR

Riziko zranění

- Přečtěte si pokyny v tomto návodu a postupujte podle nich. Jinak se můžete zranit nebo se váš výrobek může poškodit.

Při použití mějte na paměti následující obecná upozornění:

- Ověřte, zda kamínky či jiné předměty neblokují kola chodítka.
- Než použijete chodítko jako pomůcku k postavení se ujistěte, že jsou obě brzdové páčky v režimu parkování. Jakmile se pohodlně a stabilně postavíte, můžete parkovací brzdy odblokovat.
- Během chůze mějte obě ruce stále na rukojetích.
- Mějte na paměti, že některé části chodítka mohou být velmi teplé či studené vlivem okolní teploty, slunečního záření, topných těles atd. Buďte opatrní při dotýkání.
- Před každým použitím ověřte, zda jsou nastavení výšek řádně zajištěna, viz odst. **3.5.**
- Nedržte se rukojetí mokřýma rukama. Jinak může dojít k uklouznutí úchopu a ztrátě vaší rovnováhy.
- Nechodte s chodítkem v silničním provozu. Chodte vždy po chodníku.
- Dbejte na pokyny týkající se údržby a servisu. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným servisem / péčí o výrobek.

Jakýkoli závažný incident [MDR (EU) 2017/745 §2 (65)], k němuž došlo ve spojitosti s tímto zařízením, musí být oznámen jeho výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém je uživatel anebo pacient etablován.

Mějte na paměti, že chodítko může rušit některé typy systémů proti krádeži v závislosti na použitém nastavení. To může způsobit spuštění alarmu v obchodu.

2.3. Symboly na chodítku

 Identifikační štítek se nachází na levé zadní noze na vnitřní straně rámu

	Max. hmotnost uživatele v kg
	Typové označení
	Katalogové číslo
	Sériové číslo
	Zdravotnické zařízení
	Výrobce
	Datum výroby
	Prohlášení o shodě
	Pozor: důležité informace
	Doporučení prostudovat příručku

2.4. Při dodávce

Rozbalte výrobek a ověřte, zda jde o kompletní dodávku. Musí obsahovat následující položky:

- Rám chodítka se sedadlem, 4 kolečka
- Rukojeti s brzdami
- Úložná taška
- Držák hůlky
- Zádová opěrka
- Návod

Ověřte, zda výrobek nebyl poškozen přepravou. Zjistíte-li po dodání jakékoli škody, obraťte se na dopravce.

2.5. Přeprava a skladování

Při přepravě a skladování chodítka postupujte podle technických specifikací v odst. 6.. Ověřte, že bude chodítko skladováno v suchu.

Chodítko dostatečně zakryjte pro ochranu před korozí a cizími tělesy (např. slaná voda, mořský vzduch, písek, prach).

Aby se chodítko nepoškodilo, ověřte, že na něm nejsou skladovány ani o něj opřeny žádné předměty.

3. Montáž/demontáž a nastavení

POZOR

Riziko zranění

- Mějte prsty, přezky, šperky a oděvy vždy mimo skládací mechanismus.

3.1. Montáž

1. Uvolněte suché zipy.
2. Umístěte chodítko na bok.
3. Posunujte zadní kolo dolů, dokud otvory nebudou ležet přes sebe.
4. Namontujte hvězdicový knoflík **(2)**. Ujistěte se, že je dobře upevněn.
5. Posunujte přední kolo dolů, dokud otvory nebudou ležet přes sebe.
6. Namontujte hvězdicový knoflík **(5)**. Ujistěte se, že je dobře upevněn.
7. Opakujte pro druhou stranu.
8. Montáž opěrky zad viz **§3.4.**
9. Rozložte chodítka, viz odst. **4.2.**

3.2. Rozložení

1. Přeložte chodítka, viz odst. **4.2.**
2. Odstraňte hvězdicový knoflík **(5)**.
3. Sklopte přední kolo nahoru.
4. Odstraňte hvězdicový knoflík **(2)**.
5. Sklopte zadní rám / kolo nahoru **(3)**.
6. Připevněte zadní rám / kolo pomocí pásků na suchý zip k rámu rukojetí.
7. Opakujte pro druhou stranu.



3.3. Montáž úložné tašky

⚠ POZOR

Riziko pádu nebo překlopení

- Nákupní tašku nepřepínajte.

Maximální nosnost úložné tašky naleznete v §6..

Nákupní taška (6) se montuje na přední část chodítka. Připevněte nákupní košík pomocí dvou nástavců (7) na trubky rámu sedadla (8).



3.4. Montáž/demontáž opěrky zad

POZOR

Nebezpečí pádu

- Před použitím sedadla se ujistěte, že je zádový pás (9) dobře upevněn k rámu. Zkontrolujte řádné utažení všech šroubů, svorníků a matic pásu (9).

Pás a držák lze jednoduše upevnit zasunutím jeho koncovek do drážek na vyčnívajících částech na rámu, viz obrázek. Zatlačte dolů až na dno a utáhněte šroub (10).

Chcete-li pás odebrat, povolte šroub a vysuňte koncovky nahoru, až se uvolní z drážek.



3.5. Nastavení výšek

POZOR

Riziko pádu nebo překlolení

- Před použitím chodítka madla pevně utáhněte.
- Nepřekračujte minimální nebo maximální nastavení uvedené na rukojetích. Váš chodítko již nebude stabilní.

POZOR


Riziko poškození

- Nevytahujte rukojeti příliš vysoko, aby nedošlo k poškození brzdového kabelu.

U chodítka můžete nastavovat výšku seřízením rukojetí:

1. Uvedte chodítko do parkovacího režimu, viz odst. **4.1.**
2. Stiskněte a přidržte pružinové tlačítko **(11)**.
3. Posuňte rukojeť do požadované výšky (6 poloh v krocích po 25 mm). Ověřte, že brzdové lanko nemůže uvíznout kolem držáku berle.
4. Zkontrolujte, zda je pružinový kolík **(11)** zacvaknutý zpět a pevně zafixovaný v otvoru.
5. Tažením rukojeti nahoru a stisknutím dolů ověřte, že je zamknuta.
6. Nastavte druhou rukojeť stejným způsobem. Ověřte, že mají obě rukojeti stejnou výšku.

i Když se postavíte vzpřímeně, madla by měla být ve výšce vašich zápěstí. Nechte ruce volně viset.

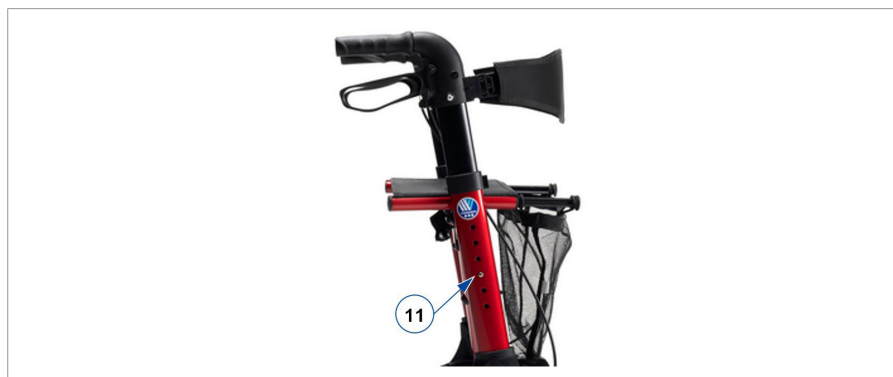

4. Použití chodítka

4.1. Brzdový systém

⚠ POZOR

Nebezpečí pádu

- Pro zajištění bezpečnosti zkontrolujte funkci brzd. Stav brzdového systému ovlivňuje opotřebení, olej a jiné znečištění zadních kol a brzdného mechanismu.

Chodítko je vybaveno brzdami ovládanými dvěma brzdovými pákami (15). Brzdové páčky lze používat ve dvou brzdných režimech: jízdní brzdy a parkovací brzdy.

⚠ POZOR

Riziko poškození

- Při použití jízdních brzd na chodítko příliš netlačte. Jinak dojde k poškození pneumatik či brzd.

Chcete-li použít jízdní brzdy, vytáhněte obě brzdové páčky (15) zároveň nahoru [A] mačkovým pohybem. Pro ukončení brždění uvolněte brzdové páky.

Chcete-li použít parkovací brzdy, stiskněte obě brzdové páčky (15) dolů do zamknuté polohy [B]. Vždy použijte obě parkovací brzdy současně. Pro ukončení režimu parkování vytáhněte obě brzdové páky zároveň nahoru.



4.2. Složení a rozložení

⚠ POZOR

Nebezpečí skřípnutí

- Mějte prsty, přezky, šperky a oděvy vždy mimo skládací mechanismus.

⚠ POZOR

Nebezpečí pádu

- Zkontrolujte, zda je chodítko zcela rozevřeno a jeho rám uzamknut.

4.2.1. Rozložení chodítka

1. V případě potřeby po přepravě nebo skladování sestavte chodítka, viz odst. 3..
2. Rozložte chodítko zatlačením za držadla.
3. Zatlačte oběma rukama dolů na strany sedátka. Tlačte na trubky rámu, dokud nedojde k zamknutí rámu, které je indikováno kliknutím.
4. Zkontrolujte uzamknutí rámu tím, že stisknete rukojeť k sobě.
5. Nastavte výšku tlačných madel na potřebnou hodnotu, viz odst. 3.5..

4.2.2. Složení chodítka


1. Odeberte hůlku a nákupní tašku.
2. Vytáhněte sedadlo nahoru za pásek.
3. Složte rám stisknutím rukojetí k sobě.
4. Pro přepravu a skladování rozeberte chodítka dále, viz odst. 3.2..

4.3. Přejíždění obrubníků

POZOR

Nebezpečí pádu

- Na obrubník jezděte kolmo, oběma předními koly zároveň. Mějte chodítko těsně u těla.

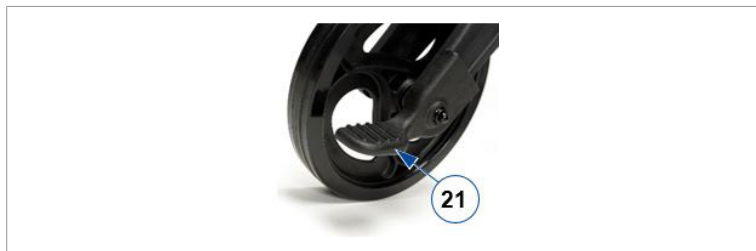

Pro snadnější zdolávání malých překážek, jako jsou obrubníky, je chodítko vybaveno naklápěcí pomůckou na dvou zadních kolech.

1. Zajistěte, abyste stáli stabilně a přitom drželi obě rukojeti.
2. Jednou nohou šlápněte na zvedací páku **(21)** a tím zvedněte přední kola.
3. Udržujte chodítko v této poloze pomocí rukojetí a pomalu jděte dopředu, až se přední kola dostanou na obrubník.
4. Nyní zvednutím rukojetí a pohybem dopředu dostaňte na obrubník i zadní kola.
5. Když stojí chodítko stabilně, můžete přejít na obrubník i vy.

4.4. Posazení, zvednutí se a chození

POZOR

Nebezpečí pádu

- Před posazením ověřte, že jsou obě brzdové páčky v parkovací poloze, viz §4.1.. Nechte brzdové páčky v této poloze, dokud nezačnete znovu chodit. Nohama pohybujte mezi zadními koly.
 - Nepohánějte chodítko vsedě.
1. Stiskněte obě brzdové páčky dolů do parkovací polohy.
 2. Zatímco se opíráte o rukojeti, otočte se a posaďte se na sedadlo.
 3. Chcete-li se znovu postavit, opřete se o rukojeti a otočte se.
 4. Pro použití jízdních brzd vytáhněte obě brzdové páčky nahoru.
 5. Uvolněte brzdové páčky, jděte dopředu a mějte přitom chodítko těsně u těla.

5. Údržba

-  Pravidelná péče zajistí, že bude chodítko udržováno v dokonale funkčním stavu. Návod k údržbě naleznete na webových stránkách společnosti Vermeiren: www.vermeiren.com.

5.1. Čištění

K čištění chodítka použijte měkký vlhký hadřík a vlažnou vodu s jemným mýdlem pro domácí účely. Předcházejte namočení. K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

5.2. Dezinfekce

POZOR

Riziko poškození

- Dezinfekci mohou provádět pouze kvalifikované osoby. Poradte se se svým prodejcem.

K čištění chodidla použijte měkký navlhčený hadřík a vlažnou vodu s jemným dezinfekčním prostředkem pro domácnost.

5.3. Kontrola / servis / opravy

Předpokládaná životnost vašeho chodítka je 5 let. Životnost chodítka je ovlivněna jeho používáním, skladováním, údržbou, servisem a čištěním.

Před opětovným použitím chodítka je třeba zkontrolovat následující body:

- Kompletnost.
- Skládací mechanismus: správná funkce.
- Šrouby a matice: pevně dotažené.
- Brzdy: správná funkčnost.
- Kola (stabilita, vedení stopy, upevňovací šrouby).
- V případě pravidelného kontaktu s drátky, vlasy či jinými nečistotami se mohou kola zablokovat. Pravidelně kontrolujte, zda se kola volně otáčejí a zda jsou v dobrém stavu.
- Rám (deformace, stabilita, připojení).
- Rukojeť (bezpečné zamknutí systému nastavení výšky, dobrá podpora rukojetí).
- Sedadlo, opěradlo a úložná taška (opotřebení či poškození).

Váše chodítko je vyrobeno z hliníkových a plastových součástí. Doporučujeme, abyste nechali výrobek zkontrolovat alespoň jednou ročně. Četnost servisu však závisí na frekvenci a intenzitě použití výrobku. Poradte se s odborným prodejcem a dohodněte vhodné servisní intervaly.

Opravy a výměny směřují provádět pouze vyškolené osoby. Přitom je třeba používat pouze originální náhradní díly společnosti Vermeiren.

Využívejte služby nabízené vaším specializovaným prodejcem. Bude velmi rád, když vám pomůže s jakýmkoli servisem a opravami.

5.4. Znovupoužití výrobku

Před každým dalším použitím nechte chodítko dezinfikovat, zkontrolovat a opravit podle pokynů v odst. **5.1.** a odst. **5.2.**.

5.5. Likvidace

Po skončení životnosti musí být chodítko zlikvidováno podle místní legislativy pro životní prostředí. Nejlepším způsobem likvidace je rozebrání chodítka pro usnadnění přepravy recyklovatelných součástí.

5.6. Záruka

Záruka na tento výrobek se řídí všeobecnými podmínkami platnými v dané zemi.

6. Technické údaje

CS

Technické údaje uvedené níže platí pouze pro toto lůžko při standardních nastaveních a optimálních podmínkách okolí. Během používání berte tyto údaje v úvahu.

Značka	Vermeiren
	Chodítko
Typ	Quadri-Light
Popis	Rozměry
Hmotnost uživatele	130 kg
Maximální váha obsahu tašky	5 kg
Celková délka	700 mm
Délka ve složeném stavu	700 mm Pro přepravu: 400 mm
Celková šířka	650 mm
Šířka při složení	290 mm
Celková výška	805 - 930 mm
Složená výška	805 mm Pro přepravu: 670 mm
Výška rukojetí	805 - 930 mm
Doporučená výška těla	1550 - 1850 mm
Vzdálenost mezi rukojeťmi	460 mm
Výška sedadla	610 mm
Šířka sedadla	450 mm
Hloubka sedadla	200 mm
Celková hmotnost - bez košíku	7,25 kg 7,2 kg
Průměr zadního kola Přední Zadní	8" 7"
Brzdy	Jízdní a parkovací brzdy
Šířka otáčení	1310 mm
Teplota skladování a používání	+5°C - +41°C
Vlhkost při skladování a používání	30% - 70%
Právo na technické změny vyhrazeno. Tolerované odchylky +/- 15 mm / 1,5 kg / 1,5°	

**Service registration form**

This product (name):

was inspected (I), serviced (S), repaired (R) or disinfected (D):

By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:
By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:
By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:
By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:
By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:



VERMEIREN GROUP

Vermeirenplein 1/15

2920 Kalmthout

Belgium

www.vermeiren.com

Version: F, 2025-02

Basic UDI-DI: 5415174120606Quadri-Lig5K

All rights reserved, including translation.

VERMEIREN
we care **for** you