

VERMEIREN

Flora 1 - 2 - 3

INSTRUCTION MANUAL
MODE D'EMPLOI
GEBRUIKSAANWIJZING
GEBRAUCHSANWEISUNG
ISTRUZIONI PER L'USO
MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K POUŽITÍ



EN

Instructions for specialist dealer

This instruction manual is part and parcel of the product and must accompany every product sold.

Version: B, 2016-08

FR

Instructions pour les distributeurs

Ce manuel d'instructions fait partie du produit et doit accompagner chaque produit vendu.

Version : B, 2016-08

NL

Instructies voor de vakhandelaar

Deze handleiding is deel van het product en dient bij iedere product te worden geleverd.

Versie: B, 2016-08

DE

Hinweise für den Fachhändler

Diese Gebrauchsanweisung ist Bestand-teil des Produkts und ist bei jeder Produkts auszuhändigen.

Version: B, 2016-08

IT

Istruzioni per il rivenditore

Il presente Manuale di istruzioni è parte integrante del prodotto e deve essere fornito assieme alla prodotto.

Versione: B, 2016-08

ES

Instrucciones destinadas a los distribuidores especializados

El presente manual de instrucciones es parte integrante del producto y se debe adjuntar a todas las producto que se vendan.

Versión: B, 2016-08

PL

Instrukcje dla wyspecjalizowanego sprzedawcy

Niniejsza instrukcja obsługi jest nieodłączną częścią produktu i musi być dołączona do każdego sprzedawanego produktu.

Wersja: B, 2016-08

CS

Pokyny pro specializovaného prodejce

Tento návod k obsluze je součástí dodávky a musí být součástí každého prodaného produktu.

Verze: A, 2025-01

All rights reserved, including translation.

Tous droits réservés, y compris la traduction.

Alle rechten, inclusief vertaling, voorbehouden.

Alle Rechte, auch an der Übersetzung, vorbehalten.

Tutti i diritti riservati (anche sulla traduzione).

Todos los derechos reservados, incluidos los de la traducción.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z tłumaczeniem.

Všechna práva vyhrazena, včetně překladu.

EN

Contents

1.	Technical details	2
2.	Components	2
3.	Explanation of symbols	2
4.	Check after delivery	2
5.	Intended use / environment	2
6.	Height adjustment walking stick	3
7.	Walking	3
8.	Walking on stairs	3
9.	Safety instructions	3
10.	Maintenance	3

FR

Table des matières

1.	Caractéristiques techniques	4
2.	Composants	4
3.	Explication des symboles	4
4.	Contrôle lors de la réception	4
5.	Utilisation / environnement	4
6.	Réglage en hauteur de la canne	4
7.	Marcher	5
8.	Monter les marches	5
9.	Consignes de sécurité	5
10.	Maintenance	5

NL

Inhoudsopgave

1.	Technische gegevens	6
2.	Onderdelen	6
3.	Gebruikte symbolen	6
4.	Controle bij ontvangst	6
5.	Gebruik / omgeving	6
6.	Hoogteverstelling wandelstok	6
7.	Lopen	7
8.	Traplopen	7
9.	Veiligheidsinstructies	7
10.	Onderhoud	7

DE

Inhalt

1.	Technische Daten	8
2.	Komponenten	8
3.	Zeichenerklärung	8
4.	Prüfungen nach der Lieferung	8
5.	Zweckbestimmung / Umgebung	8
6.	Höhenverstellung des Gehstocks	8
7.	Gehen	9
8.	Treppensteigen	9
9.	Sicherheitsanweisungen	9
10.	Wartung	9

IT

Indice

1.	Dettagli tecnici	10
2.	Componenti	10
3.	Significato dei simboli	10
4.	Controllo dopo la consegna	10
5.	Utilizzo previsto / ambiente	10
6.	Regolazione dell'altezza	10
7.	Deambulazione	11
8.	Salire le scale	11
9.	Istruzioni per la sicurezza	11
10.	Manutenzione	11

ES

Índice

1.	Datos técnicos	12
2.	Componentes	12
3.	Explicación de los símbolos	12
4.	Comprobación tras la entrega	12
5.	Uso previsto / entorno	12
6.	Ajuste de la altura del bastón	12
7.	Caminar	13
8.	Subir o bajar escalones	13
9.	Instrucciones de seguridad	13
10.	Mantenimiento	13

PL

Spis treści

1.	Dane techniczne	14
2.	Składniki	14
3.	Objaśnienie symboli	14
4.	Kontrola po dostawie	14
5.	Przeznaczenie / środowisko	14
6.	Regulacja wysokości laski Flora	14
7.	Chodzenie	15
8.	Chodzenie po schodach	15
9.	Instrukcje bezpieczeństwa	15
10.	Konserwacja	15

CS

Úvod

1.	Technické údaje	16
2.	Součásti	16
3.	Vysvětlení symbolů	16
4.	Kontrola při doručení	16
5.	Zamýšlené použití/prostředí	16
6.	Výškově nastavitelná vycházková hůl	17
7.	Chození	17
8.	Chůze po schodech	17
9.	Bezpečnostní pokyny	17
10.	Údržba	17



INSTRUCTION MANUAL

Walking stick Flora

1. Technical details

⚠ WARNING: Risk of unsafe settings - Use only the settings described in this manual.

Make	Vermeiren
Address	Vermeirenplein 1/15, B-2920 Kalmthout
Type	Walking stick
Model	Flora
Width	120 mm
Total height	840 mm – 940 mm
Depth	29 mm
Handgrip length	120 mm
Weight	0,30 kg
Maximum user weight*	max. 100 kg
We reserve the right to introduce technical changes. Measurement tolerance +/- 15 mm / 1,5 kg.	



First of all we wish to thank you for the trust you placed in us by selecting a **VERMEIREN** product.

Before using the walking stick, read the instruction manual carefully: it will familiarise you with this product.


Refer to the Vermeiren website for the instructions for care and safety of the walking stick. Please remember that observance of our hints would keep your walking stick in an excellent condition of preservation and it will function perfectly even after years of use.

If you have any further questions, please consult your specialist dealer.

To find a service facility or specialist dealer near you, contact the nearest Vermeiren facility. A list of Vermeiren facilities can be found on the last page.

Visually impaired people can contact the dealer for the instructions for use.

2. Components

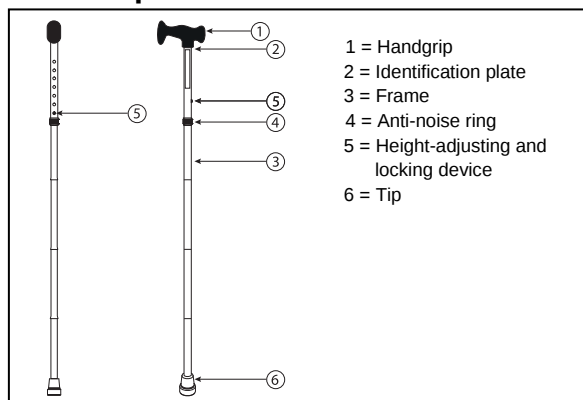

3. Explanation of symbols



Maximum mass



CE conformity

4. Check after delivery

Unpack your product and verify if the delivery is complete. Following items should be included:

- 1 walking stick
- Tip
- Height adjustment system
- Manual

Verify your product for transport damage. If you find any damages after delivery proceed as follows:

- Contact the transporter
- Have a list made of any problems
- Contact your supplier

5. Intended use / environment

⚠ WARNING: Risk of falling - Do not use the walking stick if you have weak arm, wrist joint function or poor equilibrium.

A walking stick give the user support during walking and makes it easier to walk. These support can be useful for balance problems or pain when walking.

The walking stick can be used indoor and outdoor.

Be extra careful that you do not slip when using on wet surfaces.

However, it cannot be used by persons with a visible weakened hand-/arm function, wrist joints.

The walking stick is not suited to use in high mountains, or on rough underground (big stones, ...).

6. Height adjustment walking stick

⚠ CAUTION: Risk of falling -
Check that the spring pins ② are good
clicked back.


Before using the walking stick you must adjust these in the correct height.

Adjust the height of the walking stick according following instructions:

1. Unscrew the anti-noise ring ①.
2. Press on the spring pin ②.
3. Pull / push the lower tube ③ until the desired height (5 different positions: increments of 25,5 mm).

Ensure that the height of your wrist is at the same height of the handgrip when you leave your arms loose next your body. Ensure that your body is in an upright position.

4. Check that the spring pin ② is good clicked back.
5. Tighten the anti-noise ring ① again firmly.

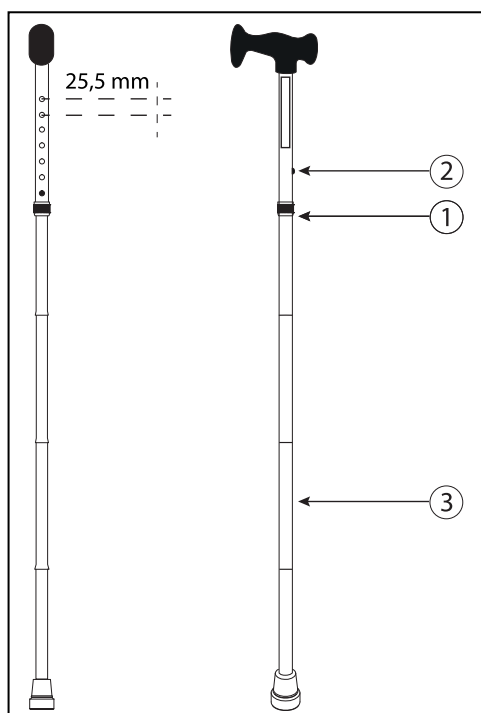

7. Walking

⚠ CAUTION: Risk of falling - Do not
place the walking stick too far to the
front.

Follow the advice of your doctor or physiotherapist how you must walk with the walking stick. When you have no advice, you can use the instructions below:

- Always walk upright with the walking stick right next to your body.
- Put the walking stick while walking never further than your front leg.

- Be careful with wet/slippy ground.
- Do not place the walking stick in a curve while walking otherwise you can slip out.
- Place the walking stick on the side of your unaffected leg or the side were you need support. Place your affected leg forward simultaneously with the walking stick and then your unaffected leg.

8. Walking on stairs

When there is a handrail available, you can use these as support and on the other side you can use the walking stick. Ensure that the handrail is on the healthy side of your body, if possible.

Lean on the handrail and place the walking stick on the first step. Place your unaffected leg on the first step and put your affected leg beside them.

9. Safety instructions

- Let someone assist you if this is the first time you are using the walking stick.
- Note that you use your walking stick on a good surface. (Not with too many gravel).
- Be extra careful on a wet / slippery ground.
- Before every usage, check if the walking stick is adjusted in the correct height.
- Check that the spring pins for the height adjustment are good clicked back and the anti noise-ring is firmly secured.
- Do not place the walking stick in a curve or too far from your body to avoid risk of falling.
- Do not use the walking stick as a toy.
- Do not hold the handgrip with wet hands. If you do so, you can lose your grip and lose your balance.
- Do not take to big steps with the walking stick.
- **The max. user weight of the product is 100 kg.**
- Risk of burns – Be careful when using in hot or cold environments (sunshine, extreme cold, saunas, etc.) for a sufficient amount of time and when touching - Surfaces can assume the environment temperatures.
- Take note of the instructions for care and service. The manufacturer is not liable for damage caused by improper servicing/care.

10. Maintenance

For the maintenance manual of the walking sticks refer to the Vermeiren website: www.vermeiren.com.

MANUEL D'INSTRUCTION

Canne Flora

1. Caractéristiques techniques

⚠ Avertissement : Risque de réglages dangereux - N'utilisez que les réglages décrits dans ce manuel.

Marque	Vermeiren
Adresse	Vermeirenplein 1 / 15 B-2920 Kalmthout
Type	Canne
Modèle	Flora
Largeur	120 mm
Hauteur totale	840 mm – 940 mm
Profondeur	29 mm
Longueur poignée	120 mm
Poids	0,30 kg
Poids maxi utilisateur*	Max. 100 kg
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques. Tolérance de mesure +/- 15 mm / 1,5kg	



Nous tenons tout d'abord à vous remercier pour la confiance que vous nous accordez en optant pour un produit **VERMEIREN**.

Avant d'utiliser la canne, lisez attentivement le mode d'emploi; il vous permettra de vous familiariser avec la manipulation de ce produit.


Le site Internet de Vermeiren contient de précieuses informations sur l'entretien de les cannes et les précautions d'utilisation. N'oubliez pas que le respect de nos instructions vous permettra de conserver votre canne en parfait état de conservation et de fonctionnement, même après des années d'utilisation.

Pour toute question, consultez votre distributeur.

Pour trouver un service d'entretien ou un revendeur spécialisé près de chez vous, contactez l'établissement Vermeiren le plus proche. Vous trouverez une liste des établissements sur la dernière page.

Les personnes souffrant de problèmes visuels peuvent prendre contact avec le revendeur pour les instructions d'utilisation.

2. Composants

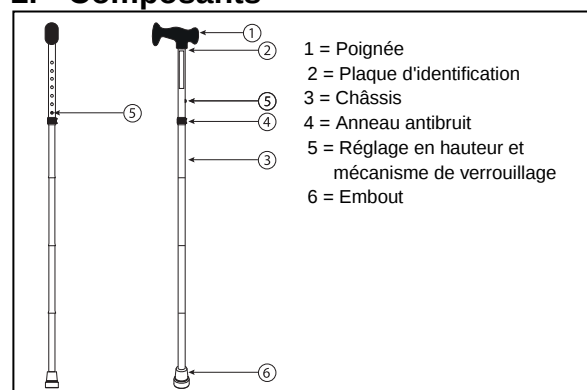

3. Explication des symboles



Poids maximum



Conformité CE

4. Contrôle lors de la réception

Déballez le produit et contrôlez si la livraison est complète. Se trouvent dans le paquet:

- 1 canne
- Embout
- Système pour le réglage en hauteur
- Mode d'emploi

Vérifiez bien que le colis n'ait pas subi de dégâts pendant le transport. Si vous constatez que ce produit ou le colis présente, contre toute attente, des défauts, procédez comme suit:

- Déposez immédiatement une déclaration auprès du transporteur;
- Faites enregistrer les dégâts;
- Informez votre revendeur immédiatement.

5. Utilisation / environnement

⚠ Avertissement : Risque de chute - N'utilisez pas les cannes si votre bras est faible, si vous souffrez de l'articulation du poignet ou manquez d'équilibre.

La canne sert de support lors de la marche et facilite la marche. Elle est ainsi utile pour soulager les douleurs et parer aux problèmes d'équilibre durant la marche.

La canne peut s'utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur.

Faites tout particulièrement attention aux risques de glissade sur des surfaces humides.

La canne ne convient pas aux personnes dont le bras et/ou la main sont visiblement affaiblis, qui souffrent des articulations du poignet ou d'un problème d'équilibre.

La canne de marché ne convient pas à une utilisation en montagne ou dans des souterrains (grandes pierres...).

6. Réglage en hauteur de la canne

⚠ Attention : Risque de blessures - Vérifiez que les goupilles de blocages ② sont bien clipsées.


Avant d'utiliser la canne, il est nécessaire d'en ajuster la hauteur.

Vous devez pour cela suivre les consignes suivantes :

1. Dévissez l'anneau antibruit ①.
2. Poussez sur le goupille de blocage ②.
3. Tirez / poussez sur le conduit en dessous ③ à la hauteur souhaitée (10 positions différentes : écarts de 25,5 mm).

La hauteur du poignet doit être égale à celle de la poignée lorsque l'on laisse tomber les bras le long du corps. Veillez à ce que votre corps soit bien droit.

4. Puis, vérifiez que la goupille de blocage ② est bien clipsée.
5. Resserrez fermement l'anneau antibruit ①.

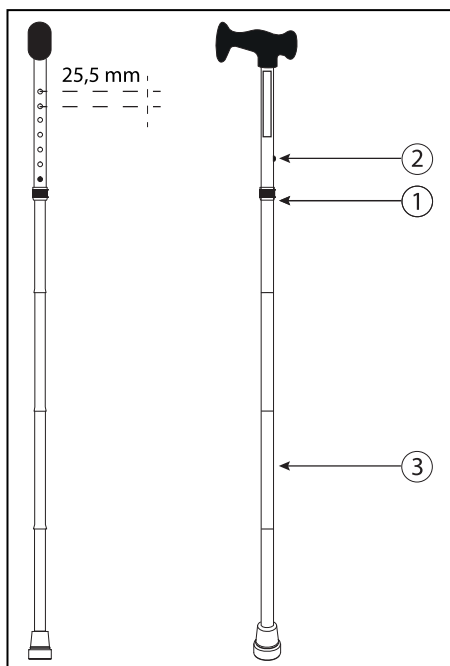

7. Marcher

⚠ ATTENTION : Risque de chute - Ne placez pas la canne trop en avant.

Suivez les conseils de votre médecin ou physiothérapeute concernant l'emploi de la canne. À défaut d'instructions particulières, vous pouvez utiliser les consignes suivantes :

- Marchez toujours droit avec la canne positionnées près du corps.
- Lorsque vous avancez, la canne ne doit pas être placée plus loin que votre jambe lancée en avant.
- Prenez garde aux sols humides et glissants.
- Ne placez pas la canne en position oblique lorsque vous marchez afin d'éviter de glisser.
- Placez la canne du côté sain ou du côté où vous avez besoin du support. Faites avancer l'autre jambe en même temps que la canne, puis avancez la jambe saine.

8. Monter les marches

Si l'escalier est muni d'une rampe, vous pouvez employer celle-ci pour vous appuyer et utiliser la canne de l'autre côté. Si possible, placez le côté sain du côté de la rampe. Appuyez-vous sur la main courante et placez la canne sur la première marche. Puis avancez votre jambe bien portante sur cette première marche et, ensuite, votre jambe malade.

9. Consignes de sécurité

- Ayez quelqu'un pour vous assister si c'est la première fois que vous utilisez une canne.
- La canne doit s'employer sur une surface correcte (pas trop de graviers).
- Redoublez de vigilance sur les sols humides et glissants.
- Avant chaque utilisation, vérifiez la hauteur de la canne.
- Vérifiez que les goupilles de blocages sont bien clipsées et resserrez fermement l'anneau antibruit.
- Ne lancez pas la canne trop en avant ou dans un virage afin d'éviter une chute.
- La canne n'est pas un jouet.
- Ne saisissez pas la poignée si vous avez les mains humides. - elles pourraient glisser et vous faire perdre prise.
- Ne faites pas des enjambées trop importantes avec la canne.
- **Le produit supporte une charge maximale de 100 kg.**
- Risque de brûlures - Soyez prudent lorsque vous utilisez dans des environnements extrêmement chauds ou froids (soleil, froid extrême, sauna, etc.) pour une durée déterminée et lorsqu'il y a des contacts - Les surfaces peuvent absorber la température ambiante.
- Suivez les instructions pour les soins et le contrôle. Le fabricant n'offre aucune garantie si le siège si celui-ci n'est pas utilisé conformément à sa destination et si les contrôles mentionnés dans le mode d'emploi n'ont pas été effectués.

10. Maintenance

Le mode d'emploi de la canne se trouve sur le site Internet de Vermeiren, www.vermeiren.fr, www.vermeiren.be.

INSTRUCTIE HANDLEIDING

Wandelstok Flora

1. Technische gegevens

⚠ WAARSCHUWING: Risico bij onveilige instellingen - Gebruik enkel de instellingen beschreven in deze handleiding.

Merk	Vermeiren
Adres	Vermeirenplein 1 / 15 B-2920 Kalmthout
Type	Wandelstok
Model	Flora
Breedte	120 mm
Totale hoogte	840 mm – 940 mm
Diepte	29 mm
Lengte handgreep	120 mm
Gewicht	0,30 kg
Maximum gebruikersgewicht*	max. 100 kg
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen te introduceren. Meettolerantie, +/- 15 mm / 1,5kg	



We willen U danken voor het vertrouwen dat U in de producten van **VERMEIREN** stelt. Voor U de wandelstok gebruikt, dient U de handleiding aandachtig te lezen zodat U vertrouwd raakt met het product.


De instructies voor het verzorgen en onderhouden van de wandelstokken kan U terug vinden op de Vermeiren website. Houd er rekening mee dat bij het naleven van onze adviezen Uw wandelstokken ook na jaren gebruik nog in perfecte staat is en perfect functioneert.

Als U nog vragen hebt, neemt U best contact op met Uw vakhandelaar.

Om een servicepunt of vakhandelaar in Uw buurt te vinden, neemt U contact op met de dichtstbijzijnde Vermeiren faciliteit. Een lijst van de Vermeiren faciliteiten zijn terug te vinden op de laatste bladzijde.

Mensen met een visuele beperking kunnen contact opnemen met de vakhandelaar voor de gebruikersinstructies.

2. Onderdelen

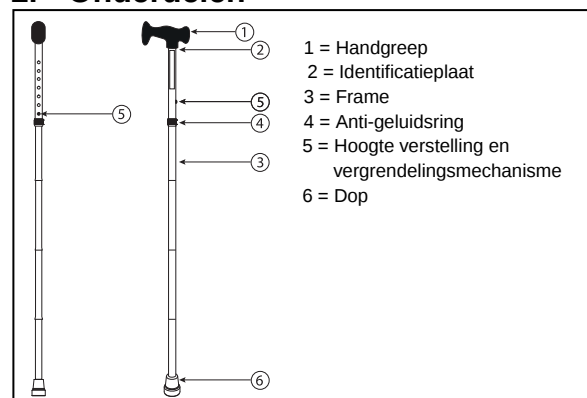

3. Gebruikte symbolen



Maximum gewicht



CE conformiteit

4. Controle bij ontvangst

Pak het product uit en controleer of de levering volledig is. In het pakket zitten:

- 1 wandelstok
- Dop
- Systeem voor hoogteverstelling
- Handleiding

Controleer de zending zorgvuldig op transportschade. Wanneer U vaststelt dat het product na de zending toch een defect vertoont, moet U het volgende doen:

- Neem contact op met de transporteur.
- Laat een verslag opmaken van de schade.
- Neem direct contact op met de vakhandelaar.

5. Gebruik / omgeving

⚠ WAARSCHUWING: Gevaar op vallen - Gebruik de wandelstokken niet als Uw armen, polsgewrichten zwak functioneren of bij een slecht evenwicht.

Een wandelstok geeft de gebruiker steun tijdens het lopen en vergemakkelijkt het lopen. Deze steun kan nodig zijn bij evenwichtsproblemen of pijn bij het lopen.

De wandelstok kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.

Bij natte ondergronden moet U wel extra voorzichtig zijn om niet uit te glijden.

De wandelstok mag niet worden gebruikt door mensen met een duidelijk verzwakte hand-/armfunctie, polsgewrichten of met duidelijke evenwichtsstoornissen.

De wandelstok is niet geschikt om te gebruiken in hoge bergen of ruwe ondergronden (grote stenen, ...).


6. Hoogteverstelling wandelstok

⚠ VOORZICHTIG: Kans op letsel - Controleer dat de borgpennen ② terug goed zijn vast geklikt.

Voor U de wandelstok gaat gebruiken moet U deze eerst op de juiste hoogte instellen.

De hoogte van de wandelstok kan U met behulp van volgende instructies instellen:

1. Schroef de anti-geluidsring ① los.
2. Duw op de borgpen ②.
3. Trek / Duw de onderbuis ③ tot de gewenste hoogte (10 verschillende posities: stappen van 25,5 mm).
Let hierbij dat de hoogte van Uw pols op gelijke hoogte komt met de handgreep als U Uw armen los laat hangen naast Uw lichaam. Controleer dat Uw lichaam rechtop is.
4. Controleer dat de borgpen ② terug goed is vast geklikt.
5. Schroef de anti-geluidsring ① terug goed vast.

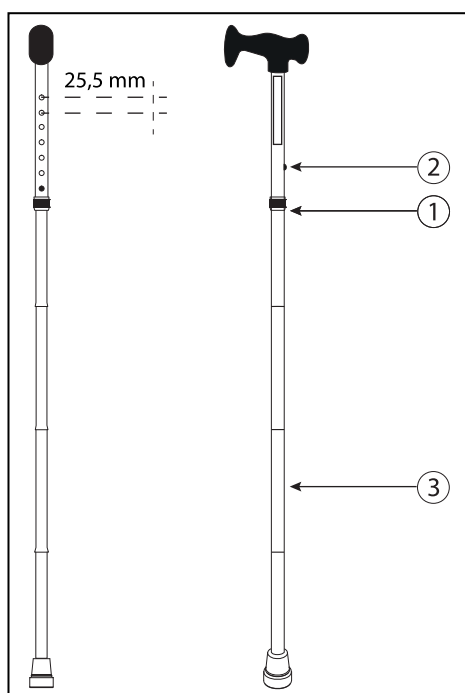

7. Lopen

⚠ VOORZICHTIG: Kans op vallen - Plaats de wandelstok niet te ver naar voor.

Volg het advies op van Uw arts of fysiotherapeut hoe U met de wandelstok moet lopen. Indien U geen advies heeft gekregen, kan U onderstaande instructies gebruiken:

- Loop altijd rechtop met de wandelstok vlak naast Uw lichaam.
- Zet de wandelstok tijdens het lopen nooit verder dan Uw voorste been.
- Wees voorzichtig met een natte/gladde ondergrond.
- Plaats de wandelstok niet te schuin bij het lopen anders kan U wegglijden.
- Plaats de wandelstok langs de kant van het gezonde been of de kant waar U ondersteuning nodig hebt. Zet Uw zwakke been tegelijk met de wandelstok naar voren en daarna Uw gezonde been.

8. Traplopen

Als er een leuning is kunt U deze als steun gebruiken en aan de andere kant de wandelstok gebruiken. Indien mogelijk, zorg ervoor, dat de leuning zich aan de gezonde kant van Uw lichaam bevindt.

Steun op de leuning en plaats de wandelstok op de eerste tree. Zet Uw gezonde been op de eerste tree en zet Uw zwakke been ernaast.

9. Veiligheidsinstructies

- Laat iemand U assisteren als dit de eerste keer is dat U een wandelstok gebruikt.
- Let erop dat U Uw wandelstok gebruikt op een goede ondergrond. (Niet met te veel kiezelstenen).
- Bij een natte/gladde ondergrond moet U extra voorzichtig zijn.
- Controleer voor ieder gebruik dat de wandelstok op een goede hoogte is ingesteld.
- Controleer dat de borgpen voor de hoogteverstelling goed zijn vast geklikt en de anti-geluidsring terug goed is aangedraaid.
- Plaats de wandelstok niet te schuin of te ver van Uw lichaam om valgevaar te vermijden.
- Gebruik de wandelstok niet als speelgoed.
- De handgreep niet met natte handen vastnemen. Anders kan U wegglijden en het evenwicht verliezen.
- Neem geen te grote passen met de wandelstok.
- **De toelaatbare belasting voor Uw wandelstok bedraagt 100 kg.**
- Gevaar voor brandwonden— Wees voorzichtig bij het gebruik in extreem warme of koude omgevingen (zon, extreme koude, sauna's, enz.) voor een bepaalde tijd en bij het aanraken - de oppervlakken kunnen de omgevingstemperatuur aannemen.
- Volg de instructies voor verzorging en controles. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die werd veroorzaakt door niet juiste controles / verzorging.

10. Onderhoud

Voor de onderhoudshandleiding van de wandelstokken kan U de website van Vermeiren raadplegen: www.vermeiren.be, www.vermeiren.nl.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Gehstock Flora

1. Technische Daten

⚠ WARNUNG: Nutzen Sie das Produkt nur gemäß den technischen Vor- und Angaben dieser Gebrauchsanweisung.

Hersteller	Vermeiren
Adresse	Vermeirenplein 1/15 B-2920 Kalmthout
Typ	Gehstock
Modell	Flora
Breite	120 mm
Gesamthöhe	840 mm – 940 mm
Tiefe	29 mm
Länge Handgriffe	120 mm
Gewicht	0,30 kg
Max. zulässige Belastung*	max. 100 kg
Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranz +/- 15 mm / 1,5 kg	



Zunächst möchten wir uns für das Vertrauen bedanken, das Sie in uns gesetzt haben, indem Sie sich für ein **VERMEIREN**-Produkt entschieden haben.

Lesen Sie vor dem Gebrauch des Gehstocks gründlich die Gebrauchsanweisung; sie soll Sie im Umgang mit diesem Produkt vertraut machen.


Pflege- und Sicherheitsanweisungen für Gehstöcke finden sich auf der Website von Vermeiren. Bitte bedenken Sie, dass die Beachtung unserer Hinweise Ihren Gehstock auch nach Jahren des Gebrauchs in ausgezeichnetem Erhaltungszustand und einwandfreier Funktion bewahrt.

Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Um einen Fachhändler in Ihrer Nähe zu finden, stehen Ihnen unsere Niederlassungen gerne zur Verfügung. Eine Auflistung aller Vermeiren Niederlassungen finden Sie auf der letzten Seite dieser Gebrauchsanweisung.

Sehbehinderte können sich zur Erläuterung der Bedienungsanleitung an den Händler wenden.

2. Komponenten

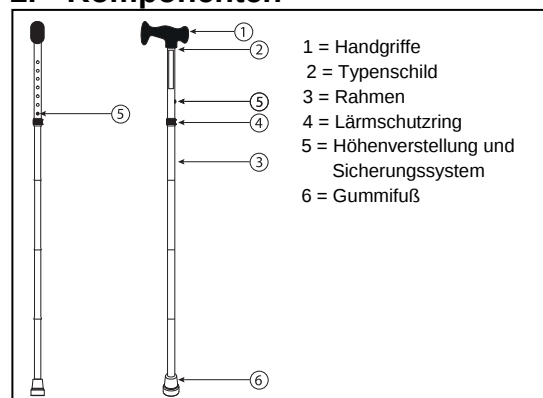

3. Zeichenerklärung



Max. zulässiges Gewicht



CE-Konformität

4. Prüfungen nach der Lieferung

Packen Sie Ihr Produkt aus und überprüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist. Zum Lieferumfang gehören:

- 1 Gehstock
- Gummifuß
- Höhenverstellung
- Gebrauchsanweisung

Prüfen Sie die Sendung sorgfältig auf Transportschäden. Sollten Sie feststellen, dass dieses Produkt oder die Sendung wider Erwarten einen Fehler aufweist, so verfahren Sie wie folgt:

- Wenden Sie sich an den Frachtführer.
- Lassen Sie den Schaden protokollieren,
- Informieren Sie Ihren Fachhändler unverzüglich.

5. Zweckbestimmung / Umgebung

⚠ WARNUNG: Sturzrisiko - Verwenden Sie den Gehstock nicht, wenn Ihr Arm oder Ihr Handgelenk geschwächt sind oder Sie über einen schlechten Gleichgewichtssinn verfügen.

Der Gehstock unterstützt Sie beim Gehen, wenn leichte Gleichgewichtsprobleme vorliegen oder wenn Sie Schmerzen beim Gehen haben.

Der Gehstock kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden.

Achten Sie besonders darauf, auf nassem Untergrund nicht auszurutschen.

Personen mit eingeschränkter Hand-/Armfunktion, geschwächten Handgelenken oder starken Gleichgewichtsproblemen dürfen den Gehstock jedoch nicht verwenden. Nicht vorgesehen ist der Gehstock als Wanderstock, oder für unwegsames Gelände (Berge, unbefestigte Straßen, Geröllstrecken etc).

6. Höhenverstellung des Gehstocks

⚠ VORSICHT: Sturzrisiko - Überprüfen Sie, dass die Federstifte ② wieder richtig eingerastet sind.


Ehe Sie den Gehstock verwenden, müssen Sie die richtige Höhe einstellen.

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Drehen Sie den Lärmschutzring ① los.
2. Drücken Sie auf den Federknopf ②.
3. Bewegen Sie das untere Einschubrohr in die gewünschte Länge (10 verschiedenen Positionen in 25,5 mm-Schritten).

Vergewissern Sie sich, dass sich der Handgriff auf der Höhe Ihres Handgelenks befindet, wenn Sie die Arme locker neben dem Körper herunterhängen lassen. Stellen Sie sicher, dass Sie aufrecht stehen.

4. Überprüfen Sie, dass der Federstift ② wieder richtig eingerastet ist.
5. Drehen Sie den Lärmschutzring ① wieder handfest an.

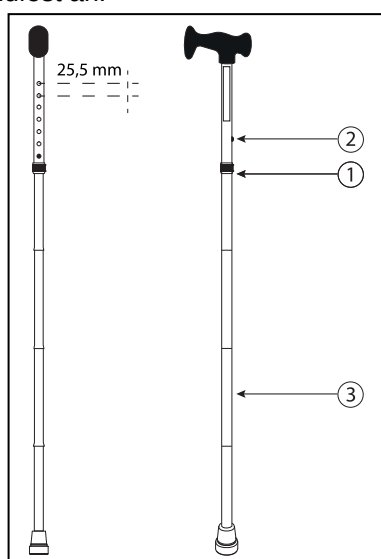

7. Gehen

⚠ VORSICHT: Sturzrisiko - Setzen Sie den Gehstock nicht zu weit vorne auf.

Befolgen Sie den Rat Ihres Arztes oder Physiotherapeuten zum Gehen mit einem Gehstock. Haben Sie keine Ratschläge erhalten, können Sie folgende Anweisungen befolgen:

- Gehen Sie immer aufrecht mit dem Gehstock direkt neben Ihrem Körper.
- Platzieren Sie den Gehstock beim Gehen niemals weiter nach vorne als Ihr Schritt beim Gehen reicht.
- Seien Sie bei nassem / rutschigem Untergrund vorsichtig.
- Setzen Sie den Gehstock beim Gehen nicht schräg auf, sonst besteht die Gefahr des Ausrutschens.
- Setzen Sie den Gehstock auf der Seite des gesunden Beins ein oder auf der Seite, die der Unterstützung bedarf. Bewegen Sie Ihr verletztes Bein zusammen mit dem Gehstock und anschließend Ihr gesundes Bein nach vorne.

8. Treppensteigen

Ist ein Geländer vorhanden, können Sie es als Stütze nutzen und den Gehstock auf der anderen Seite verwenden. Stellen Sie, falls möglich, sicher, dass sich das Geländer auf der gesunden Körperseite befindet.

Stützen Sie sich auf das Geländer und stellen Sie den Gehstock auf die erste Stufe. Stellen Sie Ihr gesundes Bein auf die erste Stufe und dann das verletzte Bein daneben.

9. Sicherheitsanweisungen

- Holen Sie sich Hilfe, wenn Sie diese Einstellungen und den Gehstock zum ersten Mal nutzen. Achten Sie darauf, den Gehstock nur auf geeignetem Untergrund einzusetzen (nicht zu viel Schotter).
- Seien Sie auf nassem / rutschigem Untergrund besonders vorsichtig.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die richtige Höhe eingestellt ist.
- Überprüfen Sie, dass der Federstift zur Höhenanpassung wieder richtig eingerastet ist und drehen Sie den Lärmschutzring wieder handfest an.
- Setzen Sie den Gehstock nicht schräg auf dem Boden oder zu weit von Ihrem Körper auf, um Sturzgefahr zu vermeiden.
- Die Verwendung als Spielzeug für Kinder ist untersagt.
- Fassen Sie den Handgriff nicht mit nassen Händen an. Sie könnten abrutschen und den Halt verlieren.
- Machen Sie mit dem Gehstock keine zu großen Schritte.
- **Das Produkt darf mit max. 100 kg belastet werden.**
- Verbrennungsgefahr: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Gehstock nach längerem Verwendung in heißer oder kalter Umgebung (direkte Sonne, extreme Kälte, Sauna usw.) berühren - die Oberflächen können die Umgebungstemperatur annehmen.
- Achten Sie auf die Pflege- und Wartungshinweise. Bei Schäden durch mangelnde Wartung/Pflege haftet der Hersteller nicht.

10. Wartung

Hinweise zur Wartung von Gehstöcken entnehmen Sie bitte der Website von Vermeiren:

www.vermeiren.de,
www.vermeiren.at, www.vermeiren.ch.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Gehstock Flora

1. Technische Daten

⚠ WARNUNG: Nutzen Sie das Produkt nur gemäß den technischen Vor- und Angaben dieser Gebrauchsanweisung.

Hersteller	Vermeiren
Adresse	Vermeirenplein 1/15 B-2920 Kalmthout
Typ	Gehstock
Modell	Flora
Breite	120 mm
Gesamthöhe	840 mm – 940 mm
Tiefe	29 mm
Länge Handgriffe	120 mm
Gewicht	0,30 kg
Max. zulässige Belastung*	max. 100 kg
Technische Änderungen vorbehalten. Maßtoleranz +/- 15 mm / 1,5 kg	



Zunächst möchten wir uns für das Vertrauen bedanken, das Sie in uns gesetzt haben, indem Sie sich für ein **VERMEIREN**-Produkt entschieden haben.

Lesen Sie vor dem Gebrauch des Gehstocks gründlich die Gebrauchsanweisung; sie soll Sie im Umgang mit diesem Produkt vertraut machen.


Pflege- und Sicherheitsanweisungen für Gehstöcke finden sich auf der Website von Vermeiren. Bitte bedenken Sie, dass die Beachtung unserer Hinweise Ihren Gehstock auch nach Jahren des Gebrauchs in ausgezeichnetem Erhaltungszustand und einwandfreier Funktion bewahrt.

Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Um einen Fachhändler in Ihrer Nähe zu finden, stehen Ihnen unsere Niederlassungen gerne zur Verfügung. Eine Auflistung aller Vermeiren Niederlassungen finden Sie auf der letzten Seite dieser Gebrauchsanweisung.

Sehbehinderte können sich zur Erläuterung der Bedienungsanleitung an den Händler wenden.

2. Komponenten

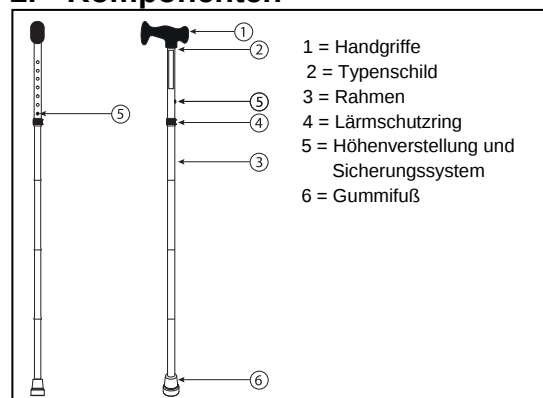

3. Zeichenerklärung



Max. zulässiges Gewicht



CE-Konformität

4. Prüfungen nach der Lieferung

Packen Sie Ihr Produkt aus und überprüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist. Zum Lieferumfang gehören:

- 1 Gehstock
- Gummifuß
- Höhenverstellung
- Gebrauchsanweisung

Prüfen Sie die Sendung sorgfältig auf Transportschäden. Sollten Sie feststellen, dass dieses Produkt oder die Sendung wider Erwarten einen Fehler aufweist, so verfahren Sie wie folgt:

- Wenden Sie sich an den Frachtführer.
- Lassen Sie den Schaden protokollieren,
- Informieren Sie Ihren Fachhändler unverzüglich.

5. Zweckbestimmung / Umgebung

⚠ WARNUNG: Sturzrisiko - Verwenden Sie den Gehstock nicht, wenn Ihr Arm oder Ihr Handgelenk geschwächt sind oder Sie über einen schlechten Gleichgewichtssinn verfügen.

Der Gehstock unterstützt Sie beim Gehen, wenn leichte Gleichgewichtsprobleme vorliegen oder wenn Sie Schmerzen beim Gehen haben.

Der Gehstock kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden.

Achten Sie besonders darauf, auf nassem Untergrund nicht auszurutschen.

Personen mit eingeschränkter Hand-/Armfunktion, geschwächten Handgelenken oder starken Gleichgewichtsproblemen dürfen den Gehstock jedoch nicht verwenden. Nicht vorgesehen ist der Gehstock als Wanderstock, oder für unwegsames Gelände (Berge, unbefestigte Straßen, Geröllstrecken etc).

6. Höhenverstellung des Gehstocks

⚠ VORSICHT: Sturzrisiko - Überprüfen Sie, dass die Federstifte ② wieder richtig eingerastet sind.


Ehe Sie den Gehstock verwenden, müssen Sie die richtige Höhe einstellen.

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Drehen Sie den Lärmschutzring ① los.
2. Drücken Sie auf den Federknopf ②.
3. Bewegen Sie das untere Einschubrohr in die gewünschte Länge (10 verschiedenen Positionen in 25,5 mm-Schritten).

Vergewissern Sie sich, dass sich der Handgriff auf der Höhe Ihres Handgelenks befindet, wenn Sie die Arme locker neben dem Körper herunterhängen lassen. Stellen Sie sicher, dass Sie aufrecht stehen.

4. Überprüfen Sie, dass der Federstift ② wieder richtig eingerastet ist.
5. Drehen Sie den Lärmschutzring ① wieder handfest an.

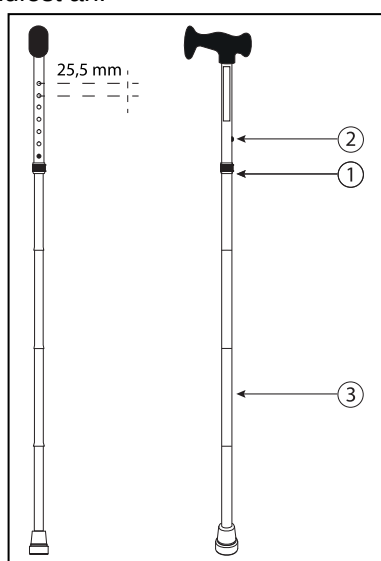

7. Gehen

⚠ VORSICHT: Sturzrisiko - Setzen Sie den Gehstock nicht zu weit vorne auf.

Befolgen Sie den Rat Ihres Arztes oder Physiotherapeuten zum Gehen mit einem Gehstock. Haben Sie keine Ratschläge erhalten, können Sie folgende Anweisungen befolgen:

- Gehen Sie immer aufrecht mit dem Gehstock direkt neben Ihrem Körper.
- Platzieren Sie den Gehstock beim Gehen niemals weiter nach vorne als Ihr Schritt beim Gehen reicht.
- Seien Sie bei nassem / rutschigem Untergrund vorsichtig.
- Setzen Sie den Gehstock beim Gehen nicht schräg auf, sonst besteht die Gefahr des Ausrutschens.
- Setzen Sie den Gehstock auf der Seite des gesunden Beins ein oder auf der Seite, die der Unterstützung bedarf. Bewegen Sie Ihr verletztes Bein zusammen mit dem Gehstock und anschließend Ihr gesundes Bein nach vorne.

8. Treppensteigen

Ist ein Geländer vorhanden, können Sie es als Stütze nutzen und den Gehstock auf der anderen Seite verwenden. Stellen Sie, falls möglich, sicher, dass sich das Geländer auf der gesunden Körperseite befindet.

Stützen Sie sich auf das Geländer und stellen Sie den Gehstock auf die erste Stufe. Stellen Sie Ihr gesundes Bein auf die erste Stufe und dann das verletzte Bein daneben.

9. Sicherheitsanweisungen

- Holen Sie sich Hilfe, wenn Sie diese Einstellungen und den Gehstock zum ersten Mal nutzen. Achten Sie darauf, den Gehstock nur auf geeignetem Untergrund einzusetzen (nicht zu viel Schotter).
- Seien Sie auf nassem / rutschigem Untergrund besonders vorsichtig.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die richtige Höhe eingestellt ist.
- Überprüfen Sie, dass der Federstift zur Höhenanpassung wieder richtig eingerastet ist und drehen Sie den Lärmschutzring wieder handfest an.
- Setzen Sie den Gehstock nicht schräg auf dem Boden oder zu weit von Ihrem Körper auf, um Sturzgefahr zu vermeiden.
- Die Verwendung als Spielzeug für Kinder ist untersagt.
- Fassen Sie den Handgriff nicht mit nassen Händen an. Sie könnten abrutschen und den Halt verlieren.
- Machen Sie mit dem Gehstock keine zu großen Schritte.
- **Das Produkt darf mit max. 100 kg belastet werden.**
- Verbrennungsgefahr: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Gehstock nach längerem Verwendung in heißer oder kalter Umgebung (direkte Sonne, extreme Kälte, Sauna usw.) berühren - die Oberflächen können die Umgebungstemperatur annehmen.
- Achten Sie auf die Pflege- und Wartungshinweise. Bei Schäden durch mangelnde Wartung/Pflege haftet der Hersteller nicht.

10. Wartung

Hinweise zur Wartung von Gehstöcken entnehmen Sie bitte der Website von Vermeiren:

www.vermeiren.de,
www.vermeiren.at, www.vermeiren.ch.

MANUALE DI ISTRUZIONI

Bastoni Flora

1. Dettagli tecnici

⚠ AVVERTENZA: Utilizzare solo nel modo descritto nel presente manuale.

Produttore	Vermeiren
Indirizzo	Vermeirenplein 1 / 15 B-2920 Kalmthout
Tipo	Bastoni
Modello	Flora
Larghezza	120 mm
Altezza totale	840 mm – 940 mm
Profondità	29 mm
Lunghezza Impugnatura	120 mm
Peso	0,30 kg
Peso massimo dell'occupante*	max. 100 kg
La casa produttrice si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche. Tolleranza +/- 15 mm / kg	




Ringraziamo per la fiducia accordataci con l'acquisto di un articolo di nostra produzione. Prima di usare il bastone, leggete attentamente il manuale di istruzioni: vi consentirà di familiarizzare con il prodotto. Per le istruzioni di manutenzione e sicurezza del bastone, consultate il sito web Vermeiren. Ricordiamo che il rispetto dei nostri suggerimenti vi consentirà di mantenere il bastone in un ottimo stato di conservazione e perfettamente funzionante anche dopo anni di utilizzo.

Per qualsiasi chiarimento, rivolgersi al rivenditore specializzato.

Per individuare il centro assistenza o il rivenditore specializzato più vicino, contattare il centro Vermeiren. Nell'ultima pagina del manuale, è disponibile un elenco di centri Vermeiren autorizzati.

I pazienti con problemi di vista possono contattare il rivenditore per le istruzioni d'uso.

2. Componenti

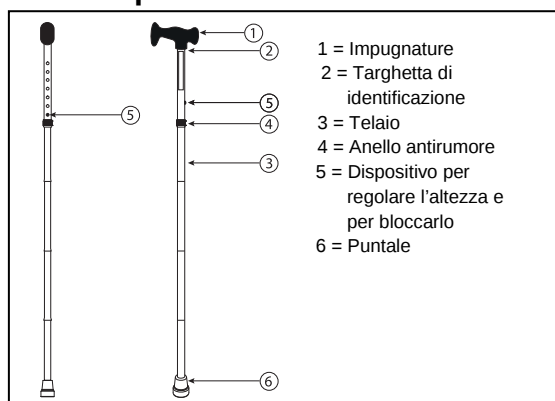

3. Significato dei simboli



Peso massimo



Conformità CE

4. Controllo dopo la consegna

Disimballare il prodotto e verificare che tutti i componenti siano stati consegnati. Devono essere incluse le parti seguenti:

- 1 bastone
- Puntale
- Sistema di regolazione dell'altezza
- Manuale

Verificare che non si siano prodotti danni durante il trasporto. In tal caso procedere come segue:

- Rivolgersi al corriere
- Far certificare i danni
- Informare immediatamente il corriere.

5. Utilizzo previsto / ambiente

⚠ AVVERTENZA: Rischio di caduta - Non utilizzate il bastone in caso di braccia deboli, funzione dei polsi compromessa o scarso equilibrio.

Il bastone aiuta l'utilizzatore a camminare meglio dando il giusto supporto. Questo supporto può essere utile per alleviare problemi durante la marcia.

Il bastone può essere utilizzato in spazi interni o all'esterno.

Prestate la massima attenzione a non scivolare durante l'utilizzo su superfici bagnate.

Il bastone non può essere usato da persone con ridotte funzioni del braccio/della mano e delle articolazioni del polso, o da persone con problemi di equilibrio.

Non è consigliabile utilizzare il bastone su superfici non pianeggianti.

6. Regolazione dell'altezza


⚠ ATTENZIONE: Rischio di caduta - Verificate che i perni di regolazione ② siano bloccati correttamente.

Prima di usare il bastone è necessario regolarle all'altezza giusta.

Per regolare l'altezza del bastone, seguite le istruzioni seguenti:

1. Svitare l'anello antirumore ①.
2. Premere sull'aggancio ②.

3. Tirare / spingere il tubo più in basso ③ fino all'altezza desiderata (10 differenti posizioni: incremento di 25,5 mm). Assicurarsi che il polso si trovi alla medesima altezza della maniglia quando allungate le braccia lungo il corpo. Assicurarsi di mantenere la posizione eretta.
4. Verificare che il perno di regolazione ② sia bloccato correttamente.
5. Stringete con fermezza l'anello antirumore ①.

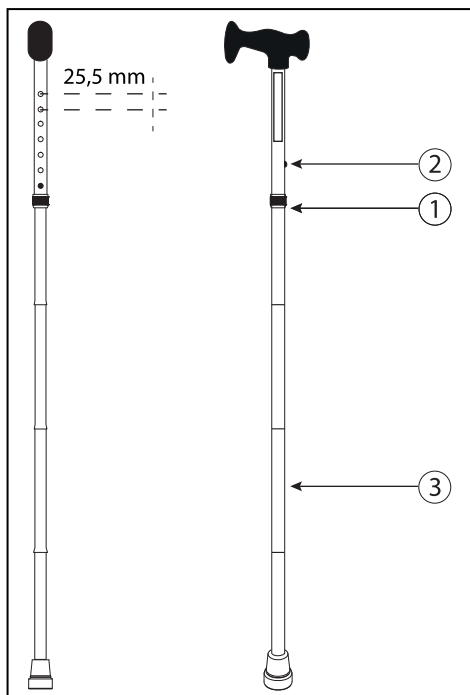

7. Deambulazione

⚠ ATTENZIONE: Rischio di caduta – Non posizionate il bastone troppo in avanti.

Per le tecniche di deambulazione con il bastone, seguite i consigli del vostro medico o fisioterapista. Se non potete avvalervi di nessun consiglio, utilizzate le istruzioni riportate di seguito:

- Camminate sempre in posizione eretta con il bastone vicino al corpo.
- Durante la deambulazione, non portate mai il bastone oltre la gamba anteriore.
- Prestate attenzione sui terreni bagnati/scivolosi.
- Non disegnate una curva con il bastone mentre camminate, altrimenti potreste scivolare.
- Posizionare il bastone dalla parte della gamba lesionata oppure dalla parte in cui si necessita il supporto. Portate la gamba interessata in avanti contemporaneamente al bastone, poi la gamba sana.

8. Salire le scale

Nel caso in cui possiate usufruire di un corrimano, utilizzatelo come supporto da un lato, avvalendovi dall'altro del bastone. Se possibile, assicuratevi che il corrimano si trovi sul lato sano del corpo.

Appoggiatevi al corrimano e mettete il bastone sul primo gradino. Posizionate la gamba sana sul primo gradino e mettete la gamba interessata al suo fianco.

9. Istruzioni per la sicurezza

- Se utilizzate per la prima volta un bastone, fatelo con accanto una persona che vi assiste.
- Il bastone deve essere utilizzato su una superficie uniforme. (senza troppa ghiaia).
- Prestate la massima attenzione su terreni bagnati/scivolosi.
- Prima di ogni utilizzo, assicuratevi che il bastone sia regolato all'altezza corretta.
- Assicuratevi che i perni di regolazione siano bloccati correttamente indietro e che l'anello anti rumore sia fissato saldamente.
- Non disegnate una curva con il bastone né posizionatele troppo in avanti, per evitare il rischio di caduta.
- Non utilizzate il bastone come un giocattolo.
- Non tenere le impugnature con le mani umide, perché potrebbero scivolare facendo perdere l'equilibrio.
- Non utilizzate il bastone per fare passi troppo lunghi.
- **Il prodotto è progettato per un carico massimo di 100 kg.**
- pericolo di ustioni - Prestare attenzione in caso di permanenza in ambienti molto caldi o molto freddi (esposizione al sole, freddo estremo, sauna, ecc.) per un periodo di tempo prolungato. Le superfici potrebbero assumere la stessa temperatura dell'ambiente in cui si trova la carrozzina.
- La casa costruttrice declina ogni garanzia e responsabilità in caso di uso improprio e di mancata esecuzione dei controlli prescritti nelle istruzioni per l'uso. La casa costruttrice declina ogni garanzia e responsabilità in caso di uso improprio e di mancata esecuzione dei controlli prescritti nelle istruzioni per l'uso.

10. Manutenzione

Per il manuale di manutenzione del bastone consultate il sito web Vermeiren: www.vermeiren.it.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Bastones Flora

1. Datos técnicos

⚠ ADVERTENCIA: Riesgo por ajustes peligrosos; utilice únicamente los ajustes indicados en este manual.

Fabricante	Vermeiren
Dirección	Vermeirenplein 1/15, B-2920 Kalmthout
Tipo	Bastones
Modelo	Flora
Anchura	120 mm
Altura total	840 mm – 940 mm
Profundidad	29 mm
Longitud empuñaduras	120 mm
Peso	0,30 kg
Peso máximo del usuario*	máx. 100 kg
Nos reservamos el derecho a aplicar modificaciones técnicas. Tolerancia de la medida +/- 15 mm/kg	



En primer lugar, queremos agradecerle la confianza que ha puesto en nosotros eligiendo un producto **VERMEIREN**.

Antes de usar el bastón, lea el manual de instrucciones con atención para familiarizarse con el producto.


Visite el sitio web de Vermeiren para consultar las instrucciones de mantenimiento y seguridad de los bastones. Recuerde que tener en cuenta nuestros consejos hará que los bastones se conserven en perfecto estado y funcionen correctamente incluso tras años de utilización.

Si tiene más preguntas, le rogamos que consulte a su distribuidor especializado.

Para encontrar un centro de servicio o un distribuidor especializado cerca de usted, póngase en contacto con el centro Vermeiren más próximo. Puede encontrar una lista con los centros Vermeiren en la última página.

Las personas con deficiencias visuales pueden ponerse en contacto con el distribuidor para obtener las instrucciones de uso.

2. Componentes

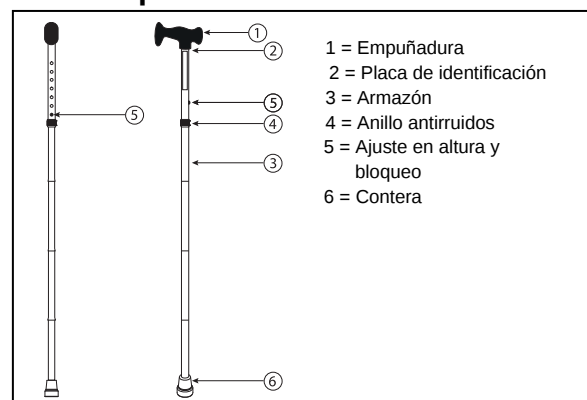

3. Explicación de los símbolos



Peso máximo



Conformidad con la normativa CE

4. Comprobación tras la entrega

Desembale el producto y compruebe que incluye todos los componentes. El paquete debe contener los siguientes elementos:

- 1 bastón
- Contera
- Sistema de ajuste en altura
- Manual

Inspeccione el producto para comprobar si ha sufrido daños durante el transporte. Si encuentra daños tras la entrega, proceda de la siguiente manera:

- Póngase en contacto con el transportista
- Haga una lista con los problemas detectados
- Póngase en contacto con su proveedor

5. Uso previsto / entorno

⚠ ADVERTENCIA: Riesgo de caída. No emplee los bastones si siente debilidad en los brazos, muñecas o tiene problemas de equilibrio.

El bastón se utiliza como apoyo durante la marcha del usuario y facilita el caminar. Éste apoyo es muy útil cuando el usuario tiene problemas de equilibrio o dolores al caminar.

Los bastones se pueden utilizar tanto en lugares cerrados como en espacios abiertos. Preste especial atención para no resbalar al emplearlas en superficies húmedas.

Sin embargo, no deben utilizarlas personas con función reducida visible del brazo o de la mano, las muñecas, ni personas con problemas graves de equilibrio.

El bastón no es adecuado para utilizarlo en alta montaña, o en suelo irregular (piedras grandes,...).


6. Ajuste de la altura del bastón

⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de caída. Compruebe que los resortes ② están correctamente apretados.

Antes de usar los bastones, debe ajustarlos a la altura adecuada.

Para ajustar la altura de los bastones, siga estas instrucciones:

1. Desenrosque el anillo antirruidos ①.
2. Presione el pasador ②.
3. Tire / empuje del tubo inferior ③ hasta la altura deseada (10 posiciones diferentes: intervalos de 25,5 mm).
Asegúrese de que la altura de la muñeca se encuentra a la misma altura que la empuñadura al colocar los brazos al lado del cuerpo. Este debe encontrarse en posición vertical.
4. Compruebe que el resorte ② está apretado correctamente.
5. Vuelva a apretar con fuerza el anillo antirruidos ①.

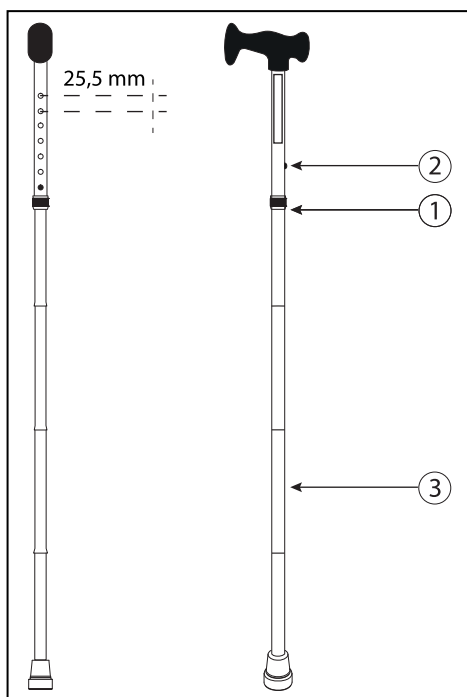

7. Caminar

⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de caída. No coloque los bastones demasiado hacia delante.

Siga las indicaciones del médico o fisioterapeuta sobre cómo usar los bastones. Si no le han dado instrucciones, siga estas a continuación:

- Camine siempre derecho con los bastones pegados al cuerpo.
- Al caminar, nunca coloque los bastones más allá de la pierna adelantada.
- Tenga cuidado en las superficies húmedas o resbaladizas.
- No coloque los bastones en diagonal al caminar. De lo contrario, podría resbalar.
- Coloque el bastón en el lado de la pierna no dañada o en el lado que usted necesite apoyo. Desplace la pierna

dañada hacia delante al mismo tiempo que los bastones y, después, la pierna sana.

8. Subir o bajar escalones

Cuando exista un pasamanos, puede utilizarlo como soporte de un lado y uno de los bastones, como soporte del otro lado. Si es posible, el pasamanos debe encontrarse en el lado sano del cuerpo.

Apóyese en el pasamanos y coloque el bastón en el primer escalón. Coloque la pierna sana en el primer escalón y, después, la dañada, al lado.

9. Instrucciones de seguridad

- Haga que alguien le ayude si es la primera vez que utiliza un bastón para caminar.
- Debe emplear los bastones en superficies adecuadas, en que no haya demasiada gravilla.
- Preste especial atención en superficies húmedas/resbaladizas.
- Antes de cada uso, compruebe si los bastones están ajustados a la altura correcta.
- Verifique que los resortes de ajuste de la altura están debidamente apretados y el anillo antirruidos está fijado correctamente.
- No coloque los bastones en diagonal demasiado alejados del cuerpo para evitar el riesgo de caída.
- Los bastones no son un juguete.
- No sujete las empuñaduras con las manos mojadas. Si lo hiciera, podría no tener un buen agarre y perder el equilibrio.
- No realice grandes zancadas con el bastón.
- **El peso máximo del usuario del producto es de 100 kg.**
- Riesgo de quemaduras; tenga cuidado cuando se use en entornos calientes o fríos (luz solar, frío extremo, saunas, etc.) durante un período de tiempo prolongado, ya que podría quemarse al tocar el dispositivo.
- Tenga en cuenta las instrucciones de cuidado y mantenimiento. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños derivados de un cuidado o mantenimiento incorrectos.

10. Mantenimiento

Para consultar el manual de mantenimiento de los bastones, visite el sitio web de Vermeiren.

Instrukcję obsługi

Laski Flora

1. Dane techniczne

⚠ OSTRZEŻENIE: Ryzyko niebezpiecznych ustawień — należy używać wyłącznie ustawień opisanych w tej instrukcji obsługi.

Producent	Vermeiren
Adres	Vermeirenplein 1 / 15 B-2920 Kalmthout
Typ	Laski
Model	Flora
Szerokość	120 mm
Wysokość całkowita	840 mm – 940 mm
Głębokość	29 mm
Długość uchwyt	120 mm
Waga	0,30 kg
Maksymalna waga użytkownika	maks. 100 kg
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych. Tolerancja pomiaru +/- 15 mm / 1,5 kg	



Dziękujemy za zaufanie jakim nas Państwo obdarzyliście wybierając wyroby **VERMEIREN**.

Przed użyciem laski, uważnie przeczytaj instrukcję obsługi; będzie to pomocne w zapoznaniu się z tym produktem.


Na stronie internetowej "Vermeiren" znajdziesz instrukcje bezpieczeństwa i wskazówki dotyczące obchodzenia się z laski. Prosimy zapamiętać, że przestrzeganie naszych zaleceń i utrzymanie laski w doskonałym stanie, pozwoli na ich użytkowanie na najwyższym poziomie nawet po wielu latach używania.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się ze sprzedawcą.

Aby uzyskać informację o odpowiednim punkcie serwisowym lub wyspecjalizowanym sprzedawcy, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Vermeiren. Wykaz przedstawicieli firmy Vermeiren podano na ostatniej stronie.

Osoby niedowidzące mogą skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania instrukcji użytkowania.

2. Składniki

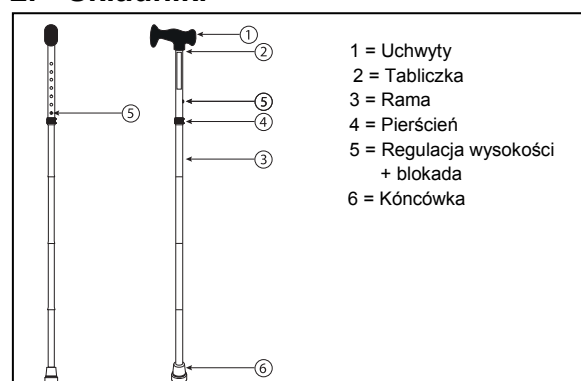

3. Objaśnienie symboli



Waga maksymalna



CE deklaracja

4. Kontrola po dostawie

Dostarczony produkt należy rozpakować i sprawdzić, czy zawiera wszystkie elementy. W zestawie powinny znajdować się:

- 1 laskę
- Kóncówka
- System regulowania wysokości
- Instrukcja obsługi

Proszę sprawdzić wyrób pod kątem zniszczeń w transporcie. Jeśli wyrób nosi ślady uszkodzeń w transporcie proszę zastosować się do poniższej procedury:

- Proszę skontaktować się i poinformować firmę transportową
- Sporządzić listę uszkodzeń
- Skontaktuj się ze sprzedawcą

5. Przeznaczenie / środowisko

⚠ OSTRZEŻENIE: Ryzyko upadku – Nie używaj laskę jeśli masz słabą rękę, dysfunkcję stawu nadgarstkowego lub problemy z równowagą.

Laska Flora służy jako pomoc przy poruszaniu się. Laska pomaga utrzymać balans ciała oraz w przypadku bólu kończyn odciąża obololą nogę.

Laskę mogą być używane w mieszkaniu i na dworze.

Bądź bardzo ostrożny aby się nie poślizgnąć, jeśli używasz kul na mokrych powierzchniach.

W żadnym wypadku kule nie mogą być używane przez osoby z widoczną funkcją słabej ręki/ramienia, stawów nadgarstka lub osoby z zaburzeniami równowagi.

Laska ta nie jest przeznaczona do poruszania się po wysokich górach czy jaskiniach oraz nie może być wykorzystywana jako pomoc przy poruszaniu się po wielkich kamieniach.

6. Regulacja wysokości laski Flora


⚠ PRZESTROGA: Ryzyko upadku – Sprawdź czy styki sprężynowe ② są dobrze zatrzasknięte.

Przed użyciem laskę, należy je ustawić w prawidłowej wysokości.

Ustaw wysokość laskę, zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Odkręć pierścień ①.

2. Wciśnij sprężynkę blokującą ②.
3. Pociągnij/popchnij dolną rurę ② do pożądanego przez siebie wysokości (jest 10 opcji wysokości oddalonych od siebie co 25,5 mm).
Upewnij się, że twój nadgarstek jest na tej samej wysokości co uchwyt, w momencie kiedy ręka jest luźno opuszczona wzdłuż ciała. Upewnij się, że twoje ciało jest w pozycji pionowej.
4. Upewnij się, że styki sprężynowe ② są odpowiednio zatrzaśnięte.
5. Dokręć mocno pierścień ①.

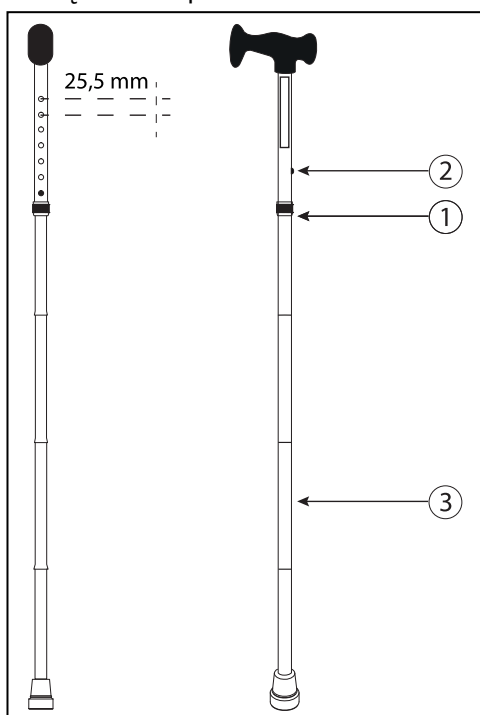

7. Chodzenie

⚠ PRZESTROGA: Ryzyko upadku – Nie wysuwaj laskę zbyt daleko do przodu.

Stosuj się do wskazówek lekarza lub fizjoterapeuty, w jaki sposób powinienś chodzić z laską. Jeśli nie otrzymałeś takich wskazówek, możesz się stosować do poniższych uwag:

- Zawsze chodź wyprostowany, z laską blisko ciała.
- Podczas chodzenia nie stawiaj laskę dalej niż wysunięta noga.
- Bądź ostrożny na mokrym/śliskim podłożu.
- Podczas marszu, nie stawiaj laskę na nierównej powierzchni – możesz upaść.
- Laska powinna być używana po tej stronie ciała z którą masz problem. Jeśli twoja lewa noga potrzebuje wsparcia laska powinna znajdować się z lewej strony jeśli prawa to z prawej strony.

- Stawiaj krok chorą nogą razem z laską, a potem zrób krok zdrową nogą.

8. Chodzenie po schodach

Jeśli dostępna jest poręcz, możesz jej użyć jako podpórki z jednej strony, a z drugiej użyj laskę. W ramach możliwości, korzystaj z poręczy po stronie zdrowej nogi. Oprzyj się na poręczy i ustaw laskę na pierwszym stopniu. Ustaw zdrową nogę na pierwszym stopniu, a następnie dostaw chorą nogę.

9. Instrukcje bezpieczeństwa

- Poproś o pomoc w złożeniu laski, jeśli robisz to po raz pierwszy.
- Zapamiętaj, że możesz używać laskę na dobrej powierzchni. (Nie używaj, jeśli jest zbyt dużo żwiru).
- Bądź bardzo ostrożny na mokrym/śliskim podłożu.
- Przed każdym użyciem, upewnij się że laskę są ustawione na odpowiedniej wysokości.
- Sprawdź czy styki sprężynowe są dobrze zatrzaśnięte oraz czy nakładka gumowa jest poprawnie nałożona i się dobrze przylega.
- Aby uniknąć ryzyka upadku, nie stawiaj laskę na krzywiznach i zbyt daleko od twojego ciała.
- Nie używaj laskę jako zabawki.
- Nie należy chwycić uchwyt wilgotnymi dłońmi. Ręce mogą się ześliznąć z uchwytów i w ten sposób użytkownik może utracić równowagę.
- Chodząc z laską, nie stawiaj zbyt dużych kroków.
- **Maksymalna dopuszczana waga użytkownika to 100 kg i produktu.**
- Ryzyko poparzenia - należy zachować ostrożność podczas użytkowania przy bardzo wysokich i niskich temperaturach (na ostrym słońcu, mrozie, w saunie itp.) przez dłuższy czas i przy kontakcie ze skórą - powierzchnie mogą przyjmować temperaturę otoczenia.
- Proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją w zakresie bezpieczeństwa iserwisu. Producent nie bierze odpowiedzialność za zniszczenia spowodowane przez nie właściwe użytkowanie i konserwację.

10. Konserwacja

Instrukcje dotyczące konserwacji ręczny laskę znajdziesz na stronie internetowej firmy Vermeiren: www.vermeiren.pl.

NÁVOD K POUŽITÍ

Vycházková hůl Flora

1. Technické údaje

VAROVÁNÍ: Riziko nebezpečného nastavení – Používejte pouze nastavení popsaná v tomto návodu.

Značka	Vermeiren	
Adresa	Vermeirenplein 1/15, B-2920 Kalmthout	
Typ	Vycházková hůl	
Model	Flora	
Šířka	120 mm	
Celková výška	840 mm – 940 mm	
Hloubka	29 mm	
Délka rukojeti	120 mm	
Hmotnost	0,30 kg	
Maximální hmotnost uživatele*	max. 100 kg	
Vyhrazuji si právo provést technické změny. Tolerance měření ±15 mm / 1,5 kg.		

Nejprve bychom rádi poděkovali za důvěru, kterou jste projevili výběrem produktu společnosti VERMEIREN.

Před použitím vycházkové hole si pečlivě přečtěte návod k použití, s jehož pomocí se seznámíte s tímto produktem.


Pokyny k údržbě a bezpečnostní informace k vycházkové holi naleznete na webových stránkách společnosti Vermeiren. Pamatujte, že dodržováním našich rad uchováte vycházkovou hůl v perfektním stavu, aby vám mohla výborně sloužit i po mnoha letech používání.

Máte-li jakékoli další dotazy, obraťte se na odborného prodejce.

Chcete-li najít servisní středisko či odborného prodejce ve svém okolí, kontaktujte nejbližší pobočku společnosti Vermeiren. Seznam poboček společnosti Vermeiren naleznete na poslední stránce.

Zřakově postižené osoby mohou o pokyny k použití požádat prodejce.

2. Součásti

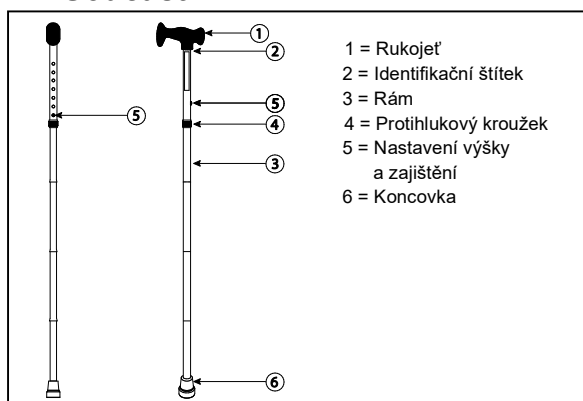

3. Vysvětlení symbolů



Max. hmotnost



Shoda s CE

4. Kontrola při doručení

Vybalte produkt a ověřte, zda je dodávka kompletní. Musí obsahovat následující položky:

- 1 vycházková hůl
- Koncovka
- Systém pro nastavení výšky
- Návod

Ověřte, že se produkt při přepravě nepoškodil. Zjistíte-li při dodání jakékoli škody, postupujte následovně:

- Kontaktujte dopravce
- Sepište seznam všech problémů
- Kontaktujte dodavatele

5. Zamýšlené použití/prostředí

VAROVÁNÍ: Nebezpečí pádu – Nepoužívejte vycházkovou hůl pokud trpíte oslabenou funkcí paže, zápěstního kloubu nebo špatnou rovnováhou.

Vycházková hůl poskytuje uživateli podporu při chůzi a usnadňuje chození. Tato podpora je užitečná při potížích s rovnováhou nebo v případě bolesti při chůzi.

Vycházkovou hůl lze používat ve vnitřních prostorech i venku.

Při používání na mokřích površích buďte obzvlášť opatrní, abyste neuklouzli.

Produkt ovšem nemohou používat osoby s výrazně oslabenou funkcí ruky/paže nebo zápěstního kloubu.

Vycházková hůl není vhodná k použití ve vysokých horách nebo na hrubém podkladu (velké kameny apod.).


6. Výškově nastavitelná vycházková hůl

- ⚠ UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí pádu – Zkontrolujte, že jsou pružinové kolíky ② správně zacvaknuté.**

Před použitím vycházkové hole je nutné je nastavit do správné výšky.

Výšku vycházkové hole nastavte podle následujících pokynů:

1. Vyšroubujte protihlukový kroužek ①.
2. Zatlačte na pružinový kolík ②.
3. Vytažením/zatlačením dolní trubky ③ nastavte požadovanou výšku (5 různých poloh v krocích po 25,5 mm).
Když máte ruce volně u těla, vaše zápěstí musí být ve stejné výšce jako rukojeť. Musíte stát rovně.
4. Zkontrolujte, že je pružinový kolík ② správně zacvaknutý.
5. Znovu řádně utáhněte protihlukový kroužek ①.

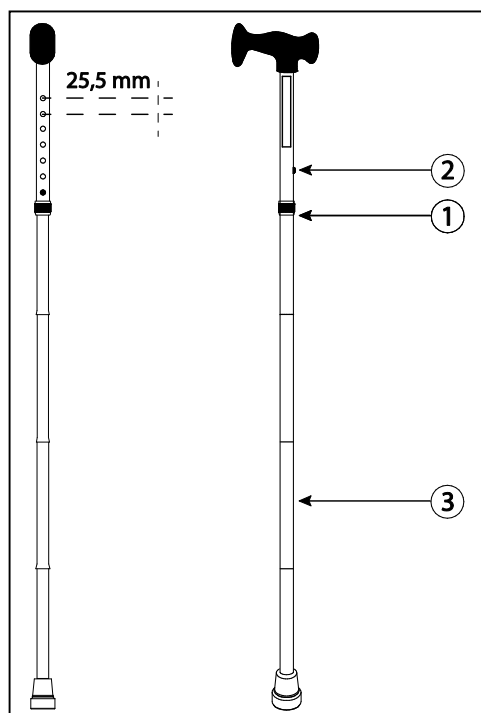

7. Chůze

- ⚠ UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí pádu – Nedávejte vycházkovou hůl příliš daleko před sebe.**

Řiďte se pokyny lékaře nebo fyzioterapeuta ohledně chůze s vycházkovou hůlí. Pokud jste žádné pokyny neobdrželi, řiďte se těmi následujícími:

- Vždy chodte vzpřímeně s vycházkovou hůlí vedle těla.
- Vycházkovou hůl při chůzi nedávejte nikdy dál než přední nohu.

- Buďte opatrní na mokřím/klzkém povrchu.
- Nedávejte vycházkovou hůl při chůzi křivě, jinak můžete podklouznout.
- Vycházkovou hůl mějte na straně s nepostiženou nohou nebo straně, kde potřebujete podporu. Postiženou nohu dávejte vpřed současně s vycházkovou hůlí, poté nepostiženou nohu.

8. Chůze po schodech

Pokud je k dispozici zábradlí, můžete se o něj opřít a na druhé straně můžete používat vycházkovou hůl. Pokud je to možné, zábradlí by mělo být na vaší zdravé straně. Opřete se o zábradlí a položte vycházkovou hůl na první schod. Dejte na první schod nepostiženou nohu a potom vedle ní dejte postiženou nohu.

9. Bezpečnostní pokyny

- Pokud vycházkovou hůl používáte poprvé, nechte si od někoho pomoci.
- Používejte vycházkovou hůl na dobrém povrchu. (Bez velkého množství šterku.)
- Na mokřím/klzkém povrchu buďte obzvláště opatrní.
- Před každým použitím zkontrolujte, že je vycházková hůl nastavena na správnou výšku.
- Zkontrolujte, že jsou pružinové kolíky pro nastavení výšky řádně zacvaknuté a že je protihlukový kroužek řádně utažený.
- Nedávejte vycházkovou hůl křivě nebo příliš daleko od těla, abyste nespadli.
- Nepoužívejte vycházkovou hůl jako hračku.
- Nedržte rukojeť mokřima rukama. Úchop pak nemusí být pevný a může dojít ke ztrátě rovnováhy.
- Nedělejte s vycházkovou hůlí příliš velké kroky.
- **Maximální hmotnost uživatele produktu je 100 kg.**
- Nebezpečí popálení – V případě dlouhodobějšího použití v horkém či studeném prostředí (slunce, extrémní chlad, sauna atd.) buďte opatrní při dotyku – povrchy mohou mít stejnou teplotu jako okolní prostředí.
- Dbejte na pokyny týkající se údržby a servisu. Výrobce nenese odpovědnost za poškození v důsledku nesprávného servisu či údržby.

10. Údržba

Návod k údržbě vycházkových hůlí naleznete na webových stránkách společnosti Vermeiren: www.vermeiren.com.



SERVICE

The walking stick was serviced:
La canne a été contrôlée:
De wandelstok is gecontroleerd:

Das Gehstock wurde überprüft:
Il bastoni è stat ispezionata:
El bastón ha sido revisado:
Z laski był serwisowany:

Dealer's stamp • Cachet du revendeur • Stempel van de handelaar
Händlerstempel • Timbro del rivenditore • Sello del distribuidor •
Dealerzy pieczęć • Razítko prodejece:

Date • Datum • Data • Fecha:

Dealer's stamp • Cachet du revendeur • Stempel van de handelaar
Händlerstempel • Timbro del rivenditore • Sello del distribuidor •
Dealerzy pieczęć • Razítko prodejece:

Date • Datum • Data • Fecha:

Dealer's stamp • Cachet du revendeur • Stempel van de handelaar
Händlerstempel • Timbro del rivenditore • Sello del distribuidor •
Dealerzy pieczęć • Razítko prodejece:

Date • Datum • Data • Fecha:

Dealer's stamp • Cachet du revendeur • Stempel van de handelaar
Händlerstempel • Timbro del rivenditore • Sello del distribuidor •
Dealerzy pieczęć • Razítko prodejece:

Date • Datum • Data • Fecha:

Dealer's stamp • Cachet du revendeur • Stempel van de handelaar
Händlerstempel • Timbro del rivenditore • Sello del distribuidor •
Dealerzy pieczęć • Razítko prodejece:

Date • Datum • Data • Fecha:

Dealer's stamp • Cachet du revendeur • Stempel van de handelaar
Händlerstempel • Timbro del rivenditore • Sello del distribuidor •
Dealerzy pieczęć • Razítko prodejece:

Date • Datum • Data • Fecha:

Dealer's stamp • Cachet du revendeur • Stempel van de handelaar
Händlerstempel • Timbro del rivenditore • Sello del distribuidor •
Dealerzy pieczęć • Razítko prodejece:

Date • Datum • Data • Fecha:

Dealer's stamp • Cachet du revendeur • Stempel van de handelaar
Händlerstempel • Timbro del rivenditore • Sello del distribuidor •
Dealerzy pieczęć • Razítko prodejece:

Date • Datum • Data • Fecha:

Dealer's stamp • Cachet du revendeur • Stempel van de handelaar
Händlerstempel • Timbro del rivenditore • Sello del distribuidor •
Dealerzy pieczęć • Razítko prodejece:

Date • Datum • Data • Fecha:

Dealer's stamp • Cachet du revendeur • Stempel van de handelaar
Händlerstempel • Timbro del rivenditore • Sello del distribuidor •
Dealerzy pieczęć • Razítko prodejece:

Date • Datum • Data • Fecha:

- For service checklists an additional technical information, please see our specialist dealers nearest to you. More information on our website at: www.vermeiren.com.
- Les listes des contrôles à effectuer lors des entretiens de même que toute autre information technique sont disponibles auprès de nos filiales. Pour de plus amples informations, consultez le site: www.vermeiren.fr.
- Servicelijsten en andere technische informatie kunt u aanvragen bij onze vestigingen. Meer informatie vindt u ook op: www.vermeiren.be.
- Servicechecklisten und weitere technische Informationen erhalten Sie über unsere Niederlassungen. Informationen unter: www.vermeiren.de, www.vermeiren.at, www.vermeiren.ch.
- Gli elenchi di controllo di manutenzione e ulteriori informazioni tecniche sono disponibili presso le nostre filiali. Per informazioni consultare il sito: www.vermeiren.com.
- Para un servicio de revisión o información técnica adicional, por favor, consulte a nuestros distribuidores especialistas más cercanos. Más información en nuestra página web: www.vermeiren.com.
- Po dodatkowe informacje techniczne oraz listę części zamiennych proszę się kontaktować z naszym wyspecjalizowanymi dystrybutorami w pobliżu miejsca zamieszkania. Więcej informacji na naszej stronie www.vermeiren.pl.
- Servisní kontrolní seznamy a další technické informace můžete získat od odborného prodejce ve svém okolí. Další informace na našich webových stránkách na adrese: www.vermeiren.com.



Vermeiren GROUP
Vermeirenplein 1 / 15
2920 Kalmthout
BE

website: www.vermeiren.com