

User manual

MANUEL D'UTILISATION
GEBRUIKSAANWIJZING
GEBRAUCHSANWEISUNG
MANUALE DI ISTRUZIONI
MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K OBSLUZE

Eco-Plus



Contents

Preface	4
1. Your product	5
2. Before use	6
2.1. Intended use and indications	6
2.2. Safety instructions and applicable risks	6
2.3. Symbols on the rollator	7
2.4. Upon delivery	8
2.5. Shipping and storage	9
3. Assembly/Disassembly and adjustments	9
3.1. Assembly	9
3.2. Disassembly	13
3.3. Height adjustments	13
3.4. Adjusting the brakes	14
4. Using your rollator	15
4.1. Brake system	15
4.2. Folding/Unfolding	16
4.3. Negotiating kerbs	17
4.4. Sitting down, standing up and walking	17
5. Maintenance	18
5.1. Cleaning	18
5.2. Disinfection	18
5.3. Inspection / Service / Repairs	18
5.4. Reuse	19
5.5. Disposal at end of life	19
6. Technical specifications	20

Preface

Congratulations! You are now owner of a Vermeiren rollator!

Thank you for your trust in the products of Vermeiren. To support you on the use of this rollator and its operating options, this manual is offered. Please read it carefully; it will help you to get familiar with the operation, capabilities and limitations of your rollator.

If you still have questions after reading this manual, do not hesitate to contact your specialist dealer. He/she will be glad to help you.

Important note

To ensure your safety, and to prolong the lifetime of your product, please take good care of it and have it checked and serviced on a regular basis.

This manual reflects the latest product developments. Vermeiren has the right to implement changes to this type of product without any obligation to adapt or replace similar products previously delivered.

Pictures of the product are used to clarify the instructions. Details of the depicted product may deviate from your product.

Information available

On our website <http://www.vermeiren.com/> you will always find the most recent version of the following information. Please consult this website regularly for possible updates.

Visually impaired people can download the electronic version of this manual and have it read out by means of a text-to-speech software application.

	User manual For user and specialist dealer
	Service manual for rollators For specialist dealer



1. Your product



1. Handgrips
2. Brake lever
3. Backrest
4. Storage bag
5. Seat
6. Front wheels
7. Rear wheels
8. Brake cable
9. Tipping aid
10. Reflectors
11. Walking stick holder
12. Identification plate

2. Before use

2.1. Intended use and indications

- This product is a medical device.
- Indications and contraindications: The rollator is meant as support of the leg function during walking. Do not use the rollator if you have other physical limitations that may cause unsafe use of your rollator, like a weak arm, balance disorders, impaired vision, limb loss, ...
- The rollator is designed and produced solely to be used as walking aid for one person with a maximum weight of 136 kg.
- The rollator will compensate the lack of adequate support by the legs by leaning on, or moving with, the rollator with usage of the upper limbs or chest. The rollator will provide better stability, support and safety during walking.
- The rollator can be used indoors and outdoors.
- It is not intended for transport of goods and/or more people than the user. It is also not intended to be used as a transport aid while sitting down.
- It should only be used on surfaces where all four wheels are touching the ground. Do not use the rollator on rocky, bumpy or sandy terrain, or places with a steep inclination. The rollator may become unstable. Look for flat, stable areas, and bevelled kerbs to walk with your rollator.
- The warranty on this product is based on normal use and maintenance as described in this manual. Damage to your product caused by improper use or lack of maintenance will cause the warranty to lapse.
- Please check all technical details and limits of your rollator in §6..

2.2. Safety instructions and applicable risks

CAUTION

Risk of injuries

- Please read and follow the instructions in this manual. Otherwise you may get injured, or your product may get damaged.

Keep the following general warnings in mind during use:

- Check that no stones or other objects block the wheels of the rollator.
- Make sure that both brake levers are in parking mode before you use the rollator as aid to stand up. When you are standing comfortable and stable, you can unlock the parking brakes.
- While walking, keep both hands on the handgrips.
- Be aware that some parts of your rollator may get very hot or cold due to ambient temperature, solar radiation, heating devices, etc. Be careful when touching.
- Before every use, check that the height adjustments are firmly secured, see **§3.3.**
- Do not hold the handgrips with wet hands. If you do so, you can lose your grip and lose your balance.
- Do not proceed with your rollator into traffic. Always stay on the pavement.
- Take note of the instructions for care and service. The manufacturer is not liable for damage caused by improper servicing / care.

Any serious incident [MDR (EU) 2017/745 **§2 (65)**] that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Be aware that your rollator may interfere with some types of anti-theft systems, depending on the settings used. This may cause the shop's alarm to go off.

2.3. Symbols on the rollator

i Identification plate is located beneath the left handgrip at the inner side of the base frame

	Maximum weight of the user in kg
	Type designation
	Catalogue number
	Serial number

	Medical device
	Manufacturer
	Date of manufacture
	Declaration of conformity
	Attention: important information
	It is advised to read the manual

2.4. Upon delivery

Unpack your product and verify if the delivery is complete. The following items should be included:

- Base frame with seat and backrest;
- Front-wheel frame with front wheels;
- Rear wheels with support and brake cable connection;
- Handgrips with brakes
- Two height-adjustment knobs;
- Two fastener pins;
- Storage bag;
- One hook-and-loop strap;
- Manual

Verify your product for transport damage. If you find any damages after delivery, contact the transporter.

2.5. Shipping and storage

The shipping and storage of the rollator should happen according to the technical specifications in §6.. Make sure that the rollator is stored dry.

Provide sufficient covering or packaging to protect the rollator from rust and foreign bodies (e.g. salt water, sea air, sand, dust).

Make sure no objects are stored on or against the rollator to prevent damage.

3. Assembly/Disassembly and adjustments

⚠ CAUTION

Risk of injuries

- Assemble the rollator completely, before adjusting its height.

3.1. Assembly

3.1.1. Assembly of front-wheel frame

1. Unfold base frame (18).
2. Place the base frame on ground or table, with the oval tubes flat on the surface.
3. Take front-wheel frame (8) and insert both tube ends in the protruding, round tubes of the base frame. Make sure that the wheel support (w) is on the inside of the base frame.



4. Adjust the tube length of the front-wheel frame **(8)** by sliding the tubes in/out.
5. Check on each side, whether the holes of inner and outer tubes match.
6. Insert fastener pin **(7)** in the hole of the height adjustment. Make sure that the pin is completely inserted; a click is heard when fastener clip clasps the tube.



7. Repeat this for the other frame tube.
8. Check the tube length at left and right side. If the length differs, remove the fastener pin at one side and adjust the length according to step 4, 5 and step 6.

3.1.2. Assembly of rear wheels and handgrips


CAUTION

Risk of damage

- Prevent brake cables from being folded.

Wheel supports with rear wheels

1. Turn the base frame until the front-frame tubes (round) are at the bottom, with the front-wheels touching the surface.
2. Take one of the combined parts with rear wheel, handgrip and braking cable.
3. Before assembly, check if rear wheel **(9)** and brake **(10)** will be located on the outside of the oval frame tube. If this is not the case, use this wheel support at the other side of the base frame.

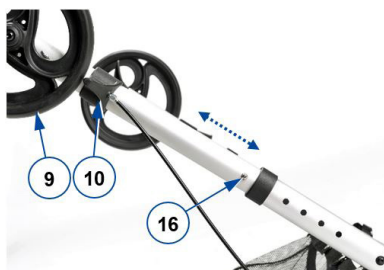

4. Press and hold the small, silvery push button **(16)**.
5. Insert the wheel support in the protruding, oval tube of base frame.
6. Slide the wheel support in/out until push button **(16)** pops out of the adjustment hole.
7. Press the push button again and slide the wheel support to the desired length.
8. Repeat this for the second wheel support (of combined part). Make sure that left and right tube lengths are the same.
9. Make sure that both tubes are well secured.

Handgrip with brake

⚠ CAUTION

Risk of falling and/or damage

- Check before use if handgrips are locked.
- Pay attention to the position of the brake cables: they must be on the outside of the frame without interfering with the rear wheels.
- Don't pull the handgrips too high to prevent damage to the brake cable.



1. Turn the base frame and place it with all four wheels on the ground.
2. Insert the tube with handgrip in the open tube end of the frame, at the connection piece.
3. Place knob **(12)** in the holes of the tube and tighten firmly by hand.
4. Mount the other handgrip in the same manner.



Note: the cable clamp is already on the brake cable.


5. Slide cable clamps (15) up while guiding the cable.
6. Keep the brake cable aligned with the rear frame tube and push the clamp round the frame tube, see picture.

3.1.3. Mounting the storage bag

CAUTION

Risk of falling or tipping over

- Do not overload the storage bag.

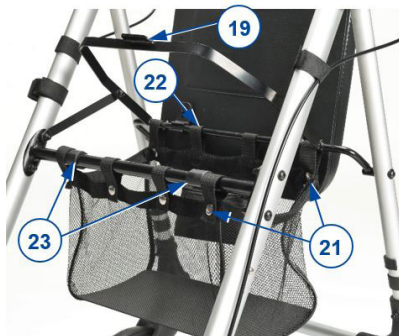

The maximum carrying weight of the storage bag can be found in §6..

1. Pull seat frame (19) a bit up to make room.
2. Mount the storage bag with the six snap fasteners (21) and two Velcro straps (22). Make sure that the two protection sleeves (23) stay uncovered.
3. Push seat and seat frame down.

3.2. Disassembly

CAUTION

Risk of damage

- Pay attention to the position of the brake cables. Don't pull the handgrips too high to prevent damage to the brake cable.

The disassembly of the rollator is conducted in reverse order to the assembly:

1. Storage bag: Open snap fasteners and Velcro straps to remove the bag.
2. Velcro strap for walking stick: Remove.
3. Cable clamp **(8)** (2x): Carefully pull from the frame tube.
4. Handgrip with brake lever (2x): Remove knob **(12)** and pull the handgrip out of the base frame.
5. Base frame: Turn and place it with the front frame on a surface.
6. Wheel support with rear wheel (2x): Press and hold silvery push button **(16)** and pull the wheel support out of the base frame.
7. Base frame: Turn and place it with the rear frame on the surface.
8. Front-wheel frame **(8)**: Remove on each side, fastener pin **(7)** and pull the tubes out of the base frame.

3.3. Height adjustments

 To adjust the height of the rollator according to body size:

- First adjust the seat height.
- Next adjust the height of both handgrips.

CAUTION

Risk of falling or tipping over

- Always set the four wheels to the same height.

Make sure that

- both handgrips have been set to the same height.
- all 4 wheels have been set to the same height.

3.3.1. Seat height

The seat can be altered in height by adjusting the front wheels and rear wheels (4 positions).

Check whether the seat is horizontal and at the correct sitting height. If not, adjust the assembled wheels (see § 3.1.) and make sure that they are at the same height.

3.3.2. Handgrip height

To adjust the handgrip/total height (5 positions):

1. Loosen knob (12) (see §3.1.2.) and remove from frame.
2. Adjust the handgrip to the desired height. When standing straight, the handgrip should be as high as your wrist. Leave your arms hanging loose.
3. Place knob (12) in the holes of the tube and tighten firmly by hand.
4. Adjust the other handgrip in the same manner. Make sure that both handgrips have the same height.

3.4. Adjusting the brakes

The force of the brakes can be adjusted by loosening/tightening the screw (14) on the back of the brake lever.



4. Using your rollator

4.1. Brake system

CAUTION

Risk of falling

- Check the working of the brakes to ensure your safety. The condition of the brakes is influenced by wear, oil and other contamination of the rear wheels and braking mechanism.

The rollator is equipped with brakes, operated by two brake levers (15). The brake levers operate in two modes: running brakes and parking brakes.


CAUTION

Risk of damage

- Do not push the rollator too hard while using the running brakes. This may cause damage to the tyres or brakes.

To use the running brakes, pull both brake levers (15) simultaneously upwards [A] in a squeezing motion. To stop braking, release the brake levers.

To use the parking brakes, push both brake levers (15) downwards in locked position [B]. Always use both parking brakes simultaneously. To end the parking mode, pull both brake levers simultaneously upwards.

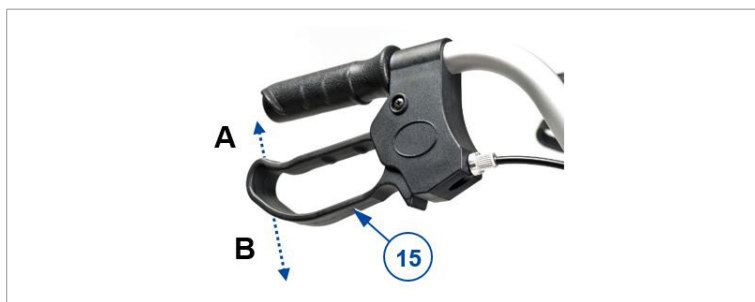

4.2. Folding/Unfolding

CAUTION

Risk of entrapment

- Keep fingers, buckles, jewellery and clothes away from the folding mechanism.

CAUTION

Risk of falling

- Check that the rollator is completely open and that the frame is locked.



4.2.1. Unfolding the rollator

1. Push both brake levers down to parking position, see §4.1..
2. Place the rollator with four wheels on the ground while holding the frame tubes.
3. Push seat and seat frame (20) down to horizontal position.
4. Turn the backrest down, if it is up.
5. Adjust the rollator to the desired height (see §3.3.).

4.2.2. Folding the rollator

1. Stand behind the rollator.
2. Push both brake levers down to parking position, see §4.1..
3. Fold the seat upward.
4. Empty the storage bag.
5. Pull the brace (20) upward to close the frame a bit.


6. Close the frame completely by pushing front and rear frame tubes together.
7. If necessary, turn the backrest upwards.

4.3. Negotiating kerbs

CAUTION

Risk of falling

- Take kerbs straight, with both front wheels aligned to the kerb. Keep the rollator nearby.

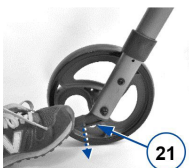

To make it easier to take small obstacles, such as kerbs, the rollator is equipped with a tipping aid on the two rear wheels.

1. Make sure you are standing stable while holding both handgrips.
2. Use one foot and push on tipping lever (21) to lift the front wheels.
3. Keep the rollator in that position with the handgrips and move slowly forward until the front wheels are on the kerb.
4. Now lift the handgrips and move forward to place the rear wheels on the kerb.
5. When the rollator is standing stable, you can take the kerb yourself.

4.4. Sitting down, standing up and walking

CAUTION

Risk of falling

- Make sure that both brake levers are in parking position before sitting down, see §4.1.. Keep the brake levers in this position until you start walking again. Keep your feet between the rear wheels.
- Do not propel the rollator while seated.

1. Push both brake levers down to parking position.
2. Check whether the backrest and seat are turned down and secured into place.
3. While leaning on the handgrips, turn around and sit down on the seat.
4. To stand up again, lean on the handgrips and turn around.
5. Pull both brake levers up and use the running brakes.
6. Release the brake levers and step forward with the rollator close to your body.

5. Maintenance

i Regular care ensures that your rollator is preserved in a perfectly functional condition. For the maintenance manual, refer to the Vermeiren website: www.vermeiren.com.

5.1. Cleaning

Use a soft, damp cloth and lukewarm water with a mild household soap to clean the rollator. Avoid soaking. Do not use abrasive cleaning agents to clean.

5.2. Disinfection

CAUTION

Risk of damage

- Disinfections may only be undertaken by trained persons. Consult your specialist dealer.

Use a soft, damp cloth and lukewarm water with a mild household disinfectant to clean the rollator.

5.3. Inspection / Service / Repairs

The expected service life of your rollator is 5 years. The lifespan of the rollator is influenced by its use, storage, maintenance, service and cleaning.

Before you resume use of the rollator, it should be inspected on the following points:

- Completeness.
- Folding mechanism: functioning well.
- Bolts and nuts: tightly fastened.
- Brakes: functioning well.
- Wheels (stability, tracking, fixing screws).
- In case of regular contact with wires, hair or other residues, the wheels may get blocked.
Check regularly that the wheels rotate freely and that they are in good condition.
- Frame (deformation, stability, connections).
- Handgrips (safe locking of height adjustment system, good support of handgrips).
- Seat, backrest and storage bag (wear or damage).

Your rollator is constructed of aluminium and plastic components. We recommend to have your product inspected at least once a year, but the service frequency depends on the frequency and intensity of use. Consult your specialist dealer to make an agreement on service frequency.

Repairs and replacements may only be undertaken by trained persons, and only genuine replacement parts of Vermeiren should be used.

Do not hesitate to use the services offered by your specialist dealer. He/she will be glad to assist you regarding any service and repairs.

5.4. Reuse

Before each reuse, have the rollator disinfected, inspected and serviced according to the instructions in **§5.2.** and **§5.3.** .

5.5. Disposal at end of life

At end of life, you need to dispose your rollator according to the local environmental legislation. The best way to do so, is to disassemble the rollator to facilitate the transport of recyclable parts.

6. Technical specifications

The technical details below are only valid for this rollator, at standard settings and optimal ambient conditions. Take these details into account during use.

Brand	Vermeiren
Product group	Rollator
Type	Eco-Plus
Description	Dimensions
Maximum user weight	136 kg
Maximum weight of storage bag load	5 kg
Overall length	680 - 795 mm
Folded length	310 mm
Overall width	610 mm
Folded width	610 mm
Overall height	845-1020 mm
Folded height	960 mm
Handgrip height	845-1020 mm
Recommended body height	1650 – 2050 mm
Distance between handgrips	500 mm
Seat height	555-625 mm
Seat width	360 mm
Seat depth	360 mm
Total mass - without basket	7,7 kg 7,5 kg
Wheel diameter	200 x 35 mm
Brakes	Running & parking brakes
Turning width	940 mm
Storage and use temperature	+5°C - +41°C
Storage and use humidity	30% - 70%
We reserve the right to introduce technical changes. Measurement tolerance +- 15 mm / 1,5 kg / 1,5°	

Table des matières

Préface	22
1. Votre produit	23
2. Avant l'utilisation	24
2.1. Usage prévu et indications	24
2.2. Consignes de sécurité et risques applicables	25
2.3. Symboles sur le déambulateur	26
2.4. Lors de la livraison	27
2.5. Transport et entreposage	27
3. Montage/Démontage et réglages	28
3.1. Montage	28
3.2. Démontage	32
3.3. Réglages de hauteur	32
3.4. Réglage des freins	33
4. Utiliser votre déambulateur	34
4.1. Système de freinage	34
4.2. Pliage/Dépliage	35
4.3. Franchir des bordures	36
4.4. S'asseoir, se lever et marcher	37
5. Entretien	37
5.1. Nettoyage	37
5.2. Désinfection	38
5.3. Inspection / Entretien / Réparation	38
5.4. Réutilisation	39
5.5. Évacuation	39
6. Spécifications techniques	40

Préface

Félicitations ! Vous êtes à présent l'heureux propriétaire d'un déambulateur Vermeiren !

Merci de la confiance que vous accordez aux produits de Vermeiren. Ce manuel est destiné à vous aider dans l'utilisation de ce déambulateur et de ses options de fonctionnement. Veuillez le lire attentivement. Vous pourrez ainsi vous familiariser avec le fonctionnement, les capacités et les limites de votre déambulateur.

Si vous avez encore des questions après la lecture de ce manuel, n'hésitez pas à prendre contact avec votre revendeur spécialisé. Il vous aidera volontiers.

Remarque importante

Pour assurer votre sécurité et prolonger la durée de vie de votre produit, prenez-en grand soin et faites-le contrôler ou entretenir régulièrement.

Ce manuel est le reflet des derniers développements du produit. Vermeiren a le droit d'apporter des modifications à ce type de produit sans être tenu d'adapter ou de remplacer des produits similaires fournis précédemment.

Des images du produit sont utilisées pour clarifier les instructions. Les détails du produit illustré peuvent diverger de votre produit.

Informations disponibles

Sur notre site Internet <http://www.vermeiren.com/>, vous trouverez toujours la version la plus récente des informations suivantes. Veuillez consulter régulièrement ce site Internet pour d'éventuelles mises à jour.

Les personnes malvoyantes peuvent télécharger la version électronique de ce manuel et la lire au moyen d'une application de texte-parole.



Manuel d'utilisation
Pour l'utilisateur et le revendeur spécialisé



Manuel entretien des déambulateurs
Pour le revendeur spécialisé

FR



Déclaration de conformité CE

1. Votre produit



1. Poignées de poussée
2. Levier de frein
3. Dossier
4. Sac de rangement
5. Siège
6. Roues avant
7. Roues arrière
8. Câble de frein
9. Levier basculeur
10. Réflecteurs
11. Porte-canne
12. Plaque d'identification

2. Avant l'utilisation

2.1. Usage prévu et indications

- Ce produit est un dispositif médical.
- Indications et contre-indications : Le déambulateur est conçu pour soutenir la fonction de la jambe pendant la marche. N'utilisez pas votre déambulateur si vous souffrez d'autres défaillances physiques pouvant rendre l'utilisation du déambulateur dangereuse, comme une faiblesse du bras, des troubles de l'équilibre, déficience visuelle, perte de membres, etc.
- Le déambulateur est exclusivement conçu et produit pour servir d'aide à la marche, pour une seule personne d'un poids maximal de 136 kg.
- En prenant appui avec ses membres supérieurs ou son buste sur le déambulateur ou en le déplaçant, ce dernier compense la capacité de charge ou la force réduite des membres inférieurs. En outre, il assure une stabilité, un soutien et une sécurité accrus lors de la marche.
- Le déambulateur peut être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- Il n'est pas conçu pour transporter des marchandises et/ou plus de personnes que l'utilisateur. Il n'est pas non plus conçu pour être utilisé comme aide au transport en position assise.
- Il ne peut être utilisé que sur une surface plane avec les quatre roues touchant le sol. N'utilisez pas le déambulateur sur un terrain rocailleux, accidenté ou sablonneux, ou sur des sols en forte pente. Cela peut nuire à la stabilité du déambulateur. Pendant la marche, déplacez-vous toujours sur des surfaces planes et stables ou sur les bords biseautés du trottoir.
- La garantie sur ce produit est basée sur une utilisation et un entretien normaux, tels que décrits dans le présent manuel. Les dommages à votre produit dus à un usage inapproprié ou à un manque d'entretien auront pour effet d'annuler la garantie.
- Consultez également les détails techniques et les limites de votre déambulateur au §6..

2.2. Consignes de sécurité et risques applicables

ATTENTION

Risque de blessures

- Veuillez lire et suivre les instructions stipulées dans le présent manuel d'utilisation. Autrement, vous pourriez vous blesser ou votre produit pourrait être endommagé.

Tenez compte des avertissements généraux suivants pendant l'emploi:

- Faites bien attention à ce qu'aucune pierre ni aucun autre objet ne bloque les roues du déambulateur.
- Assurez-vous que les deux freins de stationnement soient bien enclenchés avant d'utiliser votre déambulateur pour vous aider à vous lever. Une fois que vous êtes dans une position stable et confortable, vous pouvez relâcher les freins de stationnement.
- Maintenez les deux mains sur les poignées lorsque vous avancez.
- N'oubliez pas que certaines parties de votre déambulateur peuvent devenir très chaudes ou très froides en fonction de la température ambiante, des rayons du soleil, des dispositifs de chauffage, etc. Faites donc attention lorsque vous les touchez.
- Avant chaque utilisation, vérifiez si le réglage de la hauteur est bien fixé, voir le **§3.3.**
- Ne tenez pas les poignées avec des mains mouillées. Si vous le faites, vous risquez de perdre votre équilibre.
- Ne vous mêlez pas à la circulation sur la chaussée avec votre déambulateur. Restez toujours sur le trottoir.
- Veuillez suivre les instructions pour le nettoyage et les contrôles. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une mauvaise inspection ou d'un mauvais entretien.

Tout incident grave [RDM (UE) 2017/745 §2 (65)] survenu en relation avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur ou le patient est établi.

Sachez que votre déambulateur peut interférer avec certains types de systèmes antivol, selon les paramètres utilisés. Cela peut provoquer le déclenchement de l'alarme du magasin.

2.3. Symboles sur le déambulateur

i La plaque d'identification se situe en dessous de la poignée gauche, sur la partie intérieure du châssis de base.

	Poids maximum de l'utilisateur en kg
	Indication du type
	Numéro de catalogue
	Numéro de série
	Dispositif médical
	Fabricant
	Date de fabrication
	Déclaration de conformité
	Attention : informations importantes
	Il est conseillé de lire le manuel

2.4. Lors de la livraison

Déballiez votre produit et vérifiez si la livraison est complète. Les pièces suivantes sont incluses dans la livraison:

- Châssis de base avec siège et dossier ;
- Châssis des roues avant avec roues avant ;
- Roues arrière avec support et raccord de câble de frein ;
- Poignées avec freins
- Deux boutons de réglage de la hauteur ;
- Deux goupilles de fixation ;
- Sac de rangement
- Une sangle auto-agrippante ;
- Manuel

Inspectez soigneusement l'expédition afin de vous assurer que le transport n'a occasionné aucun dommage. S'il s'avère que votre produit présente un défaut, prenez contact avec le transporteur.

2.5. Transport et entreposage

L'expédition et le stockage du déambulateur doivent être réalisés conformément aux caractéristiques techniques §6.. Assurez-vous que le déambulateur est entreposé correctement.

Protégez le déambulateur contre la rouille et la pénétration de substances étrangères (p. ex. eau salée, air marin, sel, poussière) au moyen d'une protection ou d'un emballage adéquat.

Lors de l'entreposage, assurez-vous qu'aucun autre objet n'est appuyé sur ou contre le déambulateur afin d'éviter tout dommage.

3. Montage/Démontage et réglages

⚠ ATTENTION

Risque de blessures

- Montez complètement le déambulateur avant de régler sa hauteur.

3.1. Montage

3.1.1. Montage du châssis des roues avant

1. Dépliez le châssis de base **(18)**.
2. Placez le châssis de base sur le sol ou sur une table, avec les tubes ovales posés à plat sur la surface.
3. Prenez le châssis des roues avant **(8)** et insérez les deux extrémités des tubes dans les tubes ronds saillants du châssis de base. Assurez-vous que le support de la roue (w) se trouve à l'intérieur du châssis de base.



4. Réglez la longueur du tube du châssis des roues avant **(8)** en faisant coulisser les tubes d'un côté ou de l'autre.
5. Vérifiez de chaque côté si les trous des tubes intérieurs et extérieurs correspondent.
6. Insérez la goupille de fixation **(7)** dans le trou de réglage de la hauteur. Assurez-vous que la goupille est complètement insérée ; vous entendrez un clic lorsque le clip de fixation s'enclenchera dans le tube.



7. Répétez cette opération sur le tube de l'autre châssis.
8. Vérifiez la longueur du tube du côté gauche et du côté droit. Si la longueur diffère, retirez la goupille de fixation d'un côté et réglez la longueur en suivant les étapes 4, 5 et 6.

3.1.2. Montage des roues arrière et des poignées


⚠ ATTENTION

Risque de dommages

- Évitez que les câbles de freinage ne soient pliés.

Supports de roues avec roues arrière

1. Tournez le châssis de base jusqu'à ce que les tubes du châssis avant (ronds) se trouvent en bas, avec les roues avant touchant la surface.
2. Prenez l'une des pièces combinées avec la roue arrière, la poignée et le câble de frein.
3. Avant le montage, vérifiez si la roue arrière (9) et le frein (10) se trouveront du côté extérieur du tube ovale du châssis. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que les supports de la roue gauche et de la roue droite ont été échangés. Utilisez ce support de roue de l'autre côté du châssis de base.

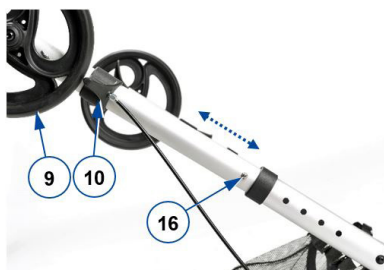

4. Appuyez sur le petit bouton poussoir argenté **(16)** et maintenez-le enfoncé.
5. Insérez le support de roue dans le tube ovale saillant du châssis de base.
6. Faites coulisser le support de roue d'un côté ou de l'autre jusqu'à ce que le bouton poussoir **(16)** sorte du trou de réglage.
7. Appuyez à nouveau sur le bouton poussoir et faites coulisser le support de roue à la longueur désirée.
8. Répétez cette opération pour le deuxième support de roue (de la pièce combinée).
Assurez-vous que la longueur du tube gauche et du tube droit sont les mêmes.
9. Assurez-vous que les deux tubes sont bien fixés.

Poignée avec frein

ATTENTION

Risque de chute et/ou dommages

- Avant l'utilisation, vérifiez que les poignées soient verrouillées.
- Faites attention à la position des câbles de frein : ils doivent être situés à l'extérieur du châssis sans interférer avec les roues arrière.
- Ne tirez pas les poignées trop haut pour éviter d'endommager le câble de frein.



1. Tournez le châssis de base et placez-le avec les quatre roues sur le sol.
2. Insérez le tube pourvu de la poignée dans l'extrémité ouverte du tube du châssis, sur la pièce de connexion.
3. Placez le bouton **(12)** dans les trous du tube et serrez fermement à la main.
4. Montez l'autre poignée de la même manière.



Note : le serre-câble se trouve déjà sur le câble de frein.


5. Faites coulisser les serre-câbles **(15)** vers le haut tout en guidant le câble.
6. Maintenez le câble de frein aligné par rapport au tube du châssis arrière, et emboîtez le serre-câble autour du tube du châssis, comme illustré sur l'image.

3.1.3. Montage du sac de rangement

⚠ ATTENTION

Risque de chute ou de basculement

- Ne remplissez pas trop le sac de rangement.

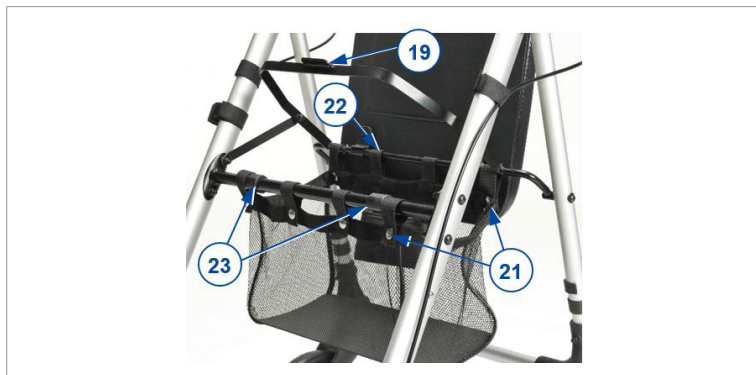

La capacité de charge maximale du sac de rangement est mentionnée dans le tableau du §6..

1. Remontez légèrement le châssis du siège **(19)** pour faire de la place.
2. Installez le sac de rangement à l'aide des six boutons-pression **(21)** et des deux bandes Velcro **(22)**. Assurez-vous que les deux manchons de protection **(23)** restent découverts.
3. Abaissez le siège et le châssis du siège.

3.2. Démontage

ATTENTION

Risque de dommages

- Faites attention à la position des câbles de frein. Ne tirez pas les poignées trop haut pour éviter d'endommager le câble de frein.

Le démontage du déambulateur est réalisé dans l'ordre inverse du montage décrit dans la section précédente :

1. Sac de rangement : Ouvrez les boutons-pression et les bandes Velcro pour retirer le sac.
2. Bande velcro pour la canne : Retirez-la.
3. Serre-câble **(8)** (2x) : Tirez avec précaution du tube de châssis.
4. Poignée avec levier de frein (2x) : enlevez le bouton **(12)** et tirez la poignée du châssis de base.
5. Châssis de base : faites-le tourner et installez-le avec le châssis avant posé sur une surface.
6. Support de roue avec roue arrière (2x) : appuyez sur le bouton poussoir argenté **(16)** et maintenez-le enfoncé, puis tirez le support de roue du châssis de base.
7. Châssis de base : faites-le tourner et installez-le avec le châssis arrière posé sur une surface.
8. Châssis des roues avant **(8)** : sur chaque côté, enlevez la goupille de fixation **(7)** et tirez les tubes du châssis de base.

3.3. Réglages de hauteur

-  Pour régler la hauteur du déambulateur en fonction de la taille de l'utilisateur :
 - Réglez d'abord la hauteur du siège.
 - Ajustez ensuite la hauteur des deux poignées.

ATTENTION

Risque de chute ou de basculement

- Réglez toujours les quatre roues à la même hauteur.

Assurez-vous que

- les deux poignées ont été réglées à la même hauteur.
- les 4 roues ont été réglées à la même hauteur.

3.3.1. Hauteur de siège

La hauteur du siège peut être en réglant les roues avant et arrière (4 positions).

Vérifiez que le siège est horizontal et à la bonne hauteur d'assise. Si ce n'est pas le cas, réglez les roues assemblées (voir § 3.1.) à la même hauteur.

3.3.2. Hauteur des poignées

Pour régler la poignée/la hauteur totale (5 positions) :

1. Desserrez le bouton (12) (voir §3.1.2.) et retirez-le du châssis.
2. Réglez la poignée à la hauteur désirée. Lorsque vous vous tenez debout, la poignée doit se situer à la hauteur de votre poignet. Laissez donc pendre vos bras.
3. Placez le bouton (12) dans les trous du tube et serrez fermement à la main.
4. Réglez l'autre poignée de la même manière. Assurez-vous que les deux poignées aient la même hauteur.

3.4. Réglage des freins

La force des freins peut être réglée en desserrant/serrant la vis (14) à l'arrière du levier de frein.



4. Utiliser votre déambulateur

4.1. Système de freinage

ATTENTION

Risque de chute

- Pour garantir votre sécurité, vous devez contrôler le fonctionnement des freins. L'état du système de freinage est influencé par l'usure et la présence d'huile ainsi que de toute autre matière polluante sur les roues arrière et le mécanisme de freinage.

Le déambulateur est équipé de freins, actionnés par deux leviers de frein (15). Les leviers de frein peuvent être utilisés de deux manières : freins standard et freins de stationnement.


ATTENTION

Risque de dommages

- N'appuyez pas trop fort sur le déambulateur lorsque vous utilisez les freins standard. Cela pourrait endommager les pneus ou les freins.

Pour utiliser les freins standard, tirez les deux leviers de frein (15) en même temps vers le haut [A] en appliquant une pression. Pour interrompre le freinage, relâchez les leviers de frein.

Pour utiliser le frein de stationnement, poussez les deux leviers de frein (15) à l'écart de la poignée jusqu'à atteindre la position verrouillée [B]. Utilisez toujours les deux freins de stationnement simultanément. Pour sortir de l'état de stationnement, tirez les deux leviers de frein en même temps vers le haut.

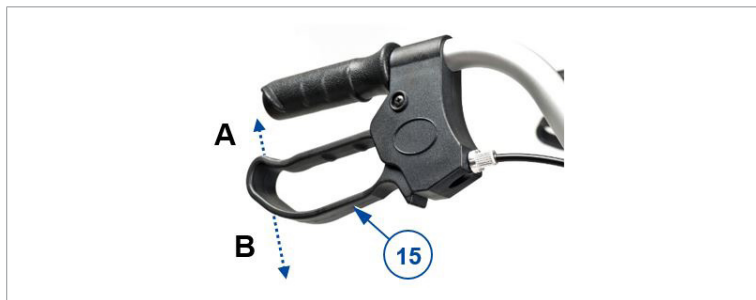

4.2. Pliage/Dépliage

⚠ ATTENTION

Risque de coincement

- Gardez les doigts, les boucles, les bijoux et les vêtements à l'écart du mécanisme de pliage.

⚠ ATTENTION

Risque de chute

- Vérifiez que le déambulateur soit entièrement ouvert et que le châssis soit bien bloqué.



4.2.1. Déplier le déambulateur

1. Abaissez les deux leviers de frein en position de stationnement, voir le §4.1..
2. Placez le déambulateur les quatre roues au sol tout en tenant les tubes du châssis.
3. Abaissez le siège et le châssis du siège (20) pour les mettre en position horizontale.
4. Abaissez le dossier si celui-ci est dressé.
5. Réglez ensuite le déambulateur à la hauteur désirée (voir le §3.3.).

4.2.2. Plier le déambulateur

1. Tenez-vous derrière le déambulateur.
2. Abaissez les deux leviers de frein en position de stationnement, voir le §4.1..
3. Relevez le siège.
4. Videz le sac de rangement.
5. Tirez le châssis du siège (20) vers le haut pour fermer légèrement le châssis.


6. Fermez complètement le châssis en appuyant en même temps sur le tube avant et le tube arrière.
7. Si nécessaire, relevez le dossier.

4.3. Franchir des bordures

ATTENTION

Risque de chute

- Montez sur la bordure en restant bien droit, avec les deux roues alignées par rapport à la bordure. Gardez le déambulateur proche de vous.

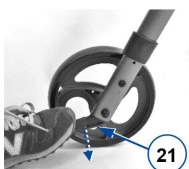

Pour faciliter le franchissement de petits obstacles, tels que les bordures de trottoir, le déambulateur est équipé d'un levier basculeur sur les deux roues arrière.

1. Assurez-vous d'être dans une position bien stable lorsque vous tenez les deux poignées.
2. Avec votre pied, appuyez sur le levier basculeur **(21)** pour soulever les roues avant.
3. Maintenez le déambulateur dans cette position au moyen des poignées, et déplacez-le ensuite lentement jusqu'à ce que les roues avant se trouvent sur la bordure.
4. À présent, soulevez les poignées et avancez pour placer les roues arrière sur la bordure.
5. Une fois que le déambulateur est bien stable, vous pouvez monter vous-même sur la bordure.

4.4. S'asseoir, se lever et marcher

ATTENTION

Risque de chute

- Assurez-vous que les deux leviers de frein se trouvent en position de stationnement avant de vous asseoir, voir §4.1.. Maintenez les leviers de frein dans cette position jusqu'à ce que vous recommenciez à vous déplacer. Gardez vos pieds entre les roues arrière.
 - Ne pas déplacer le déambulateur en position assise.
1. Abaissez les deux leviers de frein en position de stationnement.
 2. Vérifiez que le dossier et le siège soient abaissés et fixez-les.
 3. En vous appuyant sur les poignées, retournez-vous et asseyez-vous sur le siège.
 4. Pour vous redresser, appuyez-vous sur les poignées et retournez-vous.
 5. Remontez les deux leviers de frein et utilisez les freins de stationnement.
 6. Relâchez les leviers de frein et avancez en gardant le déambulateur proche de votre corps.

5. Entretien

-  Un entretien régulier vous permet de conserver votre déambulateur dans un parfait état de fonctionnement. Pour le manuel d'entretien, consultez le site Web de Vermeiren : www.vermeiren.com.

5.1. Nettoyage

Nettoyez le déambulateur à l'aide d'un chiffon doux et humide, de l'eau tiède et du savon doux pour la maison. Évitez que les pièces ne soient trempées. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs.

5.2. Désinfection

ATTENTION

Risque de dommages

- La désinfection ne peut être réalisée que par des personnes qualifiées. Renseignez-vous auprès de votre revendeur spécialisé à cet égard.

Nettoyez le déambulateur à l'aide d'un chiffon doux et humide, de l'eau tiède et d'un désinfectant doux pour la maison.

5.3. Inspection / Entretien / Réparation

La durée de vie prévue de votre déambulateur est de 5 ans. La durée de vie est influencée par son utilisation, son entreposage, son entretien, son service et son nettoyage.

Avant que vous ne commenciez à utiliser votre déambulateur, vous devez contrôler les points suivants :

- Présence de toutes les pièces.
- Mécanisme de pliage : fonctionne bien.
- Boulons et écrous : solidement attachés.
- Freins : fonctionnent bien.
- Roues (stabilité, empreinte, vis de fixation).
- Si vos roues entrent régulièrement en contact avec des fils, des cheveux ou d'autres fibres, elles risquent de se bloquer. Vérifiez donc régulièrement si vos roues sont capables de tourner librement et si elles se trouvent dans un bon état.
- Châssis (déformations, stabilité, connexions).
- Poignées (verrouillage sécurisé du réglage de la hauteur, bon soutien des poignées).
- Siège, dossier et sac de rangement (usure ou dommages).

Votre déambulateur est fabriqué en aluminium et en plastique. Nous vous recommandons de faire inspecter votre produit au moins une fois par an, mais la fréquence d'entretien dépend de la fréquence et de l'intensité de l'utilisation. Renseignez-vous auprès de votre commerçant spécialisé pour parvenir à un accord concernant la fréquence d'entretien.

Les réparations et les remplacements ne peuvent être réalisés que par des personnes formées, et seules des pièces de rechange d'origine de Vermeiren peuvent être utilisées.

N'hésitez pas à recourir au service qui vous est proposé par votre commerçant spécialisé. Ce dernier ne manquera pas de vous venir en aide pour tout ce qui a trait au service et aux réparations.

5.4. Réutilisation

Avant chaque réutilisation, faites désinfecter, inspecter et entretenir le déambulateur conformément aux instructions de **§5.2.** et **§5.3.**.

5.5. Évacuation

À la fin de sa durée de vie, votre déambulateur doit être mis au rebut conformément à la législation environnementale locale. Il est recommandé de démonter le déambulateur afin de faciliter le transport des matériaux recyclables.

6. Spécifications techniques

Les détails techniques ci-dessous concernent uniquement ce déambulateur, avec des réglages standard et dans des conditions ambiantes optimales. Veuillez tenir compte de ces détails pendant l'utilisation.

Marque	Vermeiren
Groupe de produit	Déambulateur
Type	Eco-Plus
Description	Dimensions
Poids maximum de l'utilisateur	136 kg
Capacité de charge maximale du sac de rangement	5 kg
Longueur hors tout	680 - 795 mm
Longueur plié	310 mm
Largeur hors tout	610 mm
Largeur pliée	610 mm
Hauteur générale	845-1020 mm
Hauteur plié	960 mm
Hauteur des poignées	845-1020 mm
Hauteur du corps recommandée	1650 – 2050 mm
Distance entre les poignées	500 mm
Hauteur de siège	555-625 mm
Largeur du siège	360 mm
Profondeur du siège	360 mm
Masse totale - sans panier	7,7 kg 7,5 kg
Diamètre des roues	200 x 35 mm
Freins	Freins standard et freins de stationnement
Rayon de braquage	940 mm
Température de stockage et d'utilisation	+5°C - +41°C
Humidité de stockage et d'utilisation	30% - 70%
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques. Tolérance de mesures +- 15 mm / 1,5 kg / 1,5°.	

Inhoudsopgave

Voorwoord	42
1. Uw product	43
2. Voor gebruik	44
2.1. Beoogd gebruik en indicaties	44
2.2. Veiligheidsinstructies en relevante risico's	45
2.3. Symbolen op de rollator	46
2.4. Bij levering	47
2.5. Transport en opslag	47
3. Montage/Demontage en aanpassingen	48
3.1. Montage	48
3.2. Demontage	51
3.3. Hoogte aanpassingen	52
3.4. De remmen afstellen	53
4. Uw rollator gebruiken	53
4.1. Remsysteem	53
4.2. Opvouwen/Ontvouwen	54
4.3. Stoepranden nemen	56
4.4. Gaan zitten, opstaan, wandelen	56
5. Onderhoud	57
5.1. Schoonmaak	57
5.2. Ontsmetting	57
5.3. Inspectie / Onderhoud / Reparatie	58
5.4. Hergebruik	58
5.5. Beëindiging van gebruik	59
6. Technische specificaties	59

Voorwoord

Proficiat! U bent nu eigenaar van een Vermeiren rollator!

Bedankt voor uw vertrouwen in de producten van Vermeiren. Om u te ondersteunen bij het gebruik van deze rollator en zijn bedieningsmogelijkheden, bieden we u deze handleiding aan. Lees deze informatie zorgvuldig door: het zal u helpen om vertrouwd te raken met de bediening, mogelijkheden en beperkingen van uw rollator.

Indien u na het lezen van deze handleiding nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw vakhandelaar. Hij/Zij zal u met plezier verder helpen.

Belangrijke opmerking

Om uw veiligheid te garanderen, en om de levensduur van uw product te verlengen, raden we u aan om er goed zorg voor te dragen en om regelmatig nazicht en onderhoud te laten uitvoeren.

Deze handleiding houdt rekening met de recentste productontwikkelingen. De Firma Vermeiren behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan dit type product door te voeren zonder verplicht te zijn om voordien geleverde producten aan te passen of te vervangen.

De productafbeeldingen in deze handleiding dienen om de instructies te verduidelijken. De productdetails in de afbeeldingen kunnen afwijken ten opzichte van uw product.

Beschikbare informatie

Op onze website <http://www.vermeiren.com/> kunt u altijd terecht voor de meest recente versie van onderstaande informatie. Raadpleeg deze website a.u.b. regelmatig voor eventuele bijgewerkte versies.

Mensen met een visuele beperking kunnen de elektronische versie van deze handleiding downloaden en laten voorlezen door een tekst-naar-spraak programma.



Gebruiksaanwijzing
Voor gebruiker en vakhandelaar



Servicehandleiding voor rollators
Voor de vakhandelaar

NL



EC-conformiteitsverklaring

1. Uw product



1. Handgrepen
2. Remhendel
3. Rug
4. Opbergtas
5. Zit
6. Voorwielen
7. Achterwielen
8. Remkabel
9. Tiphulp
10. Reflectoren
11. wandelstok
12. Identificatieplaat

2. Voor gebruik

2.1. Beoogd gebruik en indicaties

- Dit product is een medisch hulpmiddel.
- Indicaties en contra-indicaties: De rollator is bedoeld ter ondersteuning van de beenfunctie tijdens het lopen. Gebruik uw rollator niet indien u andere fysieke beperkingen heeft waardoor het gebruik van de rollator onveilig wordt, zoals een zwakke arm, evenwichtsstoornis, verminderd zicht, verlies van ledematen, ...
- De rollator is uitsluitend ontworpen en geproduceerd om als loophulp, voor één persoon met een maximaal gewicht van 136 kg, te dienen.
- Door met de bovenste ledematen of de romp op de rollator te steunen of deze te verschuiven, compenseert de rollator de verminderde belastbaarheid of de kracht van de onderste ledematen. Bovendien zorgt deze voor een betere steun en veiligheid bij het gaan.
- De rollator kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.
- Hij is niet bedoeld voor het vervoer van goederen en/of meer personen dan de gebruiker. Hij is eveneens niet bedoeld om zittend gebruikt te worden als transportmiddel.
- Hij mag alleen worden gebruikt op een vlakke ondergrond waarbij alle vier de wielen de grond raken. Gebruik de rollator niet op rotsachtig, hobbelig of zanderig terrein of op plaatsen met een steile helling. Dan kan de rollator instabiel worden. Ga tijdens het lopen altijd via vlakke, stabiele ondergronden en afgeschuinde stoepranden.
- De garantie op dit product is gebaseerd op normaal gebruik en onderhoud zoals beschreven in deze handleiding. De garantie vervalt bij schade die werd veroorzaakt door verkeerd gebruik of gebrek aan onderhoud.
- Raadpleeg ook de technische details en begrenzings van uw rollator in §6..

2.2. Veiligheidsinstructies en relevante risico's

VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel

- Lees de instructies in deze handleiding en volg ze nauwkeurig op. Zo niet, kan dit leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging aan uw product.

Houd rekening met de volgende algemene waarschuwingen tijdens het gebruik:

- Let erop dat er geen stenen of ander objecten de rollator wielen blokkeren.
- Zorg ervoor dat beide parkeerremmen aan staan, voordat u de rollator gebruikt als hulp om recht te staan. Zodra u comfortabel en stabiel staat, kunt u de parkeerremmen vrijzetten.
- Hou beide handen op de handgrepen tijdens het stappen.
- Houd er rekening mee dat sommige onderdelen van uw rollator zeer warm of koud kunnen worden door omgevingstemperatuur, de zon of verwarmingstoestellen. Wees daarom voorzichtig bij het aanraken.
- Verifieer voor elk gebruik of de hoogte-verstellingen goed vast staan, zie **§3.3.**
- Houd de handgrepen niet met natte handen vast. Als u dit wel doet, kunt u uw evenwicht verliezen.
- Begeef u met uw rollator niet op de rijweg. Blijf op het voetpad.
- Volg de instructies voor reiniging en controles. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door foutief onderhoud.

Ieder ernstig incident [MDR (EU) 2017/745 §2 (65)] dat zich heeft voorgedaan met trekking tot het product dient gerapporteerd te worden aan de producent en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt gevestigd is.

Houd er rekening mee dat uw rollator, afhankelijk van de gebruikte instelling, bij sommige diefstalsystemen interferentie kan geven. Hierdoor kan het winkelalarm in werking gesteld worden.

2.3. Symbolen op de rollator

- i** De identificatieplaat bevindt zich onder de linker handgreep, aan de binnenkant van het basisframe

	Maximum gewicht van de gebruiker in kg
	Type aanduiding
	Catalogusnummer
	Serienummer
	Medisch hulpmiddel
	Producent
	Fabricagedatum
	EC-conformiteitsverklaring
	Let op: belangrijke informatie
	Het is aangeraden om de handleiding te lezen

2.4. Bij levering

Pak uw product uit en verifieer of de levering compleet is. Volgende onderdelen zijn bij de levering ingesloten:

- Basisframe met zitting en rugleuning;
- Voorwielframe met voorwielen;
- Achterwielen met bevestiging en remkabelverbinding;
- Handgrepen met remmen
- Twee hoogteverstelknoppen;
- Twee bevestigingspennen;
- Opbergzak
- Eén klittenband;
- Gebruiksaanwijzing

Controleer de zending zorgvuldig op transportschade. Wanneer blijkt dat uw product een defect vertoont, neem dan contact op met de transporteur.

2.5. Transport en opslag

Transport en opslag van de rollator moet gebeuren volgens de technische specificaties in §6.. Bewaar de rollator droog.

Bescherm de rollator tegen roest en het binnendringen van vreemde stoffen (bijv. zout water, zeelucht, zand, stof) middels een degelijke afscherming of verpakking).

Zorg er bij het opbergen voor dat er geen andere voorwerpen op of tegen de rollator liggen waardoor de rollator beschadigd kan worden.

3. Montage/Demontage en aanpassingen

⚠ VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel

- Monteer uw rollator volledig voordat u zijn hoogte instelt.

3.1. Montage

3.1.1. Montage van voorwielframe

1. Ontvouw het basisframe (18).
2. Plaats het basisframe op de grond of tafel, met de ovale buizen plat op het oppervlak.
3. Neem het voorwielframe (8) en steek beide buisuiteinden in de uitstekende, ronde buizen van het basisframe. Zorg ervoor dat de wielsteun (w) zich aan de binnenkant van het basisframe bevindt.



4. Pas de buislengte van het voorwielframe (8) aan door de buizen in/uit te schuiven.
5. Controleer aan elke kant of de gaten van de binnen- en buitenbuizen overeenkomen.
6. Steek de bevestigingspen (7) in het gat van de hoogteverstelling. Zorg ervoor dat de pen volledig is geplaatst; er is een klik te horen wanneer de bevestigingsclip de buis klemt.



7. Herhaal dit voor het andere frame.
8. Controleer de buislengte aan de linker- en rechterkant. Als de lengte verschilt, verwijder dan de bevestigingspen aan één kant en pas de lengte aan volgens stap 4, 5 en stap 6.

3.1.2. Montage van achterwielen en handgrepen


VOORZICHTIG

Gevaar voor beschadiging

- Voorkom dat remkabels worden gevouwen.

Wielsteunen met achterwielen

1. Draai het basisframe totdat de buizen van het voorframe (rond) zich onderaan bevinden, waarbij de voorwielen het oppervlak raken.
2. Neem een van de gecombineerde onderdelen met achterwiel, handgreep en remkabel.
3. Controleer vóór de montage of het achterwiel **(9)** en de rem **(10)** zich aan de buitenkant van de ovale framebuis bevinden. Als dit niet het geval is, gebruik dan deze wielsteun aan de andere kant van het basisframe.

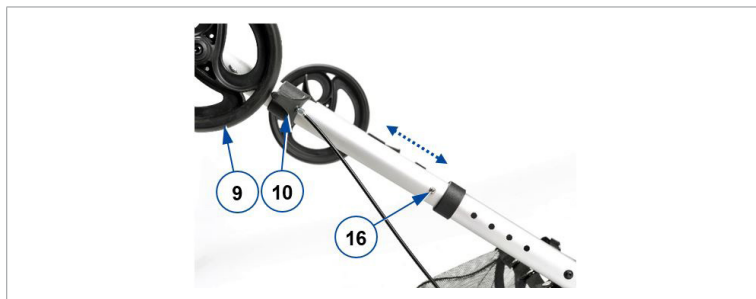

4. Houd de kleine, zilverachtige drukknop **(16)** ingedrukt.
5. Steek de wielsteun in de uitstekende, ovale buis van het basisframe.
6. Schuif de wielsteun in/uit totdat de drukknop **(16)** uit het afstelgat springt.
7. Druk nogmaals op de drukknop en schuif de wielsteun naar de gewenste lengte.
8. Herhaal dit voor de tweede wielsteun (van gecombineerd deel). Zorg ervoor dat de linker- en rechterbuislengtes hetzelfde zijn.
9. Zorg ervoor dat beide buizen goed vastzitten.


⚠ VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel en/of beschadiging

- Controleer voor gebruik of de handgrepen vergrendeld zijn.
- Let op de positie van de remkabels: deze moeten zich aan de buitenkant van het frame bevinden zonder de achterwielen te verstoren.
- Trek de handgrepen niet te hoog om te voorkomen dat de remkabels beschadigd raken.



1. Draai het basisframe en plaats het met alle vier de wielen op de grond.
2. Steek de buis met handgreep in het open buisuiteinde van het frame, bij het verbindingstuk.
3. Plaats knop **(12)** in de gaten van de buis en draai deze met de hand stevig vast.
4. Monteer de andere handgreep op dezelfde manier.

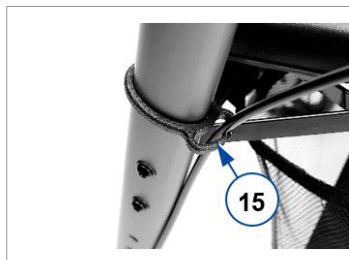

Opmerking: de kabelklem zit al op de remkabel.


5. Schuif de kabelklemmen **(15)** omhoog tijdens het geleiden van de kabel.
6. Houd de remkabel uitgelijnd met de achterste framebuis en duw de klem rond de framebuis, zie afbeelding.

3.1.3. De opbergzak monteren

⚠ VOORZICHTIG

Risico op vallen, kantelen

- Laad uw opbergzak niet te zwaar.

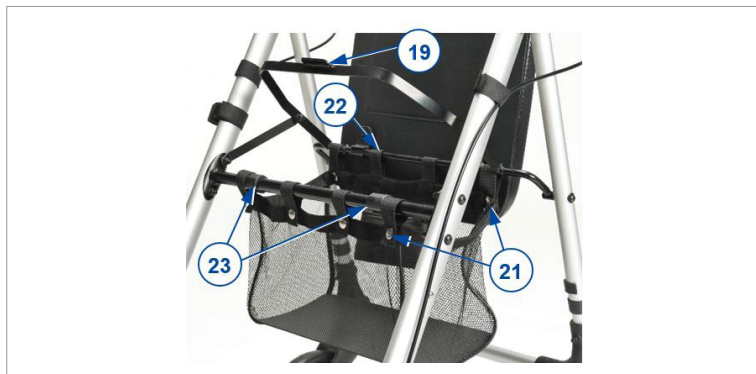

Het maximale laadvermogen van de opbergzak is opgenomen in §6..

1. Trek het stoelframe (19) een beetje omhoog om ruimte te maken.
2. Monteer de opbergtas met de zes drukknopen (21) en twee klittenbandsluitingen (22).
Zorg ervoor dat de twee beschermhoezen (23) onbedekt blijven.
3. Duw de stoel en het stoelframe naar beneden.

3.2. Demontage

⚠ VOORZICHTIG

Gevaar voor beschadiging

- Let op de positie van de remkabels en trek deze niet te hoog zodat de remkabel niet beschadigd raakt. .

Het demonteren van de rollator gebeurt in omgekeerde volgorde van de montage beschreven in vorige sectie:

1. Opbergzak: Open de drukknopen (9) en verwijder de zak.
2. Klittenband voor wandelstok: verwijderen.
3. Kabelklem (8) (2x): Trek voorzichtig van de framebuis.

4. Handgreep met remhendel (2x): Verwijder de knop (12) en trek de handgreep uit het basisframe.
5. Basisframe: draai en plaats het met het voorframe op een oppervlak.
6. Wielsteun met achterwiel (2x): Houd de zilverachtige drukknop (16) ingedrukt en trek de wielsteun uit het basisframe.
7. Basisframe: draai en plaats het met het achterframe op het oppervlak.
8. Voorwielframe (8): verwijder aan elke kant de bevestigingspen (7) en trek de buizen uit het basisframe.

3.3. Hoogte aanpassingen

-  Om de hoogte van de rollator aan te passen aan de lichaamsgrootte:
- En pas de zadelhoogte aan
 - Pas vervolgens de hoogte van beide handgrepen aan.

VOORZICHTIG

Risico op vallen, kantelen

- Stel de vier wielen steeds op dezelfde hoogte in.

Zorg ervoor dat

- beide handgrepen op dezelfde hoogte zijn ingesteld.
- de 4 wielen op dezelfde hoogte zijn ingesteld.

3.3.1. Zithoogte

De zit is in hoogte aanpasbaar door de voor- en achterwielen te verstellen (5 posities, in stappen van 25 mm).

Controleer of de zitting horizontaal en op de juiste zithoogte staat. Zo niet, stel dan de gemonteerde wielen af (zie § 3.1.) en zorg ervoor dat ze zich op dezelfde hoogte bevinden.

3.3.2. Handgreephoogte

Om de handgreep/totale hoogte (5 standen) aan te passen:

1. Draai de knop (12) los (zie §3.1.2.) en verwijder deze van het frame.
2. De ventilator op de gewenste hoogte instellen. Als je rechtop staat, moet de handgreep zo hoog zijn als je pols. Laat je armen los hangen.
3. Plaats knop (12) in de gaten van de buis en draai deze met de hand stevig vast.
4. Stel de andere handgreep op dezelfde manier af. Zorg ervoor dat beide handgrepen dezelfde hoogte hebben.

3.4. De remmen afstellen

De remkracht kan aangepast worden door de schroef (14) aan de achterkant van de remhendel losser/vaster te draaien.



4. Uw rollator gebruiken

4.1. Remsysteem

⚠ VOORZICHTIG

Kans op vallen

- Om uw veiligheid te garanderen dient u de werking van de remmen te controleren. De staat van het remsysteem wordt beïnvloed door slijtage, de aanwezigheid van olie en andere vervuilende stoffen op de achterwielen en het remmechanisme.

De rollator is voorzien van remmen, die door twee remhendels (15) bediend kunnen worden. De remhendels kunnen op twee manieren gebruikt worden: als standaard rem of als parkeerrem.

VOORZICHTIG

Gevaar voor beschadiging

- Duw de rollator niet te hard wanneer u de standaard rem gebruikt. Dit kan de remmen en wielen beschadigen.

Om de standaard rem te gebruiken trekt u beide remhendels (15) gelijktijdig omhoog [A], in een knijpbeweging. Om het remmen te stoppen laat u de remhendels los.

Om de parkeerrem te gebruiken, drukt u beide remhendels (15) naar beneden tot in vergrendelstand [B]. Gebruik altijd de beide parkeerremmen gelijktijdig. Om de parkeerstand te verlaten, trek beide remhendels tegelijk omhoog.



4.2. Opvouwen/Ontvouwen

VOORZICHTIG

Risico voor knellen

- Houd vingers, gespen, sieraden en kleding uit de buurt van het vouwsysteem.

VOORZICHTIG

Kans op vallen

- Verifieer dat de rollator volledig open staat en het frame geblokkeerd is.



4.2.1. De rollator uitvouwen

1. Duw beide remhendels omlaag in parkeerstand, zie §4.1..
2. Plaats de rollator met 4 wielen op de grond en houd de framebuizen vast.
3. Duw de stoel en het stoelframe (20) omlaag naar de horizontale positie.
4. Draai de rugleuning omlaag, als deze omhoog staat.
5. Stel de rollator in op de gewenste hoogte (zie §3.3.).

4.2.2. De rollator opvouwen


1. Ga achter de rollator staan.
2. Duw beide remhendels omlaag in parkeerstand, zie §4.1..
3. Klap de zit omhoog.
4. Maak de opbergzak leeg.
5. Trek de steunbeugel (20) omhoog om het frame gedeeltelijk te sluiten.
6. Sluit het frame volledig door de voorste (16) en achterste (17) buizen samen te drukken.
7. Draai indien nodig de rugleuning omhoog.

4.3. Stoepranden nemen

VOORZICHTIG

Kans op vallen

- Neem stoepranden recht, met beide voorwielen gericht op de stoeprand. Houd de rollator dicht bij u.

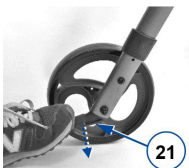

Om het nemen van kleine obstakels, zoals stoepranden, te vergemakkelijken, is uw rollator voorzien van een tiphulp op de twee achterwielen.

1. Zorg ervoor dat u stabiel staat met beide handen op de handgrepen.
2. Gebruik één voet en duw op de tiphulp **(21)** om de voorwielen van de grond te tillen.
3. Houd de rollator met de handgrepen in deze positie en beweeg traag naar voor tot de voorwielen op de stoeprand staan.
4. Til nu de handgrepen op en beweeg naar voor om de achterwielen op de stoeprand te zetten.
5. Als de rollator stabiel staat, kan u zelf de stoeprand opstappen.

4.4. Gaan zitten, opstaan, wandelen

VOORZICHTIG

Kans op vallen

- Let erop dat beide remhendels in parkeerstand staan voordat u gaat zitten, zie §4.1.. Laat de remhendels in deze stand staan totdat u gaat wandelen. Houd uw voeten tussen de achterwielen.
- Beweeg de rollator niet al zittend voort.

1. Duw beide remhendels omlaag in parkeerstand.
2. Verifieer of de rugsteun en de zit neer gedraaid en bevestigd zijn.
3. Terwijl u op de handgrepen steunt, draait u zich om en gaat u op de zit neerzitten.
4. Om opnieuw op te staan, leun op de handgrepen en draai u om.
5. Trek beide remhendels omhoog en gebruik de standaard remmen.
6. Laat de remhendels los en stap voorwaarts met de rollator dicht bij uw lichaam.

5. Onderhoud

-  Regelmatig onderhoud zorgt ervoor dat uw rollator in een perfect werkende staat blijft. Voor de onderhoudshandleiding kan u de website van Vermeiren raadplegen: www.vermeiren.com.

5.1. Schoonmaak

Gebruik een zachte, vochtige doek en lauwwarm water met een milde huishoudelijke zeep om de rollator schoon te maken. Vermijd dat onderdelen doorweekt raken. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.

5.2. Ontsmetting



Gevaar voor beschadiging

- Ontsmetting mag enkel worden uitgevoerd door getraind personeel. Neem contact op met uw vakhandelaar.

Gebruik een zachte, vochtige doek en lauwwarm water met een mild huishoudelijk desinfectiemiddel om de rollator schoon te maken.

5.3. Inspectie / Onderhoud / Reparatie

De verwachte levensduur van uw rollator is 5 jaar. De levensduur wordt beïnvloed door zijn gebruik, opslag, onderhoud, service en reiniging.

Voordat u met uw rollator op pad gaat, moet deze nagekeken worden op volgende punten:

- Volledigheid.
- Vouwmechanisme: goed werkend.
- Bouten en moeren: zitten goed vast.
- Remmen: goed werkend.
- Wielen (stabiliteit, spoor, bevestigingsschroeven).
- Indien uw wielen regelmatig in contact komen met draden, haren of andere vezels, kunnen deze geblokkeerd raken. Kijk daarom regelmatig uw wielen na of ze vrij kunnen roteren en of ze in een goede staat verkeren.
- Frame (vervormingen, stabiliteit, verbindingen).
- Handgrepen (veilige blokkering van de hoogteverstelling, goede steun van de handgrepen).
- Zit, rugsteun en opbergzak (slijtage of beschadigingen).

Uw rollator is opgebouwd uit aluminium en plastic onderdelen. We raden aan om uw product minstens één keer per jaar te laten inspecteren, maar de onderhoudsfrequentie hangt af van de frequentie en intensiteit van gebruik. Raadpleeg uw vakhandelaar om tot een overeenstemming betreffende de onderhoudsfrequentie te komen.

Reparaties en vervangingen mogen enkel door opgeleide personen worden uitgevoerd en enkel met originele vervangonderdelen van Vermeiren.

Aarzel niet om de service die door uw vakhandelaar aangeboden wordt, te gebruiken. Hij/zij zal u graag helpen met betrekking tot service en reparaties.

5.4. Hergebruik

Voor ieder hergebruik moet de rollator gedesinfecteerd, geïnspecteerd en onderhouden worden volgens de instructies in **§5.2.** en **§5.3.**

5.5. Beëindiging van gebruik

Op het einde van de levensduur moet u de rollator vernietigen volgens de lokale milieuwetgeving. U kunt best de rollator demonteren om transport van recyclebare materialen te vergemakkelijken.

6. Technische specificaties

Onderstaande technische gegevens zijn enkel geldig voor deze rollator, bij standaardinstellingen en optimale omgevingsfactoren. Houd bij gebruik rekening met deze details.

Merk	Vermeiren
Productgroep	Rollator
Type	Eco-Plus
Beschrijving	Afmetingen
Max. gebruikersgewicht	136 kg
Maximaal vulgewicht van opbergzak	5 kg
Totale lengte	680 - 795 mm
Lengte dichtgevouwen	310 mm
Totale breedte	610 mm
Breedte dichtgevouwen	610 mm
Totale hoogte	845-1020 mm
Hoogte dichtgevouwen	960 mm
Handgreephoogte	845-1020 mm
Aanbevolen lichaamsgrootte	1650 – 2050 mm
Afstand tussen de handgrepen	500 mm
Zithoogte	555-625 mm
Zitbreedte	360 mm
Zitdiepte	360 mm
Totaal gewicht - zonder mandje	7,7 kg 7,5 kg
Wieldiameter	200 x 35 mm
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen te introduceren.	
Meettolerantie +/- 15 mm / 1,5 kg / 1,5°	

Merk	Vermeiren
Productgroep	Rollator
Type	Eco-Plus
Beschrijving	Afmetingen
Remmen	Standaard remmen & parkeerremmen
Draaicirkel	940 mm
Opslag en gebruikstemperatuur	+5°C - +41°C
Opslag en gebruiksluchtvochtigheid	30% - 70%
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen te introduceren. Meettolerantie +- 15 mm / 1,5 kg / 1,5°	

Inhalt

Vorwort	62
1. Ihr Produkt	63
2. Vor der Benutzung	64
2.1. Bestimmungsgemäße Verwendung und Indikationen	64
2.2. Sicherheitshinweise und mögliche Risiken	65
2.3. Symbole an dem Rollator	66
2.4. Bei Lieferung	67
2.5. Transport und Aufbewahrung	67
3. Montage/Demontage und Anpassungen	68
3.1. Montage	68
3.2. Auseinanderbauen	72
3.3. Höhenverstellung	72
3.4. Einstellen der Bremsen	73
4. Benutzen des Rollators	74
4.1. Bremssystem	74
4.2. Falten / Entfalten	75
4.3. Bewältigen von Bordsteinkanten	76
4.4. Setzen, Aufstehen und Gehen	77
5. Wartung	77
5.1. Reinigung	77
5.2. Desinfektion	78
5.3. Inspektion / Wartung / Reparatur	78
5.4. Wiederbenutzung	79
5.5. Entsorgung	79
6. Technische Daten	80

Vorwort

Herzlichen Glückwunsch! Sie sind nun Besitzer eines Vermeiren-Rollator!

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in Produkte von Vermeiren. Dieses Handbuch soll Ihnen bei der Benutzung dieses Rollators und seiner Bedienmöglichkeiten helfen. Lesen Sie es daher bitte aufmerksam durch, um sich mit der Bedienung, den Fähigkeiten und Beschränkungen Ihres Rollator vertraut zu machen.

Sollten Sie nach der Lektüre dieses Handbuchs noch Fragen haben, können Sie sich jederzeit an Ihren Fachhändler wenden. Er wird Ihnen gerne in dieser Angelegenheit weiterhelfen.

Wichtiger Hinweis

Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten und die Nutzungsdauer Ihres Produkts zu verlängern, sollten Sie es gut behandeln und regelmäßig überprüfen und/oder warten lassen.

Dieses Handbuch enthält die neuesten Produktentwicklungen. Vermeiren behält sich das Recht vor, Veränderungen an dieser Art von Produkt vorzunehmen, ohne eine Verpflichtung einzugehen, ähnliche bereits ausgelieferte Produkte anzupassen oder auszutauschen.

Die Produktabbildungen dienen zur Verdeutlichung der Anweisungen. Das gezeigte Produkt kann in Details von Ihrem Produkt abweichen.

Verfügbare Informationen

Auf unserer Webseite <http://www.vermeiren.com/> finden Sie stets die aktuellste Version der folgenden Informationen. Informieren Sie sich bitte regelmäßig auf dieser Website nach eventuell verfügbaren Aktualisierungen.

Sehbehinderte Menschen können sich die elektronische Version dieses Handbuchs herunterladen und mit Hilfe einer Sprachsyntheselösung („Text-to-Speech-Software“) vorlesen lassen.



Bedienungsanleitung
Für Benutzer und Fachhändler



Wartungshandbuch für Rollatoren
Für Fachhändler

DE



EG-Konformitätserklärung

1. Ihr Produkt



1. Handgriffe
2. Bremshebel
3. Rücken
4. Aufbewahrungstasche
5. Sitz
6. Vorderräder
7. Hinterräder
8. Bremskabel
9. Kipphilfe
10. Reflektoren
11. Halterung für Gehstock
12. Typenschild

2. Vor der Benutzung

2.1. Bestimmungsgemäße Verwendung und Indikationen

- Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt.
- Indikationen und Kontraindikationen: Der Rollator dient zur Unterstützung der Beinfunktion beim Gehen. Benutzen Sie Ihren Rollator nicht, wenn Sie andere körperliche Einschränkungen haben, durch die die Nutzung des Rollators unsicher wird, zum Beispiel bei geschwächter/eingeschränkter Armfunktion, bei Gleichgewichtsstörungen, Sehbehinderung, Gliedmaßenverlust, usw.
- Der Rollator ist ausschließlich als Gehhilfe für eine Person mit einem maximalen Gewicht von 136 kg vorgesehen.
- Indem Sie sich mit den oberen Extremitäten oder dem Rumpf auf den Rollator stützen oder diesen verschieben, gleicht der Rollator die verminderte Belastbarkeit oder Leistungsfähigkeit der unteren Extremitäten aus. Außerdem sorgt er für eine bessere Unterstützung und Sicherheit beim Gehen.
- Der Rollator kann sowohl in Räumen als auch im Freien verwendet werden.
- Der Rollator ist nicht für den Transport von Gegenständen und/oder von mehr Personen als dem Benutzer vorgesehen. Er ist auch nicht dazu bestimmt, im Sitzen als Transporthilfe verwendet zu werden.
- Er darf nur auf einem ebenen Untergrund verwendet werden, bei dem alle vier Räder Bodenkontakt haben. Nutzen Sie den Rollator nicht auf steinigen, holperigen oder sandigen Böden oder starkem Gefälle, da sonst Kippgefahr besteht. Führen Sie den Rollator beim Gehen immer über einen ebenen, stabilen Untergrund und abgesenkte Bordsteinkanten.
- Die Garantie für dieses Produkt beruht auf dessen normaler Benutzung und Wartung wie in diesem Handbuch beschrieben. Schäden an Ihrem Produkt, die auf unsachgemäße Benutzung oder mangelnde Wartung zurückzuführen sind, führen zum Erlöschen der Garantie.
- Sehen Sie sich auch die technischen Daten und die Grenzen Ihres Rollators in Abschnitt 6. an.

2.2. Sicherheitshinweise und mögliche Risiken

VORSICHT

Verletzungsgefahr

- Bitte lesen und befolgen Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung, da andernfalls Verletzungsgefahr besteht oder Ihr Produkt beschädigt werden kann.

Beachten Sie bei der Benutzung die folgenden allgemeinen Warnhinweise:

- Achten Sie darauf, dass sich keine Steine oder andere Gegenstände in den Laufflächen der Räder befinden und dadurch die Räder des Rollators blockieren.
- Achten Sie darauf, dass beide Feststellbremsen erst immer in die Parkposition gestellt werden, bevor Sie den Rollator als Hilfsmittel zum Aufstehen benutzen. Lösen Sie die Feststellbremsen erst, wenn Sie sicher stehen.
- Halten Sie beide Hände an den Handgriffen, wenn Sie vorwärts gehen.
- Beachten Sie, dass bestimmte Teile Ihres Rollators infolge der Umgebungstemperatur, Sonneneinstrahlung, Heizkörpern usw. sehr warm oder sehr kalt werden können. Daher ist beim Berühren Vorsicht geboten.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Höhenverstellungen fest gesichert sind, siehe Abschnitt **3.3.**.
- Fassen Sie die Handgriffe nicht mit nassen Händen an. Sie könnten abrutschen und den Halt verlieren.
- Begeben Sie sich mit Ihrem Rollator nicht in den fließenden Verkehr. Bleiben Sie auf dem Fußweg.
- Beachten Sie die Pflege- und Wartungshinweise. Bei Schäden aufgrund von mangelnder Wartung/Pflege haftet der Hersteller nicht.

Jeder schwerwiegende Zwischenfall [MDR (EU) 2017/745 §2 (**65**)], der im Zusammenhang mit dem Gerät aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.

Denken Sie bitte daran, dass Ihr Rollator je nach den verwendeten Einstellungen einige Diebstahlsicherungen stören kann. Dadurch kann der Alarm ausgelöst werden.

2.3. Symbole an dem Rollator

- i** Das Typenschild befindet sich unter dem linken Handgriff an der Innenseite des Grundrahmens.

	Maximalgewicht des Benutzers (in kg)
	Typbezeichnung
	Katalognummer
	Seriennummer
	Medizinprodukt
	Hersteller
	Produktionsdatum
	Konformitätserklärung
	Achtung: wichtige Informationen
	Bitte Bedienungsanleitung beachten

2.4. Bei Lieferung

Packen Sie Ihr Produkt aus und kontrollieren Sie, ob die Lieferung vollständig ist. Folgende Teile müssen enthalten sein:

- Grundrahmen mit Sitz und Rückenlehne;
- Vorderradrahmen mit Vorderrädern;
- Hinterräder mit Träger und Bremskabelanschluss;
- Handgriffe mit Bremsen
- Zwei Knöpfe für die Höhenverstellung;
- Zwei Sicherungsstifte;
- Aufbewahrungstasche;
- Ein Klettband;
- Handbuch

Prüfen Sie Ihr Produkt auf Transportschäden. Sollten Sie nach der Auslieferung Schäden feststellen, kontaktieren Sie bitte den Spediteur.

2.5. Transport und Aufbewahrung

Versand und Aufbewahrung des Rollators sollten gemäß den technischen Spezifikationen in §6. erfolgen. Achten Sie darauf, dass der Rollator an einem trockenen Ort aufbewahrt wird.

Schützen Sie den Rollator mit einer geeigneten Abdeckung oder Verpackung gegen Rost und das Eindringen von Fremdkörpern (z. B. Salzwasser, Seeluft, Sand und Staub).

Achten Sie beim Aufbewahren des Rollators darauf, dass keine anderen Gegenstände auf dem Rollator abgelegt oder daran gelehnt werden, weil der Rollator hierdurch beschädigt werden kann.

3. Montage/Demontage und Anpassungen

⚠ VORSICHT

Verletzungsgefahr

- Bauen Sie den Rollator vollständig zusammen, bevor Sie seine Höhe einstellen.

3.1. Montage

3.1.1. Montage des Vorderradrahmens

1. Falten Sie den Grundrahmen (18) auf.
2. Stellen Sie den Grundrahmen auf den Boden oder einen Tisch, wobei die ovalen Rohre flach auf dem Untergrund liegen.
3. Nehmen Sie den Vorderradrahmen (8) und führen Sie beide Rohrenden in die hervorstehenden, runden Rohre des Grundrahmens ein. Achten Sie darauf, dass sich der Radträger (w) auf der Innenseite des Grundrahmens befindet.



4. Stellen Sie die Rohrlänge des Vorderradrahmens (8) ein, indem Sie die Rohre hinein- oder herauschieben.
5. Prüfen Sie auf jeder Seite, ob die Löcher der inneren und äußeren Rohre übereinstimmen.
6. Führen Sie den Sicherungstift (7) in das Loch der Höhenverstellung ein. Achten Sie darauf, dass der Stift vollständig eingeführt ist; ein Einrastgeräusch ist zu hören, wenn der Sicherungsclip das Rohr umklammert.



7. Wiederholen Sie diesen Vorgang am anderen Rahmenrohr.
8. Überprüfen Sie die Rohrlänge auf der linken und rechten Seite. Wenn sich die Längen unterscheiden, entfernen Sie den Sicherungsstift auf einer Seite und passen Sie die Länge an, wie in den Schritten 4 bis 6 beschrieben.

3.1.2. Montage der Hinterräder und Handgriffe


⚠ VORSICHT

Beschädigungsgefahr

- Verhindern Sie Knicke in den Bremskabeln.

Radträger mit Hinterrädern

1. Drehen Sie den Grundrahmen, bis sich die Frontrahmenrohre (rund) unten befinden und die Vorderräder den Untergrund berühren.
2. Nehmen Sie eines der Kombiteile mit Hinterrad, Handgriff und Bremskabel.
3. Prüfen Sie vor der Montage, ob sich Hinterrad (**9**) und Bremse (**10**) auf der Außenseite des ovalen Rahmenrohres befinden werden. Wenn dies nicht der Fall ist, wurden der linke und der rechte Radträger vertauscht. Verwenden Sie diesen Radträger auf der anderen Seite des Grundrahmens.

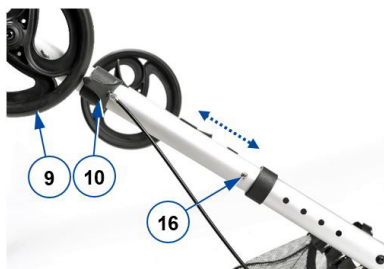

4. Drücken Sie den kleinen silbernen Druckknopf (16) und halten Sie ihn gedrückt.
5. Führen Sie den Radträger in das hervorstehende ovale Rohr des Grundrahmens ein.
6. Schieben Sie den Radträger hinein/heraus, bis der Druckknopf (16) aus dem Einstellungsloch heraustritt.
7. Drücken Sie den Druckknopf noch einmal ein und schieben Sie den Radträger auf die gewünschte Länge.
8. Wiederholen Sie dies für den zweiten Radträger (des Kombiteils). Stellen Sie sicher, dass die linke und die rechte Rohrlänge gleich sind.
9. Überprüfen Sie, dass beide Rohre gut gesichert sind.

Handgriff mit Bremse

VORSICHT

Sturz- und/oder Beschädigungsrisiko

- Prüfen Sie vor der Benutzung, dass die Handgriffe verriegelt sind.
- Achten Sie auf die Position der Bremskabel - sie müssen sich auf der Außenseite des Rahmens befinden, ohne die Hinterräder ohne zu stören.
- Ziehen Sie die Handgriffe nicht zu hoch, damit das Bremskabel nicht beschädigt wird.



1. Drehen Sie den Grundrahmen und stellen Sie sie mit allen vier Rädern auf den Boden.
2. Führen Sie das Rohr mit Handgriff in das offene Rohrende des Rahmens am Verbindungsstück ein.
3. Stecken Sie den Knopf (12) eines der Löcher im Rohr und drehen Sie ihn von Hand fest.
4. Montieren Sie den anderen Handgriff auf die gleiche Weise.



Hinweis: Die Kabelschelle befindet sich bereits am Bremskabel.


5. Schieben Sie die Kabelschellen **(15)** nach oben, während Sie das Kabel führen.
6. Halten Sie das Bremskabel mit dem hinteren Rahmenrohr ausgerichtet und schieben Sie die Schelle um das Rahmenrohr, siehe Abbildung.

3.1.3. Befestigen der Aufbewahrungstasche

VORSICHT

Sturz- oder Kipprisiko

- Beladen Sie die Aufbewahrungstasche nicht zu schwer.

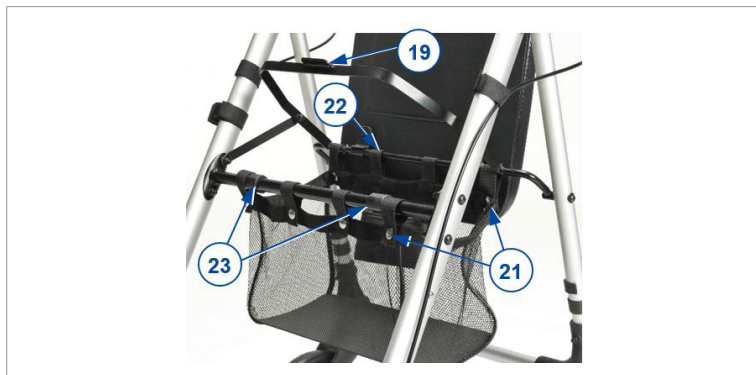

Die maximale Zuladung der Aufbewahrungstasche ist in Abschnitt 6. angegeben.

1. Ziehen Sie den Sitzrahmen **(19)** etwas nach oben, um Platz zu schaffen.
2. Befestigen Sie die Aufbewahrungstasche mit den sechs Druckknöpfen **(21)** und zwei Klettbindern **(22)**. Achten Sie darauf, dass die beiden Schutzhülsen **(23)** frei bleiben und nicht abgedeckt werden.
3. Drücken Sie die Sitzfläche und den Sitz und Sitzrahmen nach unten.

3.2. Auseinanderbauen

VORSICHT

Beschädigungsgefahr

- Achten Sie auf die Position der Bremskabel. Ziehen Sie die Handgriffe nicht zu hoch, damit das Bremskabel nicht beschädigt wird.

Zum Auseinanderbauen des Rollators führen Sie die in dem vorhergehenden Abschnitt beschriebenen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch:

1. Aufbewahrungstasche: Öffnen Sie Druckknöpfe und Klettbänder, um die Aufbewahrungstasche abzunehmen.
2. Klettband für Gehstock: Entfernen.
3. Kabelschelle **(8)** (2x): Ziehen Sie sie vorsichtig von dem Rahmenrohr ab.
4. Handgriff mit Bremshebel (2x): Entfernen Sie den Knopf **(12)** und ziehen Sie den Handgriff aus dem Grundrahmen heraus.
5. Grundrahmen: Drehen Sie den Grundrahmen und legen Sie ihn mit dem Frontrahmen auf eine Oberfläche.
6. Radträger mit Hinterrad (2x): Drücken Sie den silbernen Druckknopf **(16)** und halten Sie ihn gedrückt, während Sie den Radträger aus dem Grundrahmen herausziehen.
7. Grundrahmen: Drehen Sie den Grundrahmen und legen Sie ihn mit dem hinteren Rahmen auf eine Oberfläche.
8. Vorderradrahmen **(8)**: Entfernen Sie auf jeder Seite den Sicherungsstift **(7)** und ziehen Sie die Rohre aus dem Grundrahmen heraus.

3.3. Höhenverstellung

-  So passen Sie die Höhe des Rollators an die Körpergröße an:
- Stellen Sie zuerst die Höhe der Sitzfläche ein.
 - Stellen Sie anschließend die Höhe der beiden Handgriffe ein.

VORSICHT

Sturz- oder Kipprisiko

- Stellen Sie die vier Räder immer auf die gleiche Höhe ein.

Stellen Sie sicher, dass

- beide Handgriffe auf die gleiche Höhe eingestellt sind.
- alle 4 Räder auf die gleiche Höhe eingestellt sind.

3.3.1. Sitzhöhe

Der Sitz kann durch Einstellen der Vorderräder und Hinterräder (4 Positionen) in der Höhe verändert werden.

Überprüfen Sie, ob der Sitz horizontal und in der richtigen Sitzhöhe ist. Ist dies nicht der Fall, justieren Sie die montierten Räder (siehe die Abschnitte **3.1.**) und achten Sie darauf, dass sie die gleiche Höhe haben.

3.3.2. Höhe der Handgriffe

So stellen Sie den Handgriff/die Gesamthöhe ein (5 Positionen):

1. Lösen Sie den Knopf (12) (siehe Abschnitt **3.1.2.**) und entfernen Sie ihn vom Rahmen.
2. Stellen Sie den Handgriff auf die gewünschte Höhe ein. Wenn Sie aufrecht stehen, sollte sich der Handgriffe auf der Höhe Ihres Handgelenks befinden. Lassen Sie Ihre Arme dabei locker hängen.
3. Stecken Sie den Knopf (12) eines der Löcher im Rohr und drehen Sie ihn von Hand fest.
4. Stellen Sie den anderen Handgriff auf die gleiche Weise ein. Stellen Sie sicher, dass sich beide Handgriffe auf der gleichen Höhe befinden.

3.4. Einstellen der Bremsen

Die Bremskraft kann durch Lösen / Anziehen der Schraube (14) auf der Rückseite des Bremshebels eingestellt werden.



4. Benutzen des Rollators

4.1. Bremssystem

VORSICHT

Sturzgefahr

- Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, sollten Sie die Funktion der Bremsen vor jeder Nutzung kontrollieren. Der Zustand des Bremssystems kann durch Verschleiß, die Anwesenheit von Öl und anderen Verunreinigungen an den Hinterrädern und dem Bremsmechanismus beeinträchtigt werden.

Der Rollator ist mit Bremsen ausgestattet, die mit zwei Bremshebeln **(15)** betätigt werden. Die Bremshebel können auf zwei Arten genutzt werden: als normale Bremse (Betriebsbremse) und als Feststellbremse (Parkbremse).

VORSICHT

Beschädigungsgefahr

- Schieben Sie den Rollator nicht zu stark, wenn Sie die Betriebsbremse betätigen. Hierdurch könnten die Reifen oder Bremsen beschädigt werden.

Um die normale Bremse zu benutzen, ziehen Sie beide Bremshebel **(15)** gleichzeitig in einer zusammen-drückenden Bewegung nach oben [A]. Um den Bremsvorgang zu beenden, lassen Sie die Bremshebel los.

Um die Feststellbremse zu aktivieren, drücken Sie beide Bremshebel **(15)** nach unten in die Einraststellung [B]. Aktivieren Sie immer beide Feststellbremsen gleichzeitig. Zum Lösen der Feststellbremsen ziehen Sie beide Bremshebel gleichzeitig nach oben.



4.2. Falten / Entfalten

⚠ VORSICHT

Einklemmgefahr

- Halten Sie Finger, Schnallen, Schmuck und Kleidung vom Klappmechanismus fern.

⚠ VORSICHT

Sturzgefahr

- Überprüfen Sie, dass der Rollator vollständig aufgeklappt ist und der Rahmen arretiert ist.



4.2.1. Aufklappen des Rollators

1. Drücken Sie beide Bremshebel herunter in die Parkposition, siehe Abschnitt **4.1.**.
2. Stellen Sie den Rollator mit den vier Rädern auf den Boden und halten Sie dabei Rahmenrohre fest.
3. Drücken Sie die Sitzfläche und den Sitzrahmen **(20)** in horizontale Position.
4. Klappen Sie die Rückenlehne nach unten, wenn sie oben ist.
5. Stellen Sie den Rollator auf die gewünschte Höhe ein (siehe Abschnitt **3.3.**).

4.2.2. Zusammenklappen des Rollators

1. Stellen Sie sich hinter den Rollator.
2. Drücken Sie beide Bremshebel herunter in die Parkposition, siehe Abschnitt **4.1.**.
3. Klappen Sie die Sitzfläche nach oben.
4. Leeren Sie die Aufbewahrungstasche.
5. Ziehen Sie den Sitzrahmen **(20)** nach oben, um den Rahmen etwas zu schließen.


6. Schließen Sie den Rahmen vollständig, indem Sie die vorderen und hinteren Rohre aufeinander zu drücken.
7. Klappen Sie falls erforderlich die Rückenlehne nach oben.

4.3. Bewältigen von Bordsteinkanten

VORSICHT

Sturzgefahr

- Nehmen Sie Bordsteinkanten direkt, mit beiden Vorderrädern ausgerichtet auf die Bordsteinkante. Halten Sie den Rollator nahe.

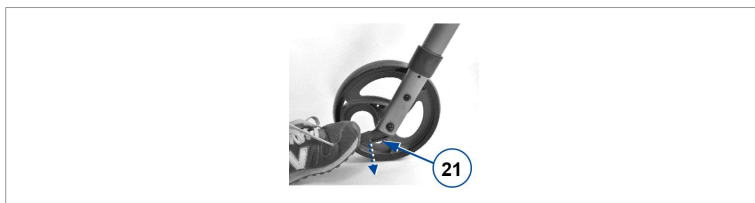

Um das Überwinden kleiner Hindernisse, wie z.B. Bordsteine, zu erleichtern, ist der Rollator mit einer Kipphilfe an den beiden Hinterrädern ausgestattet.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie stabil stehen und halten Sie beide Handgriffe.
2. Drücken Sie mit einem Fuß auf den Kipphebel **(21)**, um die Vorderräder anzuheben.
3. Halten Sie den Rollator mit den Handgriffen in dieser Position und schieben Sie ihn langsam nach vorne, bis die Vorderräder auf dem Bordstein stehen.
4. Heben Sie jetzt die Handgriffe an und schieben Sie den Rollator weiter nach vorne, um die Hinterräder auf den Bordstein zu stellen.
5. Wenn der Rollator stabil steht, können Sie selbst die Bordsteinkante in Angriff nehmen.

4.4. Setzen, Aufstehen und Gehen

VORSICHT

Sturzgefahr

- Achten Sie darauf, dass beide Bremshebel in Parkposition sind, bevor Sie sich setzen; siehe Abschnitt **4.1.**. Halten Sie die Bremshebel in dieser Position, bis Sie wieder zu gehen beginnen. Bleiben Sie mit Ihren Füßen zwischen den Hinterrädern.
 - Bewegen Sie den Rollator nicht im Sitzen.
1. Drücken Sie beide Bremshebel herunter in die Parkposition.
 2. Überprüfen Sie, ob die Rückenlehne und die Sitzfläche heruntergeklappt und in ihrer Position gesichert sind.
 3. Stützen Sie sich auf die Handgriffe, drehen Sie sich um und setzen Sie sich auf die Sitzfläche.
 4. Zum Aufstehen stützen Sie sich auf die Handgriffe und drehen Sie sich um.
 5. Ziehen Sie beide Bremshebel nach oben und benutzen Sie die Betriebsbremsen.
 6. Lassen Sie die Bremshebel los und machen Sie mit dem Rollator nahe vor Ihrem Körper einen Schritt vorwärts.

5. Wartung

-  Durch eine regelmäßige Pflege wird Ihr Rollator in einem einwandfreien Zustand bleiben. Bezüglich des Wartungshandbuchs besuchen Sie die Vermeiren-Website unter: www.vermeiren.com.

5.1. Reinigung

Verwenden Sie zum Reinigen des Rollators ein weiches, feuchtes Tuch und lauwarmes Wasser mit einer milden Seifenlösung für den Haushalt. Vermeiden Sie eine Durchnässung der Teile. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

5.2. Desinfektion

VORSICHT

Beschädigungsgefahr

- Eine Desinfektion darf nur von dafür geschultem Personal durchgeführt werden. Wenden Sie sich hierfür an Ihren Fachhändler.

Verwenden Sie zum Reinigen des Rollators ein weiches, feuchtes Tuch und lauwarmes Wasser mit einem milden Desinfektionsmittel für den Haushalt.

5.3. Inspektion / Wartung / Reparatur

Die erwartete Nutzungsdauer Ihres Rollators beträgt 5 Jahre. Die Lebensdauer Ihres Rollators hängt von der Art der Nutzung, der Einlagerung, der Pflege, Wartung und Reinigung ab.

Bevor Sie Ihren Rollator nutzen, muss dieser auf die folgenden Punkte kontrolliert werden:

- Vollständigkeit.
- Faltmechanismus: Funktioniert gut.
- Schrauben und Muttern: fest angezogen.
- Bremsen: funktionieren gut.
- Räder (Stabilität, Spur, Befestigungsschrauben).
- Wenn die Räder regelmäßig mit Drähten, Haaren oder anderen Fasern in Kontakt kommen, können sie hierdurch blockiert werden. Kontrollieren Sie daher regelmäßig, ob sich die Räder leichtgängig drehen lassen und in gutem Zustand befinden.
- Rahmen (Verformung, Standsicherheit, Verschraubungen).
- Handgriff (sichere Arretierung der Höhenverstellung, sicherer Halt der Handgriffe).
- Sitzfläche, Rückenlehne und Aufbewahrungstasche (Verschleiß oder Beschädigung).

Ihr Rollator besteht aus Aluminium- und Kunststoffkomponenten. Wir empfehlen, Ihren Rollator mindestens einmal pro Jahr überprüfen zu lassen, aber die Wartungshäufigkeit hängt von der Häufigkeit und Intensität der Nutzung ab. Beraten Sie sich bezüglich der geeigneten Wartungshäufigkeit mit Ihrem Fachhändler.

Reparaturen und Erneuerungen dürfen nur von geschultem Personal und mit Original-Ersatzteilen von Vermeiren durchgeführt werden.

Fühlen Sie sich frei, den von Ihrem Fachhändler angebotenen Service zu nutzen. Er wird Ihnen gerne in Bezug auf Service und Reparaturen behilflich sein.

5.4. Wiederverbenutzung

Lassen Sie den Rollator vor jeder Wiederverwendung gemäß den Anweisungen in **§5.2.** und **§5.3.** desinfizieren, inspizieren und warten.

5.5. Entsorgung

Am Ende seiner Lebensdauer muss der Rollator in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltgesetzen entsorgt werden. Am besten demontieren Sie den Rollator, um den Transport von wiederverwertbaren Materialien zu erleichtern.

6. Technische Daten

Die nachstehenden technischen Daten gelten für diesen Rollator nur bei Standardeinstellungen und optimalen Umgebungsbedingungen. Berücksichtigen Sie diese Daten bei der Benutzung.

Marke	Vermeiren
Produktgruppe	Rollator
Typ	Eco-Plus
Beschreibung	Abmessungen
Maximales Gewicht des Benutzers	136 kg
Maximale Zuladung der Aufbewahrungstasche	5 kg
Gesamtlänge	680 - 795 mm
Länge zusammengeklappt	310 mm
Gesamtbreite	610 mm
Breite zusammengeklappt	610 mm
Gesamthöhe	845-1020 mm
Höhe im zusammengeklappten Zustand	960 mm
Höhe der Handgriffe	845-1020 mm
Empfohlene Körpergröße	1650 – 2050 mm
Abstand zwischen den Handgriffen	500 mm
Sitzhöhe	555-625 mm
Sitzbreite	360 mm
Sitztiefe	360 mm
Gesamtgewicht - ohne Korb	7,7 kg 7,5 kg
Durchmesser Räder	200 x 35 mm
Bremsen	Betriebsbremse und Feststellbremse
Wendekreis	940 mm
Temperaturbereich für Lagerung und Nutzung	+5°C - +41°C
Luftfeuchtigkeitsbereich für Lagerung und Nutzung	30% - 70%
Technische Änderungen vorbehalten. Messtoleranzen +- 15 mm / 1,5 kg / 1,5°	

Sommario

Premessa	82
1. Il prodotto	83
2. Prima dell'uso	84
2.1. Uso previsto e indicazioni	84
2.2. Istruzioni di sicurezza e rischi applicabili	85
2.3. Simboli presenti sul deambulatore	86
2.4. Alla consegna	87
2.5. Spedizione e magazzinaggio	87
3. Montaggio/smontaggio e regolazioni	88
3.1. Montaggio	88
3.2. Smontaggio	92
3.3. Regolazioni dell'altezza	92
3.4. Regolazione dei freni	93
4. Uso del deambulatore	94
4.1. Sistema frenante	94
4.2. Chiusura / Apertura	95
4.3. Affrontare i cordoli	96
4.4. Sedersi, alzarsi in piedi e camminare	97
5. Manutenzione	97
5.1. Pulizia	97
5.2. Disinfezione	98
5.3. Ispezione / assistenza / riparazioni	98
5.4. Utilizzi successivi	99
5.5. Smaltimento	99
6. Specifiche tecniche	100

Premessa

Congratulazioni Ora possiede un deambulatore Vermeiren!

Grazie per la fiducia accordata ai prodotti Vermeiren. Questo manuale viene fornito come supporto per l'uso del deambulatore e delle sue opzioni operative. Leggerlo attentamente, in quanto aiuta a familiarizzarsi con il funzionamento, le prestazioni e le limitazioni del deambulatore.

Per eventuali ulteriori domande successive alla lettura di questo manuale, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato, che sarà lieto di fornire un supporto.

Nota importante

Per garantire la propria sicurezza e prolungare la durata del prodotto, trattarlo con cura e farlo controllare e/o sottoporlo a manutenzione con regolarità.

Questo manuale rispecchia gli sviluppi più recenti del prodotto. Vermeiren si riserva il diritto di introdurre modifiche di questo tipo di prodotto senza alcun obbligo di adattare o sostituire i prodotti analoghi consegnati in precedenza.

Le immagini del prodotto vengono utilizzate per chiarire le istruzioni. I dettagli del prodotto mostrato possono essere diversi da quelli del prodotto in uso.

Informazioni disponibili

Sul sito Web di Vermeiren, all'indirizzo <http://www.vermeiren.com/>, è sempre disponibile la versione più recente delle informazioni indicate di seguito. Visitare con regolarità tale sito per verificare l'esistenza di eventuali aggiornamenti.

Le persone ipovedenti possono scaricare la versione elettronica di questo manuale e farlo leggere da un software applicativo di sintesi vocale.



Manuale di istruzioni
Per l'utente e il rivenditore specializzato



Manuale di assistenza per le deambulatori
Per il rivenditore specializzato

IT



Dichiarazione di conformità CE

1. Il prodotto



1. Impugnature
2. Leva del freno
3. Schienale
4. Borsa portaoggetti
5. Sedile
6. Ruote anteriori
7. Ruote posteriori
8. Cavo del freno
9. Leva di inclinazione
10. Riflettori
11. Supporto per bastone da passeggio
12. Targhetta di identificazione

2. Prima dell'uso

2.1. Uso previsto e indicazioni

- L'ausilio è un prodotto medicale.
- Indicazioni e controindicazioni: Il deambulatore è studiato per supportare il funzionamento delle gambe durante la deambulazione. Non utilizzarlo se si soffre di altre limitazioni fisiche, come debolezza delle braccia, disturbi dell'equilibrio e così via, vista compromessa, perdita degli arti, in grado di causare un uso non sicuro del deambulatore.
- Il deambulatore è progettato e realizzato esclusivamente per l'uso come ausilio per la deambulazione di una sola persona di peso non superiore a 136 kg.
- Il deambulatore compensa l'assenza di un sostegno adeguato da parte delle gambe dell'utente, che deve appoggiarsi o spostarsi con esso servendosi degli arti superiori o del busto. Il deambulatore offre un maggior livello di stabilità, supporto e sicurezza durante la deambulazione.
- È possibile utilizzare il deambulatore al coperto e all'aperto.
- Esso non è destinato al trasporto di merci e/o di persone in più oltre all'utente. Inoltre, non deve essere utilizzato come ausilio per il trasporto da seduti.
- Esso deve essere utilizzato soltanto su superfici sulle quali tutte le quattro ruote tocchino il suolo. Non utilizzare il deambulatore su terreni pietrosi, irregolari o sabbiosi, o in punti con una forte inclinazione. Il deambulatore può diventare instabile. Per camminare con il deambulatore, scegliere aree piane e stabili e cordoli smussati.
- La garanzia del prodotto presuppone un uso e una manutenzione normali del medesimo, come descritti in questo manuale. I danni al prodotto dovuti a uso improprio o manutenzione carente causano la decadenza della garanzia.
- Verificare tutti i dettagli tecnici e le limitazioni del deambulatore nel §6..

2.2. Istruzioni di sicurezza e rischi applicabili

ATTENZIONE

Rischio di lesioni

- Leggere e osservare le istruzioni contenute in questo manuale. In caso contrario, è possibile ferirsi o danneggiare il prodotto.

Durante l'uso, tenere presenti le seguenti avvertenze generali:

- Verificare che nessuna pietra o altro oggetto blocchi le ruote del deambulatore.
- Prima di utilizzare il deambulatore come ausilio per alzarsi in piedi, accertarsi che entrambe le leve dei freni si trovino in posizione di parcheggio. È opportuno sbloccare i freni di parcheggio soltanto una volta che si sia in piedi in modo confortevole e stabile.
- Durante la deambulazione, tenere entrambe le mani sulle impugnature.
- Non dimenticare che alcune parti del deambulatore possono diventare molto calde o fredde a causa della temperatura ambiente, della radiazione solare e di dispositivi di riscaldamento. Prestare attenzione quando si tocca la carrozzina.
- Prima di ogni utilizzo, verificare che le regolazioni dell'altezza siano saldamente bloccate; vedere il §3.3..
- Non afferrare le impugnature con le mani bagnate. In caso contrario si possono perdere la presa e l'equilibrio.
- Non utilizzare il deambulatore nel traffico. Rimanere sempre sul marciapiede.
- Prendere nota delle istruzioni per la cura e la manutenzione. Il produttore declina ogni responsabilità per danni dovuti a errori di manutenzione/cura.

Qualsiasi incidente grave [MDR (UE) 2017/745 §2 (65)] che si sia verificato in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utente e/o il paziente.

Prestare attenzione alla possibilità che il deambulatore può interferire con alcuni tipi di sistemi antifurto, a seconda delle impostazioni utilizzate. Ciò può fare scattare l'allarme dei negozi.

2.3. Simboli presenti sul deambulatore

i La targhetta di identificazione è situata sotto l'impugnatura sinistra, sul lato interno del telaio base

	Peso massimo dell'utente, in kg
	Indicazione del modello
	Codice prodotto
	Numero di serie
	Dispositivo medico
	Produttore
	Data di produzione
	Dichiarazione di conformità
	Attenzione: informazioni importanti
	Si consiglia di leggere il manuale

2.4. Alla consegna

Disimballare il prodotto e verificare che sia completo. Devono essere presenti i seguenti articoli:

- Telaio base con sedile e schienale;
- Telaio delle ruote anteriori e ruote anteriori;
- Ruote posteriori con supporto e attacco per il cavo del freno;
- Impugnature con freni
- Due manopole di regolazione dell'altezza;
- Due perni di fissaggio;
- Borsa portaoggetti;
- Una cinghia in velcro;
- Manuale

Verificare che il prodotto non presenti danni dovuti al trasporto. Se si rilevano danni dopo la consegna, rivolgersi al trasportatore.

2.5. Spedizione e magazzinaggio

La spedizione e il magazzinaggio del deambulatore devono avvenire come indicato nelle specifiche tecniche riportate nel §6.. Avere cura di immagazzinare il deambulatore in un luogo asciutto.

Fornire una copertura o un imballaggio sufficienti a proteggere il deambulatore da ruggine e corpi estranei (ad esempio acqua salata, aria di mare, sabbia e polvere).

Per evitare danni, accertarsi che sul deambulatore, o contro il medesimo, non sia immagazzinato alcun oggetto.

3. Montaggio/smontaggio e regolazioni

⚠ ATTENZIONE

Rischio di lesioni

- Prima di regolare l'altezza del deambulatore, montarlo completamente.

3.1. Montaggio

3.1.1. Montaggio del telaio delle ruote anteriori

1. Aprire il telaio base **(18)**.
2. Collocare il telaio base sul pavimento o su un tavolo, con i tubi ovali appoggiati sulla superficie.
3. Inserire le estremità di entrambi i tubi del telaio **(8)** delle ruote anteriori nei tubi rotondi sporgenti del telaio base. Accertarsi che il supporto delle ruote (w) si trovi all'interno del telaio base.



4. Regolare la lunghezza dei tubi del telaio **(8)** delle ruote anteriori facendoli scorrere verso l'interno/l'esterno.
5. Verificare su ciascun lato che i fori dei tubi interni si trovino in corrispondenza di quelli dei tubi esterni.
6. Inserire il perno di fissaggio **(7)** nel foro di regolazione dell'altezza. Verificare che il perno sia inserito a fondo; quando il fermaglio di fissaggio si innesta nel tubo, si percepisce un clic.



7. Ripetere tale operazione sull'altro tubo del telaio.
8. Verificare la lunghezza dei tubi dal lato sinistro e da quello destro. Se la lunghezza è diversa, sfilare il perno di fissaggio da un lato e regolarla come indicato ai punti da 4 a 6 incluso.

3.1.2. Montaggio delle ruote posteriori e delle impugnature


⚠ ATTENZIONE

Rischio di danni

- Evitare che i cavi dei freni vengano piegati.

Supporti delle ruote con ruote posteriori

1. Ruotare il telaio base fino a quando i tubi (rotondi) del telaio anteriore si trovano in basso e le ruote anteriori sono a contatto con la superficie.
2. Prelevare uno dei componenti combinati con ruota posteriore, impugnatura e cavo del freno.
3. Prima di procedere al montaggio, verificare che la ruota posteriore **(9)** e il freno **(10)** vengano a trovarsi all'esterno del tubo ovale del telaio. Se la situazione è diversa, il supporto della ruota destro e quello sinistro sono stati scambiati. Utilizzare tale supporto della ruota dall'altro lato del telaio base.

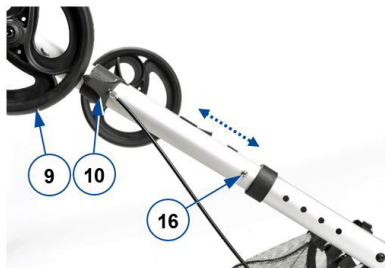

4. Tenere premuto il piccolo pulsante argentato **(16)**.
5. Inserire il supporto della ruota nel tubo ovale sporgente del telaio base.
6. Fare scorrere il supporto della ruota verso l'interno / l'esterno, fino a quando il pulsante **(16)** non fuoriesce dal foro di regolazione.
7. Premere nuovamente il pulsante e fare scorrere il supporto della ruota fino a raggiungere la lunghezza desiderata.
8. Ripetere tale procedura per il secondo supporto della ruota (del componente combinato). Verificare che la lunghezza del tubo destro sia uguale a quella del tubo sinistro.
9. Accertarsi che entrambi i tubi siano fissati saldamente.

Impugnatura con freno

ATTENZIONE

Rischio di caduta e/o danni

- Prima dell'uso, verificare che le impugnature siano bloccate.
- Prestare attenzione alla posizione dei cavi dei freni, che devono trovarsi all'esterno del telaio, senza interferire con le ruote posteriori.
- Non tirare troppo in alto le impugnature, per evitare di danneggiare il cavo del freno.



1. Ruotare il telaio base e disporlo con tutte e quattro le ruote appoggiate a terra.
2. Inserire il tubo con l'impugnatura nell'estremità aperta del tubo del telaio, all'altezza dell'elemento di raccordo.
3. Inserire la manopola **(12)** nei fori del tubo e serrarla manualmente a fondo.
4. Montare l'altra impugnatura allo stesso modo.



Nota: le fascette fermacavo si trovano già sul cavo del freno.


5. Fare scorrere verso l'alto le fasce fermacavo **(15)** guidando allo stesso tempo il cavo.
6. Tenere il cavo del freno allineato con il tubo posteriore del telaio e spingere la fascetta intorno al tubo stesso, come mostrato nella figura.

3.1.3. Montaggio della borsa portaoggetti

⚠ ATTENZIONE

Rischio di caduta o di ribaltamento

- Non sovraccaricare la borsa portaoggetti.

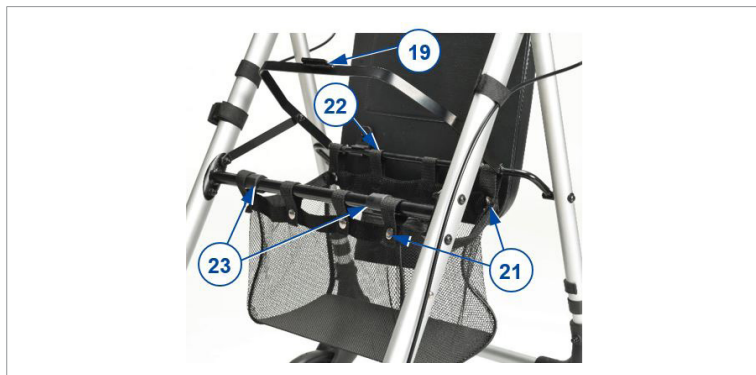

Il peso massimo che la borsa è in grado di trasportare è riportato nel §6..

1. Sollevare leggermente il telaio **(19)** del sedile, per creare un po' di spazio.
2. Montare la borsa portaoggetti con i sei fissaggi a scatto **(21)** e le due cinghie in velcro **(22)**. Accertarsi che i due manicotti di protezione **(23)** rimangano scoperti.
3. Spingere il sedile e il suo telaio verso il basso.

3.2. Smontaggio

ATTENZIONE

Rischio di danni

- Prestare attenzione alla posizione dei cavi dei freni. Non tirare troppo in alto le impugnature, per evitare di danneggiare il cavo del freno.

Per smontare il deambulatore, procedere nell'ordine inverso a quello di montaggio descritto nella sezione precedente:

1. Borsa portaoggetti: Rimuovere la borsa portaoggetti aprendo i fissaggi a scatto e le cinghie in velcro.
2. Rimuovere la cinghia in velcro per il bastone da passeggio.
3. Fascetta fermacavo **(8)** (2x): staccare dal tubo del telaio tirando con precauzione.
4. Impugnatura con leva del freno (2x): rimuovere la manopola **(12)** e sfilare l'impugnatura dal telaio base.
5. Ruotare il telaio base, disponendolo con il telaio anteriore su una superficie.
6. Supporto della ruota con ruota posteriore (2x): tenere premuto il pulsante argentato **(16)** e sfilare il supporto della ruota dal telaio base.
7. Ruotare il telaio base, disponendolo con il telaio posteriore sulla superficie di appoggio.
8. Rimuovere da ciascun lato del telaio **(8)** delle ruote anteriori il perno di fissaggio **(7)**, quindi sfilare i tubi dal telaio base.

3.3. Regolazioni dell'altezza

-  **Regolazione dell'altezza del deambulatore in base alle dimensioni del corpo:**
 - Regolare anzitutto l'altezza del sedile.
 - Regolare quindi l'altezza di entrambe le impugnature.

ATTENZIONE

Rischio di caduta o di ribaltamento

- Regolare sempre le quattro ruote sulla stessa altezza.

Accertarsi che

- le impugnature siano state regolate sulla stessa altezza.
- tutte e 4 le ruote siano state regolate sulla stessa altezza.

3.3.1. Altezza del sedile

Il sedile può essere modificato in altezza regolando le ruote anteriori e posteriori (4 posizioni).

Accertarsi che il sedile sia orizzontale e all'altezza di seduta corretta. In caso contrario, regolare le ruote montate (vedere i § 3.1.) e verificare che siano alla stessa altezza.

3.3.2. Altezza delle impugnature

Per regolare l'impugnatura/l'altezza totale (5 posizioni):

1. Allentare la manopola (12; vedere il §3.1.2.) e rimuoverla dal telaio.
2. Regolare l'impugnatura all'altezza desiderata. Stando in piedi, le impugnature devono trovarsi all'altezza dei polsi. Lasciare pendere le braccia.
3. Inserire la manopola (12) nei fori del tubo e serrarla manualmente a fondo.
4. Regolare l'altra impugnatura allo stesso modo. Verificare che le impugnature si trovino entrambe alla stessa altezza.

3.4. Regolazione dei freni

È possibile regolare la forza dei freni allentando/serrando la vite (14) situate sul lato posteriore della leva del freno.



4. Uso del deambulatore

4.1. Sistema frenante

ATTENZIONE

Rischio di caduta

- Per garantire la propria sicurezza, verificare il funzionamento dei freni. Le condizioni del sistema frenante sono influenzate dalla presenza di usura, olio e altri contaminanti sulle ruote posteriori e sul meccanismo di frenata.

Il deambulatore è dotato di freni azionati da due apposite leve **(15)**. È possibile utilizzare le leve dei freni in due modalità di frenata, vale a dire esercizio e parcheggio.


ATTENZIONE

Rischio di danni

- Non spingere il deambulatore con una forza eccessiva mentre si utilizzano i freni nella modalità di esercizio. Ciò può danneggiare gli pneumatici o i freni.

Per utilizzare i freni nella modalità di esercizio, tirare simultaneamente entrambe le leve dei freni **(15)** verso l'alto [A] con un movimento di compressione. Per interrompere la frenatura, rilasciare le leve dei freni.

Per utilizzare i freni di parcheggio, spingere entrambe le leve dei freni **(15)** verso il basso nella posizione bloccata [B]. Utilizzare sempre simultaneamente entrambi i freni di parcheggio. Per uscire dalla modalità di parcheggio, tirare simultaneamente entrambe le leve dei freni verso l'alto.

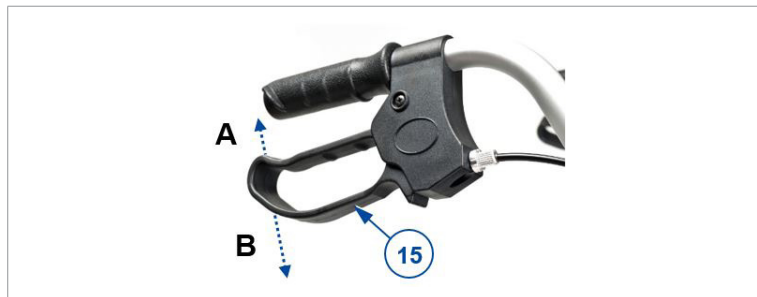

4.2. Chiusura / Apertura

⚠ ATTENZIONE

Rischio di intrappolamento

- Tenere dita, fibbie, gioielli e indumenti lontani dal meccanismo di piegatura.

⚠ ATTENZIONE

Rischio di caduta

- Verificare che il deambulatore sia completamente aperto e che il telaio sia bloccato.



4.2.1. Apertura del deambulatore

1. Spingere entrambe le leve dei freni verso il basso, fino alla posizione di parcheggio; vedere il §4.1..
2. Disporre il deambulatore con le quattro ruote sul terreno, afferrando allo stesso tempo i tubi del telaio.
3. Spingere il sedile e il suo telaio (20) verso il basso.
4. Se lo schienale è sollevato, abbassarlo.
5. Regolare l'altezza delle impugnature (vedere il §3.3.).

4.2.2. Chiusura del deambulatore

1. Posizionarsi in piedi dietro il deambulatore.
2. Spingere entrambe le leve dei freni verso il basso, fino alla posizione di parcheggio; vedere il §4.1..
3. Sollevare il sedile.


4. Svuotare la borsa portaoggetti.
5. Tirare verso l'alto il telaio **(20)** del sedile per chiudere leggermente il telaio.
6. Chiudere completamente il telaio spingendo i tubi anteriori e posteriori gli uni verso gli altri.
7. Se necessario, sollevare lo schienale.

4.3. Affrontare i cordoli

⚠ ATTENZIONE

Rischio di caduta

- Affrontare i cordoli perpendicolarmente, con entrambe le ruote anteriori allineate con il cordolo. Tenere il deambulatore vicino a sé.

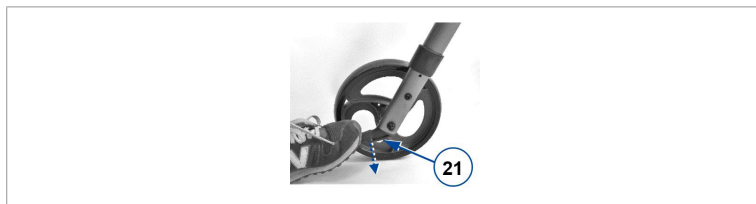

Per facilitare il superamento di piccoli ostacoli, come i cordoli, il deambulatore è dotato di una leva di inclinazione sulle due ruote posteriori.

1. Verificare di essere stabili in posizione eretta, afferrando allo stesso tempo entrambe le impugnature.
2. Premere con un piede la leva di inclinazione **(21)** per sollevare le ruote anteriori.
3. Mantenere il deambulatore in tale posizione servendosi delle impugnature, quindi e avanzare lentamente fino a quando le ruote anteriori si trovano sul cordolo.
4. A questo punto, sollevare le impugnature e avanzare fino a portare le ruote posteriori sul cordolo.
5. Quando il deambulatore raggiunge una posizione stabile, affrontare a propria volta il cordolo.

4.4. Sedersi, alzarsi in piedi e camminare

ATTENZIONE

Rischio di caduta

- Prima di sedersi sul deambulatore, accertarsi che entrambe le leve dei freni si trovino nella posizione di parcheggio; vedere il §4.1.. Mantenere le leve dei freni in tale posizione fino a quando non si riprende a camminare. Tenere i piedi fra le ruote posteriori.
 - Non spingete il deambulatore da seduti.
1. Spingere entrambe le leve dei freni verso il basso, fino alla posizione di parcheggio.
 2. Verificare che lo schienale e il sedile siano abbassati e bloccati nella posizione corretta.
 3. Appoggiandosi alle impugnature, voltarsi e accomodarsi sul sedile.
 4. Per rialzarsi, appoggiarsi alle impugnature e voltarsi.
 5. Tirare entrambe le leve dei freni verso l'alto e utilizzare i freni nella modalità di esercizio.
 6. Rilasciare le leve dei freni e avanzare di un passo con il deambulatore vicino al corpo.

5. Manutenzione

-  Una cura regolare garantisce che il deambulatore rimanga in perfette condizioni di funzionamento. Per il manuale di manutenzione, fare riferimento al sito Web di Vermeiren all'indirizzo www.vermeiren.com.

5.1. Pulizia

Per pulire il deambulatore, utilizzare un panno morbido inumidito con acqua tiepida e un detergente delicato per la casa. Non immergere il deambulatore. Non utilizzare detergenti abrasivi per la pulizia.

5.2. Disinfezione

ATTENZIONE

Rischio di danni

- La disinfezione deve essere eseguita esclusivamente da personale con un'opportuna formazione. Consultare il proprio rivenditore specializzato.

Per pulire il deambulatore, utilizzare un panno morbido inumidito con acqua tiepida e un disinfettante delicato per la casa.

5.3. Ispezione / assistenza / riparazioni

La durata media prevista del vostro deambulatore è di 5 anni. La durata del deambulatore è influenzata dalle modalità di uso, stoccaggio, manutenzione, assistenza e pulizia.

Prima di riprendere a utilizzare il deambulatore, occorre ispezionarlo in relazione ai seguenti punti:

- Completezza.
- Meccanismo di chiusura: funzionamento corretto.
- Bulloni e dadi: fissati saldamente.
- Freni: funzionamento corretto.
- Ruote (stabilità, direzione e viti di fissaggio).
- In caso di contatto regolare con fili, capelli o altri residui, è possibile che le ruote si blocchino. Verificare con regolarità che le ruote ruotino liberamente e siano in buone condizioni.
- Telaio (deformazione, stabilità e collegamenti).
- Impugnature (bloccaggio sicuro del sistema di regolazione dell'altezza e supporto adeguato delle impugnature).
- Sedile, schienale e borsa portaoggetti (usura o danni).

Il deambulatore è costruito con componenti in alluminio e plastica. Consigliamo di far ispezionare il rollator almeno una volta all'anno, ma la frequenza di assistenza dipende dalla frequenza e dall'intensità dell'uso. Consultare il proprio rivenditore autorizzato per accordarsi sulla frequenza di assistenza.

Riparazioni e sostituzioni devono essere eseguite esclusivamente da personale con un'opportuna formazione e utilizzando unicamente ricambi originali Vermeiren.

Non esitare a utilizzare i servizi offerti dal proprio concessionario autorizzato. Che sarà lieto di fornire un supporto per l'assistenza e le riparazioni.

5.4. Utilizzi successivi

Prima di ogni riutilizzo, disinfettare il deambulatore, verificarlo e fare la manutenzione come indicato in §5.2. e §5.3..

5.5. Smaltimento

A fine vita, occorre smaltire il deambulatore conformemente alla legislazione ambientale locale. Il modo migliore per farlo consiste nello smontare il deambulatore per agevolare il trasporto dei componenti riciclabili.

6. Specifiche tecniche

I dettagli tecnici riportati di seguito sono validi soltanto per il deambulatore oggetto del manuale, con le impostazioni standard e in condizioni ambiente ottimali. Durante l'uso, tenere conto di questi dati di dettaglio.

Marchio	Vermeiren
Gruppo prodotto	Deambulatore
Tipo	Eco-Plus
Descrizione	Dimensioni
Peso massimo dell'utente	136 kg
Peso massimo del carico della borsa portaoggetti	5 kg
Lunghezza complessiva	680 - 795 mm
Lunghezza in configurazione ripiegata	310 mm
Larghezza complessiva	610 mm
Larghezza ripiegata	610 mm
Altezza complessiva	845-1020 mm
Altezza ripiegata	960 mm
Altezza delle impugnature	845-1020 mm
Altezza persona raccomandata	1650 – 2050 mm
Distanza fra le impugnature	500 mm
Altezza del sedile	555-625 mm
Larghezza del sedile	360 mm
Profondità del sedile	360 mm
Massa totale	7,7 kg
- senza cestino	7,5 kg
Diametro delle ruote	200 x 35 mm
Freni	Freni di esercizio e di parcheggio
Larghezza di svolta	940 mm
Temperatura per utilizzo e conservazione	+5°C - +41°C
Umidità per utilizzo e conservazione	30% - 70%
La casa produttrice si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche. Tolleranza misurazioni +/- 15 mm / 1,5 kg / 1,5° .	

Índice

Introducción	102
1. Su producto	103
2. Antes de su uso	104
2.1. Uso previsto y indicaciones	104
2.2. Instrucciones de seguridad y riesgos aplicables	105
2.3. Símbolos presentes en el andador	106
2.4. Entrega	107
2.5. Transporte y almacenamiento	107
3. Montaje/desmontaje y ajustes	108
3.1. Montaje	108
3.2. Desmontaje	112
3.3. Ajustes de altura	112
3.4. Ajuste de los frenos	113
4. Uso del andador	114
4.1. Sistema de frenado	114
4.2. Plegado / Desplegado	115
4.3. Salvando bordillos	116
4.4. Sentarse, levantarse y caminar	117
5. Mantenimiento	117
5.1. Limpieza	117
5.2. Desinfección	118
5.3. Inspección / Mantenimiento / Reparación	118
5.4. Reutilizar	119
5.5. Desechar el producto	119
6. Especificaciones técnicas	120

Introducción

¡Felicidades! Es usted el propietario de un andador Vermeiren!

Le agradecemos su confianza en los productos Vermeiren. Le ofrecemos este manual para ayudarle en la utilización de su andador y sus opciones de manejo. Léalo detenidamente. Le ayudará a familiarizarse con el manejo, las capacidades y limitaciones de su andador.

Si todavía tiene alguna duda después de leer este manual, contacte con su distribuidor especializado, estará encantado de ayudarle.

Nota importante

Para garantizar su seguridad y prolongar la vida útil de su producto, cuídalo bien y asegúrese de realizar revisiones y mantenimientos de manera regular.

Este manual refleja los desarrollos más recientes del producto. Vermeiren se reserva el derecho a implementar cambios en este tipo de producto sin que ello suponga obligación alguna de adaptar o cambiar productos similares previamente entregados.

Hay imágenes del producto para ayudar a explicar las instrucciones. Los detalles del producto mostrado pueden variar con su producto.

Información disponible

En nuestro sitio web <http://www.vermeiren.com/> siempre encontrará la versión más reciente de la siguiente información. Consulte este sitio web de manera regular para estar al tanto de posibles actualizaciones.

Las personas con discapacidad visual pueden descargarse la versión electrónica del manual y utilizar un software de síntesis de voz para poder oír su contenido.



Manual de instrucciones
Para el usuario y el distribuidor especializado



Manual de mantenimiento para andadores
Para el distribuidor especializado

ES



Declaración CE de conformidad

1. Su producto



1. Empuñaduras
2. Palanca de freno
3. Respaldo
4. Bolsa de almacenamiento
5. Asiento
6. Ruedas delanteras
7. Ruedas traseras
8. Cable de los frenos
9. Palanca de inclinación
10. Reflectores
11. Sujetabastones
12. Placa de identificación

2. Antes de su uso

2.1. Uso previsto y indicaciones

- Este producto es un dispositivo médico.
- Indicaciones y contraindicaciones: El andador está pensado como apoyo para la función de las piernas al andar. No utilice el andador si tiene otras discapacidades físicas por las que su uso podría suponer un riesgo, como brazos débiles, trastornos del equilibrio, visión deficiente, pérdida de extremidades, etc.
- El andador está diseñado exclusivamente como un instrumento de ayuda para andar para una persona con un peso máximo de 136 kg.
- Al apoyar o mover las partes superiores del cuerpo o el tronco encima del andador, este compensa la capacidad o la fuerza reducidas de las partes inferiores del cuerpo. Además, el andador asegura un apoyo más óptimo y más seguridad.
- El andador puede usarse tanto en el interior como en el exterior.
- El andador no es apto para transportar cosas o a más de una persona que no sea el usuario. Tampoco está diseñado para ser utilizado como ayuda de transporte mientras se está sentado.
- Sólo debe usarse sobre una superficie plana en la que las cuatro ruedas estén en contacto con el suelo. No utilizar el andador sobre terreno rocoso, irregular o arenoso, o en lugares con pendientes empinadas, ya que el andador puede desestabilizarse. Circule siempre con su andador por suelos planos y estables y por bordillos biselados.
- La garantía de este producto se basa en el uso y mantenimiento normales descritos en este manual. La garantía se invalida si el producto sufre cualquier daño causado por un uso indebido o falta de mantenimiento.
- Consulte los detalles técnicos y las limitaciones del andador en §6..

2.2. Instrucciones de seguridad y riesgos aplicables

PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones

- Lea y siga las instrucciones contenidas en este manual. De no seguirlas, puede acabar lesionándose a sí mismo, o acabar rompiendo el producto.

Tener en cuenta las siguientes advertencias durante su utilización:

- Asegurarse de que no haya piedras u otros elementos que estén bloqueando las ruedas del andador.
- Asegurarse de que ambos frenos de estacionamiento estén echados antes de usar el andador para ponerse de pie. Una vez que el usuario se sienta cómodo y estable, pueden quitarse los frenos de estacionamiento.
- Mantener siempre ambas manos en las empuñaduras al andar con el andador.
- Téngase en cuenta que ciertas partes del andador pueden llegar a calentarse o enfriarse demasiado a causa de la temperatura ambiente, la luz del sol, equipos de calefacción, etc. Debe tener siempre cuidado al tocar el scooter.
- Comprobar que el ajuste de altura esté bien sujeto antes de cada uso, véase **§3.3.**
- No sujete las empuñaduras con las manos mojadas, ya que podría perder el equilibrio.
- No circular con el andador por la carretera, mantenerse siempre en la acera.
- Seguir las instrucciones de lavado y control. El fabricante no se hace responsable de daños ocasionados por un mal mantenimiento o una mala inspección.

Cualquier incidente grave [MDR (UE) 2017/745 §2 (65)] que se produzca en relación con el producto deberá comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que resida el usuario y/o paciente.

Tener en cuenta que su andador puede llegar a interferir con algunos sistemas antirrobo, dependiendo de la configuración que se use. Esto puede hacer que salte la alarma de las tiendas.

2.3. Símbolos presentes en el andador

i La placa de identificación está debajo de la empuñadura izquierda en la parte interior del bastidor base

	Peso máximo del usuario en kg
	Tipo de modelo
	Referencia
	Número de serie
	Dispositivo médico
	Fabricante
	Fecha de fabricación
	Declaración de conformidad
	Atención: información importante
	Se recomienda leer el manual

2.4. Entrega

Desembalar el producto y verificar que la entrega está completa. Las siguientes piezas vienen incluidas en la entrega:

- Bastidor base con asiento y respaldo;
- bastidor de las ruedas delanteras con las ruedas delanteras;
- Ruedas traseras con soporte y conexión del cable de los frenos;
- Empuñaduras con frenos
- Dos perillas reguladoras de altura;
- Dos clavijas de fijación;
- Bolsa de almacenamiento;
- Una correa de Velcro desmontable;
- Manual

Compruebe que el producto no haya sufrido daños durante el transporte. Si detectase algún defecto en el producto tras su entrega, contacte con el transportista.

2.5. Transporte y almacenamiento

El transporte y almacenamiento del andador debe llevarse a cabo según las especificaciones técnicas en §6.. Asegurarse de que el andador esté almacenado en un lugar seco.

Proteger el andador de la oxidación y materiales extraños (p. ej. agua salada, aire marino, arena, polvo) mediante una protección o un embalaje adecuado.

Asegurarse de que no haya otros objetos encima o apoyados en el andador durante el almacenamiento para prevenir daños.

3. Montaje/desmontaje y ajustes

PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones

- Montar el andador completamente antes de ajustar su altura.

3.1. Montaje

3.1.1. Montaje del bastidor de las ruedas delanteras

1. Desplegar el bastidor base **(18)**.
2. Colocar el bastidor base en el suelo o en una mesa, con los tubos ovalados colocados horizontalmente en la superficie.
3. Tomar el bastidor de las ruedas delanteras **(8)** e insertar ambos extremos de los tubos en los tubos redondos y sobresalientes del bastidor base. Asegurarse que la base de las ruedas (w) está en la parte interior del bastidor base.



4. Ajustar la longitud del tubo del bastidor de las ruedas delanteras **(8)** deslizando los tubos hacia dentro y hacia fuera.
5. Comprobar que en ambos lados los agujeros de los tubos interiores y exteriores coinciden.
6. Insertar la clavija de fijación **(7)** en el agujero del regulador de altura. Asegurarse que la clavija esté insertada completamente; se oirá un clic cuando la clavija de fijación se engancha al tubo.



7. Repetir este paso en el otro tubo del bastidor.
8. Comprobar la longitud del tubo en ambos lados. Si la longitud difiere, retirar la clavija de fijación de un lado y ajustar la longitud siguiendo los pasos 4, 5 y 6.

3.1.2. Montaje de las ruedas traseras y las empuñaduras


PRECAUCIÓN

Riesgo de daños

- Evitar doblar los cables de los frenos.

Base de ruedas con ruedas traseras

1. Girar el bastidor base hasta que los tubos (redondos) del bastidor delantero estén en mirando hacia abajo, con las ruedas delanteras tocando la superficie.
2. Tomar una de las piezas combinadas con rueda trasera, empuñadura y cable del freno.
3. Antes de montar, comprobar que la rueda trasera (9) y el freno (10) estén en la parte exterior del tubo ovalado del bastidor. De no ser así, las bases de la rueda derecha e izquierda estarán al revés. Utilizar esta base de la rueda en el otro lado del bastidor base.

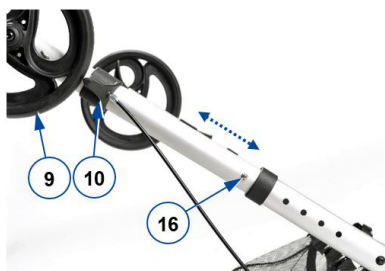

4. Mantener presionado el pequeño botón plateado (16).
5. Insertar la base de la rueda en el tubo ovalado y sobresaliente del bastidor base.
6. Deslizar la base de la rueda hacia dentro o fuera hasta que el botón plateado (16) sobresalga del agujero de ajuste.
7. Presionar el botón plateado otra vez y deslizar la base de la rueda hasta conseguir la longitud deseada.
8. Repetir estos pasos para la segunda base de la rueda (de la pieza combinada). Asegurarse de que las longitudes de los tubos derecho e izquierdo sean iguales.
9. Asegurarse de que ambos tubos estén bien fijados.

Empuñadura con freno

⚠ PRECAUCIÓN

Riesgo de caída y/o daños

- Comprobar que las empuñaduras estén bloqueadas antes de utilizarlas.
- Prestar atención a la posición de los cables de los frenos: deben estar en l parte exterior del bastidor sin interferir con las ruedas traseras.
- No levantar las empuñaduras demasiado alto para que no se dañe el cable de los frenos.



1. Girar el bastidor base y colocar las cuatro ruedas en el suelo.
2. Insertar el tubo con empuñadura en el extremo abierto del tubo del bastidor, en la pieza de conexión.
3. Colocar la perilla (12) en los agujeros del tubo y apretar bien fuerte con la mano.
4. Montar la otra empuñadura de la misma manera.



Nota: el sujetacables ya está colocado en el cable de los frenos.


5. Deslizar los sujetacables **(15)** hacia arriba mientras dirige el cable.
6. Mantener el cable de los frenos alineado con el tubo trasero del bastidor y presionar el sujetacables alrededor del tubo del bastidor, véase la imagen.

3.1.3. Montaje de la bolsa de almacenamiento

⚠ PRECAUCIÓN

Riesgo de caída o volcado

- No llenar la bolsa de almacenamiento demasiado.

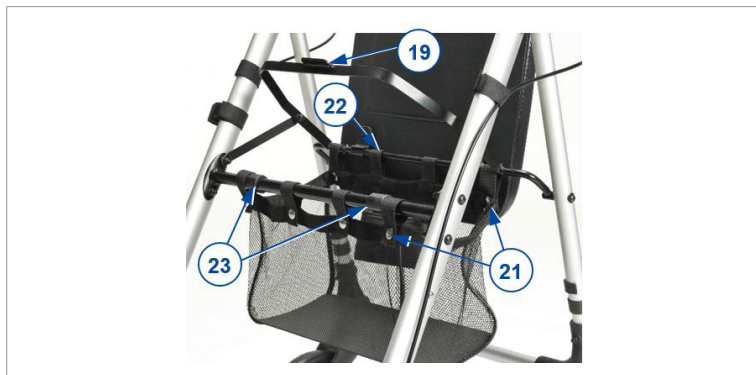

La capacidad de carga máxima de la bolsa de almacenamiento está descrita en §6..

1. Tirar un poco del bastidor del asiento **(19)** para hacer espacio.
2. Montar la bolsa de almacenamiento con los seis clips **(21)** y las dos cintas Velcro **(22)**. Asegurarse de que las dos fundas protectoras **(23)** permanezcan al descubierto.
3. Empujar el asiento y el bastidor del asiento hacia abajo.

3.2. Desmontaje

PRECAUCIÓN

Riesgo de daños

- Prestar atención a la posición de los cables de los frenos. No levantar las empuñaduras demasiado alto para que no se dañe el cable de los frenos.

El desmontaje del andador se realizar en orden inverso del montaje descrito en la sección previa:

1. Bolsa de almacenamiento: Abrir los clips y retirar las cintas Velcro para retirar la bolsa.
2. Cinta Velcro para el bastón: Retirar.
3. Sujetacables **(8)** (2x): Sacar con cuidado del tubo del bastidor.
4. Empuñadura con palanca de freno (2x): Retirar la perilla **(12)** y tirar de la empuñadura para retirarla del bastidor base.
5. Bastidor base: Girar y colocarlo con el bastidor delantero encima de una superficie.
6. Base de ruedas con ruedas traseras (2x): Mantener pulsado el botón plateado **(16)** y tirar de la base de la rueda para retirarla del bastidor base.
7. Bastidor base: Girar y colocarlo con el bastidor trasero encima de una superficie.
8. Bastidor de las ruedas delanteras **(8)**: Retirar las clavijas de fijación **(7)** de ambos lados y tirar de los tubos para retirarlos del bastidor base.

3.3. Ajustes de altura

-  Para ajustar la altura del andador según el tamaño del cuerpo:
 - Primero ajustar la altura del asiento.
 - Después ajustar la altura de ambas empuñaduras.

PRECAUCIÓN

Riesgo de caída o volcado

- Siempre ajustar las cuatro ruedas a la misma altura.

Asegurarse de que

- ambas empuñaduras estén ajustadas a la misma altura.
- las 4 ruedas estén ajustadas a la misma altura.

3.3.1. Altura del asiento

El asiento puede modificarse en altura ajustando las ruedas delanteras y las ruedas traseras (4 posiciones).

Comprobar si el asiento está horizontal y a la altura correcta. Si no es así, ajustar las ruedas montadas (véase § 3.1.) y asegurarse de que están a la misma altura.

3.3.2. Altura de las empuñaduras

Para ajustar la empuñadura/altura total (5 posiciones):

1. Aflojar la perilla (12) (véase §3.1.2.) y sacarla del bastidor.
2. Colocar la empuñadura a la altura deseada. Si se pone de pie y derecho, la empuñadura debe estar a la altura de su muñeca. Dejar sueltos los brazos.
3. Colocar la perilla (12) en los agujeros del tubo y apretar bien fuerte con la mano.
4. Ajustar la otra empuñadura de la misma manera. Asegurarse de que ambas empuñaduras estén a la misma altura.

3.4. Ajuste de los frenos

Se puede ajustar la potencia de los frenos aflojando/apretando el tornillo (14) en el lado trasero de la palanca de freno.



4. Uso del andador

4.1. Sistema de frenado

PRECAUCIÓN

Riesgo de caída

- Para garantizar su seguridad, controle el funcionamiento de los frenos. El estado del sistema de frenado se puede ver afectado por desgaste y la presencia de aceite o suciedad en las ruedas traseras y en el mecanismo de frenado.

El andador lleva frenos que se pueden manejar con las dos palancas de freno (15). Las palancas de freno pueden usarse de dos maneras: como freno normal o como freno de estacionamiento.


PRECAUCIÓN

Riesgo de daños

- No empujar el andador demasiado fuerte mientras se usan los frenos normales. Esto puede ocasionar daños a las ruedas o los frenos.

Para usar el freno normal, tirar hacia arriba de ambas palancas de freno (15) a la vez [A] apretándolas. Para dejar de frenar, soltar las palancas de freno.

Para usar el freno de estacionamiento, tirar hacia abajo de ambas palancas de freno (15) hasta que queden bloqueadas [B]. Usar siempre ambos frenos de estacionamiento a la vez. Para salir de la posición de estacionamiento, tirar hacia arriba de ambas palancas de freno a la vez.

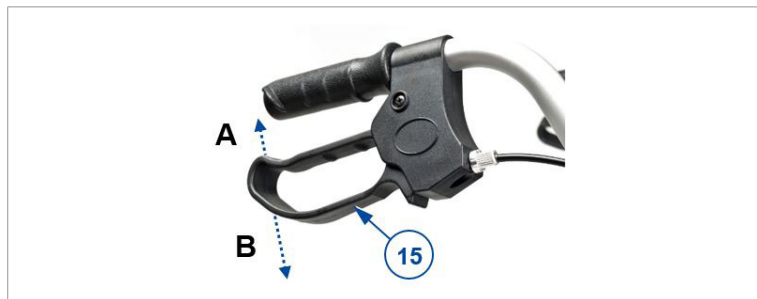

4.2. Plegado / Desplegado

PRECAUCIÓN

Riesgo de aprisionamiento

- Mantener dedos, correas, joyas y vestimentas fuera del mecanismo de plegado.

PRECAUCIÓN

Riesgo de caída

-

Comprobar que el andador está completamente desplegado y que el bastidor esté bloqueado.



4.2.1. Despliegue del andador

1. Tirar ambas palancas de freno hacia abajo en la posición de estacionamiento, véase §4.1..
2. Colocar el andador con las cuatro ruedas en el suelo mientras se sujetan los tubos del bastidor.
3. Empujar el asiento y el bastidor del asiento (20) hacia abajo en posición horizontal.
4. Plegar el respaldo hacia abajo si está desplegado.
5. Ajustar el andador a la altura deseada (véase §3.3.).

4.2.2. Plegado del andador


1. Colocarse detrás del andador.
2. Tirar ambas palancas de freno hacia abajo en la posición de estacionamiento, véase §4.1..
3. Girar el asiento hacia arriba.
4. Vaciar la bolsa de almacenamiento.
5. Tirar del bastidor del asiento (20) hacia arriba, para cerrar el bastidor un poco.
6. Cerrar el bastidor completamente empujando juntos los tubos delanteros y traseros.
7. Si fuera necesario, girar el respaldo hacia arriba.

4.3. Salvando bordillos

PRECAUCIÓN

Riesgo de caída

- Salvar los bordillos de manera recta, con ambas ruedas alineadas con el bordillo. Mantener el andador cerca.

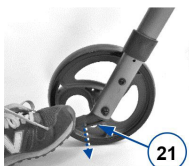

Para facilitar la toma de pequeños obstáculos, como los bordillos, el andador está equipado con una palanca de inclinación en las dos ruedas traseras.

1. Asegurarse de que se está posicionado de manera estable sujetando ambas empuñaduras.
2. Utilizar un pie para presionar la palanca de inclinación (21) para levantar las ruedas delanteras.
3. Mantener el andador en esa posición sujetando las empuñaduras y moverse lentamente hacia adelante hasta que las ruedas estén encima del bordillo.
4. Levantar las empuñaduras y moverse hacia delante para colocar las ruedas traseras encima del bordillo.
5. Cuando el andador esté en una posición estable, salvar el bordillo.

4.4. Sentarse, levantarse y caminar

PRECAUCIÓN

Riesgo de caída

- Asegurarse de que ambas palancas de freno están en la posición de estacionamiento antes de sentarse, véase §4.1.. Mantener las palancas de freno en esta posición hasta que vaya a volver a caminar. Mantener ambos pies entre las ruedas traseras.
 - No propulse el andador mientras.
1. Tirar ambas palancas de freno hacia abajo en la posición de estacionamiento.
 2. Comprobar que el respaldo y el asiento estén plegados y fijados en su sitio.
 3. Apoyándose en las empuñaduras, darse la vuelta y sentarse en el asiento.
 4. Para volver a levantarse, apoyarse en las empuñaduras y darse la vuelta.
 5. Tirar de ambas palancas de freno hacia arriba y utilizar el freno normal.
 6. Soltar las palancas de frenos y caminar hacia delante con el andador cerca del cuerpo.

5. Mantenimiento

-  Un mantenimiento regular asegura que el andador permanezca en perfecto estado. Para consultar el manual de mantenimiento, visitar el sitio web de Vermeiren: www.vermeiren.com.

5.1. Limpieza

Utilizar un paño limpio y húmedo y agua templada con jabón doméstico suave para limpiar el andador. Evitar que las piezas se mojen demasiado. No utilice productos de limpieza abrasivos.

5.2. Desinfección

PRECAUCIÓN

Riesgo de daños

- La desinfección sólo puede llevarla a cabo personal debidamente cualificado. Consultar con su distribuidor especializado al respecto.

Utilizar un paño limpio y húmedo y agua templada con desinfectante doméstico suave para limpiar el andador.

5.3. Inspección / Mantenimiento / Reparación

La vida útil esperada del andador es de 5 años. La vida útil del andador se ve afectada por su uso, almacenamiento, mantenimiento y limpieza.

Antes de utilizar el andador, deben comprobarse los siguientes puntos:

- Integridad.
- Mecanismo de plegado: funciona bien.
- Tornillos y tuercas: Atornillados firmemente.
- Frenos: funcionan bien.
- Ruedas (estabilidad, rotación, tornillos de sujeción).
- Si las ruedas entran regularmente en contacto con hilos, pelos y otras fibras, podrían llegar a atascarse. Por tanto, comprobar regularmente que las ruedas pueden girar libremente y que están en buen estado.
- Bastidor (deformaciones, estabilidad, conexiones).
- Empuñadura (un bloqueo seguro del ajuste máximo de altura, buen soporte de las empuñaduras).
- Asiento, cinta de respaldo y bolsa (desgaste y daños).

Su andador está construido con componentes de aluminio y plástico. Recomendamos que inspeccionen su andador al menos una vez al año, pero la frecuencia de los mantenimientos depende de la frecuencia e intensidad de uso. Consulte con su distribuidor especializado para llegar a un acuerdo sobre la frecuencia de mantenimiento.

Cualquier reparación o cambios sólo pueden llevarse a cabo por personal debidamente cualificado y sólo pueden utilizarse piezas de recambio Vermeiren originales.

No dude en hacer uso de los servicios ofrecidos por su distribuidor especializado, estará encantado de ayudarle con el mantenimiento y las reparaciones.

5.4. Reutilizar

Antes de cada reutilización, desinfecte, inspeccione y repare el andador de acuerdo a las instrucciones en **§5.2.** y **§5.3.**.

5.5. Desechar el producto

Al final de la vida útil, deberá desechar el andador siguiendo las leyes medioambientales de su localidad. Para transportar materiales reciclables del andador de manera más cómoda, se recomienda que se desmonte primero.

6. Especificaciones técnicas

Los datos técnicos expuestos a continuación son sólo válidos para este andador, con configuración estándar y en condiciones ambientales óptimas. Tener en cuenta estos datos durante la utilización de la silla para ducha.

Marca	Vermeiren
Grupo de productos	Andador
Tipo	Eco-Plus
Descripción	Dimensiones
Peso máximo del usuario	136 kg
Peso de llenado máximo de la bolsa	5 kg
Longitud total	680 - 795 mm
Longitud plegado	310 mm
Anchura total	610 mm
Anchura plegada	610 mm
Altura total	845-1020 mm
Altura plegada	960 mm
Altura de las empuñaduras	845-1020 mm
Altura de usuario recomendada	1650 – 2050 mm
Distancia entre las empuñaduras	500 mm
Altura del asiento	555-625 mm
Anchura del asiento	360 mm
Profundidad del asiento	360 mm
Peso total	7,7 kg
- sin cesta	7,5 kg
Diámetro de las ruedas	200 x 35 mm
Frenos	Frenos normales y frenos de estacionamiento
Radio de giro	940 mm
Temperatura de almacenamiento y de uso	+5°C - +41°C
Humedad de almacenamiento y de uso	30% - 70%
Nos reservamos el derecho a aplicar modificaciones técnicas. Tolerancia de la medida +/- 15 mm/1,5 kg/1,5°	

Spis treści

Wstęp	122
1. Twój produkt	123
2. Przed użyciem	124
2.1. Przewidziane zastosowanie i wskazania	124
2.2. Instrukcja bezpieczeństwa i związane z nimi zagrożenia	125
2.3. Symbole na balkoniku	126
2.4. Przy dostawie	127
2.5. Wysyłka i przechowywanie	127
3. Montaż/demontaż i regulacje	128
3.1. Montaż	128
3.2. Demontaż	131
3.3. Regulacja wysokości	132
3.4. Regulacja hamulców	133
4. Korzystanie z balkonika	133
4.1. Hamulec	133
4.2. Składanie / Rozkładanie	134
4.3. Wjeżdżanie na krawężniki	135
4.4. Siadanie, wstawanie i chodzenie	136
5. Konserwacja	136
5.1. Czyszczenie	136
5.2. Dezynfekcja	137
5.3. Kontrole / serwisowanie / naprawy	137
5.4. Ponowne użycie	138
5.5. Usuwanie odpadów	138
6. Parametry techniczne	139

Wstęp

Gratulacje! Jesteś teraz właścicielem balkonika Vermeiren!

Dziękujemy za zaufanie firmie Vermeiren i jej produktom. Niniejsza instrukcja pomoże właścicielowi w eksploatacji balkonika i korzystaniu z jego opcji. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi. Pozwoli ona na zapoznanie się z działaniem, możliwościami i ograniczeniami balkonika.

W razie pytań, na które odpowiedzi nie ma w instrukcji, prosimy o kontakt z Państwem wyspecjalizowanym sprzedawcą. Sprzedawca chętnie służy pomocą.

Ważna uwaga

Aby zapewnić bezpieczeństwo i wydłużyć okres użytkowania produktu, prosimy o dbanie o niego oraz regularne dokonywanie przeglądów i serwisowanie.

Instrukcja obejmuje najnowsze rozwiązania zastosowane w produkcie. Firma Vermeiren ma prawo do wprowadzania zmian w produktach tego typu bez obowiązku adaptowania lub wymiany podobnych, poprzednio dostarczonych produktów.

Ilustracje produktu zamieszczone w instrukcji są wyłącznie poglądowe. Szczegóły prezentowanego produktu mogą się różnić od rzeczywistego produktu posiadanego przez użytkownika.

Dostępne informacje

W naszej witrynie internetowej <http://www.vermeiren.com/> zawsze znajduje się najnowsza wersja odpowiednich informacji. Prosimy regularnie odwiedzać witrynę, ponieważ możemy w niej zamieszczać zaktualizowane informacje.

Osoby z zaburzeniami wzroku mogą pobrać elektroniczną wersję niniejszej instrukcji i odsłuchać ją przy użyciu oprogramowania zamieniającego tekst na mowę.



Instrukcja obsługi
Dla użytkownika i wyspecjalizowanego sprzedawcy



Podręcznik serwisowy dla balkoników
Dla wyspecjalizowanego sprzedawcy

PL



Deklaracja zgodności WE

1. Twój produkt



1. Uchwyty
2. Dźwignia hamulca
3. Oparcie
4. Torba
5. Siedzisko
6. Przednie koła
7. Tylne koła
8. Linka hamulcowa
9. Dźwignia przechylania
10. Reflektory
11. Uchwyt na laskę
12. Tabliczka znamionowa

2. Przed użyciem

2.1. Przewidziane zastosowanie i wskazania

- Ten produkt jest wyrobem medycznym.
- Wskazania i przeciwwskazania: Balkonik jest przeznaczony do wspomagania nóg podczas chodzenia. Nie używaj balkonika, jeśli masz inne ograniczenia fizyczne, które mogą sprawiać, że używanie balkonika nie będzie bezpieczne, np. słabe ramię, zaburzenia równowagi, upośledzenie wzroku, utrata części ciała ...
- Balkonik został zaprojektowany i jest produkowany wyłącznie w celu używania jako pomoc przy chodzeniu dla jednej osoby o maksymalnej wadze 136 kg.
- Balkonik kompensuje brak odpowiedniego wsparcia przez nogi, dzięki możliwości oparcia się na balkoniku lub poruszania wraz z nim, korzystając z siły rąk i klatki piersiowej. Balkonik zapewnia lepszą stabilność, wsparcie i bezpieczeństwo podczas chodzenia.
- Można go używać w pomieszczeniach i na zewnątrz.
- Nie jest przeznaczony do transportu towarów ani większej liczby osób niż użytkownik. Nie jest on również przeznaczony do użytku jako pomoc w transporcie w pozycji siedzącej.
- Należy korzystać z niego tylko na powierzchniach, na których wszystkie cztery koła dotykają podłoża. Nie należy używać balkonika w terenie skalistym, wyboistym lub piaszczystym, ani w miejscach o stromym nachyleniu. Mogłoby to spowodować brak stabilności balkonika. Spacer z balkonikiem należy odbywać na płaskich, stabilnych powierzchniach z fazowanymi krawężnikami.
- Gwarancja na produkt jest udzielona przy założeniu normalnego użytkowania i konserwacji, opisanych w niniejszej instrukcji. Uszkodzenie produktu spowodowane nieprawidłową eksploatacją lub brakiem konserwacji spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Należy zapoznać się z wszystkimi danymi technicznymi i ograniczeniami balkonika, które są podane w §6..

2.2. Instrukcja bezpieczeństwa i związane z nimi zagrożenia

UWAGA

Ryzyko obrażeń

- Należy przeczytać zalecenia podane w niniejszej instrukcji i postępować zgodnie z nimi. Niestosowanie się do tych zaleceń może spowodować uraz lub uszkodzenie produktu.

Podczas użytkowania należy pamiętać o ostrzeżeniach ogólnych:

- Sprawdź, czy kamienie lub inne przedmioty nie blokują kół balkonika.
- Przed użyciem balkonika jako pomocy przy wstawianiu sprawdź, czy obie dźwignie hamulców są w położeniu postojowym. Kiedy staniesz wygodnie i stabilnie, możesz odblokować hamulce postojowe.
- Podczas chodzenia trzymaj obiema dłońmi za rączki.
- Pamiętaj, że niektóre części balkonika mogą stać się bardzo gorące lub zimne ze względu na temperaturę otoczenia, promieniowanie słoneczne, urządzenia grzewcze itp. Dotykając ich, należy zachować ostrożność.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy regulatory wysokości są pewnie unieruchomione, patrz **§3.3.**
- Nie trzymaj rączek mokrymi rękami. To mogłoby spowodować utratę pewności chwytu i równowagi.
- Nie zjeżdżaj balkonikiem na jezdnię. Zawsze pozostawaj na chodniku.
- Przestrzegaj instrukcji konserwacji i serwisu. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane przez nieprawidłowe serwisowanie/konserwację.

Każdy poważny incydent [MDR (UE) 2017/745 **§2 (65)**], który miał miejsce w związku z urządzeniem, powinien zostać zgłoszony wytwórcy oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent ma siedzibę.

Korzystając z chodzika musisz być świadomym, że w zależności od użytych ustawień może on kolidować z niektórymi systemami antykradzieżowymi. Może to spowodować uruchomienie alarmu w sklepie.

2.3. Symbole na balkoniku

- i** Tabliczka identyfikacyjna znajduje się pod lewą rączką, po wewnętrznej stronie ramy głównej

	Maksymalna masa użytkownika w kg
	Oznaczenie typu
	Numer artykułu
	Numer seryjny
	Wyrób medyczne
	Producent
	Data produkcji
	Deklaracja zgodności
	Uwaga: ważna informacja
	Zaleca się przeczytanie instrukcji

2.4. Przy dostawie

Dostarczony produkt należy rozpakować i sprawdzić, czy zawiera wszystkie elementy. Powinny zostać dostarczone następujące elementy:

- Rama główna z siedziskiem i oparciem.
- Rama kół przednich z kołami przednimi.
- Koła tylne ze wspornikami i podłączeniem linki hamulca;
- Rączki z hamulcami
- Dwa pokręta do regulacji wysokości.
- Dwa sworznie mocujące.
- Torba.
- Jeden pasek samoprzyczepny;
- Instrukcja

Proszę sprawdzić wyrób pod kątem zniszczeń w transporcie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń po dostawie, należy się skontaktować z przewoźnikiem.

2.5. Wysyłka i przechowywanie

Transport i przechowywanie balkonika powinny się odbywać zgodnie z parametrami technicznymi w §6.. Upewnij się, że balkonik jest przechowywany w stanie suchym.

Należy zapewnić dostateczną osłonę lub opakowanie, aby chronić balkonik przed korozją i ciałami obcymi (np. morską wodą, morskim powietrzem, piaskiem, pyłem).

Należy zadbać o to, aby nad balkonikiem lub obok niego nie znajdowały się żadne przedmioty, które mogłyby go uszkodzić.

3. Montaż/demontaż i regulacje

UWAGA

Ryzyko obrażeń

- Złóż całkowicie balkonik, zanim wykonasz regulację wysokości.

3.1. Montaż

3.1.1. Montaż ramy kół przednich

1. Rozłóż ramę główną (**18**).
2. Ułóż ramę główną na podłodze lub na stole, umieszczając rurki o owalnym przekroju płasko na powierzchni.
3. Uchwyć ramę kół przednich (**8**) i włóż obie końcówki rurek do wystających, okrągłych rurek ramy głównej. Sprawdź, czy wspornik koła (w) znajduje się po wewnętrznej stronie ramy głównej.



4. Ustaw długość rurek ramy kół przednich (**8**), wsuwając i wysuwając rurki.
5. Sprawdź z każdej strony czy otwory w rurkach wewnętrznych i zewnętrznych pasują do siebie.
6. Wsuń sworzeń mocujący (**7**) do otworu do regulacji wysokości. Sprawdź, czy sworzeń jest do końca włożony. Po połączeniu rur sworzniem słychać kliknięcie.



7. Powtórz to samo z drugą rurką ramy.
8. Sprawdź długość rurek po lewej i po prawej stronie. Jeśli te długości się różnią, wyjmij sworzeń mocujący po jednej stronie i ustaw długość, zgodnie z opisem w punktach 4-6.

3.1.2. Montaż tylnych kół i rączek


UWAGA

Ryzyko uszkodzenia

- Linka hamulcowa nie może być pozawijana.

Wsporniki kół tylnych z kołami tylnymi

1. Obracaj ramę główną, aż rurki ramy przedniej (okrągłe) znajdą się na dole, a koła przednie będą dotykały podłoża.
2. Weź jedną z połączonych części, z kołem tylnym, rączką i linką hamulcową.
3. Przed montażem sprawdź, czy koło tylne **(9)** i hamulec **(10)** znajdują się na zewnątrz owalnej rurki ramy. Jeśli tak nie jest, nastąpiła zamiana lewego i prawego wspornika koła. Użyj tego wspornika po drugiej stronie ramy głównej.

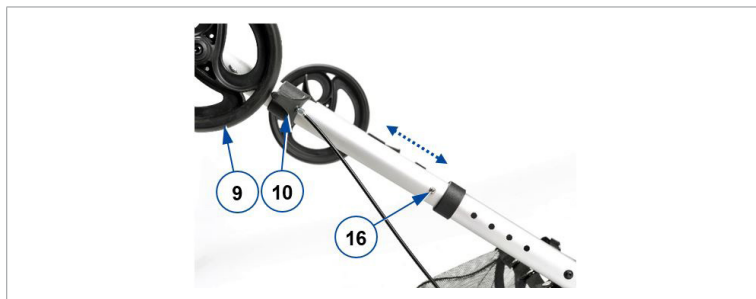

4. Naciśnij i przytrzymaj mały, srebrny przycisk **(16)**.
5. Włóż wspornik koła do wystającej, owalnej rurki ramy głównej.
6. Wsuwaj wspornik koła i wysuwaj, aż przycisk **(16)** wysunie się z otworu do regulacji.
7. Wciśnij przycisk ponownie i przesunij podporę koła do uzyskania żądanej długości.
8. Potwórz to samo z drugą podporą koła (część połączonego elementu). Sprawdź, czy lewa i prawa rurka mają tę samą długość.
9. Sprawdź, czy obie rurki są pewnie zamocowane.

⚠ UWAGA

Ryzyko upadku i/lub uszkodzenia

- Sprawdź, czy rączki są pewnie zablokowane.
- Zwróć uwagę na położenie linek hamulcowych – muszą znajdować się na zewnątrz ramy, nie przeszkadzając w ruchu tylnych kół.
- Nie podciągaj rączek zbyt wysoko, aby nie uszkodzić linki hamulcowej.



1. Obróć ramę główną i ustaw ją w taki sposób, aby wszystkie cztery koła znajdowały się na podłożu.
2. Włóż rurkę z rączką do otworu w rurce ramy, w miejscu połączenia.
3. Włóż pokrętko **(12)** do otworów rury i dokręć pewnie ręką.
4. W taki sam sposób zamocuj drugą rączkę.



Pamiętaj: uchwyt linki już znajduje się na lince hamulcowej.


5. Przesuwaj uchwyty linki **(15)** do góry podczas prowadzenia linki.
6. Poprowadź linkę hamulcową wzdłuż tylnej rurki ramy i zaciśnij uchwyt na rurce ramy, patrz rysunek.

3.1.3. Montaż torby

⚠ UWAGA

Ryzyko upadku lub przewrócenia

- Nie przeładowuj torby.

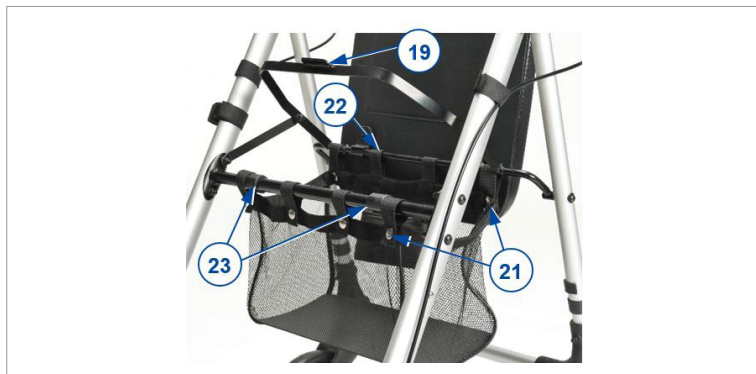

Maksymalne obciążenie torby jest podane w §6..

1. Pociągnij trochę ramę siedziska (19), aby uzyskać miejsce.
2. Przymocuj torbę za pomocą sześciu zatrzasków (21) i dwóch pasków samoprzyczepnych (22). Pamiętaj, aby niczym nie zasłonić dwóch tulejek ochronnych (23).
3. Opuść i dociśnij siedzisko i ramę siedziska.

3.2. Demontaż

⚠ UWAGA

Ryzyko uszkodzenia

- Zwróć uwagę na położenie linek hamulcowych. Nie podciągaj rączek zbyt wysoko, aby nie uszkodzić linki hamulcowej.

Demontaż balkonika wykonuje się w odwrotnej kolejności do montażu:

1. Torba: Otwórz zatrzaski i odepnij paski samoprzyczepne, aby wyjąć torbę.
2. Pasek samoprzyczepny do mocowania łaski: Usuń.
3. Uchwyt linki (8) (2x): Ostrożnie ściągnij z rury ramy.
4. Rączka z dźwigni hamulca (2x): Wyjmij pokrętko (12) i wyciągnij rączkę z ramy głównej.

5. Rama główna: Obróć ją i ustaw ramę przednią na powierzchni.
6. Wspornik koła tylnego z kołem tylnym (2x): Naciśnij i przytrzymaj srebrny przycisk (16) i wyciągnij wspornik koła z ramy głównej.
7. Rama główna: Obróć ją i ustaw ramę tylną na powierzchni.
8. Rama przednich kół (8): Po każdej stronie wyjmij sworzeń mocujący (7) i wyciągnij rurki z ramy głównej.

3.3. Regulacja wysokości

- i** Regulacja wysokości balkonika w zależności od rozmiaru nadwozia:
- Najpierw ustaw wysokość siedziska.
 - Następnie ustaw wysokość obu rączek:

UWAGA

Ryzyko upadku lub przewrócenia

- Wszystkie cztery koła zawsze ustawiaj tak, aby były na tej samej wysokości.

Upewnij się, że

- obie rączki są ustawione na tę samą wysokość;
- wszystkie 4 koła są ustawione na tę samą wysokość.

3.3.1. Wysokość siedziska

Można zmienić wysokość siedziska, odpowiednio ustawiając koła przednie i tylne (4 położen).

Sprawdź, czy siedzisko jest poziome i znajduje się na wysokości odpowiedniej do siedzenia.

Jeśli nie, ustaw zmontowane koła (patrz § 3.1.) na tej samej wysokości.

3.3.2. Wysokość rączek

Do regulacji uchwytu/łącznej wysokości (5 pozycji):

1. Odkręć pokrętkę (12) (patrz §3.1.2.) i wyjmij je z ramy.
2. Ustaw rączkę na żądanej wysokości. Kiedy stoisz prosto, rączka powinna znajdować się na tej samej wysokości co nadgarstek. Opuść luźno ramiona.

3. Włóż pokrętko (12) do otworów rury i dokręć pewnie ręką.
4. W taki sam sposób ustaw drugą rączkę. Sprawdź, czy rączki są na tej samej wysokości.

3.4. Regulacja hamulców

Siłę hamowania można wyregulować, odkręcając/dokręcając śrubę (14) z tyłu dźwigni hamulca.



4. Korzystanie z balkonika

4.1. Hamulec

UWAGA

Ryzyko upadku

- Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, sprawdź działanie hamulców. Na stan układu hamulcowego wpływa jego zużycie, a także obecność oleju i innych zanieczyszczeń na tylnych kołach i w mechanizmie hamulcowym.

Balkonik jest wyposażony w hamulce sterowane za pomocą dwóch dźwigni hamulców (15). Dźwignie hamulców mogą być użyte do dwóch rodzajów hamowania – obsługi hamulców jezdnych i hamulców postojowych.

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia

- Nie pchaj balkonika zbyt mocno, gdy są wciśnięte hamulce jezdne. To może powodować uszkodzenie opon lub hamulców.

Aby użyć hamulców jezdnych, pociągnij obie dźwignie hamulców (15) jednocześnie do góry [A] ruchem ściskającym. Aby przerwać hamowanie, zwolnij dźwignie hamulców.

Aby użyć hamulców postojowych, naciśnij obie dźwignie hamulców (15) w dół, do położenia zablokowanego [B]. Zawsze używaj obu hamulców postojowych na raz. Aby wyłączyć tryb postojowy, pociągnij obie dźwignie hamulców jednocześnie do góry.



4.2. Składanie / Rozkładanie

UWAGA

Ryzyko przycięcia

- Nie zbliżać palców, klamer, biżuterii ani ubrań do mechanizmu składania.

UWAGA

Ryzyko upadku

- Sprawdź, czy balkonik jest w pełni otwarty i czy rama jest zablokowana.



4.2.1. Rozkładanie balkonika

1. Wciśnij obie dźwignie hamulców do położenia parkowania, patrz §4.1..
2. Ustaw balkonik wszystkimi czterema kołami na podłożu, jednocześnie trzymając rury ramy.
3. Opuść i dociśnij siedzisko i ramę siedziska (20) do położenia poziomego.
4. Opuść oparcie, jeśli jest podniesione.
5. Ustaw żądaną wysokość balkonika (patrz §3.3.).

4.2.2. Składanie balkonika


1. Stań za balkonikiem.
2. Wciśnij obie dźwignie hamulców do położenia parkowania, patrz §4.1..
3. Obróć siedzisko do góry.
4. Opróżnij torbę.
5. Pociągnij ramę siedziska (20) do góry i trochę zamknij ramę.
6. Złóż ramę całkowicie, dociskając razem przednie i tylne rurki.
7. Jeśli jest to konieczne, obróć oparcie do góry.

4.3. Wjeżdżanie na krawężniki

⚠ UWAGA

Ryzyko upadku

- Wjeżdżaj na krawężniki prosto, z oboma kołami przednimi wyrównanymi wobec krawężnika. Utrzymuj balkonik w pobliżu.

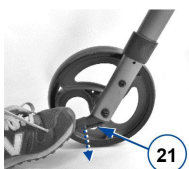

Aby uprościć pokonywanie małych przeszkód, takich jak krawężniki, rolator wyposażony jest w elementy pomocne w przechylaniu na dwóch tylnych kołach.

1. Upewnij się, że stoisz stabilnie i trzymasz obie rączki.
2. Aby podnieść przednie koła, naciśnij stopą dźwignię przechylania (21).
3. Trzymaj balkonik w tym położeniu za pomocą rączek i przesuwaj powoli do przodu, aż przednie koła znajdą się na krawężniku.

4. Teraz podnieś rączki i pójść do przodu, aby ustawić tylne koła na krawężniku.
5. Gdy balkonik już stoi pewnie, możesz wejść na krawężnik.

4.4. Siadanie, wstawanie i chodzenie

UWAGA

Ryzyko upadku

- Zanim usiądziesz, sprawdź, czy obie dźwignie hamulców znajdują się w położeniu parkowania, patrz **§4.1.** Dźwignie hamulców muszą pozostawać w tym położeniu, aż znowu zaczniesz chodzić. Ustaw stopy między dwoma kołami tylnymi.
 - Nie należy napędzać chodzika w pozycji siedzącej.
1. Wciśnij obie dźwignie hamulców do położenia parkowania.
 2. Sprawdź, czy oparcie i siedzisko są opuszczone i zabezpieczone w odpowiednim położeniu.
 3. Opierając się na rączkach, obróć się i usiądź na siedzisku.
 4. Aby znowu wstać, oprzyj się na rączkach i obróć.
 5. Podciągnij obie dźwignie hamulców do góry i użyj hamulców jezdnych.
 6. Zwolnij dźwignie hamulców i zrób krok naprzód, z balkonikiem blisko ciała.

5. Konserwacja

-  Regularna konserwacja zapewnia utrzymanie pełnej sprawności balonika. Instrukcję konserwacji można znaleźć w witrynie Vermeiren: www.vermeiren.com.

5.1. Czyszczenie

Do mycia balkonika używaj miękkiej, wilgotnej ściereczki i letniej wody z dodatkiem łagodnego, domowego mydła. Nie dopuszczaj do długotrwałego namaczania. Do czyszczenia nie używaj ściernych środków czyszczących.

5.2. Dezynfekcja

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia

- Dezynfekcja może być przeprowadzana tylko przez przeszkolone osoby. Skonsultować się ze specjalistycznym dystrybutorem.

Do mycia łóżka używać miękkiej, wilgotnej ściereczki i letniej wody z delikatnym mydłem.

5.3. Kontrole / serwisowanie / naprawy

Oczekiwany okres użytkowania balkonika wynosi 5 lat. Trwałość balkonika jest zależna od jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, serwisowania i czyszczenia.

Przed ponownym użyciem balkonika, należy sprawdzić następujące punkty:

- Kompletność.
- Mechanizm składania: czy działa prawidłowo.
- Śruby i nakrętki: mocno dokręcone.
- Hamulce: prawidłowe działanie.
- Koła (stabilność, skręcanie w żdanym kierunku, śruby ustalające).
- W przypadku powtarzającego się kontaktu z drutami, włosami lub innymi pozostałościami, koła mogą zostać zablokowane. Należy regularnie sprawdzać, czy koła obracają się swobodnie i czy są w dobrym stanie;
- Rama (odkształcenia, stabilność, połączenia);
- Uchwyty (bezpieczne blokowanie systemu regulacji wysokości, solidne wsparcie uchwytów).
- Siedzisko, oparcie i torba (sprawdzić pod kątem zużycia lub uszkodzenia).

Rolator skonstruowany jest z aluminiowych i plastikowych elementów. Zalecamy, aby kontrolować produkt co najmniej raz na rok. Częstotliwość serwisowania zależy jednak od częstości i intensywności eksploatacji. Należy się skonsultować z wyspecjalizowanym sprzedawcą w celu uzgodnienia częstotliwości serwisu.

Naprawa i wymiana części mogą być wykonywane tylko przez osoby przeszkolone. Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych Vermeiren.

Warto korzystać z usług oferowanych przez wyspecjalizowanego sprzedawcę. On/ona chętnie udzieli pomocy w zakresie serwisu i napraw.

5.4. Ponowne użycie

Przed każdym ponownym użyciem rolkę należy zdezynfekować, skontrolować i poddać konserwacji zgodnie z instrukcjami w **§5.2.** i **§5.3.**

5.5. Usuwanie odpadów

Po zakończeniu użytkowania należy poddać balkonik utylizacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Najlepszym sposobem, aby to zrobić jest demontaż balkonika, w celu ułatwienia transportu części nadających się do przetworzenia.

6. Parametry techniczne

Parametry techniczne zamieszczone poniżej dotyczą tylko tego balkonika, przy standardowych ustawieniach i optymalnych warunkach otoczenia. Podczas użytkowania należy uwzględnić te dane.

Marka	Vermeiren
Grupa produktów	Balkonik
Typ	Eco-Plus
Opis	Wymiary
Maksymalna waga użytkownik	136 kg
Maksymalna waga ładunku w torbie	5 kg
Długość całkowita	680 - 795 mm
Długość po złożeniu	310 mm
Łączna szerokość	610 mm
Szerokość po złożeniu	610 mm
Łączna wysokość	845-1020 mm
Wysokość po złożeniu	960 mm
Wysokość rączek	845-1020 mm
Zalecana wysokość ciała	1650 – 2050 mm
Odległość między uchwytami	500 mm
Wysokość siedziska	555-625 mm
Szerokość siedziska	360 mm
Głębokość siedziska	360 mm
Ciężar całkowity	7,7 kg
- bez koszyka	7,5 kg
Średnica koła	200 x 35 mm
Hamulce	Hamulce jezdne i postojowe
Promień skrętu	940 mm
Temperatura przechowywania i użytkowania	+5°C - +41°C
Wilgotność powietrza do przechowywania i użytkowania	30% - 70%
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych. Tolerancja pomiarów +/- 15 mm / 1,5 kg / 1,5°	

Obsah

Předmluva	141
1. Tento výrobek	142
2. Před použitím	143
2.1. Určené použití a indikace	143
2.2. Bezpečnostní pokyny a příslušná rizika	144
2.3. Symboly na chodítku	145
2.4. Při dodávce	146
2.5. Přeprava a skladování	146
3. Montáž/demontáž a nastavení	147
3.1. Montáž	147
3.2. Rozložení	150
3.3. Nastavení výšek	151
3.4. Seřízení brzd	152
4. Použití chodítka	152
4.1. Brzdový systém	152
4.2. Složení a rozložení	153
4.3. Přejíždění obrubníků	155
4.4. Posazení, zvednutí se a chození	155
5. Údržba	156
5.1. Čištění	156
5.2. Dezinfekce	156
5.3. Kontrola / servis / opravy	156
5.4. Znovupoužití výrobku	157
5.5. Likvidace	157
6. Technické údaje	158

Předmluva

Blahopřejeme! Nyní jste vlastníkem chodítka Vermeiren!

Děkujeme za vaši důvěru ve výrobky společnosti Vermeiren. Tento návod slouží k tomu, aby vám pomáhal s použitím tohoto chodítka a jeho provozních možností. Řádně si jej přečtěte; pomůže vám seznámit se s provozem, schopnostmi a omezeními tohoto chodítka.

Máte-li po přečtení tohoto návodu nějaké dotazy, obraťte se bez obav na svého odborného prodejce. Rád vám pomůže.

Důležitá poznámka

Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a prodloužena životnost tohoto výrobku, věnujte mu řádnou péči a nechávejte jej pravidelně kontrolovat a opravovat.

Tento návod obsahuje nejnovější verzi produktu. Společnost Vermeiren má právo provádět změny tohoto typu výrobku, aniž by byla povinna upravit nebo nahradit podobné výrobky, které již byly dodány.

Obrázky výrobku slouží pouze k upřesnění pokynů. Detaily výrobku na obrázcích se mohou od daného výrobku lišit.

Dostupné informace

Nejnovější verzi následujících informací vždy naleznete na našich webových stránkách <http://www.vermeiren.com/>. Tyto webové stránky pravidelně navštěvujte pro případné aktualizace.

Osoby se zrakovým postižením si mohou stáhnout elektronickou verzi tohoto návodu, kterou jim může přečíst softwarová aplikace text-to-speech.



Návod k obsluze
Pro uživatele a odborného prodejce



Servisní příručka pro chodítka
Pro odborného prodejce



Prohlášení o shodě (ES)

1. Tento výrobek



1. Madla
2. Brzdová páka
3. Zádová opěrka
4. Úložná taška
5. Sedadlo
6. Přední kola
7. Zadní kola
8. Brzdový kabel
9. Zvedací páka
10. Reflektory
11. Držák hůlky
12. Identifikační štítek

2. Před použitím

2.1. Určené použití a indikace

- Tento výrobek je zdravotnický zařízení.
- Indikace a kontraindikace: Chodítko je určeno jako podpora funkce nohou při chůzi. Nepoužívejte chodítko, máte-li jiná fyzická omezení, jež mohou způsobit jeho nebezpečné použití, jako jsou slabé ruce, poruchy rovnováhy, zhoršené vidění, ztráta končetin apod.
- Chodítko je navrženo a vyrobeno výhradně k použití jako pomůcka při chůzi pro jednu osobu o maximální váze 136 kg.
- Chodítko kompenzuje absenci přiměřené podpory nohou tím, že se osoba opírá o chodítko či pohybuje s ním pomocí horních končetin nebo hrudníku. Chodítko poskytuje lepší stabilitu, podporu a bezpečnost při chůzi.
- Chodítko lze používat doma i venku.
- Není určeno pro přepravu zboží nebo více lidí než jednoho uživatele. Není také určen k použití jako přepravní pomůcka vsedě.
- Smí se používat pouze na povrchu, kde se všechna čtyři kola dotýkají země. Chodítko nepoužívejte na skalnatém, nerovném či písčitém povrchu nebo na strmých místech. Chodítko může být nestabilní. Pro chůzi s chodítkem hledejte rovné stabilní plochy a zkosené obrubníky.
- Záruka na tento výrobek je založena na běžném použití a údržbě, jak je to popsáno v tomto návodu. V případě poškození výrobku způsobeného nesprávným použitím či absencí údržby tato záruka zanikne.
- Ověřte si všechny technické detaily a omezení chodítka v odst 6..

2.2. Bezpečnostní pokyny a příslušná rizika

POZOR

Riziko zranění

- Přečtěte si pokyny v tomto návodu a postupujte podle nich. Jinak se můžete zranit nebo se váš výrobek může poškodit.

Při použití mějte na paměti následující obecná upozornění:

- Ověřte, zda kamínky či jiné předměty neblokují kola chodítka.
- Než použijete chodítko jako pomůcku k postavení se ujistěte, že jsou obě brzdové páčky v režimu parkování. Jakmile se pohodlně a stabilně postavíte, můžete parkovací brzdy odblokovat.
- Během chůze mějte obě ruce stále na rukojetích.
- Mějte na paměti, že některé části chodítka mohou být velmi teplé či studené vlivem okolní teploty, slunečního záření, topných těles atd. Buďte opatrní při dotýkání.
- Před každým použitím ověřte, zda jsou nastavení výšek řádně zajištěna, viz odst. **3.3.**
- Nedržte se rukojetí mokřýma rukama. Jinak může dojít k uklouznutí úchopu a ztrátě vaší rovnováhy.
- Nechodte s chodítkem v silničním provozu. Chodte vždy po chodníku.
- Dbejte na pokyny týkající se údržby a servisu. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným servisem / péčí o výrobek.

Jákýkoli závažný incident [MDR (EU) 2017/745 §2 (65)], k němuž došlo ve spojitosti s tímto zařízením, musí být oznámen jeho výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém je uživatel anebo pacient etablován.

Mějte na paměti, že chodítko může rušit některé typy systémů proti krádeži v závislosti na použitém nastavení. To může způsobit spuštění alarmu v obchodu.

2.3. Symboly na chodítku

i Identifikační štítek se nachází pod levou rukojetí na vnitřní straně základního rámu

	Max. hmotnost uživatele v kg
	Typové označení
	Katalogové číslo
	Sériové číslo
	Zdravotnické zařízení
	Výrobce
	Datum výroby
	Prohlášení o shodě
	Pozor: důležité informace
	Doporučení prostudovat příručku

2.4. Při dodávce

Rozbalte výrobek a ověřte, zda jde o kompletní dodávku. Musí obsahovat následující položky:

- Základní rám se sedadlem a opěradlem;
- Rám předních kol a přední kola;
- Zadní kola s podpěrou a připojení brzdového kabelu;
- Rukojeti s brzdami
- Dva knoflíky pro nastavení výšky;
- Dva upevňovací kolíky;
- Úložnou tašku;
- Jednu pásku na suchý zip;
- Návod

Ověřte, zda výrobek nebyl poškozen přepravou. Zjistíte-li po dodání jakékoli škody, obraťte se na dopravce.

2.5. Přeprava a skladování

Při přepravě a skladování chodítka postupujte podle technických specifikací v odst. 6.. Ověřte, že bude chodítko skladováno v suchu.

Chodítko dostatečně zakryjte pro ochranu před korozí a cizími tělesy (např. slaná voda, mořský vzduch, písek, prach).

Aby se chodítko nepoškodilo, ověřte, že na něm nejsou skladovány ani o něj opřeny žádné předměty.

3. Montáž/demontáž a nastavení

⚠ POZOR

Riziko zranění

- Před nastavením výšky chodítka jej kompletně sestavte.

3.1. Montáž

3.1.1. Sestavení rámu předních kol

1. Rozložte základní rám (18).
2. Položte základní rám na zem či na stůl, aby oválné trubky ležely rovně na ploše.
3. Uchopte rám předních kol (8) a zasuněte oba konce trubek do vyčnívajících kulatých trubek základního rámu. Ověřte, že je podpěra kola (w) na vnitřní straně základního rámu.



4. Posunem trubek dovnitř/ven nastavte délku trubek rámu předních kol (8).
5. Na každé straně ověřte, že jsou srovnány díry vnitřních a vnějších trubek.
6. Vložte upevňovací kolík (7) do otvoru pro nastavení výšky. Zajistěte, aby byl kolík kompletně vložen; když se upevňovací klip upevní na trubku, je slyšet kliknutí.



7. Zopakujte postup u druhé trubky rámu.
8. Zkontrolujte délky trubek na levé a pravé straně. Pokud se délky liší, odeberte upevňovací kolík na jedné straně a nastavte délku postupem od kroku 4 až do kroku 6 včetně.

3.1.2. Sestavení zadních kol a rukojetí


POZOR

Riziko poškození

- Neohýbejte nadměrně brzdové kabely.

Podpěry kol se zadními koly

1. Otočte základním rámem, aby byly trubky předního rámu (kulaté) dole a přední kola se dotýkala povrchu.
2. Vezměte jednu složenou část se zadním kolem, rukojetí a brzdovým kabelem.
3. Před sestavením ověřte, zda jsou zadní kolo **(9)** a brzda **(10)** umístěny na vnější straně trubky oválného rámu. Pokud tomu tak není, došlo k prohození podpěr levého a pravého kola. Použijte tuto podpěru kola na druhé straně základního rámu

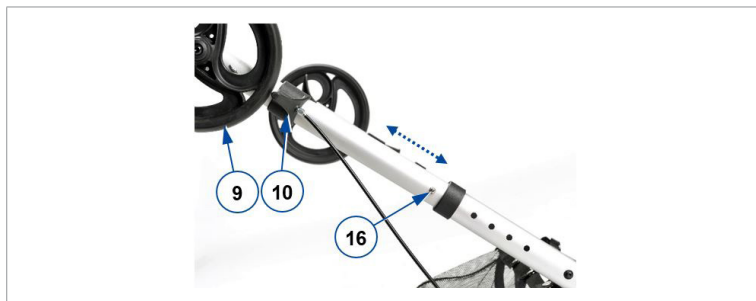

4. Stiskněte a podržte malé stříbrné tlačítko **(16)**.
5. Zasuňte podpěru kola do vyčnívající oválné trubky základního rámu.
6. Posuňte podpěru kola dovnitř/ven, dokud nevyskočí tlačítko **(16)** z otvoru nastavení.
7. Stiskněte tlačítko znovu a posuňte podpěru kola na potřebnou délku.
8. Zopakujte postup pro druhou podpěru kola (u složené části). Zajistěte, aby byly délky levé a pravé trubky shodné.
9. Ověřte, že jsou obě trubky dobře upevněny.

⚠ POZOR**Riziko pádu anebo poškození**

- Před použitím ověřte, jsou-li rukojeti zamknuty.
- Věnujte pozornost poloze brzdových kabelů: ty musejí být umístěny na vnější straně rámu, aniž by překážely zadním kolům.
- Nevytahujte rukojeti příliš vysoko, aby nedošlo k poškození brzdového kabelu.



1. Otočte základním rámem a položte jej všemi čtyřmi koly na zem.
2. Zasuňte trubku s rukojetí do otevřeného konce trubky rámu u spojovacího dílu.
3. Umístěte knoflík **(12)** do otvorů trubky a řádně jej utáhněte rukou.
4. Upevněte druhou rukojeť stejným způsobem.



Poznámka: kabelová svorka je již na brzdovém kabelu.


5. Při umísťování kabelu posuňte kabelové svorky **(15)** nahoru.
6. Mějte brzdový kabel zarovnaný s trubkou zadního rámu a nasadte svorku na trubku rámu, viz obrázek.

3.1.3. Montáž úložné tašky

⚠ POZOR

Riziko pádu nebo překlolení

- Nákupní tašku nepřepínajte.

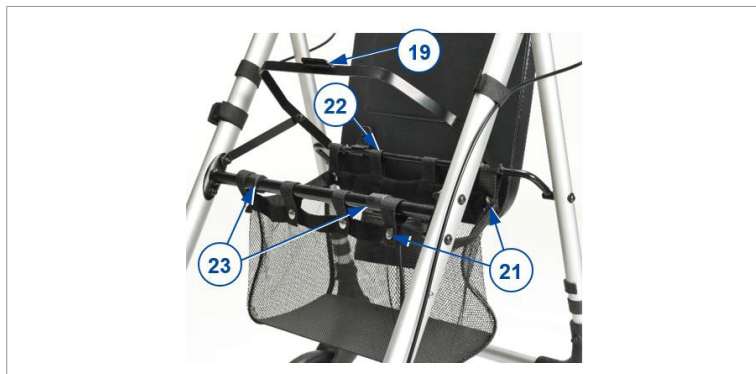

Maximální nosnost úložné tašky naleznete v §6..

1. Udělejte si místo povytažením rámu sedadla (19).
2. Upevněte úložnou tašku šesti patentkami (21) a dvěma pásky na suchý zip (22). Ověřte, že nedošlo k zakrytí dvou ochranných pouzder (23).
3. Zatlačte sedadlo a rám sedadla dolů.

3.2. Rozložení

⚠ POZOR

Riziko poškození

- Věnujte pozornost poloze brzdových kabelů. Nevytahujte rukojeti příliš vysoko, aby nedošlo k poškození brzdového kabelu.

Rozložení chodítka se provádí v opačném pořadí, než je jeho sestavení:

1. Úložná taška: Rozepněte patentky i pásky na suchý zip a vyjměte tašku.
2. Páska na suchý zip pro hůlku: Odeberte ji.
3. Kabelová svorka (8) (2x): Opatrně vytáhněte z trubky rámu.

4. Rukojeť s brzdovou páčkou (2x): Odeberte knoflík **(12)** a vytáhněte rukojeť ze základního rámu.
5. Základní rám: Otočte jej a položte předním rámem na plochu.
6. Podpěra kola se zadním kolem (2x): Stiskněte a podržte stříbrné tlačítko **(16)** a vytáhněte podpěru kola ze základního rámu.
7. Základní rám: Otočte jej a položte zadním rámem na plochu.
8. Rám předních kol **(8)**: Na každé straně odeberte upevňovací kolík **(7)** a vytáhněte trubky ze základního rámu.

3.3. Nastavení výšek

i Nastavení výšky chodítka podle velikosti těla:

- Nejprve nastavte výšku sedadla.
- Potom nastavte výšku obou rukojetí.

⚠ POZOR

Riziko pádu nebo překlolení

- Všechna čtyři kola vždy nastavujte na stejnou výšku.

Zkontrolujte, že

- jsou obě rukojeti nastaveny na stejnou výšku.
- jsou na stejnou výšku nastavena všechna 4 kola.

3.3.1. Výška sedadla

Sedadlo lze výškově měnit nastavením předních a zadních kol (4 polohy).

Zkontrolujte, zda je sedadlo vodorovné a ve správné výšce posedu. Pokud ne, nastavte sestavená kola (viz odst.**3.1.**) a zajistěte, aby byla ve stejné výšce.

3.3.2. Výška rukojetí

Nastavení rukojetí / celková výška (5 pozic):

1. Povolte knoflík **(12)** (viz odst. **3.1.2.**) a odeberte jej z rámu.
2. Nastavte rukojetí do požadované výšky. Když stojíte rovně, musí být rukojeť stejně vysoko jako vaše zápěstí. Nechte ruce volně viset.
3. Umístěte knoflík **(12)** do otvorů trubky a řádně jej utáhněte rukou.
4. Nastavte druhou rukojeť stejným způsobem. Ověřte, že mají obě rukojeti stejnou výšku.

3.4. Seřízení brzd

Sílu brzd lze seřizovat povolováním/ utahováním šroubu **(14)** na zadní straně brzdové páky.



4. Použití chodítka

4.1. Brzdový systém

⚠ POZOR

Nebezpečí pádu

- Pro zajištění bezpečnosti zkontrolujte funkci brzd. Stav brzdového systému ovlivňuje opotřebení, olej a jiné znečištění zadních kol a brzdného mechanismu.

Chodítko je vybaveno brzdami ovládanými dvěma brzdovými pákami **(15)**. Brzdové páčky lze používat ve dvou brzdných režimech: jízdní brzdy a parkovací brzdy.

Riziko poškození

- Při použití jízdních brzd na chodítko příliš netlačte. Jinak dojde k poškození pneumatik či brzd.

Chcete-li použít jízdní brzdy, vytáhněte obě brzdové páčky **(15)** zároveň nahoru [A] mačkovým pohybem. Pro ukončení brždění uvolněte brzdové páky.

Chcete-li použít parkovací brzdy, stiskněte obě brzdové páčky **(15)** dolů do zamknuté polohy [B]. Vždy použijte obě parkovací brzdy současně. Pro ukončení režimu parkování vytáhněte obě brzdové páky zároveň nahoru.



4.2. Složení a rozložení

Nebezpečí skřípnutí

- Mějte prsty, přezky, šperky a oděvy vždy mimo skládací mechanismus.

Nebezpečí pádu

- Zkontrolujte, zda je chodítko zcela rozevřeno a jeho rám uzamknut.



4.2.1. Rozložení chodítka

1. Stiskněte obě brzdové páčky dolů do parkovací polohy, viz §4.1..
2. Chodítko postavte na zem na všechna čtyři kola a současně držte trubky rámu.
3. Stlačte sedadlo a rám sedadla (20) dolů do vodorovné polohy.
4. Je-li opěradlo nahoru, otočte jej dolů.
5. Nastavte chodítko do požadované výšky (viz §3.3.).

4.2.2. Složení chodítka


1. Postavte se za chodítko.
2. Stiskněte obě brzdové páčky dolů do parkovací polohy, viz §4.1..
3. Otočte sedadlo nahoru.
4. Vyprázdněte úložnou tašku.
5. Vytažením rámu sedadla (20) nahoru rám trochu zavřete.
6. Sevrěním předních a zadních trubek dohromady rám zcela zavřete.
7. V případě potřeby otočte opěradlo nahoru.

4.3. Přejíždění obrubníků

POZOR

Nebezpečí pádu

- Na obrubník jezděte kolmo, oběma předními koly zároveň. Mějte chodítko těsně u těla.

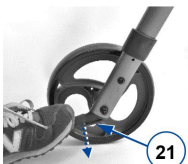

Pro snadnější zdolávání malých překážek, jako jsou obrubníky, je chodítko vybaveno naklápěcí pomůckou na dvou zadních kolech.

- Zajistěte, abyste stáli stabilně a přitom drželi obě rukojeti.
- Jednou nohou šlápněte na zvedací páku **(21)** a tím zvedněte přední kola.
- Udržujte chodítko v této poloze pomocí rukojetí a pomalu jděte dopředu, až se přední kola dostanou na obrubník.
- Nyní zvednutím rukojetí a pohybem dopředu dostaňte na obrubník i zadní kola.
- Když stojí chodítko stabilně, můžete přejít na obrubník i vy.

4.4. Posazení, zvednutí se a chození

POZOR

Nebezpečí pádu

- Před posazením ověřte, že jsou obě brzdové páčky v parkovací poloze, viz **§4.1.** Nechte brzdové páčky v této poloze, dokud nezačnete znovu chodit. Nohama pohybujte mezi zadními koly.
 - Nepohánějte chodítko vsedě.
- Stiskněte obě brzdové páčky dolů do parkovací polohy.
 - Ověřte, zda jsou opěradlo a sedadlo otočeny dolů a zajištěny na místě.
 - Zatímco se opíráte o rukojeti, otočte se a posaďte se na sedadlo.
 - Chcete-li se znovu postavit, opřete se o rukojeti a otočte se.

5. Pro použití jízdních brzd vytáhněte obě brzdové páčky nahoru.
6. Uvolněte brzdové páčky, jděte dopředu a mějte přitom chodítko těsně u těla.

5. Údržba

- i** Pravidelná péče zajistí, že bude chodítko udržováno v dokonale funkčním stavu. Návod k údržbě naleznete na webových stránkách společnosti Vermeiren: www.vermeiren.com.

5.1. Čištění

K čištění chodítka použijte měkký vlhký hadřík a vlažnou vodu s jemným mýdlem pro domácí účely. Předcházejte namočení. K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

5.2. Dezinfekce

POZOR

Riziko poškození

- Dezinfekci mohou provádět pouze kvalifikované osoby. Poradte se se svým prodejcem.

K čištění chodidla použijte měkký navlhčený hadřík a vlažnou vodu s jemným dezinfekčním prostředkem pro domácnost.

5.3. Kontrola / servis / opravy

Předpokládaná životnost vašeho chodítka je 5 let. Životnost chodítka je ovlivněna jeho používáním, skladováním, údržbou, servisem a čištěním.

Před opětovným použitím chodítka je třeba zkontrolovat následující body:

- Kompletnost.
- Skládací mechanismus: správná funkce.
- Šrouby a matice: pevně dotažené.

- Brzdy: správná funkčnost.
- Kola (stabilita, vedení stopy, upevňovací šrouby).
- V případě pravidelného kontaktu s drátky, vlasy či jinými nečistotami se mohou kola zablokovat. Pravidelně kontrolujte, zda se kola volně otáčejí a zda jsou v dobrém stavu.
- Rám (deformace, stabilita, připojení).
- Rukojeť (bezpečné zamknutí systému nastavení výšky, dobrá podpora rukojetí).
- Sedadlo, opěradlo a úložná taška (opotřebení či poškození).

Váše chodítko je vyrobeno z hliníkových a plastových součástí. Doporučujeme, abyste nechali výrobek zkontrolovat alespoň jednou ročně. Četnost servisu však závisí na frekvenci a intenzitě použití výrobku. Poradte se s odborným prodejcem a dohodněte vhodné servisní intervaly.

Opravy a výměny směřjí provádět pouze vyškolené osoby. Přitom je třeba používat pouze originální náhradní díly společnosti Vermeiren.

Využívejte služby nabízené vašim specializovaným prodejcem. Bude velmi rád, když vám pomůže s jakýmkoli servisem a opravami.

5.4. Znovupoužití výrobku

Před každým dalším použitím nechte chodítko dezinfikovat, zkontrolovat a opravit podle pokynů v odst. 5.2. a odst. 5.3..

5.5. Likvidace

Po skončení životnosti musí být chodítko zlikvidováno podle místní legislativy pro životní prostředí. Nejlepším způsobem likvidace je rozebrání chodítka pro usnadnění přepravy recyklovatelných součástí.

6. Technické údaje

Technické údaje uvedené níže platí pouze pro toto lůžko při standardních nastaveních a optimálních podmínkách okolí. Během používání berte tyto údaje v úvahu.

Značka	Vermeiren
Skupina produktů	Chodítko
Typ	Eco-Plus
Popis	Rozměry
Hmotnost uživatele	136 kg
Maximální váha obsahu tašky	5 kg
Celková délka	680 - 795 mm
Délka ve složeném stavu	310 mm
Celková šířka	610 mm
Šířka při složení	610 mm
Celková výška	845-1020 mm
Složená výška	960 mm
Výška rukojetí	845-1020 mm
Doporučená výška těla	1650 – 2050 mm
Vzdálenost mezi rukojeťmi	500 mm
Výška sedadla	555-625 mm
Šířka sedadla	360 mm
Hloubka sedadla	360 mm
Celková hmotnost - bez košíku	7,7 kg 7,5 kg
Průměr zadního kola	200 x 35 mm
Brzdy	Jízdní a parkovací brzdy
Šířka otáčení	940 mm
Teplota skladování a používání	+5°C - +41°C
Vlhkost při skladování a používání	30% - 70%
Právo na technické změny vyhrazeno. Tolerované odchylky +/- 15 mm / 1,5 kg / 1,5°	

**Service registration form**

This product (name):

was inspected (I), serviced (S), repaired (R) or disinfected (D):

By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:
By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:
By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:
By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:
By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:



VERMEIREN GROUP
Vermeirenplein 1/15
2920 Kalmthout
Belgium
www.vermeiren.com

Version: C, 2025-01

Basic UDI-DI: 5415174120606Eco-PlusQL

All rights reserved, including translation.

VERMEIREN
we care **for** you